

Biological Culture



细胞培养系列



医用级原料 确保优良品质

采用符合USP Class VI 标准的PS原料生产，从源头确保产品的品质要求。



质量监控 流程管理

在 ISO13485 医疗器械质量管理体系及符合GMP 规范的十万级净化车间内生产制造，从原料到成品出库，实现全流程体系监控。



满足生物安全与无菌要求

产品无 DNase/RNase、无抑制剂、无细胞毒性、无致敏性、无内毒素、无热原。经EO或辐射灭菌，达SAL=10⁻⁶无菌水平。




培养皿

产品介绍


- ◎ 细胞培养皿用于实验室细胞培养的处理、堆叠和运送。经 TC 表面处理后的聚苯乙烯内壁具有良好亲水性，利于细胞贴壁生长，未表面处理适用于悬浮细胞培养。
- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料，生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂，不含有任何重金属离子，产品具有良好的生物相容性。
- ◎ 多规格：Ø35 Ø60 Ø60 Ø70 Ø90 Ø100 Ø150。
- ◎ 皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准确。
- ◎ 皿侧的齿环设计，便于掌握，减少污染。
- ◎ 皿盖内设有透气棱，保证无菌的同时利于气体交换。
- ◎ 盖上的环形突缘与底部良好适配，可多层稳定叠放。
- ◎ 无 DNA 酶无 RNA 酶、无热原、无细胞毒性。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



多种包装方式：单套纸塑、单套塑袋和多套塑袋

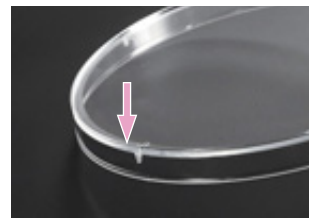

皿盖内侧凸点，满足气体交换的需要

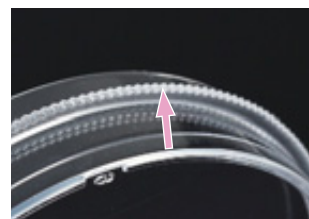

侧边齿环，便于掌握，最大限度减少污染

KJ503



KJ504



KJ505



KJ506



KJ506-1



KJ506-2



KJ506-3



KJ507




规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	克重	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ503	PS	Ø35mm	≈5.6g	单只或10或20	2300	三种包装方式可选	161-0351
KJ504	PS	Ø60mm	≈7.4g	26	1040	可选单套包装	161-0601
KJ505	PS	Ø70mm	≈10.8g	16	720	可选单套包装	161-0701
KJ506	PS	Ø90mm	≈14g/15.3g/21g	20	500	三种克重可选	161-0901
KJ506-1	PS	Ø90mm(齿环)	≈19.5g	20	500	可选单套包装	161-0904
KJ506-2	PS	Ø90mm	≈13.7g	20	500	可选单套包装	161-0905
KJ506-3	PS	Ø60mm(齿环)	≈7.8g	26	1040	可选单套包装	161-0602
KJ507	PS	Ø150mm	≈48g	单只或20	125或120	单套或20套包装	161-1501



培养皿

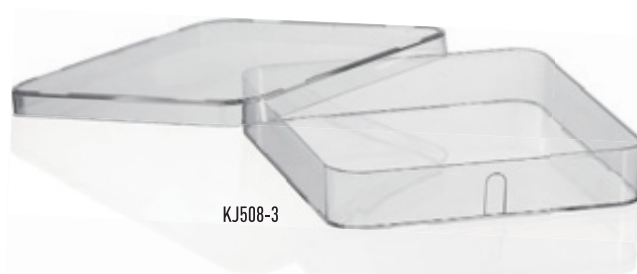

KJ508-3



KJ508-6



KJ508-4




KJ508




KJ509



KJ508-1

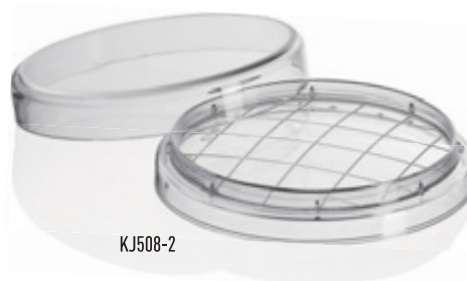

KJ508-2

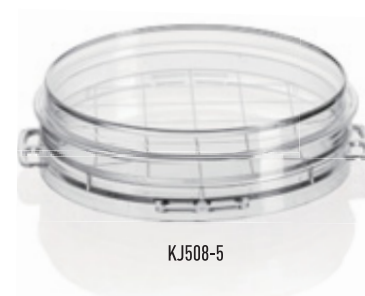

KJ508-5

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	克重	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ508-3	PS	100×100mm 方皿	≈26g	10	500	可选其它包装方式， 如：单套包装	161-1001
KJ508-6	PS	120×120mm 方皿	≈40.2g	10	500		161-1201
KJ508-4	PS	100×100mm 方皿(网格)	≈10.5g	10	500		161-1002
KJ508	PS	Ø90mm 二分格	≈15.5g	20	500		161-0906
KJ509	PS	Ø90mm 三分格	≈16.8g	20	500		161-0907
KJ508-1	PS	Ø65mm 平底(网格)	≈10.5g	26	1248		161-0651
KJ508-2	PS	Ø55mm 接触皿(弧形)	≈9.2g	20	960		161-0551
KJ508-5	PS	Ø75mm 空气皿	≈18g	10	400		161-0751



细胞培养板

产品介绍

- ◎ 细胞培养板用于实验室细胞培养及培养后的分析实验,包括细胞转染、免疫荧光、克隆形成等。
- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料,生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂,不含有任何重金属离子,具有良好的生物相容性。
- ◎ 未处理表面适用于悬浮细胞培养,经 TC 处理的培养板内壁细胞贴壁效果更好。
- ◎ 多孔数规格可选 6、12、24、48、96 孔。通常为透明板。符合 ANSI-SBS 标准尺寸。
- ◎ 细胞培养板按底部形状不同可分为平底、U 型底和 V 型底。
- ◎ 盖子的设计有利于气体流通的同时降低蒸发减少污染的可能性。
- ◎ 孔缘高出,防止交叉污染,字母与数字坐标定位,方便实验。
- ◎ 可层叠放置,节省空间,条理实验室环境。
- ◎ 无 DNA 酶无 RNA 酶、无热原、无细胞毒性。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌,达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



斜侧边角,保证放盖方向唯一,避免交叉污染




侧边防滑,便于掌握,减少失误



孔缘高出,防止交叉污染



板盖内侧凸起圆形环可有效防止培养基污染和蒸发损耗

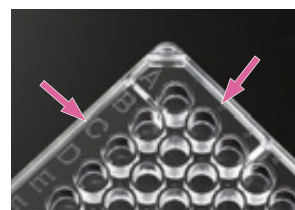

清晰的坐标标识,方便识别


6/12/24/48孔 透明板




KJ511-9



KJ511-8

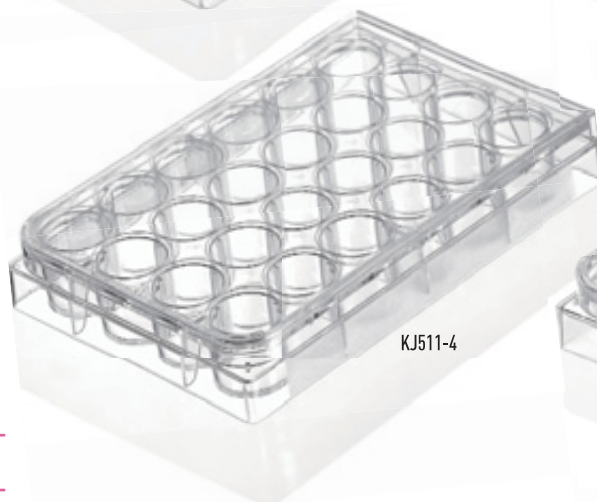

KJ511-4

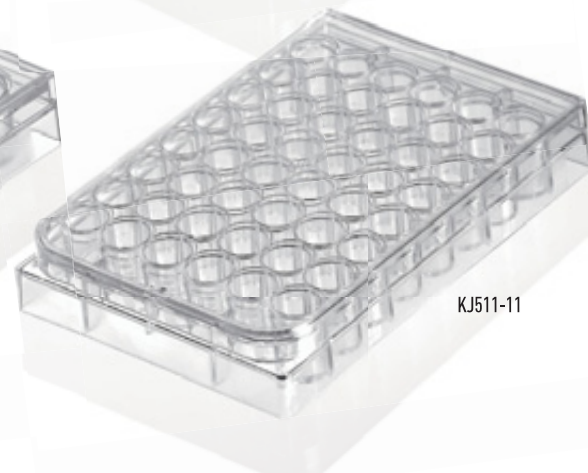

KJ511-11


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-9	PS	6孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0061
KJ511-8	PS	12孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0121
KJ511-4	PS	24孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0241
KJ511-11	PS	48孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0481



细胞培养板

96孔 透明板

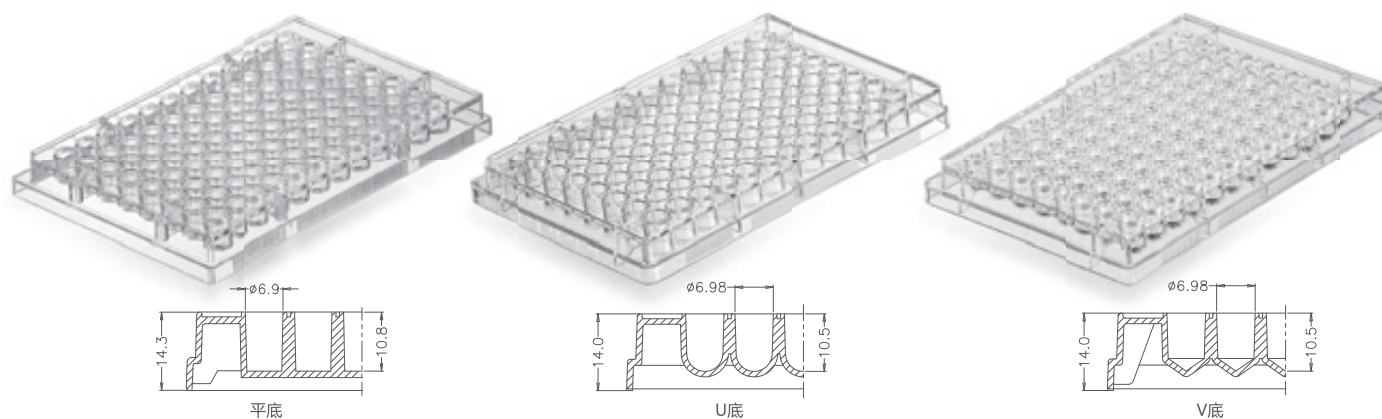


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-3	PS	96孔, 平底, 无色透明	128×85×16mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0961
	PS	96孔, U底, 无色透明		单套包装	200		162-0962
	PS	96孔, V底, 无色透明		单套包装	200		162-0963

96孔 黑白板

◎ 黑色培养板可吸收折射和反射光、降低背景光信号、减少孔间串扰, 适用于荧光分析实验。白色培养板可反射增强光信号、减少孔间串扰, 适用于化学发光分析实验。

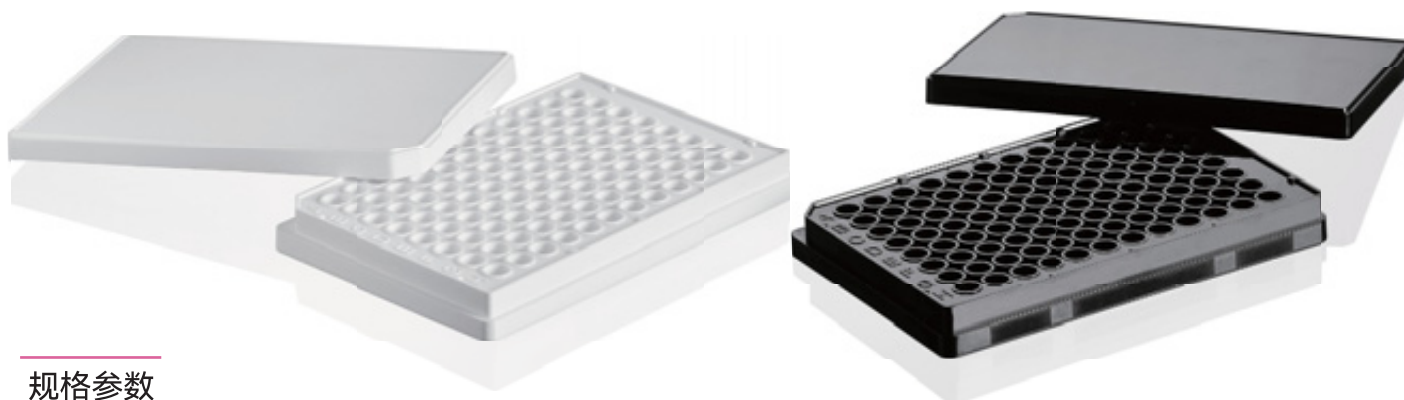

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-13	PS	96孔, 平底, 黑色	128×85×16mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0964
	PS	96孔, 平底, 白色		单套包装	200		162-0965




细胞培养瓶

产品介绍

细胞培养瓶是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适合的培养器皿。采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 原料生产。未处理表面适用于悬浮细胞培养。经 TC 处理表面具有良好亲水性，适用于常见细胞系的粘附和伸展。


- ◎ 斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出。
- ◎ 瓶颈附近的磨砂区域方便文字书写，两侧面有清晰的容量刻度。
- ◎ 堆叠设计不易滑落，易于叠放，节省培养空间。
- ◎ 多种容量规格可选：25mL、50mL、250mL、600mL、850mL。提供密封盖和滤膜透气盖。
- ◎ 透气盖（滤膜盖），0.22μm 疏水膜，有利于气体交换，同时防止瓶外微生物通过。
- ◎ 每个瓶底及包装袋均有产品批号，便于质量追溯。
- ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无细胞毒性。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

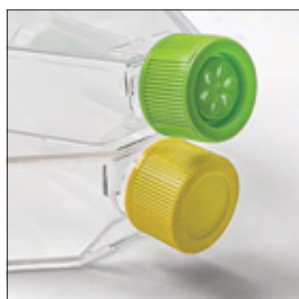

滤膜透气盖和密封盖



清晰的容量刻度

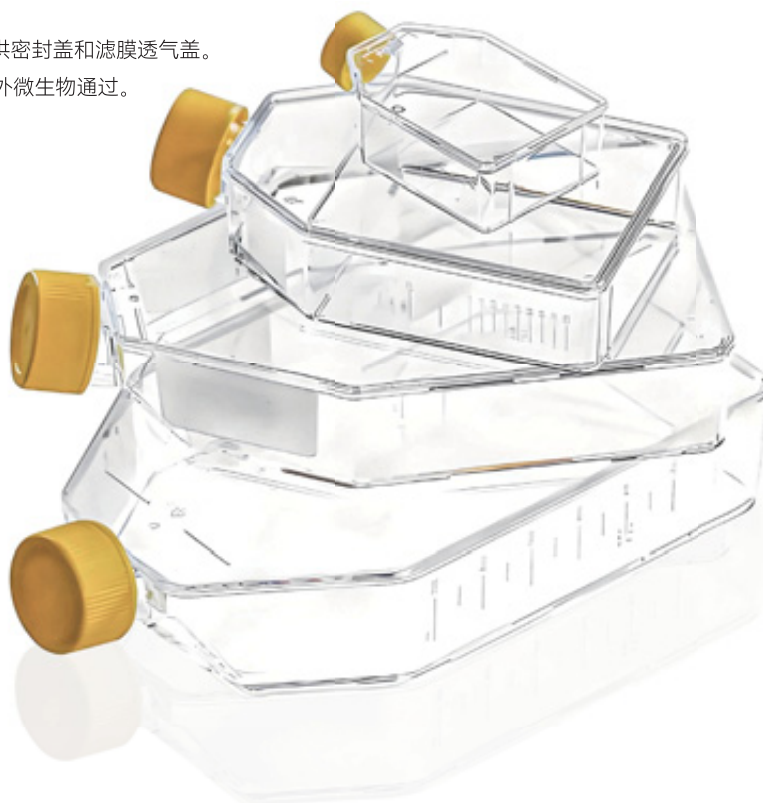


规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量 规格	最大 工作容量	细胞培养 表面积	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ512-10	PS	25mL	8mL	12.5cm ²	单只包装	200	可选： 1、密封盖或滤膜盖， 2、TC表面处理。	165-0251
KJ512-2	PS	50mL	17.5mL	25cm ²	单只包装	200		165-0501
KJ512-3	PS	250mL	60mL	75cm ²	单只包装	100		165-2501
KJ512-5	PS	600mL	250mL	180cm ²	单只包装	50		165-6001
KJ512-11	PS	850mL	400mL	12.5cm ²	单只包装	25		165-8501


一次性使用接种环与接种针

产品介绍


- KANGJIAN® 一次性接种环与接种针采用高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 制造，原料符合 USP Plastic Class VI 标准，主要用于微生物的接种、转移和培养等操作，具有良好的生物相容性和化学稳定性。表面经过处理后具有亲水性，适用于微生物接种。
- ◎ HIPS 即高抗冲击聚苯乙烯，是 PS 塑料与聚丁二烯合成的热塑性树脂，具有柔韧性好、高抗冲击性、刚性大、耐磨性等诸多特点。
 - ◎ 接种环的环边缘光滑，便于在琼脂平板表面进行划线操作，且不会损伤培养基表面。
 - ◎ 接种针杆纤细柔软，可弯曲，能用于狭窄或特殊形状的容器内的操作。
 - ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无细胞毒性、无抑制剂和重金属污染。
 - ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。
 - ◎ 采用易撕开纸塑单支或多支包装。

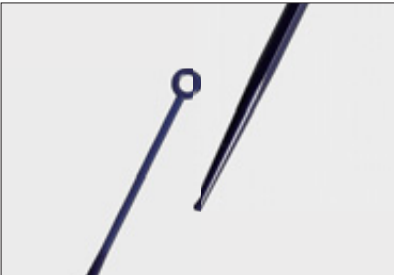

柔顺的接种头最大程度减少对微生物的损伤。针环双功能设计，一物两用，操作更方便。

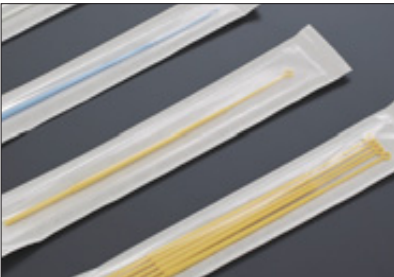

单支和多支纸塑灭菌包装。

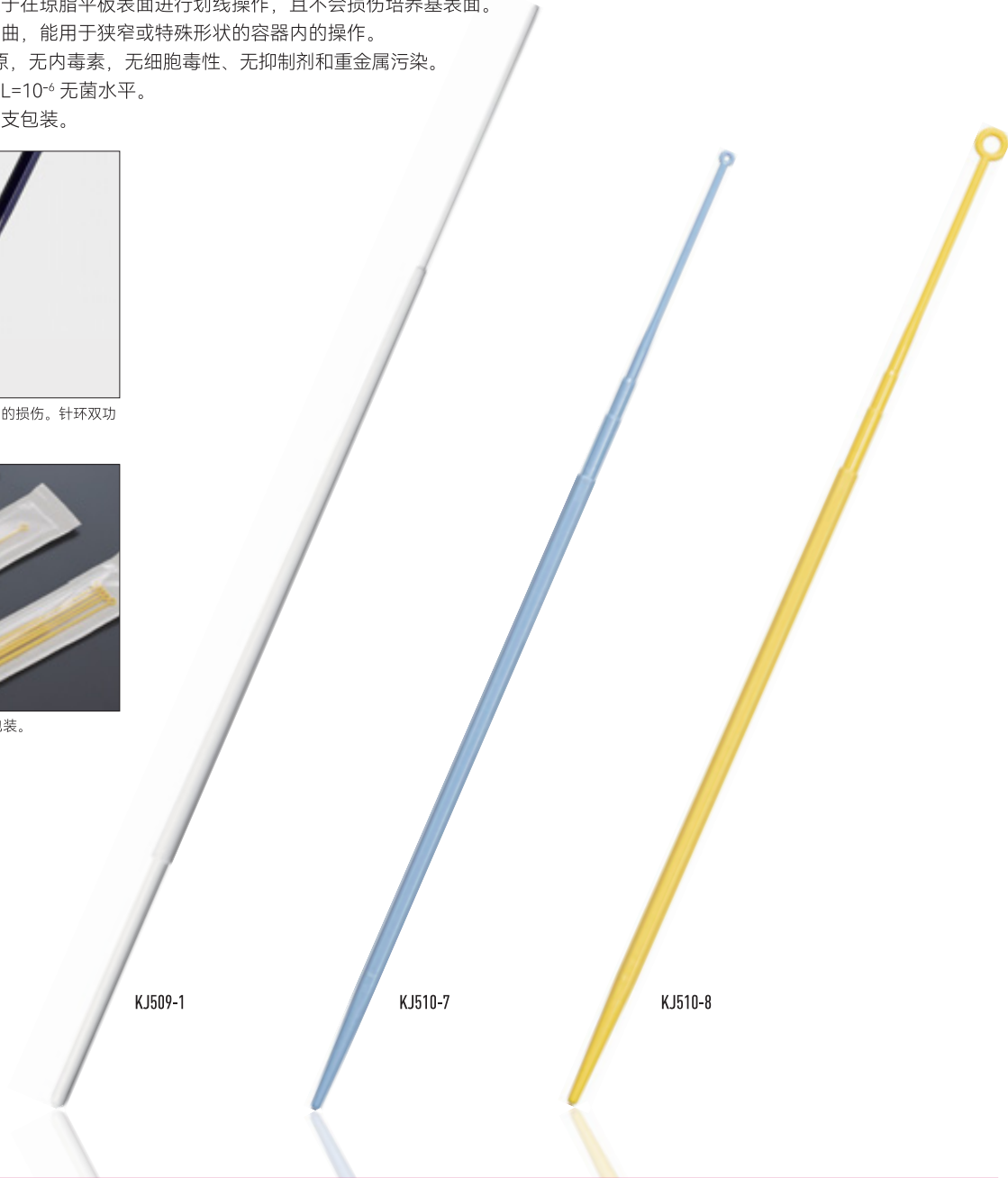

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	长度 *	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ509-1	HIPS	针式	225mm	单支包装	2000	颜色可定制	167-0011
				5支/10支/20支	10000		167-0012
KJ510-7	HIPS	1ul 两用型	198mm	单支包装	2000		167-0121
				5支/10支/20支	10000		167-0122
KJ510-8	HIPS	10ul 两用型	200mm	单支包装	2000		167-1021
				5支/10支/20支	10000		167-1022

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



细胞推刮器

产品介绍

推刮器由符合 USP Plastic Class VI 标准的高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 或聚丙烯 (PP) 制成，具有良好的生物相容性。主要用于收集、传代和转移贴壁细胞。有Δ、T、L 型可选，适用于不同的培养容器。


- ◎ 推刮头平直，表面圆润、平滑，极大减小对细胞的损伤，减少涂布不均。
- ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无细胞毒性、无抑制剂和重金属污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。
- ◎ 采用易撕开纸塑单支或多支包装。



推刮端圆润平滑，减小对细胞的损伤。



单支纸塑或多支纸塑包装。

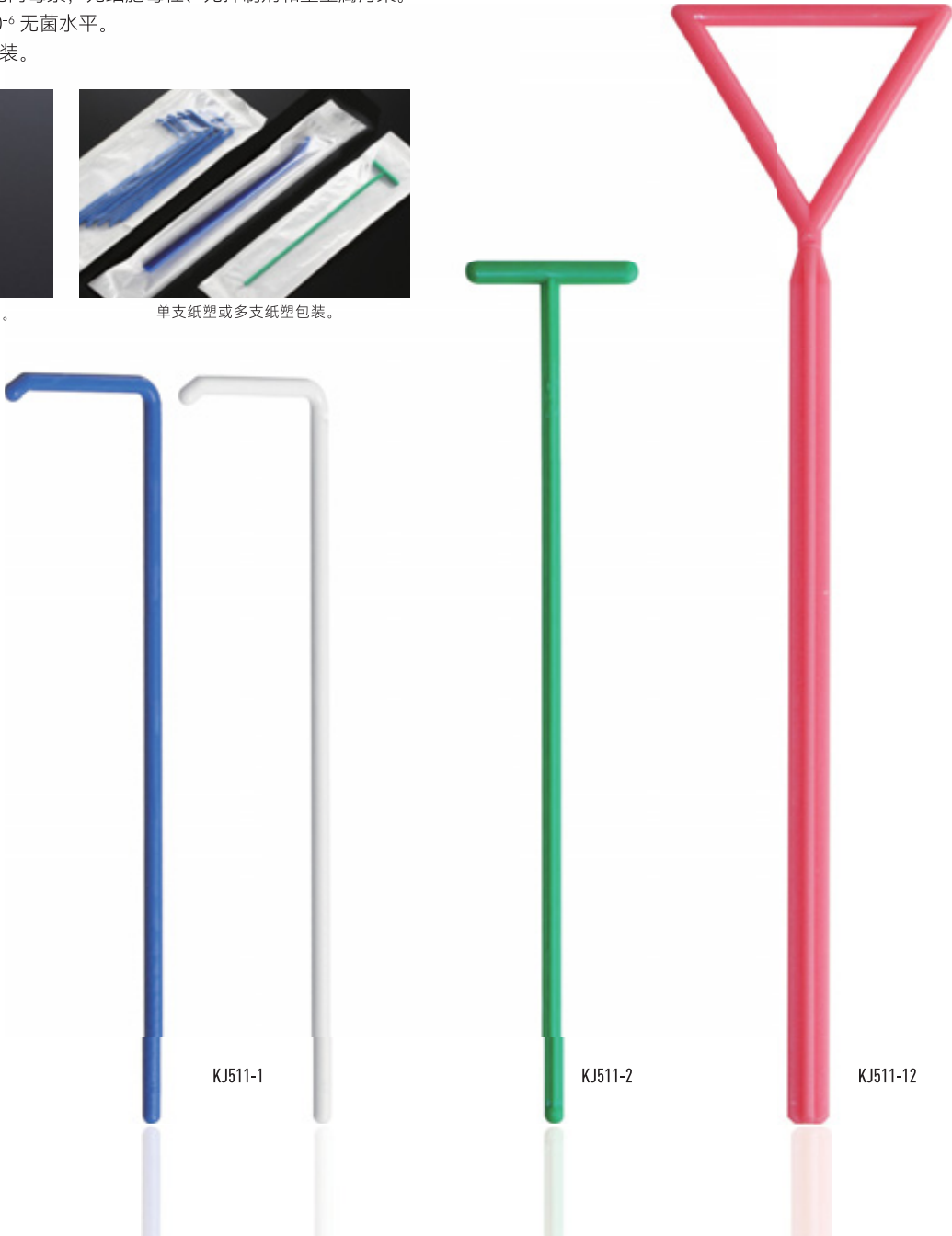

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	推刮头 [*]	长度 [*]	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ511-1	HIPS	30mm	148mm	单支包装	2500	EO或辐射灭菌	168-0011
				5支/10支/20支	2500		168-0012
KJ511-2	HIPS	32mm	182mm	单支包装	4000		168-0021
				5支/10支/20支	4000		168-0022
KJ511-12	PP	40mm	160mm	多支散装	3000		168-0033
		46mm	240mm	多支散装	3000		168-0043

^{*} 产品外观尺寸为近似值仅供参考。


细胞刮铲刀

产品介绍

- ◎ 主要用于从培养瓶、培养皿或培养板中收集贴壁细胞，同时减少对细胞的机械损伤。适用于细胞生物学、免疫学、分子生物学等实验研究，还可用于 RNA、DNA 及蛋白提取等实验前的细胞收集。
- ◎ 细胞刮铲刀的是由符合 USP Plastic Class VI 标准的热塑性弹性体材料 TPE 或聚丙烯 PP 制成，具有良好的生物相容性。TPE 刀头触感柔软有弹性，确保对细胞最小伤害。
- ◎ 可调节刮刀角度，保持理想收刮角度，可能接触细胞生长的所有器皿表面。
- ◎ 产品无热原、无细胞毒性、无 DNase/RNase，不含重金属、荧光剂等，满足细胞培养、分子生物学实验要求。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



刀头有不同宽度且柔软有弹性。

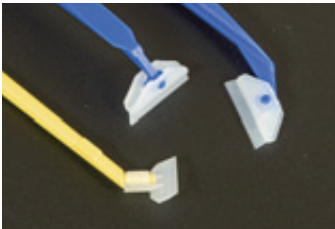

可自由调整刀片角度，保持理想收刮操作。



单支纸塑灭菌包装。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	刀宽 [*]	长度 [*]	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ510-3	PP	20mm	150mm	单支包装	100	1000	EO或辐射灭菌	169-0111
KJ510-5	PP	10mm/20mm	215mm	单支包装	100	1000		169-0121
KJ510-1	TPE+PP	20mm	180mm	单支包装	100	1000		169-0211
KJ510-2	TPE+PP	20mm	250mm	单支包装	100	1000		169-0221
KJ510-4	TPE+PP	13mm	250mm	单支包装	100	1000		169-0311
KJ510-6	TPE+PP	20mm	300mm	单支包装	100	1000		169-0321

^{*} 产品外观尺寸为近似值仅供参考。




可拆式96孔酶标板

产品介绍

酶标板主要用于酶联免疫吸附测定 (ELISA)，通过添加待测样品、抗体、酶标二抗以及底物等试剂，实现对生物样品中蛋白质、激素、抗体等生物分子的定量检测。此外，还可用于酶活性测定、细胞培养实验、细胞毒性实验和药物筛选实验等。

- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料，板框符合 ANSI-SBS 标准尺寸。
- ◎ 根据检测方法的不同，可选择不同颜色的酶标板，如透明板用于比色分析，白色板用于化学发光检测，黑板用于荧光检测。
- ◎ 表面经亲水性处理，分为高结合力板和中结合力板。高结合力板适合低浓度蛋白检测，但易产生非特异性反应。中结合力板是通用型，能平衡灵敏度与特异性。
- ◎ 可拆式酶标板的板条与板架分离，有 8 联孔、12 联孔或 24 联孔可拆，灵活性高，适合样本量不固定的实验。
- ◎ 产品无 DNase/RNase、无热原、无内毒素、无抑制剂和重金属污染。
- ◎ 经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

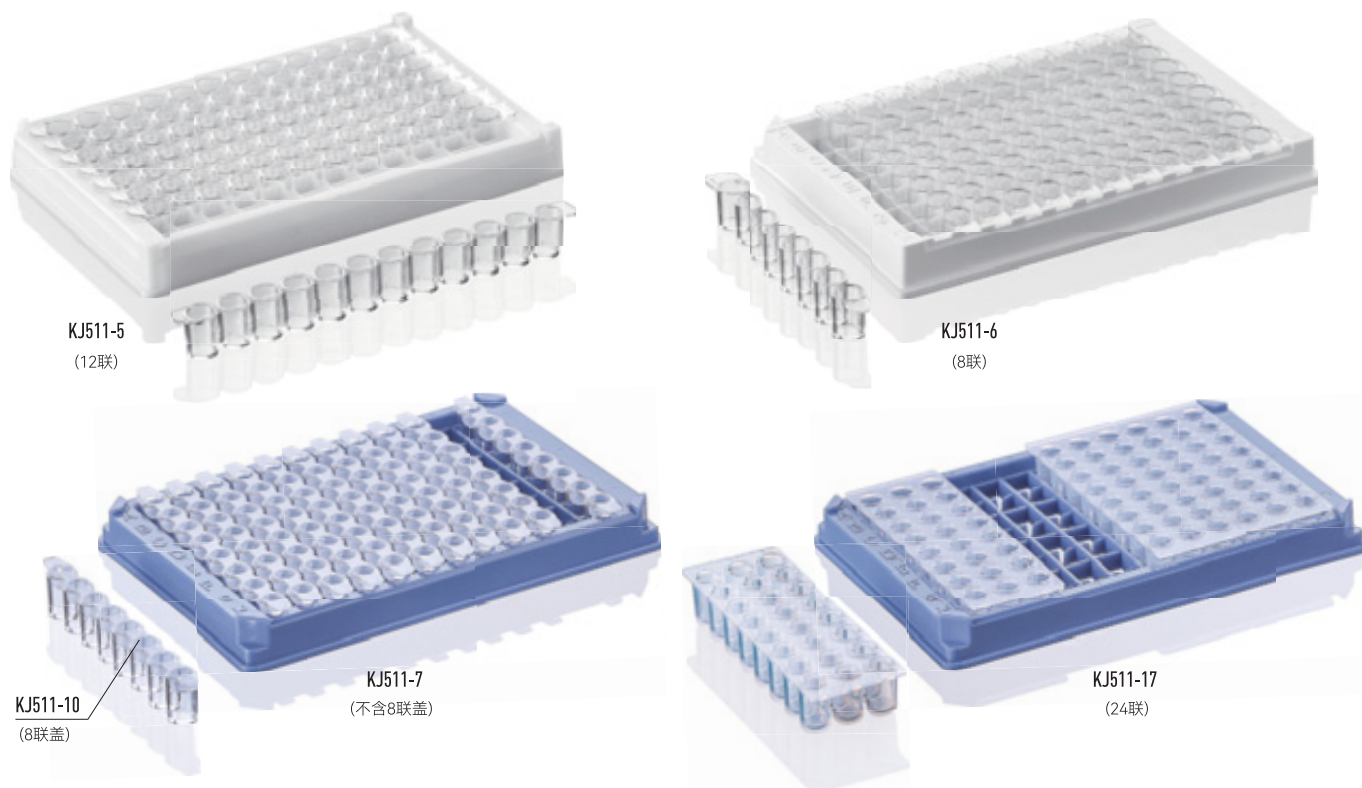

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	产品编码
KJ511-5	PS	12联管可拆, 平底, C型框	128×85×16mm	单套包装	200	163-0121
KJ511-6	PS	8联管可拆, 平底, A型框		单套包装	200	163-0081
KJ511-7	PS	8联管可拆, 平底, B型框		单套包装	200	163-0082
KJ511-17	PS	24联管可拆, 平底, B型框		单套包装	200	163-0241
KJ511-10	LDPE	8联密封盖	-	200只/袋	2000(只)	163-1081



深孔板

产品介绍

深孔板在生命科学学科中可以在多种实验场景下起到储液、液体混合的作用，可用于核酸提取操作。多孔道的设计可以同时储存多种溶液试剂，板面标有清晰序号方便分辨，不同孔型、深度的板类可以根据实验需求进行选择。

◎ 使用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚丙烯 (PP) 为原料制造，具有良好的生物相容性。

◎ 理化性能稳定，耐酸碱腐蚀能力强，可 121°C 高温高压灭菌，在 -80°C 低温冷冻。



◎ 孔形有方形孔、圆形孔。孔底形状有 U 形底、V 形底、平底，确保样品最低残留。

◎ 产品符合 ANSI-SBS 标准，可适合多道移液器及自动化设备。

◎ 密封性可靠：孔板上部平整均一，保证密封的有效性。

◎ 产品无 DNase/RNase、无热原、无内毒素、无抑制剂和重金属污染。

◎ 经辐照灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

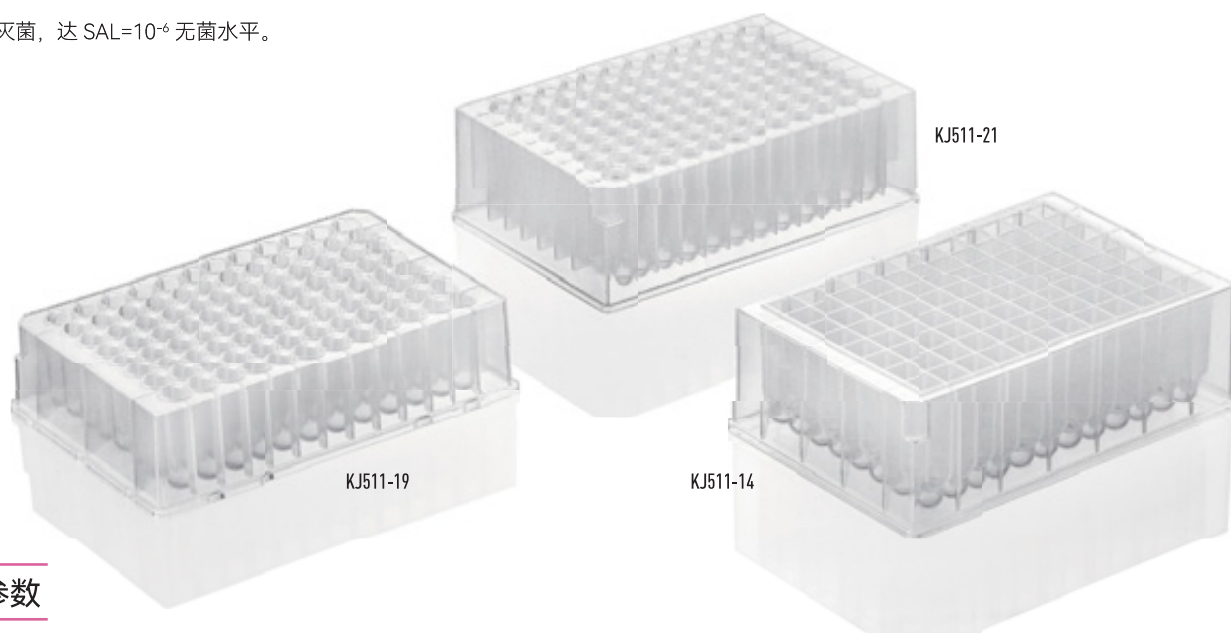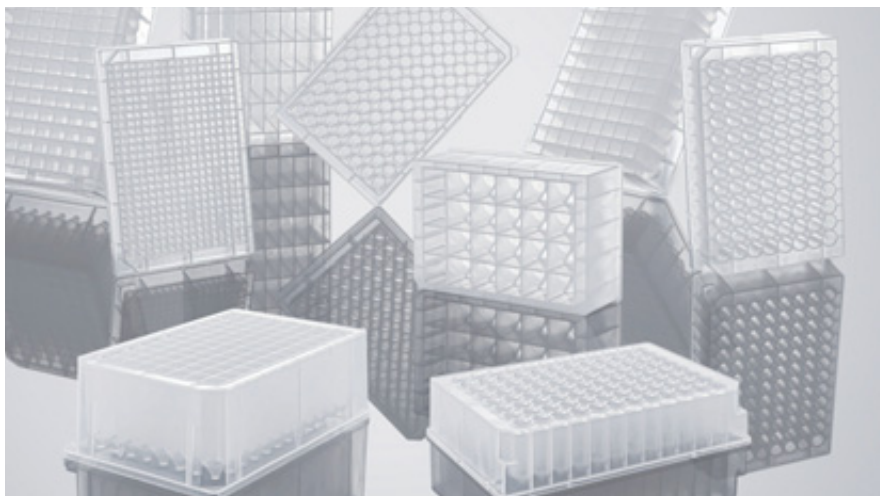

规格参数

圆孔板	REF 目录编号	单孔容量	MAT 材质	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
	KJ511-16	1.0mL	PP	96 圆孔 V 型底	128×85×33mm	×50 袋 / 箱	164-09611
	KJ511-19	1.0mL	PP	96 圆孔 U 型底	128×85×42mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09612
	KJ511-20	2.0mL	PP	96 圆孔 U 型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09613
	KJ511-21	2.0mL	PP	96 圆孔 V 型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09614
方孔板	REF 目录编号	单孔容量	MAT 材质	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
	KJ511-15	1.6mL	PP	96 方孔 U 型底	128×85×32mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09621
	KJ511-22	1.6mL	PP	96 方孔 V 型底	128×85×32mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09622
	KJ511-23	2.2mL	PP	96 方孔 锥型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09623
	KJ511-14	2.2mL	PP	96 方孔 U 型底	128×85×42mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09624


* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号

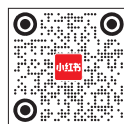

康健医疗小红书



康健医疗抖音号



江苏康健医疗用品有限公司



泰州市姜堰区火车站站前路16号



0523-88662233 / 88665500



400 001 9988



www.kangjian.com



info@kangjian.com