

Specimen Swab



采样拭子



原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成。



质量监控 流程管理

采用国际标准化的ISO13485质量监控体系，确保对产品进行连续的质量监控，生产有序、高效。



定制个性化产品 满足差异化需求


根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制模具、外观、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。



男性拭子 / 采样管

产品介绍

- ◎ 男性拭子由拭子和 PS 拭子管组成，拭子棉头选用优质脱脂棉、人造棉或聚酯棉。不锈钢拭子杆经过特殊处理，棉头缠附更牢靠，适用于主要用于尿道、前列腺、咽喉、肛周等部位的标本采集。本品单支灭菌包装。
- ◎ 采样管由拭子和 PS 拭子管组成。拭子棉头选用优质聚酯棉，或根据需要可定制。本品广泛用于医院临床检验、疾控中心、法医检测等样本的采集、保存和运输。本品单支灭菌包装。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。
- ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

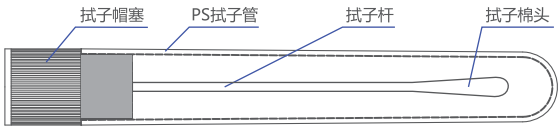


男性拭子



KJ501

采样管

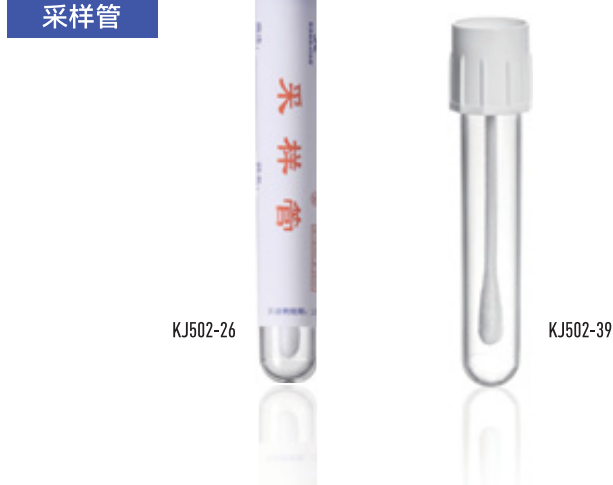

KJ502-26

KJ502-39

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质*	尺寸	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ501	不锈钢杆+人造棉+PS管	Ø12×87mm	200	1800	单支灭菌塑袋包装	151-5201
KJ502-26	PP杆+聚酯棉+PS管	Ø15×100mm	150	1500	单支灭菌塑袋包装	151-3301
KJ502-39	PP杆+聚酯棉+PP管	Ø12×80mm	200	1800	单支灭菌塑袋包装	151-3302

* 拭子头、拭子杆材质可定制。

鼻咽拭子

产品介绍

- 鼻咽拭子是从鼻咽部采集标本的专用拭子，主要用于采集呼吸道病毒 / 细菌 / 支原体 / 衣原体等样本，是新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）、肺炎支原体等筛查的核心采样方式之一。
- ◎ 鼻咽拭子由拭子和拭子管体组成，可定制不同材质的拭子杆和不同材质的拭子棉头，拭子管利于样本采集后短暂保存和运输。
 - ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级无尘车间内生产制造。
 - ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-27	PS杆+聚酯棉	Ø13×178mm	100	1200	拭子杆和拭子头可定制其它材质	153-2301
	ABS杆+尼龙植绒		150	1800		153-4401



KJ502-27

聚酯棉拭子头

植绒拭子头

女性拭子

产品介绍

- ◎ 女性拭子主要用于阴道、宫颈、尿道、咽喉、肛周等部位的标本采集，多用于妇科炎症、性病筛查、宫颈癌筛查、尿路感染等检测。
- ◎ 本品主要由拭子和拭子管组成，可定制不同材质的拭子杆（塑料、木质或不锈钢杆）和不同材质的拭子棉头（脱脂棉、人造棉、聚酯棉或植绒）。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。
- ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF	目录 编号	 拭子 材质	 拭子管 [*] 材质	 尺寸 [*]	 支/袋	 只/箱	 备注说明 [*]	产品编码
KJ502	PS杆+人造棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2201	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2202	
	PP杆+人造棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3201	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3202	
KJ502-2	PS杆+聚酯棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2301	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2302	
	PP杆+聚酯棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3301	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3302	
KJ502-3	木杆+脱脂棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-1101	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-1102	
	木杆+人造棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-1201	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-1202	
KJ502-5	PS杆+脱脂棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2101	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2102	
	PP杆+脱脂棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3101	
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3102	


* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



简易拭子与植绒拭子

产品介绍

- ◎ 植绒拭子由采样头和拭子杆组成。采样头由尼龙短纤维通过静电植绒技术制成。
- ◎ 植绒拭子具有出众的样品收集和释放能力，能够对微量样本快速吸附，样本释放效率高达 95%。靶向样本数量的增加有助于提高快速诊断试验的灵敏度，尤其适用于各类病毒、RNA/DNA 等样本采集。
- ◎ 植绒拭子 ABS 材质的拭子杆具有易折断点设计，采样后可以轻松折断，将采样头密封在保存管内，方便样本的保存、运输和检测。
- ◎ 简易拭子：是单支拭子的纸塑包装，并经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，具有使用方便使用、性价比高的特点。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内由自动化设备生产制造。
- ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无抑制剂污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

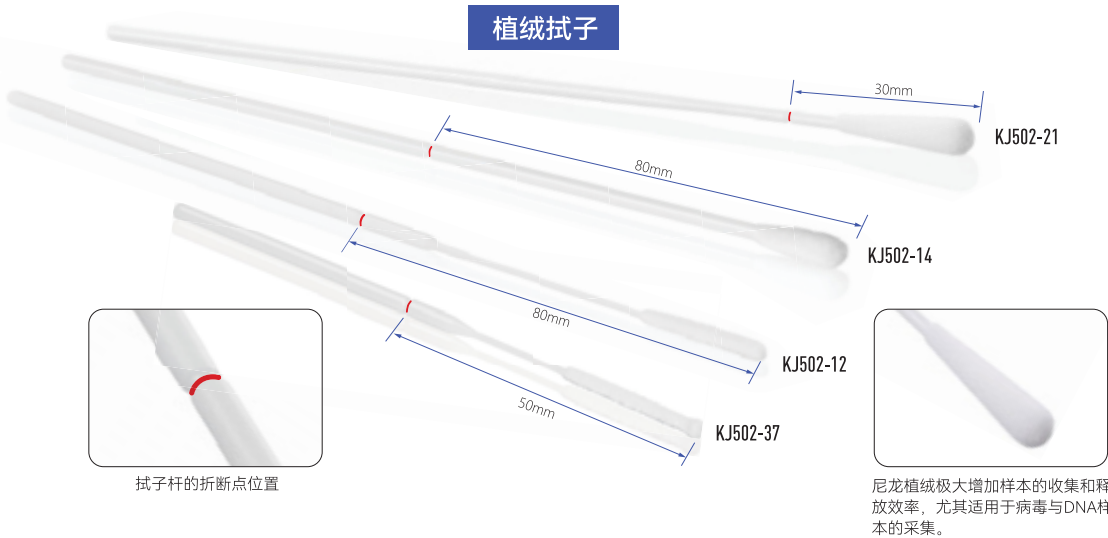


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质(拭子杆+拭子头)	尺寸	折断点位置	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-21	ABS+尼龙植绒	长度150mm	30mm	500	5000	单支纸塑包装	155-4404
KJ502-14			80mm	500	5000		155-4405
KJ502-12			80mm	500	5000		155-4406
KJ502-37		长度90mm	50mm	500	5000		155-4407
KJ502-16	简易拭子：拭子的单支纸塑包装或多支袋装，根据需可选择不同材质的拭子杆和拭子头			500	500	单支纸塑包装	155-2301
				定制	定制	多支纸塑或多支PE袋包装，灭菌	155-2302

介质拭子(运送培养基)

产品介绍

- ◎ 介质拭子通常是指运送培养基拭子，它是运送培养基和采样拭子的组合，主要用于微生物标本的采集、保存和运送。
- ◎ 产品主要由采样拭子、含培养基的拭子管组成。采样拭子可定制不同材质的拭子杆（如 PP、PS、木质或不锈钢杆），不同材质的拭子棉头（如脱脂棉、人造棉或聚酯纤维丝）。
- ◎ 按培养基可分为 Stuart、Stuart+ 活性炭、Amies、Amies+ 活性炭、Cary-Blair、Cary-Blair+ 活性炭。采样后 72 小时内运送至检验机构。
- ◎ 介质拭子为微生物标本的采集、保存、转运提供专业化的最佳整体解决方案，确保微生物的性状、生理活性等在分析前得到有效保护，提高诊断结果的准确性。同时简化医护人员操作，保护医护人员免受生物污染。
- ◎ 适用于各级医院、临床医学检测实验室、各级疾控中心、检验检疫机构、食品卫生检测机构、化妆品检测机构等。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。
- ◎ 经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

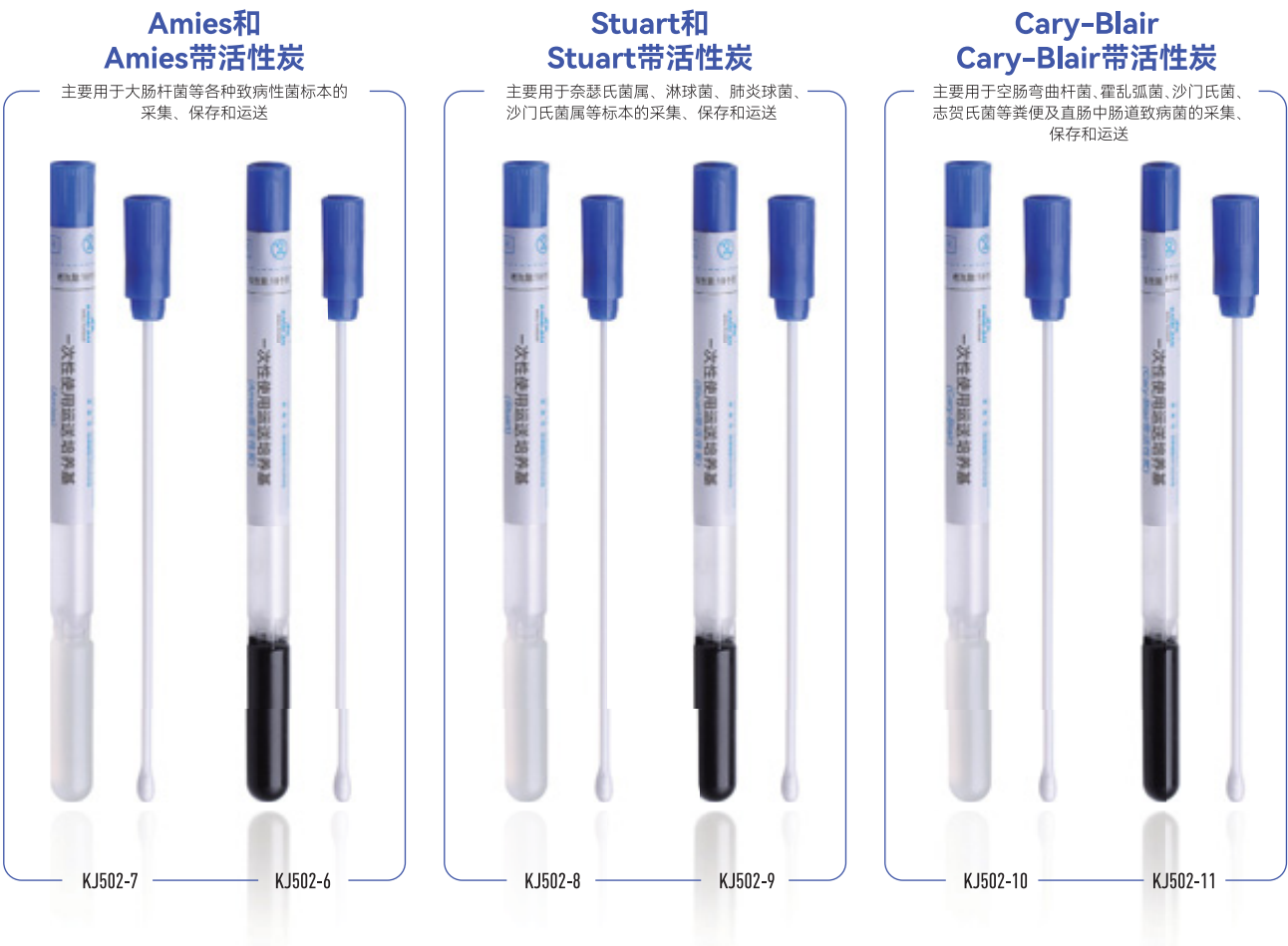

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	尺寸 *	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-7	定制杆与棉头材质： PP或PS杆+人造棉或脱脂棉 PP或PS杆+聚酯棉 木杆+脱脂棉或人造棉	Ø13×178mm	单支	800	培养基：Amies 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-1001
KJ502-6			单支	800	培养基：Amies带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-1101
KJ502-8			单支	800	培养基：Stuart 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-2001
KJ502-9			单支	800	培养基：Stuart带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-2101
KJ502-10			单支	800	培养基：Cary-Blair 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-3001
KJ502-11			单支	800	培养基：Cary-Blair带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-3101

病毒采样管

产品介绍

本品是由保存管（内置病毒样本保存液）、采样拭子和生物安全袋组成的病毒采样套装。适用于各类流感病毒、禽流感病毒、新冠病毒、手足口、风疹等病毒样本的核酸提取及后期病毒分离。同时也适用于衣原体、支原体、解脲支原体等标本采集和运输。通常在人体的口腔、咽喉、鼻咽、肛门等部位采集标本。

◎ **采样拭子** 推荐使用植绒拭子，其具有出众的样品收集和释放能力，能对微量样本快速吸附，且样本释放效率高达 95%。靶向样本数量的增加有助于提高快速诊断试验的灵敏度，尤其适用于各类病毒、RNA 和 DNA 等样本的采集。

◎ **采样管** 管身及管盖为医用聚丙烯材质，耐高温（121℃）和低温（-80℃），耐静态挤压与动态撞击。底部锥形设计，耐离心与震荡。内置样本保存液，用于样本的释放保存，杜绝渗漏。内置玻璃珠，方便样本洗脱。按采样管容积分为：10ml、7ml 和 5ml。

◎ 样本保存液分类

1、非灭活型保存液 内置 1-3ml UTM 液，粉红色透明液体，适合病毒保存的保存液配方，可在较宽的温度范围内维持病毒的活性，最大程度保持样本的原始性。不含裂解液，可保持病原体的活性与完整性，可用于病毒培养分离。

2、灭活型保存液 内置 1-3ml 含胍盐或不含胍盐保存液，根据需要进行选择。

①**含胍盐保存液**：病毒裂解液和核酸保存液的混合液，无色透明或可定制浅红色的透明液体。本品可瞬间裂解病原体释放核酸，保护液可防止核酸被降解，有效保证样本中的病毒核酸完整性，采集后的标本能够在常温条件下运输和长期保存。


②**不含胍盐保存液**：含有特殊的蛋白变性剂和核酸稳定剂；蛋白变性剂可以迅速破坏病毒外壳蛋白质的二级结构，将病毒灭活，核酸稳定剂可以常温稳定保存病毒核酸不降解，避免样本中的核酸在检测前降解，造成核酸检测“假阴性”。

◎ **生物安全袋**：建议将含病毒样本的采样管置于生物安全袋中保存运输，康健医疗为医务检验工作的安全增码。

◎ **包装方式**：本病毒采样套件采用国际通用的纸塑或吸塑包装。



尼龙植绒拭子能最大程度的增加病毒样本的采集和释放量，多种样式的拭子头适用于鼻、咽等不同部位的样本采集。

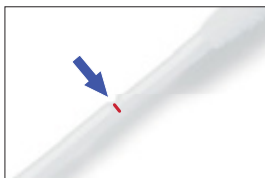


拭子杆折断点设计，使采集操作安全便捷。



保存管内两粒玻璃珠使病毒样本更易洗脱，利于更多样本释放放入保存液中。



使用图示

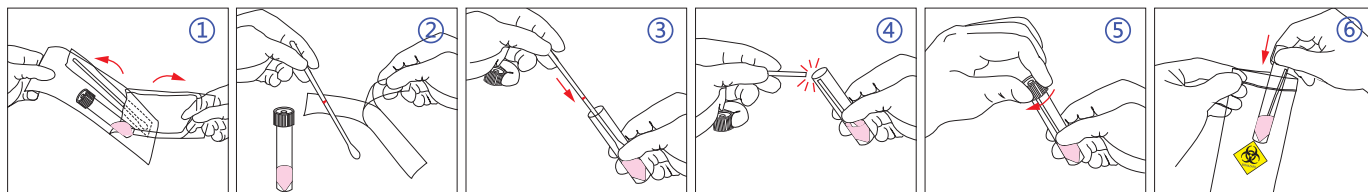

①从撕开处揭开纸塑包装。

②取拭子到目标部位采样。

③将采样后的拭子头浸入管内保存液中。

④沿断痕处折断拭子杆。

⑤旋紧管帽，摇动数次，完成采样。

⑥将采样管置于生物安全袋内，密封转运。

规格参数

REF 目录编号	采样管容量	样本保存液	可选拭子	支/盒	备注说明	产品编码
KJ502-33	5ml	预置 1-3mL 保存液	KJ502-21	50	采样管、保存液类型、拭子规格和数量均可灵活组合定制。	156-050
KJ502-34	7ml	可选： 1、病毒保存液：灭活/非灭活/含胍盐/无胍盐 2、细菌、病毒通用型保存液（无色）	KJ502-14	100		156-070
KJ502-23	10ml		KJ502-12	50		156-100
			KJ502-37	50		

物表微生物采样管


产品介绍

- ◎ 康健医疗物表微生物采样管（预置 0.85% 生理盐水采样管含中和剂）主要用于环境物表面微生物（包括病毒）样本的采集，适用冷链环节、餐饮行业、医院感控及公共卫生监测采样等，其用途广泛。
- ◎ **含中和剂的采样管可以有效中和残留在物体表面的消毒剂。**本品不仅可以中和季铵盐类消毒剂，还可以中和醇类、酚类、醛类、过氧化物、含氯、含碘等单一消毒剂和不超过 3 种消毒物质的复方消毒剂，让样本中的细菌和病毒可以被顺利检测出来。
- ◎ **采用聚酯海绵拭子，采集效率和释放率显著高于常规拭子。**大拭子头，与采样物表接触面积大，可以缩短采集时间。
- ◎ PP 材质的采样管管体耐高强度的挤压冲击、耐高温 +121℃ 低温 -80℃。安全防渗漏管帽与管体结合紧密，无漏液现象发生。
- ◎ 经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。




使用注意：采样完成的采样管建议2小时内送达至实验室进行检测，允许在常温4-26℃运送，如超过2小时，应在2-8℃环境下运送并在24小时内进行检测。超过24小时的待测样本培养或病毒检测时，会降低阳性率。


使用图示

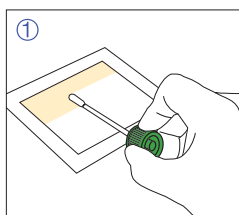


① 选取一定大小的待检面积，打开螺旋盖使用海绵拭子与待检表面呈 30 度采样，交叉涂抹两次采样。

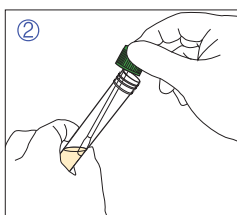


② 将采集完成后的拭子放入管内，旋紧管盖。

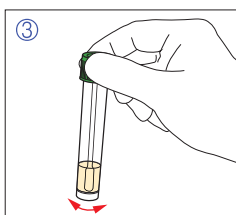

③ 反复振荡混匀，使采集到的微生物充分洗脱到含中和剂的生理盐水中。

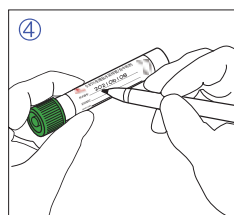

④ 在管体标签上标记采样信息，包括：采样编号、采样面积、采样部位、采样日期等。

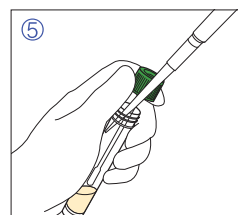

⑤ 取 1ml 样本液用于菌落培养，或适量的样本液用于病毒 RNA 的检测。


拭子采集效率对比：

聚酯海绵拭子具有柔软、吸水性好的特点，与物体凹凸表面接触良好，接触面积更大。（如右图示）



海绵拭子


人造纤维拭子其亲水性弱，与物体凹凸表面接触时变形小，从而接触面积小。（如右图示）

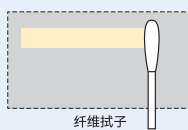

纤维拭子

样本回收效率对比：

推荐使用的聚酯海绵采样拭子的采集回收率是纤维拭子回收率的近两倍。

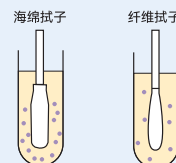

海绵拭子

纤维拭子

规格参数

REF 目录编号	试管规格	外观尺寸 *	MAT 材质	保存液规格	STERILE	支/盒	盒/箱	产品编码
KJ502-35	10mL	Ø16×100mm	试管: PP 拭子头: 聚酯海绵	3.5mL, 0.85%生理盐水 (含中和剂)	辐射灭菌	50	10	158-1001



预浸润物表采样海绵

产品介绍

- ◎ 本品为预浸润液体，0.9% 生理盐水或中和缓冲液的蓝色聚酯海绵，主要用于屠宰场胴体表面、食品加工设备、冷链仓储等环境物体表面的微生物（如沙门氏菌、李斯特菌、大肠杆菌等）的采样检测。
- ◎ 聚酯海绵材质，吸水性强，不易掉屑。预润湿无需现场配液，提升采样效率与标准化。蓝色海绵便于目视检查残留。
- ◎ 海绵体预浸润液体 10mL，有两种主流配液：1、0.9% 生理盐水，常用于胴体常规微生物采样；2、中和缓冲液常用于有消毒剂残留的环境或设备表面，可中和季铵盐、氯等，保护微生物。
- ◎ 单个自封采样袋包装，经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



KJ502-40



专用自封袋
灭菌包装

规格参数

REF 目录编号	外观尺寸	MAT 材质	预浸液	只/袋	只/箱	产品编码
KJ502-40	60×80×3mm	聚酯海绵	10mL, 0.9%生理盐水 或中和缓冲液	1	200	158-1002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

ATP检测拭子与检测仪

产品介绍

- ATP 荧光检测采用生物化学反应方法，“荧光素酶 - 荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷 (ATP)。
- ATP 拭子含有可以裂解细胞膜的试剂，能将细胞内的 ATP 释放出来，与试剂中含有的特异性酶发生反应，产生光，用荧光光度计检测发光值，微生物的数量与发光值成正比。因所有生物活细胞中含有恒量的 ATP，所以 ATP 含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。
- ATP 检测拭子配合 ATP 荧光检测仪使用，广泛应用于细菌微生物检测，包括医药卫生、食品安全、市场执法、医疗防疫、水质检测、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫等流动场所的现场快速检测。
- 拭子经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF 目录编号	外观尺寸	MAT 材质	支/袋	支/箱	产品编码
KJ502-36	Ø13×167mm	拭子管: PET 拭子头: 聚酯棉或植绒	20	200	159-1001

型号品名: J-4 ATP 荧光检测仪	检测时间: 15 秒	供电电源: 可充电锂电池 3AH
检测精度: 1.0×10 ⁻¹⁴ mol	检测干扰: ±5% 或 ±5RLUs	检出模式: RLU、大肠菌群筛查
检测范围: 0-999999RLUs	大肠菌群: 1-106cfu	工作环境: 5-40℃, 环境湿度 20-85%
ATP 回收率: 90-110%	USB 接口: 配有 miniUSB 接口, 可将结果上传至 PC	处 理 器: 32 位高速数据处理芯片
开机自检: 30 秒 (内置自校光源)	数据显示: 大屏幕高清液晶显示屏	尺寸重量: 188 mm×77mm×37mm (L×W×H), 260g



一次性使用宫颈刷

产品介绍

- ◎ 一次性使用宫颈刷是妇科宫颈筛查（如 TCT / 液基细胞学、HPV 检测）专用的一次性采样耗材，用于无创采集宫颈脱落细胞，操作简便、采样率高，是宫颈癌早筛的核心工具。
- ◎ 宫颈刷由符合 USP Class VI 生物安全标准的医用 ABS 或 PP、尼龙丝或低密度聚乙烯为原料，在 ISO13485 和 GMP 医疗器械质量管理体系下，在十万级净化车间生产制造。
- ◎ 宫颈刷的采集刷长度和形状符合宫颈解剖结构，质地柔软，密集度高，采样全面，能够采集更多组织样本，且对人体组织损伤小。
- ◎ 产品符合 ISO10993 和 GB/T 16886 医疗器械生物学评价的国际、国内标准，确保与人体接触时的生物安全性，避免毒性、致敏、炎症、致癌、遗传损伤等风险。
- ◎ 单支纸塑或吸塑包装，防止污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	长度尺寸	折断点位置	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-18	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	170mm	52mm	100	1000	单支灭菌 纸塑或吸塑包装	157-4501
KJ502-38	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	185mm	68mm	100	1000		157-4503
KJ502-15	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	190mm	-	100	1000		157-4502
KJ502-13	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	100	1000		157-3601
KJ502-20	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	100	1000		157-3603
KJ502-19	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	100	1000		157-3602



单支灭菌吸塑包装

宫颈脱落细胞采样器

产品介绍

- ◎ 宫颈脱落细胞采样器由宫颈采样刷、取样管和细胞保存液组成，主要用于宫颈脱落细胞收集、胸腹水脱落细胞检查、尿沉渣检查、针吸细胞检查等项目的样本采集与保存。特别适用于所有女性宫颈癌的早期诊断。
- ◎ **取样管** 管体及管盖为聚丙烯材质，高温高压 (121℃, 15min) 不变形。耐静态挤压与动态撞击。底部锥形设计，耐离心与震荡。内装样本保存液，用于样本的保存，杜绝渗漏。
- ◎ **样本保存液** 采样管内 HPV 细胞保存液可抑制细菌生长，保持细胞的形态及核酸的完整性。
- ◎ **宫颈采样刷** 专用采样刷材质 (尼龙丝) 柔软，刷毛直径为 0.05mm，能从宫颈内采取足够量的细胞样本。塑料杆为 ABS 或 PP 材质，独特的折断点设计，折断过程中无碎屑产生。
- ◎ 采用国际通用的纸塑或吸塑包装，经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。




规格参数


REF 目录编号	MAT 宫颈刷	MAT 取样管	尺寸	套/盒	套/箱	备注说明	产品编码
KJ502-22	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	PP管, HPV保存液	宫颈刷: 185mm 取样管: Ø16×75mm	48	480	单支灭菌 纸塑或吸塑包装	158-0001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。


使用图示

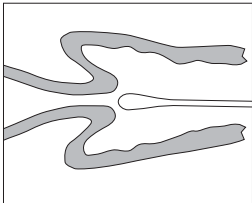


①采用前用棉拭子轻轻擦拭宫颈口过多的分泌物。

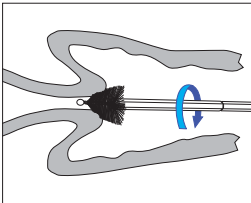


②将宫颈采样刷伸入宫颈口鳞柱上皮交界处，顺时针或逆时针旋转3-5圈。

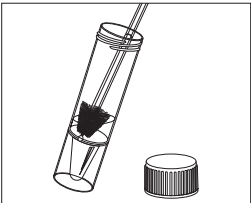

③慢慢抽出宫颈取样刷，将其放入装有细胞保存液的取样管中。

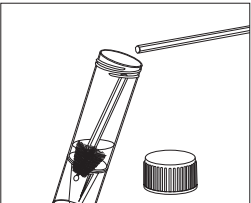

④在取样管管口沿折断点折断刷柄，将刷头留部分留在取样管中。

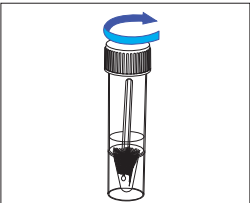


⑤旋紧管盖，注明编号和日期，送检。



康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号

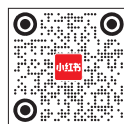

康健医疗小红书



康健医疗抖音号