

Specimen Container



标本杯系列



原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成。



质量监控 流程管理

采用国际标准化的ISO9001质量监控体系，确保对产品进行连续的质量监控，生产有序、高效。



定制个性化产品 满足差异化需求

根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制模具、外观、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。



标本杯

产品介绍

- 康健医疗标本杯材质为医用级原生PP，耐高温不变形。不同容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- 专为安全可靠地收集和运输生物标本而设计，有效防止标本的干燥和泄漏。如尿液、粪便、唾液、精液、试剂、防腐剂等需要密封保存的样本。
- 本品自带安全卡扣，当杯盖与杯体拧紧时，能够发出咔哒一声旋紧提示音，具有安全防漏特点的同时避免过度旋紧导致滑丝的现象发生。
- 注塑的杯体容量刻度清晰易读，三组刻度平均分布在杯身四周，方便实验人员快速读取而无需旋转杯身。
- 密封性能好，安全性高，防泄漏污染，便于保存和运送。
- 灭菌方式：EO灭菌或辐射灭菌。



规格参数

REF 目录编号	刻度容量	MAT 材质	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	产品编码
KJ532-1	120mL	PP	Ø53×82mm	EO或辐射	25	250	075-12001
KJ532-2	80mL	PP	Ø53×68mm		50	400	075-08001
KJ532-3	60mL	PP	Ø44×61mm		40	600	075-06001
KJ532-4	40mL	PP	Ø44×50mm		20	800	075-04001
KJ532-5	20mL	PP	Ø30×50mm		50	800	075-02001
KJ532-6	250mL	PP	Ø83×80mm				075-25001
KJ532-7	500mL	PP	Ø83×110mm				075-50001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液标本杯

产品介绍

- 尿液标本杯(量杯)主要材质为医疗级PP或PS，PP标本杯耐高温121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- 杯体容量刻度清晰易读，大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
- 密封性能好，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
- 同时，良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
- 根据用途可定制无DNA酶、无RNA酶、无热原的产品，并可定制条码标签。
- 灵活选择灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。



定制标签



单只灭菌包装



KJ512



KJ513-2



KJ515-2



KJ517-1



KJ524-3



KJ525



KJ524-5

规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ512	100mL	PP	Ø60×73mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-10013
				-	-	250	散装	071-10010
KJ513-2	120mL	PP	Ø64×75mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12013
				-	-	250	散装	071-12010
KJ515-2	60mL	PP	Ø53×65mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06013
				-	35	420	多只袋装	071-06014
KJ517-1	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06023
				-	20	600	多只袋装	071-06024
KJ524-3	40mL	PS	Ø42×59mm	EO	20	800	单支塑袋包装	071-04013
KJ525	60mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	071-06033
				-	20	800	多只袋装	071-06034
KJ524-5	40mL	PP	Ø43×62mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-04073

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液标本杯



规格参数



REF 目录 编号	容量	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ531	90mL	PP	Ø58×67mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-09013
KJ532	120mL	PP	Ø59×88mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12023
		PP	Ø59×88mm	-	25	250	多只袋装	071-12020
KJ516	40mL	PET	Ø78×36mm	-	400	10000	本色透明, 多只袋装	071-04034
		PET	Ø78×36mm	-	400	10000	白色, 多只袋装	071-04044
KJ517-2	40mL	PP	Ø48×47mm	EO	40	800	手掀盖, 多只袋装	071-04055
		PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖, 多只袋装	071-04054
KJ517-3	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖, 标签式, 多只袋装	071-04064
KJ517-5	40mL	PP	Ø48×45mm	-	40	800	杯-盖联体, 手掀盖, 标签式	071-04083
KJ524	30mL	PS	Ø31×93mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03014
KJ529	30mL	PS	Ø31×94mm	-	50	800	防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03024
KJ530	30mL	PP	Ø31×94mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03034

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

尿液标本采集器

产品介绍

- 本系统由尿液收集杯和预置负压的尿液采集管组成。主要用于尿液标本的采集和检验前的无污染操作。
- 密封性能好，有效防止标本渗漏及污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触。良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
- 人性化的设计，使封闭式尿液收集操作过程轻松便捷，安全高效，有效防止环境污染，营造卫生环境。
- 可选EO或辐射灭菌。

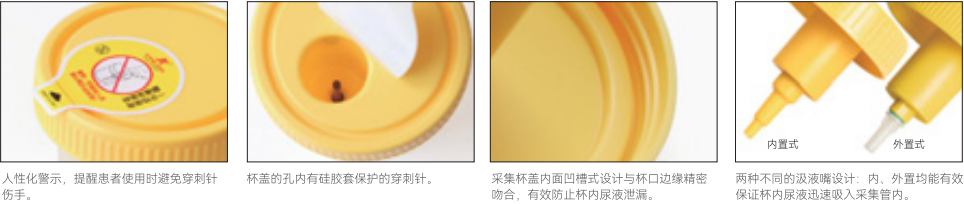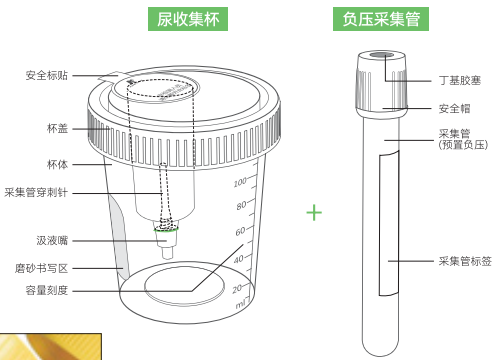

人性化警示，提醒患者使用时避免穿刺针伤手。

杯盖的孔内有硅胶套保护的穿刺针。

采集杯盖内面凹槽式设计，与杯口边缘精密吻合，有效防止杯内尿液泄漏。

两种不同的吸液嘴设计：内、外置均能有效保证杯内尿液迅速吸入采集管内。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	外观* 尺寸	只/袋	支/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ527-5	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø54×64mm (外置式吸液嘴)	50	-	400		071-06041
KJ527-10	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø52×64mm (内置式吸液嘴)	50	-	300		071-06042
KJ527-6	PP	90 (盛液量: 70 ~ 30)mL	Ø58×65mm (外置式吸液嘴)	50	-	300		071-09021
KJ527-7	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (外置式吸液嘴)	50	-	300		071-10026
KJ527-11	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (内置式吸液嘴)	50	-	300		071-10027
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm (U形底)	-	100	1200		071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm (V形底)	-	100	1200		071-01011

- 1、负压采集管可选U形底或V形底。
- 2、标签可定制。
- 3、定制灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

一、患者尿液收集步骤






尿液标本采集器

二、医检人员尿液采集方法



① 医检人员在采集前需反复摇匀杯内尿样。

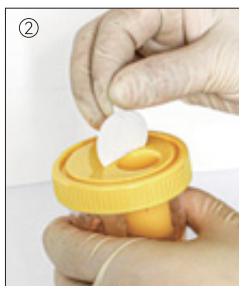

② 立即揭开防护标贴，露出采集孔。



③ 迅速取尿液采集管，管帽朝下沿采集孔插入并下压，使穿刺针刺穿了密封胶，杯内尿液在大气压作用下自动吸入管内(约10mL)。



④ 向上拔出尿液采集管，完成尿样采集，待检。



⑤ 最后，盖上尿杯的防护标贴，以防伤手。

筒式尿液采集器



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌 * 方式	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ533	PP	-	140mm(长度)	定制	100	-	1000		071-14015
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm(U底管)	定制	-	100	1200		071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm(V底管)	定制	-	100	1200		071-01011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液DNA样本保存管

产品介绍


- 尿液 DNA 样本采集与常规血液 DNA 样本采集相比，是一种新型的对人体无伤害、无痛苦的采集 DNA 样本的方法。尿液 DNA 样本保存管不仅能够保存尿液中的基因组，还能够保存尿液中游离循环 DNA(cfDNA)。研究证明血浆 cfDNA 部分是来自于肿瘤、胎儿和移植器官的，并且血浆游离 DNA 能够通过肾脏透进入尿液，这就为无创诊断带来极大的应用价值。
- 尿液 DNA 样本保存管采集尿液样本之后，能够在 6-35℃稳定保存 DNA 长达 7 天。尿液 DNA 样本保存管是由 EDTA 抗凝剂和特殊的保护剂组成，能够有效抑制尿液中的核酸酶，并避免尿液中脱落细胞基因组 DNA 的释放，同时也能够用于保存尿液中的血细胞。具有采集方便、无创、常温储存与运输等优点，为尿液样本的运输及储存提供了极大的便利。该产品适用于无创产前筛查与一些疾病的早期诊断相关的研究。
- 尿液 DNA 样本保存管为 PET 材质的负压管，且内置一定量的尿液 DNA 样本保存液，用于对尿液采集杯内尿样的采集和保存。
- 尿液采集注意事项：
 - 1、建议保存 2 支尿液 DNA 样本保存管的尿液量，采尿量过多或过少将会导致不恰当的尿液 / 保护剂的比例，达不到最佳的检测结果。
 - 2、如果产品在使用前发现有沉淀或不溶物出现应停止使用。
 - 3、最好采集晨尿，并且采尿后立即温和上下颠倒保存管 10 次，混匀不充分或太剧烈均可能对检测效果造成影响。
- 游离 DNA 提取方法：
 - 1、分离尿液：将尿液 DNA 样本保存管 4000rpm 离心 10 分钟，吸取上层尿液到一个新的离心管中，并注意不可吸取到管内尿液下方的脱落细胞。
 - 2、提取游离 DNA：分离后的尿液，可使用商业化的相关试剂盒进行游离 DNA 的提取。
- 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原，并可定制条码标签。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	保存液	STERILE 灭菌*方式	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ759-1	采集杯:PP	100mL	-	可选	50	-	300	杯盖、管帽颜色可定制	071-10052
	保存管:PET	10mL	专用DNA保存液2mL	辐射灭菌	-	100	1200		

使用图示

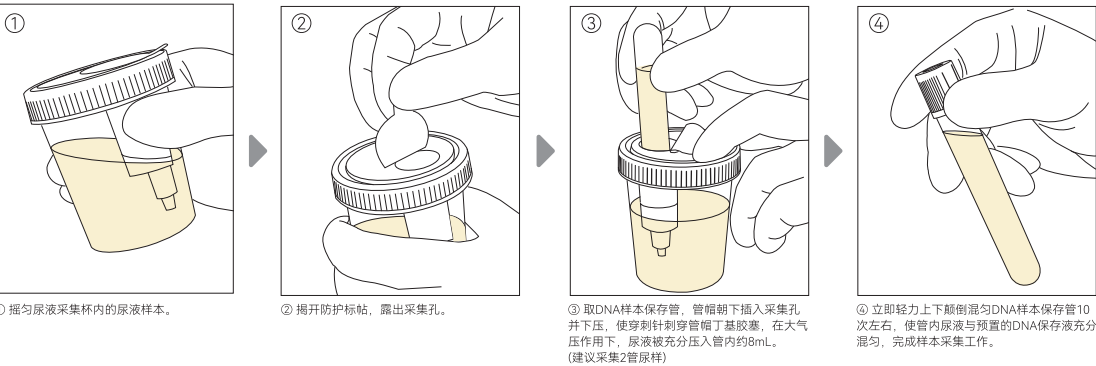



粪便标本杯

产品介绍

- ◎ 粪便标本杯主要材质为医疗级 PP 或 PS，PP 标本杯耐高温 121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- ◎ 采样勺与杯盖一体化注塑成形，便样采集更可靠。大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
- ◎ 良好的密封性，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
- ◎ 根据客户需要可定制标签。
- ◎ 可选不同灭菌方式：EO 灭菌、辐射灭菌或不灭菌。



规格参数

REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观尺寸 *	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ513-1	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	黑色杯体，手掀盖，盖匙一体	072-03014
KJ514	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	白色杯体，手掀盖，多只袋装	072-03024
KJ515	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06013
				-	40	600	多只袋装	072-06014
KJ515-1	60mL	PP	Ø53×64mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06023
				-	35	420	多只袋装	072-06024
KJ524-4	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	盖匙一体式，多只袋装	072-04044
KJ524-12	40mL	PP	Ø38×62mm	-	20	800	多只袋装	072-04025
KJ524-13	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	多只袋装	072-04014
KJ526	40mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	072-04023
				-	20	800	多只袋装	072-04024
KJ529-1	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	白色杯体，手掀盖，盖匙一体	072-04034

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

粪便标本杯



规格参数

REF 目录 编号	容积	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ529-2	60mL	PP	Ø49×57mm	可选	35	420	盖匙一体式，多只袋装	072-06034
KJ523	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	防漏盖，多只袋装	072-03034
KJ523-2	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03044
KJ524-6	5mL	PP	Ø16×72mm	可选	250	2500	多只袋装	072-00524
KJ524-11	5mL	PP	Ø13.5×64mm	可选	300	3000	带刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00534
KJ524-14	5mL	PP	Ø16×58.4mm	可选	200	2000	丝印刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00535
KJ524-7	10mL	PS	Ø32×75mm	可选	50	800	多只袋装	072-01014
KJ524-10	15mL	PP	Ø21×80mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03064
KJ542	5mL	PP	Ø16×58mm	可选	50	800	盖匙一体，螺旋盖，管底带二维码	072-01515
KJ743	10mL	PS	Ø9×75mm	辐射	100	1000	入肛式大便采集器，多只袋装	072-01035

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



粪便标本采集保存管

产品介绍

- ◎ 该采集器主要用于大便常规类、隐血、微生物、轮状病毒等理化检测前的标本采集和预处理。
- ◎ 本品主要由盛液管（内装稀释液）、易折杆、连接座、密封旋盖、采样头、标本稀释管等组成。
- ◎ 采样头有：槽式采样头、棉签式采样头、铲式采样头设计，方便标本采集。
- ◎ 盛液管采用优质 PE 材料制成，挤压不破裂，具有良好的弹性。管内的易折杆为空心设计，压弯 30°即可折断，2mL 稀释液沿折断孔迅速向下流入标本稀释管内。
- ◎ 大便标本的预处理在标本稀释管的密闭管腔内进行，与外部隔绝，医检操作安全无接触，对实验室环境无异味、无污染。
- ◎ 一体化密封式设计，保证标本检验前的预处理工作在完全密封的容器中进行，处理过程轻松便捷、卫生安全。



规格参数

REF 目录编号	预置溶液	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×125mm	-	100	1000	槽式采样头	072-12514
				EO / 辐射	100	1000	槽式采样头	072-12515
KJ534-1	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×170mm	-	100	800	棉签式采样头	072-17014
				EO / 辐射	100	800	棉签式采样头	072-17015
KJ534-2	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø24×127mm	-	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12516
				EO / 辐射	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12517

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示



粪便DNA样本保存管

产品介绍

产品由粪便采集管（器）和预置的 DNA 保存液组成，每管保存液最多可保存 0.5g 粪便样本。保存液可在常温条件下保存粪便中宿主与微生物的 DNA 至少 60 天，在 -20℃和 -80℃下可长期保存，并且能够有效防止常温保存条件下样本中微生物种类发生改变。本产品使用简单方便，可广泛用于医院、科研院所、家庭等常温条件下粪便样本的采集与保存。


- 保存方便，可在常温下采集、保存粪便样本，保护样本中宿主与微生物的 DNA 不被降解，防止微生物污染。
- 取样简单，用保存管帽（或采集处理器）附带的勺子直接挖取粪便样本，然后浸入常温保存液中混匀即可。
- 从保存液中提得的 DNA 适用于下游多种基因检测，如 PCR、芯片分析及二代测序等。
- 保存管、采集勺均为无菌产品，最大程度减少了耗材中微生物及微生物残留 DNA 对样本的污染。
- 用途广泛，可广泛用于医院、家庭、高校、科研院所等常温条件下粪便样本的采集保存。

KJ534-4 使用图示



KJ534-4

KJ524-15 使用图示

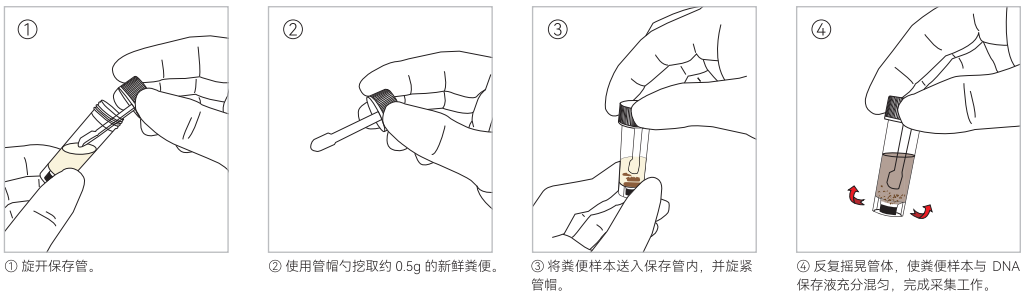

KJ524-15

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观* 尺寸	保存液	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534-4	PP	Ø24×127mm	DNA保存液2.5mL	辐射灭菌	100	1000	粪便DNA样本采集保存处理器(带滤芯)	071-12518
KJ524-15	PP	Ø16×58mm	DNA保存液3mL	辐射灭菌	200	2000	粪便DNA样本保存管(管底二维码)	071-01516

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



痰标本杯

产品介绍

- ◎ 痰标本杯主要材质为医疗级 PP 或 PS，PP 标本杯耐高温 121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- ◎ 痰瓶盖防漏垫圈设计可有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送。
- ◎ 根据客户需要可定制丝印容积刻度和标签。
- ◎ 灭菌方式：EO 或辐射灭菌。



规格参数

REF 目录 编号	容积	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌* 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ518	40mL	PS	Ø42×59mm	-	40	800	多只袋装	073-04014
	40mL	PS	Ø42×59mm	EO	40	800	单支塑袋包装	073-04013
KJ518-2	40mL	PP	Ø43×68mm	-	20	700	多只袋装，耐高温高压	073-04024
	40mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装，耐高温高压	073-04023
KJ518-3	25mL	PS	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02514
	25mL	PS	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02513
	25mL	PS	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02515
	25mL	PC	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02524
	25mL	PC	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02523
	25mL	PC	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02525
	25mL	PP	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02534
KJ518-4	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02533
	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02535
	25mL	PS	Ø30×84mm	-	50	650	丝印刻度，多只袋装	073-02544
KJ519-6	25mL	PS	Ø30×84mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02543
	25mL	PC	Ø30×84mm	-	50	650	丝印刻度，多只袋装	073-02554
	25mL	PC	Ø30×84mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02553
KJ518-1	20mL	PS	Ø43×25mm	-	50	800	多只袋装	073-02014
	20mL	PS	Ø43×25mm	EO	50	800	单支塑袋包装	073-02013
KJ519	30mL	PP	Ø55×32mm	-	20	500	多只袋装	073-03014
	30mL	PP	Ø55×32mm	EO	20	500	单支塑袋包装	073-03013
KJ519-1	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖，多只袋装	073-04034
	40mL	PP	Ø48×47mm	EO	40	800	手掀盖，单支塑袋包装	073-04033
KJ519-2	20mL	PP	Ø45×33mm	-	50	800	手掀盖，多只袋装	073-02024
	20mL	PP	Ø45×33mm	EO	50	800	手掀盖，单支塑袋包装	073-02023

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。

唾(痰)液DNA样本采集器

产品介绍

唾(痰)液 DNA 样本采集与血液 DNA 样本采集相比，是一种对人体无伤害、无痛苦的获取 DNA 的方法。该方法不会对被收集者造成任何不适，容易被接受，因而能最大限度的扩大基因研究的取样范围，特别适合分子流行病学大人群调查。常温下唾(痰)液 DNA 样本可以保存多年、绿色环保、携带方便。

唾(痰)液 DNA 样本采集器包含采集盒和 DNA 样本保存管，可稳定保存唾(痰)液 DNA 样本。DNA 样本保存管中的 DNA 保存液能迅速抑制唾液中的核酸酶，稳定唾(痰)液 DNA。常温下保存管中的 DNA 样本的储存和运输的时间长达一年。提取的 DNA 适用于下游多种基因检测，如 PCR、芯片分析及二代测序等。

- ◎ 采集盒主要材质为医用 PS 塑料，用于唾(痰)液的收集。DNA 样本保存管使用 PET 高分子原料制造，管内预置负压以及 DNA 保存液 1mL，主要用于唾(痰)液采集和保存。
- ◎ 本品适用于遗传性疾病筛查、基因组检测和疾病检测时 DNA 样本的采集、保存和运输。
- ◎ 本品使用时为非侵入性样本采集，操作安全便利。同时唾液样本与实验人员无接触无污染，可直接自动化检测，无需二次转移样本。
- ◎ 在洁净车间生产，无 DNA 酶、无 RNA 酶，无热原。
- ◎ 灭菌方式：EO 或辐射灭菌。




规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	保存液	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ535	PS	75×35×65mm	—	辐射灭菌	20	500	采集盒，多只袋装	073-00015
KJ535-1	PET	Ø16×100mm	DNA保存液1mL	辐射灭菌	100(盘装)	1200	保存管，配合采集盒使用	

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

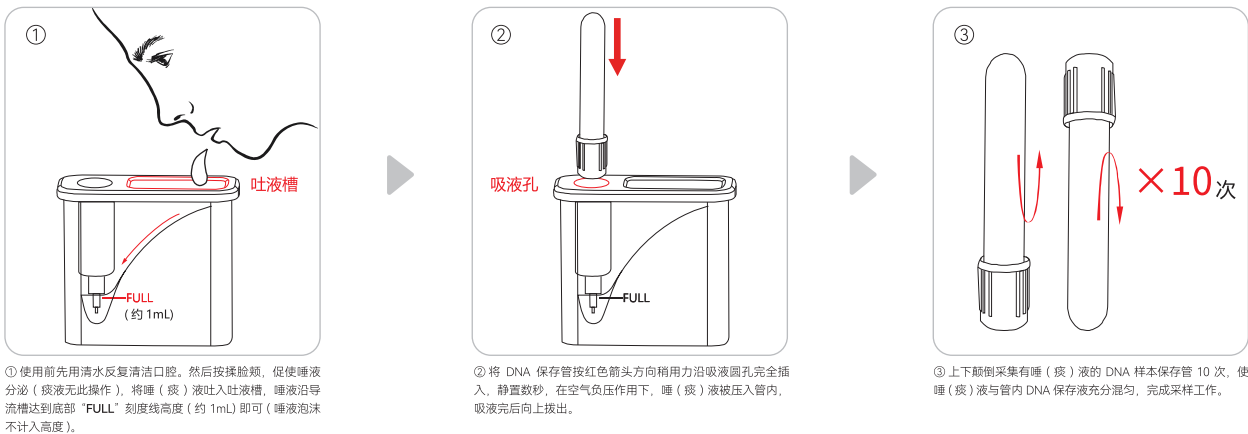

① 使用前先用清水反复清洁口腔。然后按揉脸颊，促使唾液分泌(痰液无此操作)，将唾(痰)液吐入吐液槽，唾液沿导流槽达到底部“FULL”刻度线高度(约1mL)即可(唾液泡沫不计入高度)。

② 将 DNA 保存管按红色箭头方向稍用力沿吸液孔完全插入。静置数秒，在空气负压作用下，唾(痰)液被压入管内。吸液完后向上拔出。

③ 上下颠倒采集有唾(痰)液的 DNA 样本保存管 10 次，使唾(痰)液与管内 DNA 保存液充分混匀，完成采样工作。



唾(痰)液DNA样本采集器

产品介绍

本品可直接用于唾液或痰样本的采集、保存和运输，并通过保存液稳定其中的游离 DNA(CellFree DNA) 或病毒样本。可用于分子诊断检测 (包括但不限于聚合酶链式反应 PCR 或分支 DNA 扩增技术)、病毒检测或其他的体外检测所需唾液样本的诊断。

- ◎ 本产品由唾液采集器 (采集漏斗 + 样本收集管)、样本收集管管帽、保存液管 (预置 2mL 游离 DNA 保存液或病毒样本保存液) 组成。
- ◎ 在室温环境下采集、保存和运输唾液样本中的游离 DNA 或病毒样本。
- ◎ 用于病毒样本采集时，可定制不同的病毒样本保存液，如 VTM 保存液 (粉红色)、含灭活剂的保存液 (无色) 或生理盐水。
- ◎ 用于 DNA 样本采集时，预置的 DNA 保存液适用于多种 DNA 提取纯化试剂盒，室温下可以稳定保存游离 DNA 最长达到 24 个月。
- ◎ 采集过程无痛无创，可居家自行采集，更加便捷。
- ◎ 采集漏斗人性化设计，贴合人体口型结构，操作简便。管帽配备防漏垫圈，密封防漏。
- ◎ 根据用途可定制无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原的产品。可选 EO 或辐射灭菌。




规格参数

REF 目录编号	采集漏斗	保存管规格	保存液*	套/箱	备注说明	产品编码
KJ536	螺口式	5mL, Ø16×60	DNA保存液2mL	200	用于分子诊断、疾病筛查、DNA遗传鉴定等,保存液预置量可定制。	073-00025
KJ537	插口式	5mL, Ø16×60		200		073-01025

* 保存液可根据用户需求定制。

使用图示

(注：螺口式漏斗的采集器使用方式与插口式基本相同)

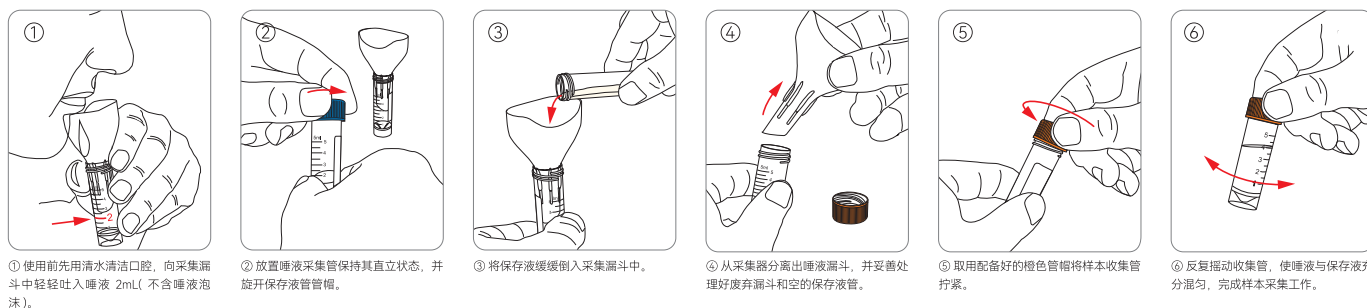




康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号

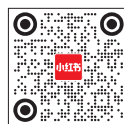

康健医疗小红书



康健医疗抖音号