



COMPANY PROFILE

公司简介



江苏康健医疗用品有限公司成立于 1998 年，是专业从事一次性医用检验耗材、细胞培养、分子生物耗材及实验室辅助仪器研发与生产的高新技术企业。拥有一批精益求精，不断追求进取与创新的优秀管理、技术人才，经过二十多年的努力已经得到了持续、稳健发展。产品远销欧美等发达国家，康健品牌在国内、国际市场享有盛誉。

公司始终以“科技创造，服务健康”为企业宗旨，着眼于检验医学、生命科学、组织基因细胞工程等领域，注重不断创新发展，提升产品技术含量，丰富产品种类，实现产品升级，逐步增强企业核心竞争力，迄今为止，公司已获得发明及实用新型专利 70 多项。

康健医疗视产品质量为企业生命力，按照国际质量标准建立了一整套严格的内部质量控制体系，通过了 ISO9001、ISO13485 及产品 CE 认证，ISO14001 环境认证。精选优质的进口原料，在符合 GMP 要求的十万级无尘车间，在 GMP 式流程管理下生产制造，从原料到成品进行逐批质量检测，专注生产高品质的产品，确保了实验检测数据的真实有效，高性价比使其更具竞争力。

公司引进国际一流自动化生产设备及制造工艺，不断扩大产能以满足客户需求。持续软硬件设施的投入，使企业更具国际化、规范化。同时强化对全员进行系统培训，不断增强对顾客的服务优化，真正做到专注品质和服务，以创造更多客户价值。康健医疗与众多全球知名企业积极开展 OEM 和 ODM 合作，扎扎实实与更多业内精英携手，为人类健康尽心尽责。



安全可靠 创新高效

Safety, reliability, Innovation and high efficiency

产品质量是企业的核心竞争力，保证用户的利益和使用的安全
可靠性是康健持之以恒、不懈追求的目标。





TEL :

0523-88662233 / 88668855



FAX:

0523-88665588



E-MAIL:

info@kangjian.com




ADD:

江苏省泰州市姜堰区火车站前路16号



WEB:

www.kangjian.com

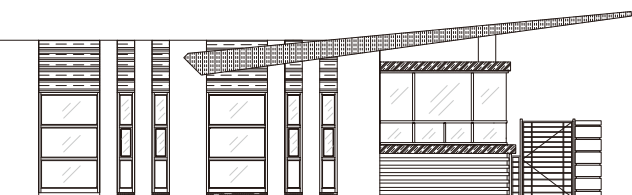

K 康健医疗
KANGJIAN MEDICAL

产品目录 Catalog

P01 血液标本采集类

P32 标本杯系列

P46 比色杯 样品杯

P54 离心管系列

P62 冻存管系列

P74 PCR管/板

P80 移液处理系列

P102 采样拭子类

P113 细胞(细菌)培养类

P124 辅助生殖类耗材



P132 试 管

P141 病理类耗材及其它

P165 实验辅助仪器


KANG JIAN MEDICAL

Blood Specimen Collection Consumables



血液标本采集

- 真空采血管系列 02-21
- 一次性使用静脉采血针 22
- 静脉采血配套附件 23
- 真空采血管采血方法 24
- 血沉架 25-26
- 末梢采血管 26-28
- 一次性使用微量采血吸管 29
- 标本封存冷藏盒 30
- 利器盒 31

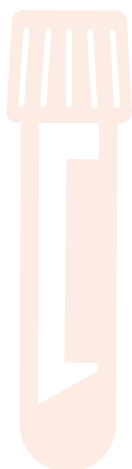



真空采血管


真空采血管概况

- 康健医疗通过了ISO13485质量管理体系认证和真空采血管CE认证，产品从原料选购到成品销售中的各个环节均实行严格的流程及标准化管控。为临床实验室提供防止血液标本分析前的变异、降低误差的高品质安全产品。
- 全自动化生产线，后贴标工艺，逐支图像检测，确保质量可靠。
- 具备良好的兼容性，能适应各种不同的生化、免疫、血液等分析仪的传送装置。
- 品种规格齐全，可按添加剂、采血量、试管规格或材质的不同来区分。
- 在以人体静脉血为标本进行的临床医学实验中，根据所要检测血液标本的对象不同，将采血管分为血清类采血管、血浆类采血管和全血类采血管。
- 可根据客户的需要灵活定制各种特殊采血量、不同功能的标签，以及不同海拔管等。
- 为代理及终端客户提供专业培训和他技术支持。

ISO13485 CE0123



全自动化生产工艺流程

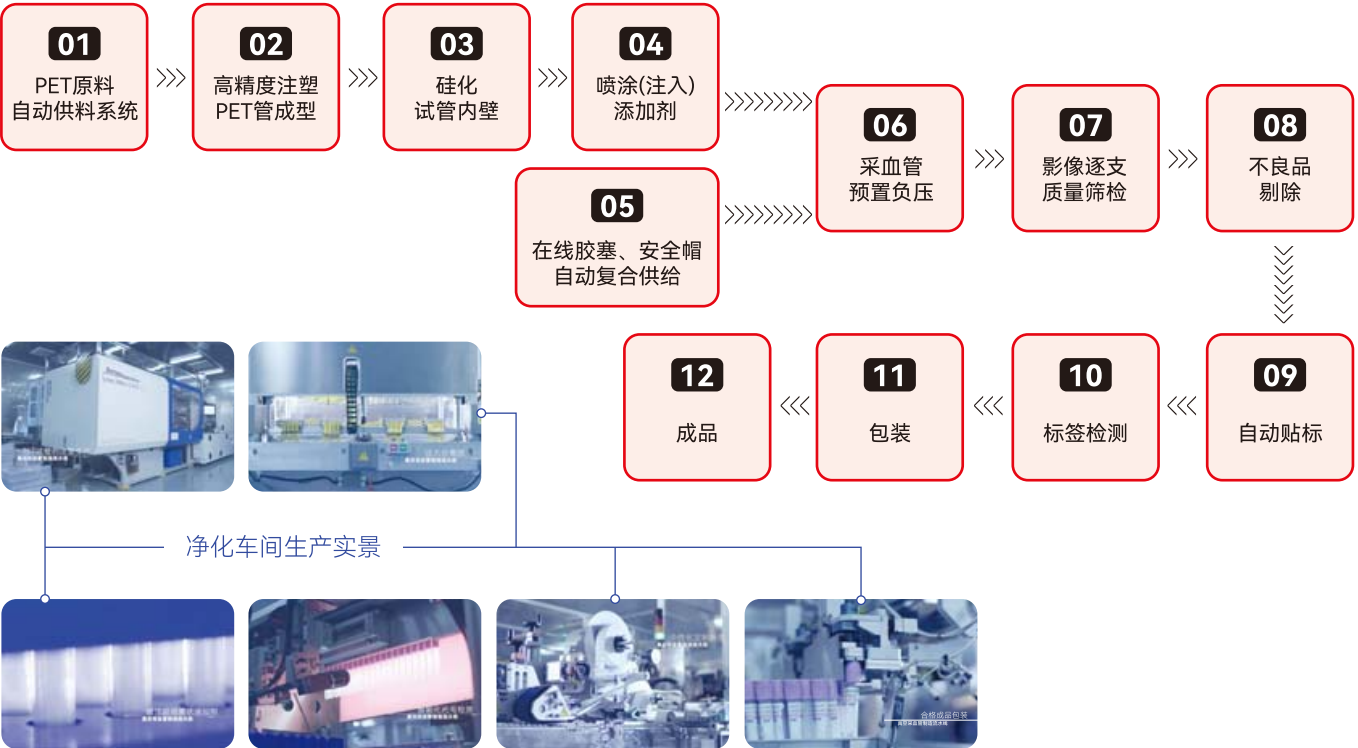



真空采血管

产品特点和优势

安全头帽



- ★ 优质胶塞，气密性好。
- ★ 落屑极少，不堵孔弹针。
- ★ 帽塞配合紧密，开合轻松。

优质管材



- ★ PET材质稳定，气密性良好。
- ★ 内壁进口试剂硅化处理表面光滑，避免细胞挂壁。
- ★ 内壁仿生膜处理，给血细胞全面保护。

高效分离胶




- ★ 采用日本积水促凝剂和分离胶。
- ★ 血清标本更原态，检测结果更精确。
- ★ 具备稳定的性质，离心绝少出现“油滴”现象。
- ★ 耐高温(55°C)和方便冷冻存储。
- ★ γ辐射灭菌对分离胶的性质影响很小。

优质添加剂



- ★ 优质的添加剂选用国际著名品牌产品。
- ★ 瑞士进口喷雾设备，计量精确业内领先。
- ★ 添加剂品种齐全、形态多样，主要使用的喷雾干燥技术，使抗凝作用均匀、温和、彻底。
- ★ 准确预设真空，保证血样与添加剂的比例精确。

贴心定制

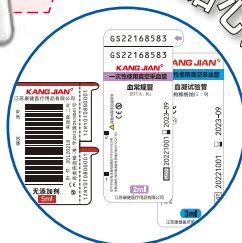

- ★ 可定制特殊采血量的采血管。
- ★ 管体可定制不同材质、特定样式和指定标识和内容的标签。



真空采血管

真空采血管分类应用

血清生化类

真空采血管	添加剂	推荐检测项目
● 无添加剂管	无	血清生化、血清免疫、输血试验、艾滋检查
● 促凝管	促凝剂	血清生化、血清免疫、电解质、药物检测、激素、艾滋检查等
● 分离胶管	分离胶+促凝剂	血清生化、免疫试验、电解质、药物检测、激素、艾滋检查等

血浆生化类

真空采血管	添加剂	推荐检测项目
● 血凝试验管	枸橼酸钠(1:9)	凝血机制(PT/APTT/血凝因子)检查、纤溶系统检测
● 血糖试验管	氟化钠+草酸盐 氟化钠+EDTA盐 氟化钠+肝素盐	主要用于血糖、糖耐量、红细胞电泳、抗碱血红蛋白、糖溶血等项目的测定
● 肝素管	肝素钠 肝素锂 肝素盐+分离胶	普通临床生化、急诊生化检查，以及部分血液流变学和酶免试验
● CPT管	枸橼酸钠+葡萄糖+分离胶 肝素盐+葡萄糖+分离胶	普通临床生化、急诊生化项目的检查
● PPT管	EDTA盐+分离胶	血浆生化、核酸等项目的检测

全血类采血管

真空采血管	添加剂	推荐检测项目
● 血常规管	EDTA盐	血液学或免疫血液学项目的检查，如血常规、血型鉴定、交叉配血等
● 血沉试验管	枸橼酸钠(1:4)	主要用于魏氏血沉法进行血细胞沉降速率的测定



真空采血管

品 名：分离胶管	管 帽 色：金黄色 ●
添加剂：分离胶+促凝剂	试管材质：PET或玻璃
采血量：2ml~8ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



用于血清生化、免疫学、药物检测等，内壁上均匀涂布促凝剂，可大大缩短血液凝固时间。由于引进的日本进口分离胶，其物理化学性质非常稳定，抗高温和辐射能力强，有效避免储运过程中分离胶分解变性。

离心后的分离胶翻转固化后形成屏障，将血清与血细胞完全分离，有效阻止两者间的物质交换，获得高品质的血清，使检测结果更加真实，同时提高血清的收集率，保持血清稳定时间超过48小时，其生化性质及化学构成不发生显著变化，可直接上机。

血液采集至管内后，立即轻力颠倒混匀6-8次，使血液与促凝剂充分混匀。静置20-25分钟，血液凝固后离心。离心转速为3500-4000转/分，离心时间5分钟。建议贮存温度4℃-25℃。



分离出高品质血清，确保精准检测

Gel&Clot Activator



真空采血管

品 名：无添加剂管	管 帽 色：红色 ●
添加剂：无	试管材质：PET或玻璃
采血量：2ml~10ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



用于医学检验中，生化学、免疫学、血清学、各种病毒检测，微量元素检测，血库检查血液标本的采集与盛装。

内壁经特殊处理，极度光滑，使血小板活性正常，凝血顺畅，防止溶血及血细胞和纤维蛋白粘附在内壁的现象，为临床检验提供足量无污染血清标本，并能较长时间维持血清的正常成分及利于血清的复检，可重复性好。

血块完全收缩时间为1.5-2小时，离心转速为3500-4000转/分，离心时间5分钟，建议贮存温度4℃—25℃。

No Additive
No Additive



真空采血管

品 名：促凝管	管 帽 色：橙色 ●
添加剂：促凝剂	试管材质：PET或玻璃
采血量：2ml~10ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



用于医学检验中生化学、免疫学检查的血液标本的采集，它具有操作温度范围广，内壁经特殊处理，极度光滑，高品质的促凝剂均匀分散在采血管内壁上，血液标本进入管内后与其充分接触，在5-8分钟内使血液完全凝固，并通过离心获得高质量的血清，解决了血细胞的凝固破裂，溶血及纤维蛋白析出问题，满足快速门诊、急诊血清生化试验。

血块完全收缩时间为20-25分钟，离心转速为3500-4000转/分，离心时间5分钟，建议贮存温度4℃-25℃。

Clot Activator



真空采血管

品 名：血凝试验管	管 帽 色：蓝色 ●
添加剂：3.2%枸橼酸钠	试管材质：PET或玻璃
公称液体容量：2ml~4ml	试管规格：13×75 / 13×75双层管



内层PP套管，血小板激活率更低，液态保持性更佳，保证抗凝剂最佳比例。



专用于迈瑞全自动凝血分析仪的微量血凝试验管(专利)，最低支持0.9mL采血量，CX系列凝血分析系统用血量降低50%。

用于凝血项目的实验：凝血酶原时间，凝血酶时间，活化部分凝血活酶时间，纤维蛋白原等。按抗凝剂与血样的比例为 1：9 设定，配比精确保障检验结果的有效性，避免误诊，由于枸橼酸钠毒性小，也用于血液保存。

采血时务必采足血量，以保证检测结果的准确性。具有双层套管的血凝管，无死腔，当进行血友病因子或第 VIII 因子、血小板功能检测，肝素治疗的监控实验时可使用该管。

PT Tube



真空采血管

品 名：肝素管	管 帽 色：绿色 军绿色  
添加剂：肝素锂或肝素钠	试管材质：PET或玻璃
采血量：2ml~10ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



Heparin Tube

Heparin Tube

用于临床血浆生化、血液流变学测定的血液标本采集，对血液成分干扰少，不影响红细胞体积，不引起溶血，具有血浆分离速度快，操作温度范围广，与血清标本指标兼容性强，激活纤溶酶和抑制凝血活酶，使纤维蛋白原和纤维蛋白之间达成动态平衡，防止产生纤维蛋白丝，血浆的大部分指标6小时内可重复检测。

肝素锂除具备肝素钠的特性，还可以用于微量元素的检测，而且对钠离子不产生影响。可按客户要求添加血浆分离胶，制备优良血浆，满足临床实验需要。

离心转速为3500-4000转/分，离心时间3分钟，建议贮存温度4℃-25℃。



真空采血管

品 名：血糖试验管	管 帽 色：灰色 ●
添加剂：氟化钠+肝素钠	试管材质：PET或玻璃
采血量：2ml~6ml	试管规格：13×75 / 13×100



用于血糖、糖耐量、红细胞电泳、抗碱血红蛋白、糖溶血和乳酸盐等项目检查的血样采集。氟化钠有效阻止血糖代谢，肝素钠解决了溶血的难题，使得血液的原始状态保持时间较长，确保了血糖72小时内检测数据恒定。

添加剂有氟化钠+肝素钠、氟化钠+EDTAK2、氟化钠+EDTANa2。

离心转速为3500-4000转/分，离心时间5分钟，建议贮存温度4℃-25℃。

Glucose Tube
Glucose Tube



真空采血管

品 名：血常规管	管 帽 色：紫色 ●
添加剂：EDTA.K2或K3或Na2	试管材质：PET或玻璃
采血量：1ml~10ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



用于临床血液学检查，交叉合血和血型鉴定等，并适合各类血细胞分析仪，对血细胞全面周到的保护，尤其对血小板的保护作用，有效阻止血小板聚集，并保护血细胞的形态和体积在较长的时间内不受影响，采用超微细均匀的喷雾设备及工艺，使添加剂能均匀分散在管壁，与血液标本充分混匀。EDTA抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的分子生物学鉴定。



管壁微米级雾滴状添加剂，与血液瞬时充分混匀。

EDTA Tube



真空采血管

品 名：核酸检测管	管 帽 色：粉色 ●
添加剂：EDTA.K2+分离胶	试管材质：PET
采血量：3ml~10ml	试管规格：13×75 / 13×100 / 16×100



PPT Tube
PPT Tube

适用于核酸检测用静脉血液标本的采集、运输和贮存，以及分析前标本处理，临床主要用于核酸(主要盘括HBV的DNA，HCV、HIV的RNA)扩增检测。此类采血管添加剂为EDTA.K2和分离胶。采用EDTA.K2不会影响核酸检测实验中Taq酶的活性，分离胶能有效消除红细胞中的血红蛋白对核酸检测实验的干扰。分离后的标本可置于-70℃留样冻存。

本品无DNA酶、RNA酶，无热原，采用辐照灭菌。



真空采血管

品 名：DNA保存管	管 帽 色：深紫 ●
添加剂：EDTA.K2+专用保护剂	试管材质：玻璃
采血量：5ml / 10ml	试管规格：13×100 / 16×100



常温下可稳定保存游离DNA(cfDNA)和循环肿瘤DNA(ctDNA)，稳定储存和运输的采血管。虽然健康人体的血浆中只有少量无细胞DNA，但血液循环中的无细胞DNA水平的增减与许多临床疾病有关。由于安全性、准确性而被接受和认可的产妇产前无创筛查即是对产妇血液中的胎儿游离DNA的检测分析，对胎儿遗传疾病做出诊断。而对于人体血液中的循环肿瘤DNA的检测分析，为肿瘤早筛创造了条件。同时使针对肿瘤的精准医疗成为可能。

血浆保存管中所含的抗凝血剂和细胞防腐剂能稳定有核血细胞，防止释放细胞基因组DNA，抑制无细胞DNA的核酸酶介导降解，有助于无细胞DNA的整体稳定。

常温下保存游离胎儿DNA(cfDNA)、循环肿瘤游离DNA (ctDNA)和循环肿瘤细胞5-14天。

cfDNA Tube



真空采血管

品 名：游离RNA保存管	管 帽 色：军绿 ●
添加剂：游离RNA保护剂	试管材质：玻璃
公称液体容量：4.5ml / 9.5ml	试管规格：13×100 / 16×100



血浆游离 RNA 保存管可直接用于稳定保存游离 RNA，管中含有细胞保护剂和RNA保护剂，能够保护血细胞不破裂，以防止胞内 RNA释放，污染胞外游离 RNA样本，同时所含的 RNA 保护剂能够保持胞外游离 RNA不被降解，轻松实现血浆游离核酸样品的采集、运输和常温储存，在常温条件(10-30℃)下可稳定保存游离RNA 至少 3 天，为血液样本的运输及储存提供了极大的便利。游离 RNA 保存管中血液样本可按大多数商业化试剂盒进行游离 RNA 提取，提取后的游离 RNA 可应用于定量 RT-PCR、微矩阵、RNA 定位、CDNA 文库的建立、基因表达和其他种类的下游应用研究的基础。

本品无 DNA 酶、RNA 酶，无热原。

cfRNA Tube

cfRNA Tube



真空采血管

品 名：全血RNA保存管	管 帽 色：绿色 
添加剂：RNA保护剂	试管材质：玻璃
公称液体容量：4ml / 9.5ml	试管规格：13×100 / 16×100



全血 RNA 保存管中含有细胞裂解剂和 RNA 保护剂，能够将血细胞裂解，释放出胞内 RNA，并在保护剂的作用下将 RNA 保护起来，以用于后续检测。

本品无 DNA 酶、RNA 酶，无热原。

RNA Tube

RNA Tube



真空采血管

品 名：CTAD管	管 帽 色：绿色 ●
添加剂：CTAD保存液	试管材质：玻璃
公称液体容量：5.5ml / 9.5ml	试管规格：13×100 / 16×100



CTAD是枸橼酸(citricacid)、茶碱(theophylline)、腺苷(adenosine)和双嘧达莫(dipyridamole)的缩写。CTAD溶液可防止血小板意外激活，采血后血小板很少活化，且保存时间可超过15小时。因此常应用于血栓弹力图、凝血检测及血小板抗体检测中，相比于传统的血凝管，其检测结果更加稳定。

CTAD Tube

CTAD Tube



真空采血管

品 名：血沉管	管 帽 色：黑色 ●
添加剂：3.8%枸橼酸钠	试管材质：PET或玻璃
公称液体容量：1.6ml / 2ml / 3ml	试管规格：13×75 / 8×120



Ø8×120的管体适用于多种品牌全自动血沉仪配套使用。由于采血量少，管内负压较小，抽血时间相对稍长，应耐心等待直至血液停止流入采血管后混匀6-8次，使抗凝剂和血液充分混匀。不恰当的混匀会造成溶血、凝血或血泡，影响检测结果。

Ø13×75管体的血沉试验管专用于魏氏血沉法进行红细胞沉降速率的测定时血样的采集和抗凝。

ESR Tube

ESR Tube



真空采血管

规格参数表


规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 分离胶-促凝管	KJ020AS	分离胶+促凝剂	Ø13×75mm	2ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	安全帽：黄色 采血后立即轻力颠倒 混匀6-8次后静置30 分钟离心。
	KJ030AS	分离胶+促凝剂	Ø13×75mm	3ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	
	KJ040AS	分离胶+促凝剂	Ø13×75mm	4ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	
	KJ0301AS	分离胶+促凝剂	Ø13×100mm	3ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0401AS	分离胶+促凝剂	Ø13×100mm	4ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0501AS	分离胶+促凝剂	Ø13×100mm	5ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0601AS	分离胶+促凝剂	Ø16×100mm	6ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
	KJ0801AS	分离胶+促凝剂	Ø16×100mm	8ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 无添加剂管	KJ030A	无	Ø13×75mm	3ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	安全帽：红色 采血后静置60分钟 离心。
	KJ040A	无	Ø13×75mm	4ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	
	KJ0501A	无	Ø13×100mm	5ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0601A	无	Ø13×100mm	6ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0701A	无	Ø13×100mm	7ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0801A	无	Ø16×100mm	8ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
	KJ0901A	无	Ø16×100mm	9ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 促凝管	KJ030Z	促凝剂	Ø13×75mm	3ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	安全帽：橙色 采血后立即轻力颠倒 混匀6-8次，静置不 少于25分钟后离心。
	KJ040Z	促凝剂	Ø13×75mm	4ml	玻璃 PET	100支×18盘 100支×18盘	
	KJ0501Z	促凝剂	Ø13×100mm	5ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0601Z	促凝剂	Ø13×100mm	6ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×18盘	
	KJ0701Z	促凝剂	Ø16×100mm	7ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
	KJ0801Z	促凝剂	Ø16×100mm	8ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
	KJ0901Z	促凝剂	Ø16×100mm	9ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	
	KJ1002Z	促凝剂	Ø16×100mm	10ml	玻璃 PET	100支×12盘 100支×12盘	

* 其它未列出的规格、型号均可定制



真空采血管

规格参数表

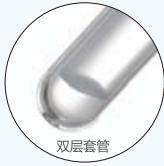规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 血常规管	KJ010K2E	EDTA.K2	Ø13×75mm	1ml	玻璃	100支×18盘	安全帽：紫色 采血后立即轻力颠倒 混匀6-8次。试验前 再次轻力颠倒混匀。
	KJ020K2E	EDTA.K2	Ø13×75mm	2ml	PET	100支×18盘	
	KJ030K2E	EDTA.K2	Ø13×75mm	3ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ040K2E	EDTA.K2	Ø13×75mm	4ml	PET	100支×18盘	
	KJ0501K2E	EDTA.K2	Ø13×100mm	5ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ0601K2E	EDTA.K2	Ø13×100mm	6ml	PET	100支×18盘	
	KJ0701K2E	EDTA.K2	Ø13×100mm	7ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ1002K2E	EDTA.K2	Ø16×100mm	10ml	PET	100支×12盘	
	KJ010K3E	EDTA.K3	Ø13×75mm	1ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ020K3E	EDTA.K3	Ø13×75mm	2ml	PET	100支×18盘	
	KJ030K3E	EDTA.K3	Ø13×75mm	3ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ040K3E	EDTA.K3	Ø13×75mm	4ml	PET	100支×18盘	
	KJ0501K3E	EDTA.K3	Ø13×100mm	5ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ0601K3E	EDTA.K3	Ø13×100mm	6ml	PET	100支×18盘	
	KJ0701K3E	EDTA.K3	Ø13×100mm	7ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ1002K3E	EDTA.K3	Ø16×100mm	10ml	PET	100支×12盘	
	KJ020N2E	EDTA.Na2	Ø13×75mm	2ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ0501N2E	EDTA.Na2	Ø13×100mm	5ml	PET	100支×18盘	
 血凝试验管	KJ018NC	3.2%枸橼酸钠	Ø13×75mm	2ml	玻璃	100支×18盘	 双层套管
	KJ027NC	3.2%枸橼酸钠	Ø13×75mm	3ml	PET	100支×18盘	
	KJ036NC	3.2%枸橼酸钠	Ø13×75mm	4ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ018NCD	3.2%枸橼酸钠	Ø13×75mm	2ml	外管：PET	100支×18盘	
	KJ027NCD	3.2%枸橼酸钠	双层套管	3ml	内套管：PP	100支×18盘	 采血后立即轻力颠倒 混匀6-8次后离心。
	KJ010NCD	3.2%枸橼酸钠	Ø13×75mm 双层套管 (迈瑞专利)	0.9ml-1ml	外管：PET 内套管：PP	100支×18盘	
							用于迈瑞CX系列全自 动凝血分析仪和 MT8000C智慧凝血流 水线。



真空采血管

规格参数表

 规格	 REF 目录编号	 添加剂	 试管规格	 采血量	 MAT 试管材质	 支/箱	 备注说明
 肝素管	KJ030SH	肝素钠	Ø13×75mm	3ml	玻璃	100支×18盘	安全帽：绿色或军绿色 采血后立即轻力颠倒混匀6-8次后离心。
	KJ040SH	肝素钠	Ø13×75mm	4ml	PET	100支×18盘	
	KJ0501SH	肝素钠	Ø13×100mm	5ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ0701SH	肝素钠	Ø13×100mm	7ml	PET	100支×18盘	
	KJ030LH	肝素锂	Ø13×75mm	3ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ040LH	肝素锂	Ø13×75mm	4ml	PET	100支×18盘	
	KJ0501LH	肝素锂	Ø13×100mm	5ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ0701LH	肝素锂	Ø13×100mm	7ml	PET	100支×18盘	
 规格	 REF 目录编号	 添加剂	 试管规格	 采血量	 MAT 试管材质	 支/箱	 备注说明
 血糖试验管	KJ020FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×75mm	2ml	玻璃	100支×18盘	安全帽：灰色 采血后立即轻力颠倒混匀6-8次后离心。
	KJ030FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×75mm	3ml	PET	100支×18盘	
	KJ040FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×75mm	4ml	玻璃	100支×18盘	
	KJ0301FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×100mm	3ml	PET	100支×12盘	
	KJ0401FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×100mm	4ml	玻璃	100支×12盘	
	KJ0501FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×100mm	5ml	PET	100支×18盘	
	KJ0601FX	氟化钠+肝素钠	Ø13×100mm	6ml	玻璃	100支×12盘	
					PET	100支×18盘	
 规格	 REF 目录编号	 添加剂	 试管规格	 公称液体容量	 MAT 试管材质	 支/箱	 备注说明
 血沉管	KJ0128NC	3.8%枸橼酸钠	Ø8×120mm	1.6ml	玻璃	100支×12盘	安全帽：黑色 采血后立即轻力颠倒混匀6-8次。试验前再次轻力颠倒混匀。
	KJ016NC	3.8%枸橼酸钠	Ø13×75mm	2ml	玻璃	100支×18盘	
					PET	100支×18盘	
	KJ024NC	3.8%枸橼酸钠	Ø13×75mm	3ml	玻璃	100支×18盘	
					PET	100支×18盘	

* 其它未列出的规格、型号均可定制



真空采血管

规格参数表

规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 核酸检测管	KJ030GK	EDTA+分离胶	Ø13×75mm	3ml	PET	100支×18盘	安全帽：紫色或粉色 采血后立即轻力颠倒混匀6-8次后离心。
	KJ0501GK	EDTA+分离胶	Ø13×100mm	5ml	PET	100支×18盘	
	KJ0601GK	EDTA+分离胶	Ø13×100mm	6ml	PET	100支×18盘	
	KJ0801GK	EDTA+分离胶	Ø16×100mm	8ml	PET	100支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 DNA保存管	KJ0501DNA	EDTA+专用保护剂	Ø13×100mm	5ml	玻璃	50支×16盘	安全帽：紫色或黄色 采血后立即轻力颠倒混匀
	KJ1002DNA	EDTA+专用保护剂	Ø16×100mm	10ml	玻璃	50支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 游离RNA保存管	KJ0451CFRNa	游离RNA保护剂	Ø13×100mm	4.5ml	玻璃	50支×16盘	安全帽：军绿 采血后立即轻力颠倒混匀
	KJ0952CFRNa	游离RNA保护剂	Ø16×100mm	9.5ml	玻璃	50支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 全血RNA保存管	KJ0401RNA	RNA保护剂	Ø13×100mm	4ml	玻璃	50支×16盘	安全帽：绿色 采血后立即轻力颠倒混匀
	KJ0952RNA	RNA保护剂	Ø16×100mm	9.5ml	玻璃	50支×12盘	
规格	REF 目录编号	添加剂	试管规格	采血量	MAT 试管材质	支/箱	备注说明
 CTAD管	KJ0551CTAD	CTAD保存液	Ø13×100mm	5.5ml	玻璃	50支×16盘	安全帽：绿色 采血后立即轻力颠倒混匀
	KJ0952CTAD	CTAD保存液	Ø16×100mm	9.5ml	玻璃	50支×12盘	

* 其它未列出的规格、型号均可定制



一次性使用静脉采血针

品 名：一次性使用静脉采血针	色 标：八色选择
规 格：18~25G	型 号：蝶翼型/笔杆型

- ◎ 与真空采血管配套使用的一次性静脉采血针按连接方式不同可分为蝶翼型采血针和笔杆型采血针。
- ◎ 静脉穿刺针粗细规格有0.5~1.2mm，18G~23G可选。
- ◎ 康健医疗的蝶翼型采血针由塑胶护套，瓶塞穿刺针、针座、软管、针柄、静脉穿刺针，静脉穿刺针保护套等组件组成。
- ◎ 本品使用医用高分子材料生产，经环氧乙烷灭菌，无毒、无菌、无热原。
- ◎ 使用前，请检查静脉穿刺针针尖，如有倒钩、毛刺、变形等缺陷不得使用。
- ◎ 蝶翼型采血针和笔杆型采血针均可配合持针器使用。



蝶翼型采血针



笔杆型采血针



REF 目录编号	型号	规格	支/盒	支/箱	备注说明
KJ122G-1	蝶翼型采血针	单翼型，不可拆	100	5000	采血管穿刺针端不可拆卸
KJ122G-2		单翼型，可拆换	100	5000	采血管穿刺针端可转换接头
KJ122G-3		双翼型，安全型，不可拆	100	2000	采血管穿刺针端不可拆卸，采血针安全保护
KJ831	笔杆型采血针	20G	100	2000	黄色
		21G	100	2000	绿色
		22G	100	2000	黑色
		23G	100	2000	蓝色

附：静脉穿刺针规格对照表：

色 标	橙色	中紫色	蓝色	黑色	深绿色	黄色	奶油色	粉红色
静脉穿刺针规格(mm)	0.5×20 (25G)	0.55×20 (24G)	0.6×25 (23G)	0.7×25 (22G)	0.8×27 (21G)	0.9×28 (20G)	1.1×28 (19G)	1.2×28 (18G)



静脉采血配套附件

持针器



持针器为一次性静脉采血辅助用品，用于连接静脉采血针与真空采血管，为静脉穿刺提供稳定支撑和安全保障。

- ◎ 将采血针牢固固定，防止穿刺时晃动，提高成功率，减少患者痛苦。
- ◎ 提供舒适握持，便于单手操作，减轻医护疲劳。
- ◎ 可快速更换采血管，提高多管采血效率。
- ◎ 保护医护人员避免被胶塞穿刺针刺伤，降低职业暴露风险。
- ◎ 安全型持针器仅用于笔杆型采血针，增加了静脉穿刺端防刺伤保护设计，大大减少采血完成后医护人员的被刺风险。

REF	目录 编号	MAT	材质	只/盒(袋)	只/箱	i	备注说明
KJ832-1		PP		100	2000		短款
KJ832-2		PP		100	2000		长款
KJ832-3		PP		100	2000		安全型

压脉带



出血时间测定器



REF	目录 编号	型号	只/盒	只/箱	产品编号
KJ833		通用型	1	600	0204-101
KJ119-1		成人型	20	1000	0205-101
KJ119-2		儿童型	20	1000	0205-102



真空采血管采血方法


建议采血顺序




特别提示：采血完成后请立即将采血管 180° 轻力颠倒混匀 6-8 次（无添加剂管除外），使血液标本与添加剂充分混匀，从而保证最终检验数据的准确可靠。注意禁止剧烈摇动采血管，防止造成血细胞破裂，避免溶血事故的发生。

正确的采血步骤


笔杆型采血针采血方法

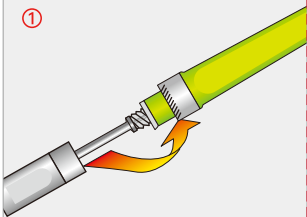


① 选择适宜的笔式双向采血针，双手握住笔式针两端的针套朝反方向拧开，去除一端白色针套（带胶套一端）。

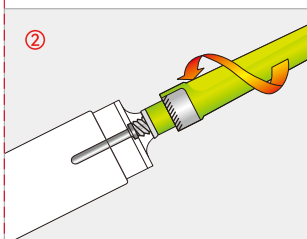


② 将去除头套的穿刺针端按顺时针方向拧入持针器内。

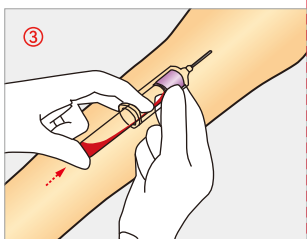

③ 去除彩色端针，选择粗而直的静脉实施静脉穿刺；将真空采血管置入持针器中，食指和中指卡住套筒持针器的凸缘，拇指反方向施加压力于试管底让穿刺针刺穿采血管丁基胶塞。

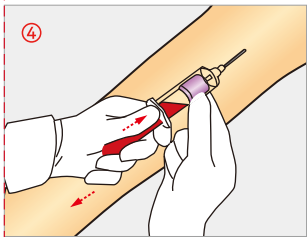


④ 当管内真空耗尽，血流便停止，此时左手拇指和中指捏住试管下部，用食指维持持针器的凸缘，使管塞脱离胶塞穿刺针头，将试管从持针器内取出。

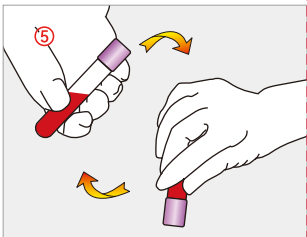


⑤ 拿取已采集完毕的采血管摇匀，摇匀方式为轻力颠倒180度6-8次。注意：切勿剧烈摇动，否则会造成血液样本溶血！


蝶翼型采血针采血方法

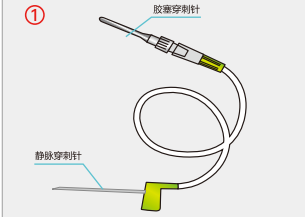


① 使用前理顺连接软管，避免打结缠绕。

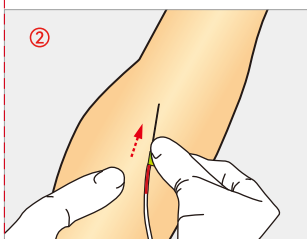


② 选择粗而直的主静脉，使用静脉穿刺针进行静脉穿刺，穿刺成功后可见软管内有少量回血。

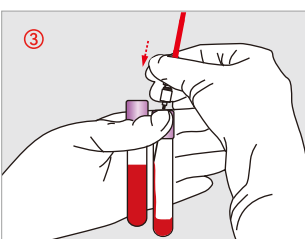

③ 将采血针管胶塞穿刺针小角度刺穿采血管丁基胶塞，让血液沿管壁缓缓流入管内，防止血样直接冲击管底内引起血细胞破裂而发生溶血事故。

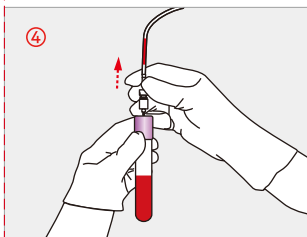

④ 最后一管采至距额定采血量约0.5ml时，拔静脉穿刺针，让软管内的血液流入采血管，再拔出胶塞穿刺针。

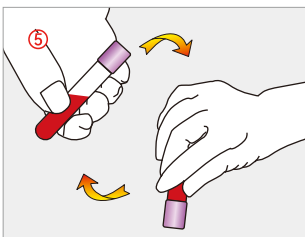

⑤ 拿取已采集完毕的采血管摇匀，摇匀方式为轻力颠倒180度6-8次。注意：切勿剧烈摇动，否则会造成血液样本溶血！



血沉架

血沉检测架

产品概况

- ◎ 与魏氏血沉法相比，有较好兼容性。
- ◎ 从标本采集到检测全过程，均为密闭式操作，安全可靠，无生物污染
- ◎ 设计有水平校准装置，保证了血沉架水平无倾斜。
- ◎ 10个标本操作通道，可同时检测。
- ◎ 30分钟出结果。读数简便、快捷。
- ◎ 底板为不锈钢材质，上平面铺设具有缓冲功能的硅胶垫，使血沉管放置到底板上不会产生噪音或破损形成污染。

使用方法

- ◎ 使用 Ø8×120mm 真空血沉管按标准要求采集静脉血标本。
- ◎ 对血液标本立即进行 180 度颠倒 6 至 8 次混匀，使抗凝剂与血液充分混匀。
- ◎ 将装有标本的血沉管垂直固定在血沉架上，记录好起始时间和相对应的编号，在室温保持 20℃ 左右的静置状态下，30 分钟后读取红细胞沉降的毫米数。
- ◎ 具体读数方法为：沉降到规定的时间，将血沉管内血浆凹面对齐血沉架上的零刻度线并固定好，然后读出红细胞上端对齐血沉架上刻度线的数值。



KJ828

水平校准装置

观测方式示意图

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观 * 尺寸	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ828	ABS	10孔	280×80×110mm	1	20	血沉检测架 *	179-0013

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
* 血沉检测架配合真空采血管(REF:KJ0128NC)使用，非一次性使用耗材，经清洁消毒后可重复使用。

魏氏血沉架与魏氏血沉检测管

产品概况

- ◎ KJ822魏氏血沉架与A型魏氏血沉检测管KJ823、Ø13×75的ESR真空采血管配合使用。
- ◎ KJ823-2魏氏血沉架配合B型魏氏血沉检测管组件KJ823-1、KJ823-3使用。
- ◎ 魏氏血沉检测管采用高透明的聚苯乙烯PS材料制成，清晰的刻度易于医务人员准确读取检测数值。

使用方法

- ① 按相关规范流程进行采血后(A型使用Ø13×75的ESR真空采血管采血，B型使用注射器采血后注入KJ823-3盛血管内)，轻缓颠倒混匀血样 8~10次后(避免产生气泡)，将试管(A型为ESR真空采血管，B型为KJ823-3盛血管)竖直放置在血沉架中。
- ② 取魏氏血沉检测管，将其缓缓插入管内(A型需移除真空采血管的管帽)，确保血沉检测管底端浸入血样。
- ③ 继续将魏氏血沉检测管管体向下缓缓竖直压入管内，当血样达到0刻度线处时停止按压。
- ④ 室温条件静置1小时后读取红细胞上层血浆高度的毫米数并按要求报告。



A型

KJ823

KJ822



B型

KJ823-2

KJ823-1

KJ823-3



血沉架

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观* 尺寸	只/袋*	只/盒	只/箱	备注说明*	产品编码
KJ822	PC	10孔	检测架: 183×57×150mm	1	-	30	A型 魏氏血沉检测组件	179-0014
KJ823	PS		检测管: Ø4.5×230mm	50	200	4000		179-2300
KJ823-2	PS	10孔	检测架: 185×45×42mm	1	-	30		179-0015
KJ823-1	PS		检测管: Ø7×220mm	50	200	4000	B型 魏氏血沉检测组件	179-2400
KJ823-3	LDPE		盛血管: Ø14×58mm	100	400	4000		179-2410

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。* 魏氏血沉检测架非一次性使用耗材，经清洁消毒后可重复使用。

末梢采血管

KJ001-1系列末梢采血管

产品概况

随着实验室自动化程度越来越高，信息化也随之提升，条码扫描，标本上机，标本检验后保存都是目前实验室常规在做的项目。直接用于血液分析仪检测所匹配的新型微量末梢采血管在结构及功能上特点明显，优势显著，能最大限度满足血液标本自动化检验需求。

产品优势

- ◎ 圆顺的铲形管口设计，更适合微量血液标本的顺畅采集。选择合适的可穿刺管帽配合不同样式的管体，灵活适配不同自动血液分析仪。
- ◎ 条形码管理，条形码贴好后留有足够的空间可随时观察采血量，并更好地应用于信息化数据系统的链接。
- ◎ U形或V形血液收集底部，方便微量血液标本的收集和吸取。
- ◎ 加长的管体专为血液分析仪自动检测量身定制，可置于试管架上，更加易于实验室标本管理。
- ◎ 可以使用的血液分析仪：所有的手动进样仪器，包括迈瑞 5100、5300、5800、6800，光电 7222、8222、希森美康 Xs500i、Xs800i、1800、2100，在 Xs1000i、900i、XNB2、XNB4 可直接上机操作。
- ◎ 适用全自动CRP仪器：迈瑞医疗、深圳帝迈、希森美康、深圳汇松，深圳国赛、上海奥普、深圳普门等。



配合迈瑞BC-7500系列血液细胞分析仪使用

II 型帽

带十字切口的可穿刺丁基胶塞管帽

KJ001-B

(A型管+II型帽)

III 型帽

双色注塑的可穿刺式管帽，材质：PE+TPE

KJ001-C

(A型管+III型帽)

III 型帽

双色注塑的可穿刺式管帽，材质：PE+TPE

KJ001-D

(C型管+III型帽)

IV 型帽

普通管帽，不可穿刺

KJ001-E

(A型管+IV型帽)

REF 目录编号	添加剂	采血量	支/盘	支/箱	备注说明	产品编码
KJ001-B	EDTA K ₂	0.25ml / 0.5ml	100	1800	1、多种管帽+管体组合，适应自动分析仪实验需求。 2、可定制不同添加剂、标签和管帽颜色。 3、可选： STERILE EQ 或 STERILE R 或不灭菌。	041-0243
KJ001-C			100	1800		041-0248
KJ001-D			100	1800		041-0245
KJ001-E			100	3000		041-0246



末梢采血管

KJ001系列末梢采血管

- ◎ 具有人性化设计，便于安全运送，多齿状凸块双向开启结构，操作轻松愉悦，安全有效地防止血标本外溅。
- ◎ 安全帽颜色标记与国际标准统一，易于识别。
- ◎ 管口设计有凸起边缘，易于将血标本铲入管内，简便快捷，清晰的刻度线，可以直观采血容量。
- ◎ 内壁经特殊工艺处理，表面光滑血细胞不挂壁，采用细微均匀的添加剂喷雾工艺，使血液在下滑过程中能充分接触抗凝剂，彻底抗凝，确保检测结果准确。
- ◎ 可按客户要求预制条形码标贴。
- ◎ 可加增高棒或试管来实现标本直接上机操作，无需标本转移。
- ◎ 根据客户的需要，产品可环氧乙烷或辐射灭菌，实现无菌检测。
- ◎ 可适用于各类人群血标本的采集。



采血图示



KJ001



KJ001-2

REF	目录编号	添加剂	采血量	支/袋	支/箱	支/盘	支/箱	备注说明	产品编码
KJ001		EDTA.K ₂	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000	可选: ☐ STERILE EO 或 ☐ STERILE R 或无灭菌方式	041-0221
		肝素锂	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		041-0721
		无	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		041-0421
		分离胶	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		041-0121
KJ001-2		EDTA.K ₂	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000	V型尖底	041-0222

KJ002系列末梢采血管

- ◎ 胶塞管帽中央十字切口，方便采血毛细管插入，采血完毕后拔出毛细管，十字切口自动封闭，有效防止血标本渗漏，保证运送安全。
- ◎ 采血毛细管及贮血管内壁都经过特殊工艺处理，血液标本经毛细管管口自动流入贮血管管底，不会挂壁和损伤血细胞。
- ◎ 添加剂均匀喷雾在毛细管及贮血管内壁，非常易于血标本抗凝，避免微凝血的产生，确保检验结果的精确性。
- ◎ 所有仪器的进样针都可以从管帽顶端中央十字切口插入，自动进样，整个检验流程无需开盖操作，安全科学。

微量血样采集漏斗：

主要用于配合 KJ002 采血管转移血样时使用，用于末梢血的提取，并允许样品血液转移到第二管。在使用漏斗时无需打开硅胶帽塞即可完成。移除漏斗后，微量采血管再次密封保存或自动分析仪处理。



采血图示



KJ002



KJ205-2

使用图示



插入漏斗



漏斗采血



末梢采血管

REF 目录编号	添加剂	采血量	支/袋	支/箱	支/盘	支/箱	备注说明	产品编码
KJ002	EDTA.K2	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000	可选: STERILE EG 或 STERILE R 或无灭菌方式	042-0221
	肝素锂	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		042-0721
	无	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		042-0421
	分离胶	0.25ml或0.5ml	500	6000	100	3000		042-0121
KJ205-2	-	-	1000	20000	-	-	微量采血漏斗, 配合采血使用	046-0001

KJ003 末梢采血管

独特的铲口式设计, 易于末梢血迅速流入管内, 安全快捷。锥形底适用于微量血标本的收集。内壁硅胶处理, 细微均匀的抗凝剂喷雾工艺确保了良好的抗凝效果。



REF 目录编号	添加剂	采血量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ003	EDTA.K2	0.2ml或0.5ml	1000	10000	铲口式微量抗凝管	043-0211
KJ003-1	EDTA.K2	0.2ml或0.5ml	1000	10000	本品较 KJ003 管体加长, 管底 V 型底部加深, 方便微量血液的收集。管身可定制条形码标签。	043-0212

微量抗凝管

选用进口优质抗凝剂, 采用细微均匀的喷雾工艺, 采集的血液在滑落过程中能充分接触抗凝剂, 无需顾虑有微凝现象发生, 保证检测结果准确可靠。该产品有较高性价比, 淡蓝色管体, 区别于普通离心管。



REF 目录编号	添加剂	容量	只/袋	只/箱	备注说明
KJ201	EDTA.K2 / K3 (喷雾型)	0.5mL	2000	20000	淡蓝色管体 可定制其它添加剂, 如肝素锂
KJ202	EDTA.K2 / K3 (喷雾型)	1.5mL	1000	10000	
KJ202-1	EDTA.K3 (喷雾型)	2mL	1000	10000	

末梢采血针

REF 目录编号	只/盘	只/箱	备注说明
KJ205	50	20000	末梢采血针
KJ205-1	50	2000	无痛末梢采血针







一次性使用微量采血吸管

概况与特点


- ◎ 本品通常用于对血液的现场快速检验（即 POCT 检验，是指在病号身边进行的临床检测及床边检测，通常不一定是临床检验师来进行。在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。），用于定量吸取微量血液并进行稀释后，再进行定量滴加试验而开发的一款产品。
- ◎ 一次性使用微量采血吸管由吸滴管、管帽和含有预置液（可定制容量）的稀释管组成。
- ◎ 吸滴管使用医用高透明 PS 原料采用精密模具注塑而成，产品挺直无弯曲变形，内管壁光滑，具有较高的品质和良好的精准性。使用时虹吸速度快（约 0.02 秒），方便移液，操作简便。
- ◎ 根据客户的需要，可选择取吸滴量为 5 μ L、7.5 μ L、10 μ L、20 μ L 等不同规格的吸滴管，并可选择 A、C、D 三种型号之一的管帽配合稀释管使用。
- ◎ 本品在洁净环境下生产，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无内毒素。

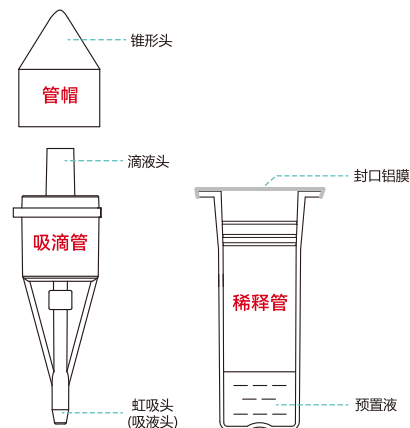


使用图解

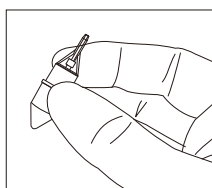


① 取出带帽吸滴管。

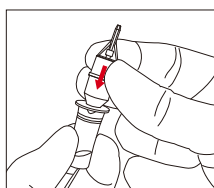


② 用管帽锥形端(若为非锥形管帽，可使用其它干净器具)将稀释管封口铝膜完全戳破后待用。

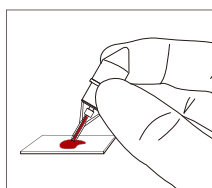


③ 使用吸滴管的虹吸头接触需要采集的血液样本。在液体表面张力的作用下，样本迅速吸入毛细管内。

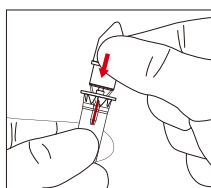

④ 取戳破铝膜封口的稀释管，将吸滴管插入稀释管内，并下按，使吸滴管与稀释管充分密封，防止管内液体样本泄漏。

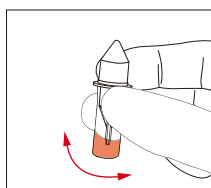

⑤ 混匀管内液体样本：充分摇动使血液样本与稀释管内的预置液充分混匀。

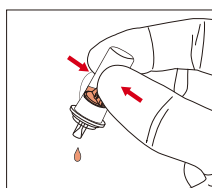

⑥ 移除管帽，轻挤管壁，让处理后的样本液从滴液头自然滴出，试验。用完可盖上管帽保存，避免样本污染。



REF 目录编号	MAT 材质	滴量	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ240	PS	5 μ L	2000	20000	可适配A或C型管帽	082-137
KJ240-1	PS	10 μ L	2000	20000	可适配A或C型管帽	082-138
KJ240-2	PS	7.5 μ L	2000	20000	可适配A或C型管帽	082-139
KJ240-3	PS	10 μ L	2000	20000	可适配A或C型管帽	082-140
KJ240-4	PS	5 μ L	2000	20000	可适配D型管帽	082-141
KJ240-5	PS	10 μ L	2000	20000	可适配D型管帽	082-142
KJ240-6	PS	20 μ L(双滴管)	1000	10000	可适配D型管帽	082-143



标本封存冷藏盒

产品介绍

- ◎ 为满足实验室安全和 ISO15189 要求，我公司特推出用于医学实验室对分析后装载血液标本的采血管进行密封保存的冷藏盒产品系列，它让血液标本后处理工作更加妥善安全、轻松便捷，是实验室安全和质量控制的理想选择。
- ◎ 本产品系列根据密封方式不同，分为硅胶垫密封、泡棉胶垫密封和安全帽密封三类。
- ◎ 每类均有 6 种色盒（红、橙、黄、绿、蓝、紫），为不同科室、不同检验项目、不同日期准备了不同颜色的冷藏盒。
- ◎ 根据所存放试管大小的不同，每类均有 Ø13×75 和 Ø13×100 两种规格。
- ◎ 为防范非常规标签（如：多层标贴、翘起或皱折）和管径偏大的采血管给操作者带来不便，特推出特殊结构的冷藏盒。

结构与功能介绍



- ① 轻压盒盖，自动扣紧密封。开启只需轻轻按压锁扣，操作简易愉悦。
- ② 拆分设计，又可作为试管架使用。
- ③ 自带 1-100 数字编号，方便您对标本对号入座，快速实现标本查找定位。
- ④ 卡槽及色标卡，可手写标注相关信息。
- ⑤ 隐藏式提手设计，简洁美观、移动方便。
- ⑥ 为盒体多层叠放设计了定位槽骨，使标本盒多层垒高不会滑落，稳固可靠。
- ⑦ 针对采血管贴标不规整（如：多层贴标翘标或皱折标等），以及 Ø14mm 以内的大口径采血管可轻松取放。
- ⑧ 适用于贮存带安全帽的采血管。

产品规格分类

1、硅胶垫密封式冷藏盒

- ◎ 硅胶垫密封冷藏盒适用于贮存无安全帽的采血管。
- ◎ 硅胶垫选用优质原料生产，保证其物理和化学性质稳定，柔韧且不易变形，合上盒盖后与试管口结合紧密。
- ◎ 硅胶垫的设计使标本与标本之间、标本与外界相隔离，避免血液标本在储存期发生交叉污染或泄漏，确保生物安全。
- ◎ 使用前请注意检查硅胶垫的平整面朝外，否则影响密封效果。

2、泡棉胶垫密封式冷藏盒

- ◎ 采用泡棉胶垫密封方式的目的是：解决了血液标本废弃处理过程中可能出现血液污染的难题，使废弃操作更为方便。
- ◎ 泡棉胶垫密封式冷藏盒适用于贮存无安全帽的采血管。
- ◎ 胶垫粘性强，合上盒盖后与试管口粘合紧密牢靠：也可揭开泡棉胶垫，取出所需采血管，再进行二次粘贴。

REF	目录 编号	外观 尺寸	适用 试管	备注说明	产品编码
KJ834		200×180×95mm	Ø13×100mm（去帽或带帽）	均配有：硅胶垫、泡棉胶垫和色标卡	06-2001
KJ834-1		200×180×85mm	Ø13×75mm（去帽）	六色可选：[Color Swatches]	06-1001
KJ834-2		200×180×85mm	Ø13×75mm（带帽）		06-1101





利器盒

- ◎ 利器盒是一种一次性使用医用收纳盒，用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
- ◎ 本品采用聚丙烯PP原料生产，不含聚氯乙烯PVC，采用高温热处置技术处置损伤性废物时尽可能减少对环境的污染。
- ◎ 盒体坚硬、封闭且防刺穿，具有方便、安全、无毒，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧等特点。封闭后无法在不破坏的情况下打开。
- ◎ 方便采血后对一次性使用静脉采血针或输血器等接触血液的医用器材的安全处理。
- ◎ 利器盒整体颜色为黄色，颜色符合国标要求。侧面印有“警告！损伤性废物”标识。
- ◎ 装有锐器的利器盒，按国家要求，在24小时内必须由医疗废物处置单位回收，在48小时内彻底安全焚化。



使用图例



REF 目录编号	MAT 材质	容积	只/箱	备注说明	产品编码
KJ825	PP	1L	100	圆桶型利器盒	05-0111
KJ825-1	PP	2L	200		05-0211
KJ826	PP	3L	60		05-0311
KJ826-1	PP	5L	80		05-0511
KJ826-5	PP	15L	-		05-1511
KJ827-1	PP	3L	60	方体型利器盒	05-0321
KJ827-2	PP	5L	40		05-0521
KJ827-3	PP	7L	30		05-0721
KJ827-4	PP	13L	30		05-1321

02

Specimen Container



标本杯系列

→ 标本杯(安全防漏型)	33
→ 尿液标本杯	34-35
→ 尿液标本采集器	36-37
→ 尿液DNA样本保存管	38
→ 粪便标本杯	39-40
→ 粪便标本采集保存管	41
→ 粪便DNA样本保存管	42
→ 痰标本杯	43
→ 唾液DNA样本采集器	44-45





标本杯(安全防漏型)

产品介绍

- 康健医疗标本杯材质为医用级原生PP，耐高温不变形。不同容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- 专为安全可靠地收集和运输生物标本而设计，有效防止标本的干燥和泄漏。如尿液、粪便、唾液、精液、试剂、防腐剂等需要密封保存的样本。
- 本品自带安全卡扣，当杯盖与杯体拧紧时，能够发出咔哒一声旋紧提示音，具有安全防漏特点的同时避免过度旋紧导致滑丝的现象发生。
- 注塑的杯体容量刻度清晰易读，三组刻度平均分布在杯身四周，方便实验人员快速读取而无需旋转杯身。
- 密封性能好，安全性高，防泄漏污染，便于保存和运送。
- 灭菌方式：EO灭菌或辐射灭菌。



规格参数

REF 目录编号	刻度容量	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	产品编码
KJ532-1	120mL	PP	Ø53×82mm	EO或辐射	25	250	075-12001
KJ532-2	80mL	PP	Ø53×68mm		50	400	075-08001
KJ532-3	60mL	PP	Ø44×61mm		40	600	075-06001
KJ532-4	40mL	PP	Ø44×50mm		20	800	075-04001
KJ532-5	20mL	PP	Ø30×50mm		50	800	075-02001
KJ532-6	250mL	PP	Ø83×80mm		-	100	075-25001
KJ532-7	500mL	PP	Ø83×110mm		-	50	075-50001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液标本杯

产品介绍

- ◎ 尿液标本杯(量杯)主要材质为医疗级PP或PS，PP标本杯耐高温121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- ◎ 杯体容量刻度清晰易读，大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
- ◎ 密封性能好，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
- ◎ 同时，良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
- ◎ 根据用途可定制无DNA酶、无RNA酶、无热原的产品，并可定制条码标签。
- ◎ 灵活选择灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。



定制标签



单只灭菌包装



KJ512



KJ513-2



KJ515-2



KJ517-1



KJ524-3



KJ525



KJ524-5

规格参数

REF 目录编号	容量	MAT 材质	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ512	100mL	PP	Ø60×73mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-10013
				-	-	250	散装	071-10010
KJ513-2	120mL	PP	Ø64×75mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12013
				-	-	250	散装	071-12010
KJ515-2	60mL	PP	Ø53×65mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06013
				-	35	420	多只袋装	071-06014
KJ517-1	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06023
				-	20	600	多只袋装	071-06024
KJ524-3	40mL	PS	Ø42×59mm	EO	20	800	单支塑袋包装	071-04013
KJ525	60mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	071-06033
				-	20	800	多只袋装	071-06034
KJ524-5	40mL	PP	Ø43×62mm	EO	40	800	单支塑袋包装	071-04073

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液标本杯



规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ531	90mL	PP	Ø58×67mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-09013
KJ532	120mL	PP	Ø59×88mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12023
		PP	Ø59×88mm	-	25	250	多只袋装	071-12020
KJ516	40mL	PET	Ø78×36mm	-	400	10000	本色透明, 多只袋装	071-04034
		PET	Ø78×36mm	-	400	10000	白色, 多只袋装	071-04044
KJ517-2	40mL	PP	Ø48×47mm	EO	40	800	手掀盖, 多只袋装	071-04055
		PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖, 多只袋装	071-04054
KJ517-3	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖, 标签式, 多只袋装	071-04064
KJ517-5	40mL	PP	Ø48×45mm	-	40	800	杯-盖联体, 手掀盖, 标签式	071-04083
KJ524	30mL	PS	Ø31×93mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03014
KJ529	30mL	PS	Ø31×94mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03024
KJ530	30mL	PP	Ø31×94mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖, 多只袋装	071-03034



* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液标本采集器

产品介绍

- 本系统由尿液收集杯和预置负压的尿液采集管组成。主要用于尿液标本的采集和检验前的无污染操作。
- 密封性能好，有效防止标本渗漏及污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触。良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
- 人性化的设计，使封闭式尿液收集操作过程轻松便捷，安全高效，有效防止环境污染，营造卫生环境。
- 可选EO或辐射灭菌。

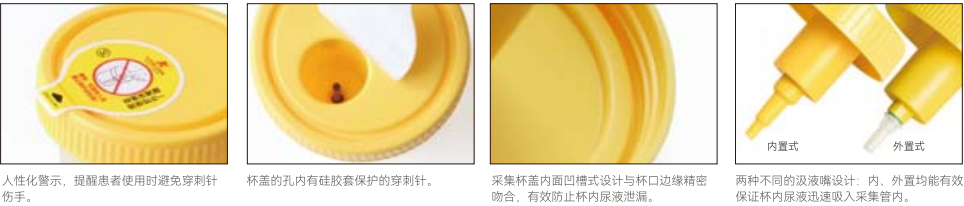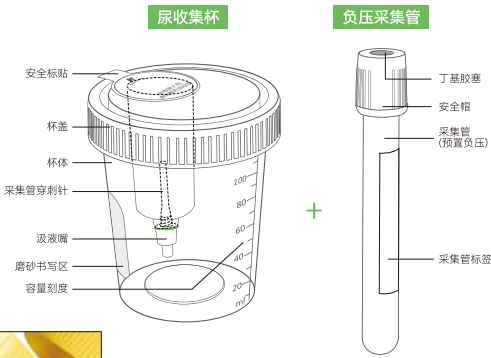

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	外观* 尺寸	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ527-5	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø54×64mm (外置式吸液嘴)	50	-	400		071-06041
KJ527-10	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø52×64mm (内置式吸液嘴)	50	-	300		071-06042
KJ527-6	PP	90 (盛液量: 70 ~ 30)mL	Ø58×65mm (外置式吸液嘴)	50	-	300		071-09021
KJ527-7	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (外置式吸液嘴)	50	-	300		071-10026
KJ527-11	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (内置式吸液嘴)	50	-	300		071-10027
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm (U形底)	-	100	1200	1、负压采集管可选U形底或V形底。	071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm (V形底)	-	100	1200	2、标签可定制。 3、定制灭菌方式： EO、辐射或不灭菌。	071-01011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

一、患者尿液收集步骤





尿液标本采集器

二、医检人员尿液采集方法



① 医检人员在采集前需反复摇匀杯内尿样。



② 立即揭开防护标贴，露出采集孔。



③ 迅速取尿液采集管，管帽朝下沿采集孔插入并下压，使穿刺针刺穿了基胶塞，杯内尿液在大气压作用下自动吸入管内(约10mL)。



④ 向上拔出尿液采集管，完成尿样采集，待检。



⑤ 最后，盖上尿杯的防护标贴，以防伤手。

筒式尿液采集器



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ533	PP	-	140mm(长度)	定制	100	-	1000		071-14015
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm(U底管)	定制	-	100	1200		071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm(V底管)	定制	-	100	1200		071-01011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿液DNA样本保存管

产品介绍


- 尿液 DNA 样本采集与常规血液 DNA 样本采集相比，是一种新型的对人体无伤害、无痛苦的采集 DNA 样本的方法。尿液 DNA 样本保存管不仅能够保存尿液中的基因组，还能够保存尿液中游离循环 DNA(cfDNA)。研究证明血浆 cfDNA 部分是来自于肿瘤、胎儿和移植器官的，并且血浆游离 DNA 能够通过肾脏透进入尿液，这就为无创诊断带来极大的应用价值。
- 尿液 DNA 样本保存管采集尿液样本之后，能够在 6-35℃稳定保存 DNA 长达 7 天。尿液 DNA 样本保存管是由 EDTA 抗凝剂和特殊的保护剂组成，能够有效抑制尿液中的核酸酶，并避免尿液中脱落细胞基因组 DNA 的释放，同时也能够用于保存尿液中的血细胞。具有采集方便、无创、常温储存与运输等优点，为尿液样本的运输及储存提供了极大的便利。该产品适用于无创产前筛查与一些疾病的早期诊断相关的研究。
- 尿液 DNA 样本保存管为 PET 材质的负压管，且内置一定量的尿液 DNA 样本保存液，用于对尿液采集杯内尿样的采集和保存。
- 尿液采集注意事项：
 - 1、建议保存 2 支尿液 DNA 样本保存管的尿液量，采尿量过多或过少将会导致不恰当的尿液 / 保护剂的比例，达不到最佳的检测结果。
 - 2、如果产品在使用前发现有沉淀或不溶物出现应停止使用。
 - 3、最好采集晨尿，并且采尿后立即温和上下颠倒保存管 10 次，混匀不充分或太剧烈均可能对检测效果造成影响。
- 游离 DNA 提取方法：
 - 1、分离尿液：将尿液 DNA 样本保存管 4000rpm 离心 10 分钟，吸取上层尿液到一个新的离心管中，并注意不可吸取到管内尿液下方的脱落细胞。
 - 2、提取游离 DNA：分离后的尿液，可使用商业化的相关试剂盒进行游离 DNA 的提取。
- 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原，并可定制条码标签。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	保存液	STERILE 灭菌*方式	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ759-1	采集杯:PP	100mL	-	可选	50	-	300	杯盖、管帽颜色可定制	071-10052
	保存管:PET	10mL	专用DNA保存液2mL	辐照灭菌	-	100	1200		

使用图示

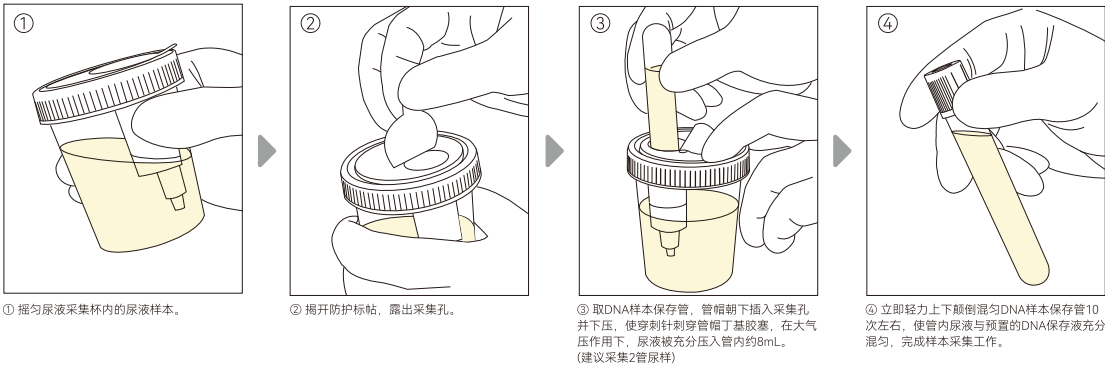

- ① 摇匀尿液采集杯内的尿液样本。
- ② 揭开防护标贴，露出采集孔。
- ③ 取DNA样本保存管，管帽朝下插入采集孔并下压，使穿刺针刺穿管帽丁基胶塞，在大气压作用下，尿液被充分压入管内约8mL。（建议采集2管尿样）
- ④ 立即轻柔上下颠倒混匀DNA样本保存管10次左右，使管内尿液与预置的DNA保存液充分混匀，完成样本采集工作。



粪便标本杯

产品介绍

- ◎ 粪便标本杯主要材质为医疗级 PP 或 PS，PP 标本杯耐高温 121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- ◎ 采样勺与杯盖一体化注塑成形，便样采集更可靠。大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
- ◎ 良好的密封性，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
- ◎ 根据客户需要可定制标签。
- ◎ 可选不同灭菌方式：EO 灭菌、辐射灭菌或不灭菌。



规格参数

REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观尺寸*	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ513-1	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	黑色杯体，手掀盖，盖匙一体	072-03014
KJ514	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	白色杯体，手掀盖，多只袋装	072-03024
KJ515	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06013
				-	40	600	多只袋装	072-06014
KJ515-1	60mL	PP	Ø53×64mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06023
				-	35	420	多只袋装	072-06024
KJ524-4	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	盖匙一体式，多只袋装	072-04044
KJ524-12	40mL	PP	Ø38×62mm	-	20	800	多只袋装	072-04025
KJ524-13	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	多只袋装	072-04014
KJ526	40mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	072-04023
				-	20	800	多只袋装	072-04024
KJ529-1	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	白色杯体，手掀盖，盖匙一体	072-04034

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



粪便标本杯



KJ529-2



KJ523



KJ523-2



KJ524-6



KJ524-11



KJ524-14



KJ524-7



KJ524-10



KJ542



管底二维码



KJ743

规格参数

REF 目录 编号	容积	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌 方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ529-2	60mL	PP	Ø49×57mm	可选	35	420	盖匙一体式，多只袋装	072-06034
KJ523	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	防漏盖，多只袋装	072-03034
KJ523-2	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03044
KJ524-6	5mL	PP	Ø16×72mm	可选	250	2500	多只袋装	072-00524
KJ524-11	5mL	PP	Ø13.5×64mm	可选	300	3000	带刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00534
KJ524-14	5mL	PP	Ø16×58.4mm	可选	200	2000	丝印刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00535
KJ524-7	10mL	PS	Ø32×75mm	可选	50	800	多只袋装	072-01014
KJ524-10	15mL	PP	Ø21×80mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03064
KJ542	5mL	PP	Ø16×58mm	可选	50	800	盖匙一体，螺旋盖，管底带二维码	072-01515
KJ743	10mL	PS	Ø9×75mm	辐射	100	1000	入肛式大便采集器，多只袋装	072-01035

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



粪便标本采集保存管

产品介绍

- ◎ 该采集器主要用于大便常规类、隐血、微生物、轮状病毒等理化检测前的标本采集和预处理。
- ◎ 本品主要由盛液管（内装稀释液）、易折杆、连接座、密封旋盖、采样头、标本稀释管等组成。
- ◎ 采样头有：槽式采样头、棉签式采样头、铲式采样头设计，方便标本采集。
- ◎ 盛液管采用优质 PE 材料制成，挤压不破裂，具有良好的弹性。管内的易折杆为空心设计，压弯 30°即可折断，2mL 稀释液沿折断孔迅速向下流入标本稀释管内。
- ◎ 大便标本的预处理在标本稀释管的密闭管腔内进行，与外部隔绝，医检操作安全无接触，对实验室环境无异味、无污染。
- ◎ 一体化密封式设计，保证标本检验前的预处理工作在完全密封的容器中进行，处理过程轻松便捷、卫生安全。



规格参数

REF 目录编号	预置溶液	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×125mm	-	100	1000	槽式采样头	072-12514
				EO / 辐射	100	1000	槽式采样头	072-12515
KJ534-1	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×170mm	-	100	800	棉签式采样头	072-17014
				EO / 辐射	100	800	棉签式采样头	072-17015
KJ534-2	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø24×127mm	-	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12516
				EO / 辐射	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12517

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示





粪便DNA样本保存管

产品介绍


产品由粪便采集管（器）和预置的 DNA 保存液组成，每管保存液最多可保存 0.5g 粪便样本。保存液可在常温条件下保存粪便中宿主与微生物的 DNA 至少 60 天，在 -20℃和 -80℃下可长期保存，并且能够有效防止常温保存条件下样本中微生物种类发生改变。本产品使用简单方便，可广泛用于医院、科研院所、家庭等常温条件下粪便样本的采集与保存。

- 保存方便，可在常温下采集、保存粪便样本，保护样本中宿主与微生物的 DNA 不被降解，防止微生物污染。
- 取样简单，用保存管帽（或采集处理器）附带的勺子直接挖取粪便样本，然后浸入常温保存液中混匀即可。
- 从保存液中提得的 DNA 适用于下游多种基因检测，如 PCR、芯片分析及二代测序等。
- 保存管、采集勺均为无菌产品，最大程度减少了耗材中微生物及微生物残留 DNA 对样本的污染。
- 用途广泛，可广泛用于医院、家庭、高校、科研院所等常温条件下粪便样本的采集保存。

KJ534-4 使用图示



KJ524-15 使用图示

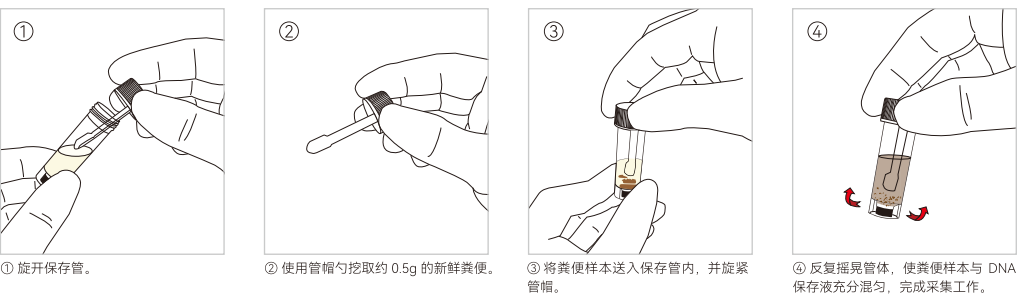

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观* 尺寸	保存液	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534-4	PP	Ø24×127mm	DNA保存液2.5mL	辐射灭菌	100	1000	粪便DNA样本采集处理器(带滤芯)	071-12518
KJ524-15	PP	Ø16×58mm	DNA保存液3mL	辐射灭菌	200	2000	粪便DNA样本保存管(管底二维码)	071-01516

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



痰标本杯

产品介绍

- ◎ 痰标本杯主要材质为医疗级 PP 或 PS，PP 标本杯耐高温 121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
- ◎ 痰瓶盖防漏垫圈设计可有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送。
- ◎ 根据客户需要可定制丝印容积刻度和标签。
- ◎ 灭菌方式：EO 或辐射灭菌。



规格参数

REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ518	40mL	PS	Ø42×59mm	-	40	800	多只袋装	073-04014
	40mL	PS	Ø42×59mm	EO	40	800	单支塑袋包装	073-04013
KJ518-2	40mL	PP	Ø43×68mm	-	20	700	多只袋装，耐高温高压	073-04024
	40mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装，耐高温高压	073-04023
KJ518-3	25mL	PS	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02514
	25mL	PS	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02513
	25mL	PS	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02515
	25mL	PP	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02524
	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02523
	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02525
	25mL	PP	Ø30×86mm	-	50	650	多只袋装	073-02534
KJ518-4	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02533
	25mL	PP	Ø30×86mm	EO	5	650	5只塑袋包装	073-02535
	25mL	PS	Ø30×84mm	-	50	650	丝印刻度，多只袋装	073-02544
KJ519-6	25mL	PS	Ø30×84mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02543
	25mL	PP	Ø30×84mm	-	50	650	丝印刻度，多只袋装	073-02554
	25mL	PP	Ø30×84mm	EO	1	650	单支塑袋包装	073-02553
KJ518-1	20mL	PS	Ø43×25mm	-	50	800	多只袋装	073-02014
	20mL	PS	Ø43×25mm	EO	50	800	单支塑袋包装	073-02013
KJ519	30mL	PP	Ø55×32mm	-	20	500	多只袋装	073-03014
	30mL	PP	Ø55×32mm	EO	20	500	单支塑袋包装	073-03013
KJ519-1	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖，多只袋装	073-04034
	40mL	PP	Ø48×47mm	EO	40	800	手掀盖，单支塑袋包装	073-04033
KJ519-2	20mL	PP	Ø45×33mm	-	50	800	手掀盖，多只袋装	073-02024
	20mL	PP	Ø45×33mm	EO	50	800	手掀盖，单支塑袋包装	073-02023

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
KANG JIAN MEDICAL



唾(痰)液DNA样本采集器

产品介绍

唾(痰)液 DNA 样本采集与血液 DNA 样本采集相比，是一种对人体无伤害、无痛苦的获取 DNA 的方法。该方法不会对被收集者造成任何不适，容易被接受，因而能最大限度的扩大基因研究的取样范围，特别适合分子流行病学大人群调查。常温下唾(痰)液 DNA 样本可以保存多年、绿色环保、携带方便。

唾(痰)液 DNA 样本采集器包含采集盒和 DNA 样本保存管，可稳定保存唾(痰)液 DNA 样本。DNA 样本保存管中的 DNA 保存液能迅速抑制唾液中的核酸酶，稳定唾(痰)液 DNA。常温下保存管中的 DNA 样本的储存和运输的时间长达一年。提取的 DNA 适用于下游多种基因检测，如 PCR、芯片分析及二代测序等。

- 采集盒主要材质为医用 PS 塑料，用于唾(痰)液的收集。DNA 样本保存管使用 PET 高分子原料制造，管内预置负压以及 DNA 保存液 1mL，主要用于唾(痰)液采集和保存。
- 本品适用于遗传性疾病筛查、基因组检测和疾病检测时 DNA 样本的采集、保存和运输。
- 本品使用时为非侵入性样本采集，操作安全便利。同时唾液样本与实验人员无接触无污染，可直接自动化检测，无需二次转移样本。
- 在洁净车间生产，无 DNA 酶、无 RNA 酶，无热原。
- 灭菌方式：EO 或辐射灭菌。



标签标注简明功用，红色禁止标识为吸液孔位置。



方盒形采集盒的矩形唾(痰)液入口与圆形吸液孔。



吸液孔内置穿刺针，非实验人员禁止揭开上方标签，防止伤手。



下方吸液头与吸液孔底部硅胶垫圈密封，保证唾(痰)液完全吸入 DNA 样本保存管内。



采集盒
KJ535


DNA 样本
保存管
KJ535-1

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	保存液	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ535	PS	75×35×65mm	—	辐射灭菌	20	500	采集盒，多只袋装	073-00015
KJ535-1	PET	Ø16×100mm	DNA保存液1mL	辐射灭菌	100(盘装)	1200	保存管，配合采集盒使用	

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。


使用图示

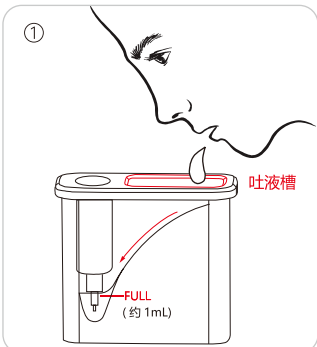

① 使用前先用清水反复清洁口腔。然后按揉脸颊，促使唾液分泌(痰液无此操作)，将唾(痰)液吐入吐液槽，唾液沿导流槽达到底部“FULL”刻度线高度(约 1mL)即可(唾液泡沫不计入高度)。

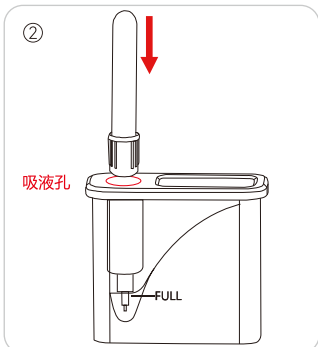

② 将 DNA 保存管按红色箭头方向稍用力沿吸液孔完全插入。静置数秒，在空气负压作用下，唾(痰)液被压入管内。吸液完后向上拔出。

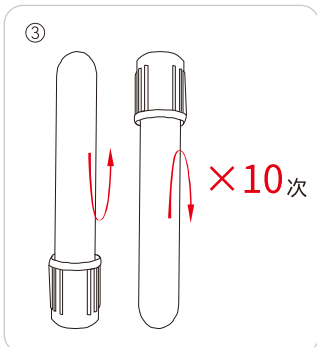

③ 上下颠倒采集有唾(痰)液的 DNA 样本保存管 10 次，使唾(痰)液与管内 DNA 保存液充分混匀，完成采样工作。



唾(痰)液DNA样本采集器

产品介绍

本品可直接用于唾液或痰样本的采集、保存和运输，并通过保存液稳定其中的游离 DNA(CellFree DNA) 或病毒样本。可用于分子诊断检测 (包括但不限于聚合酶链式反应 PCR 或分支 DNA 扩增技术)、病毒检测或其他的体外检测所需唾液样本的诊断。

- ◎ 本产品由唾液采集器 (采集漏斗 + 样本收集管)、样本收集管管帽、保存液管 (预置 2mL 游离 DNA 保存液或病毒样本保存液) 组成。
- ◎ 在室温环境下采集、保存和运输唾液样本中的游离 DNA 或病毒样本。
- ◎ 用于病毒样本采集时，可定制不同的病毒样本保存液，如 VTM 保存液 (粉红色)、含灭活剂的保存液 (无色) 或生理盐水。
- ◎ 用于 DNA 样本采集时，预置的 DNA 保存液适用于多种 DNA 提取纯化试剂盒，室温下可以稳定保存游离 DNA 最长达到 24 个月。
- ◎ 采集过程无痛无创，可居家自行采集，更加便捷。
- ◎ 采集漏斗人性化设计，贴合人体口型结构，操作简便。管帽配备防漏垫圈，密封防漏。
- ◎ 根据用途可定制无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原的产品。可选 EO 或辐射灭菌。




规格参数

REF 目录编号	采集漏斗	保存管规格	保存液*	套/箱	备注说明	产品编码
KJ536	螺口式	5mL, Ø16×60	DNA保存液2mL	200	用于分子诊断、疾病筛查、DNA遗传鉴定等,保存液预置量可定制。	073-00025
KJ537	插口式	5mL, Ø16×60		200		073-01025

* 保存液可根据用户需求定制。


使用图示

(注：螺口式漏斗的采集器使用方式与插口式基本相同)

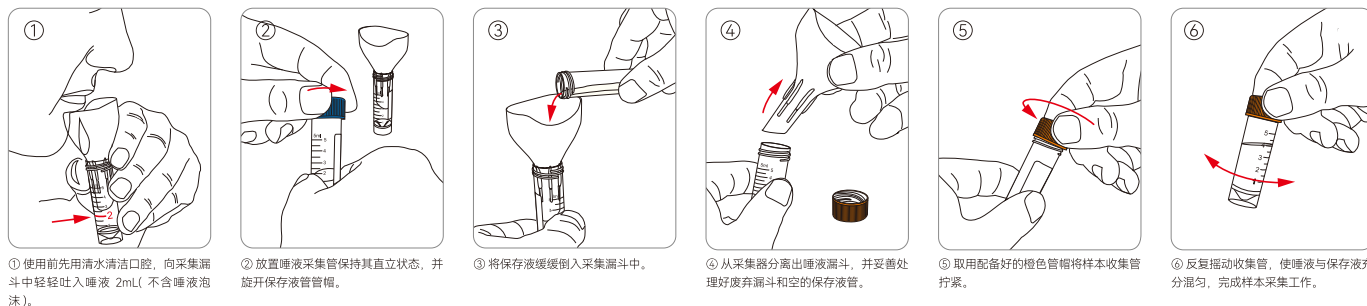

03

Cuvette & Sample Cup

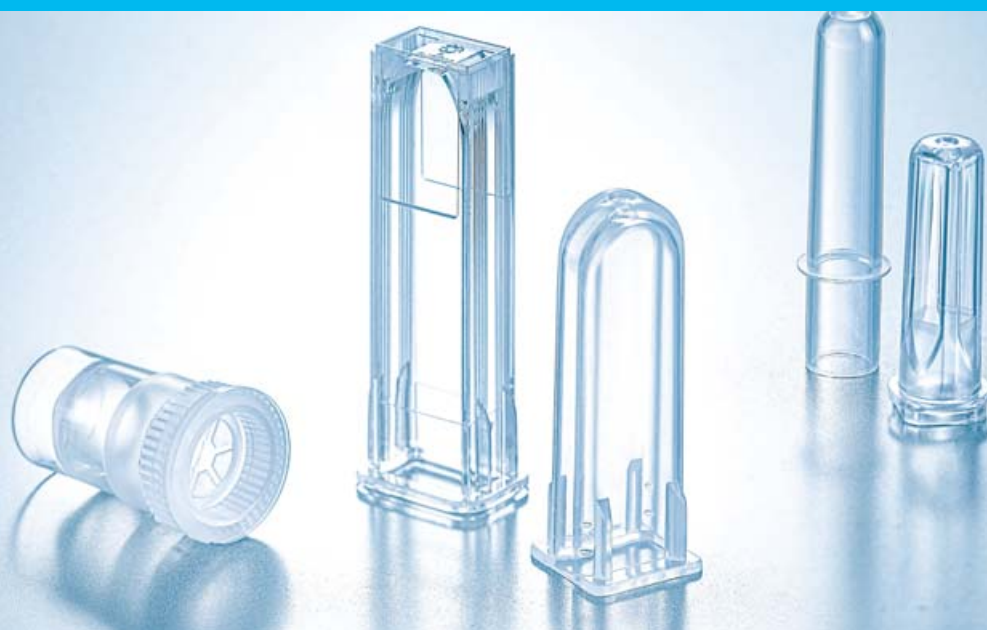

比色杯 样品杯

→ 比色杯

47-50

→ 样品杯

51-53





比色杯

产品介绍

- KANG JIAN®比色杯采用进口透明高分子材料聚苯乙烯(PS)制成。
- 高精度模具注塑成型，产品平整光洁。
- 精确的杯体尺寸和杯体结构完美适配于不同品牌型号的血凝仪、生化分析仪等多种成熟的分析系统。

规格参数



KJ133



KJ134



KJ135



KJ136



KJ139



KJ111



KJ111-1



KJ111-2



KJ112-2



KJ112-1


REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ133	PS	12.5×12.5×45mm	-	100	2000	光程10mm 波长范围340-900nm	081-101
KJ134	PS	12.5×12.5×45mm	-	100	2000	光程10mm 波长范围340-900nm	081-102
KJ135	PS	12.5×12.5×45mm	-	100	2000	光程10mm 波长范围340-900nm	081-103
KJ136	PS	12.5×12.5×45mm	-	100	2000	光程10mm 波长范围340-900nm	081-104
KJ139	PS	15.7×11.8×46mm	-	100	2000	光程10mm 波长范围340-900nm	081-105
KJ111	PS	Ø15×35mm	2000	-	20000	适配：希森美康CA530血凝仪	081-106
KJ111-1	PS	Ø15×35mm	1000	-	24000	适配：希森美康CA7000血凝仪	081-107
			-	3000	24000		
KJ111-2	PS	Ø15×35mm	3000	-	24000	适配：希森美康CA1500血凝仪	081-108
KJ112-2	PS	Ø8.8×30mm	1000	1000	10000	适配：积水血凝仪	081-110
KJ112-1	PS	Ø15×35mm	2000	-	20000	适配：希森美康2000i血凝仪	081-109

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



比色杯

规格参数

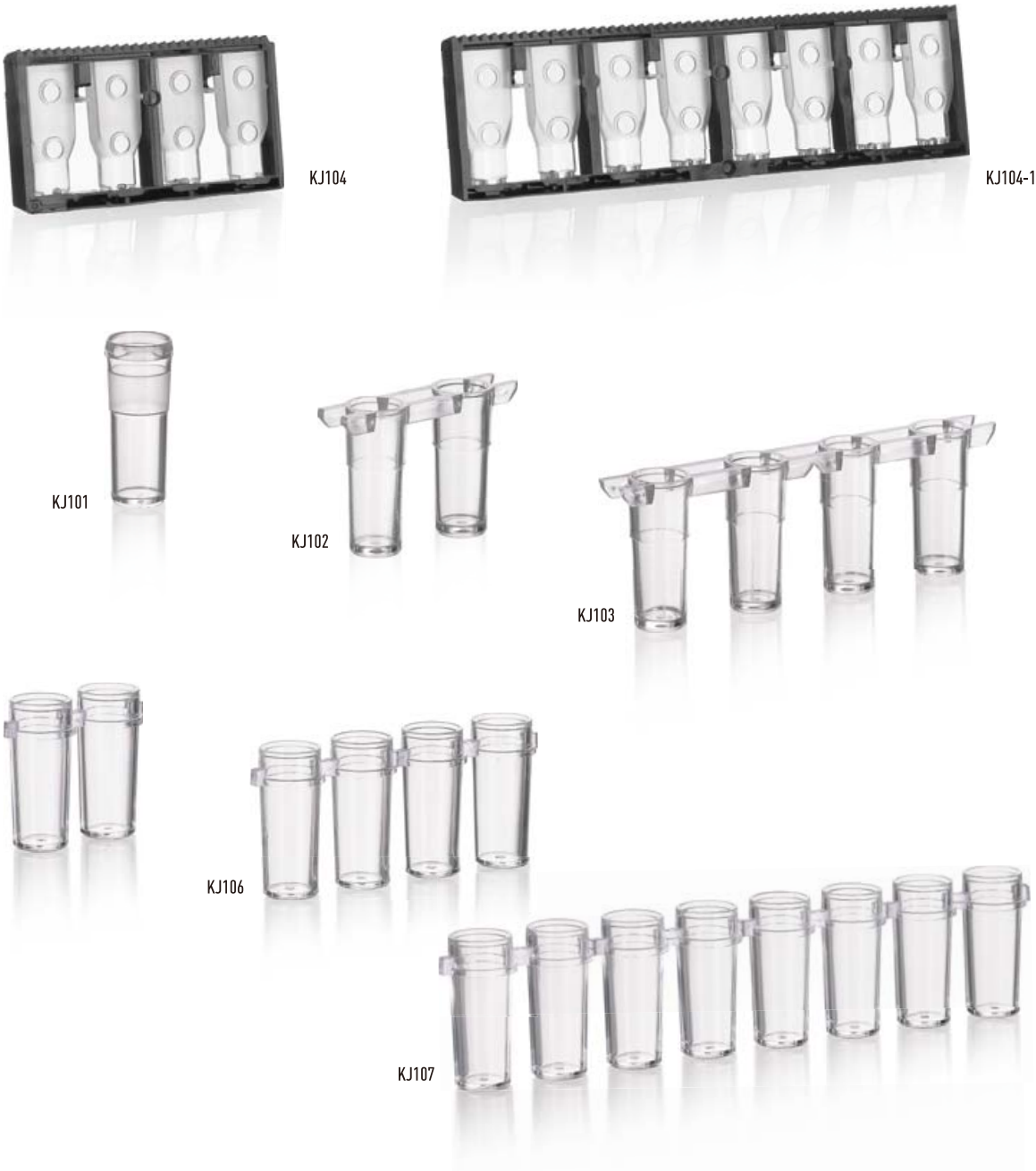

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ104	PS	60×32mm	29	-	2001	适配：德国BE全自动血凝仪	081-111
KJ104-1	PS	119×32mm	8	-	1160	适配：德国BE全自动血凝仪	081-112
KJ101	PS	7.5×8×23mm	1000	-	25000	适配：德国BE单通道血凝仪	081-113
KJ102	PS	7.5×29×21mm	600	-	6000	适配：德国BE双通道血凝仪	081-114
KJ103	PS	7.5×61×21mm	300	-	6000	适配：德国BE四通道血凝仪	081-115
KJ105	PS	11×30×27mm	100	-	4000	适配：德国BECL4双通道血凝仪	081-116
KJ106	PS	11×60×27mm	50	-	1000	适配：德国BECL4四通道血凝仪	081-117
KJ107	PS	11×120×27mm	25	-	500	适配：德国BECL4八通道血凝仪	081-118

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



比色杯

规格参数




REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ108	PS	Ø17×26mm	1000	-	10000	适配：德国TECO单通道血凝仪	081-119
KJ109	PS	11×31×19mm	1000	-	10000	适配：德国TECO双通道血凝仪	081-120
KJ110	PS	Ø10×19mm	1000	-	25000	适配：德国TECO单通道(小号)血凝仪	081-121
KJ110-1	PS	Ø10×23mm	1000	-	25000	适配：德国TECO单通道(大号)血凝仪	081-122
KJ114	PS	7.5×8×23mm	1000	-	10000	西班牙血凝杯	081-123
KJ115	PS	11×120×27mm	1000	-	10000	适配：Siemens BFT II	081-124
KJ124	PS	11×60×27mm	-	50	3000	适配：北京普朗血凝仪	081-125
KJ125	PS	11×30×27mm	25	-	500	适配：莱邦血凝仪	081-126
KJ137	PS	Ø12×30mm	1000	-	10000	FC血清样品杯(大号)	081-128
KJ138	PS	Ø10×30mm	1000	-	10000	FC血清样品杯(小号)	081-129

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



比色杯

规格参数

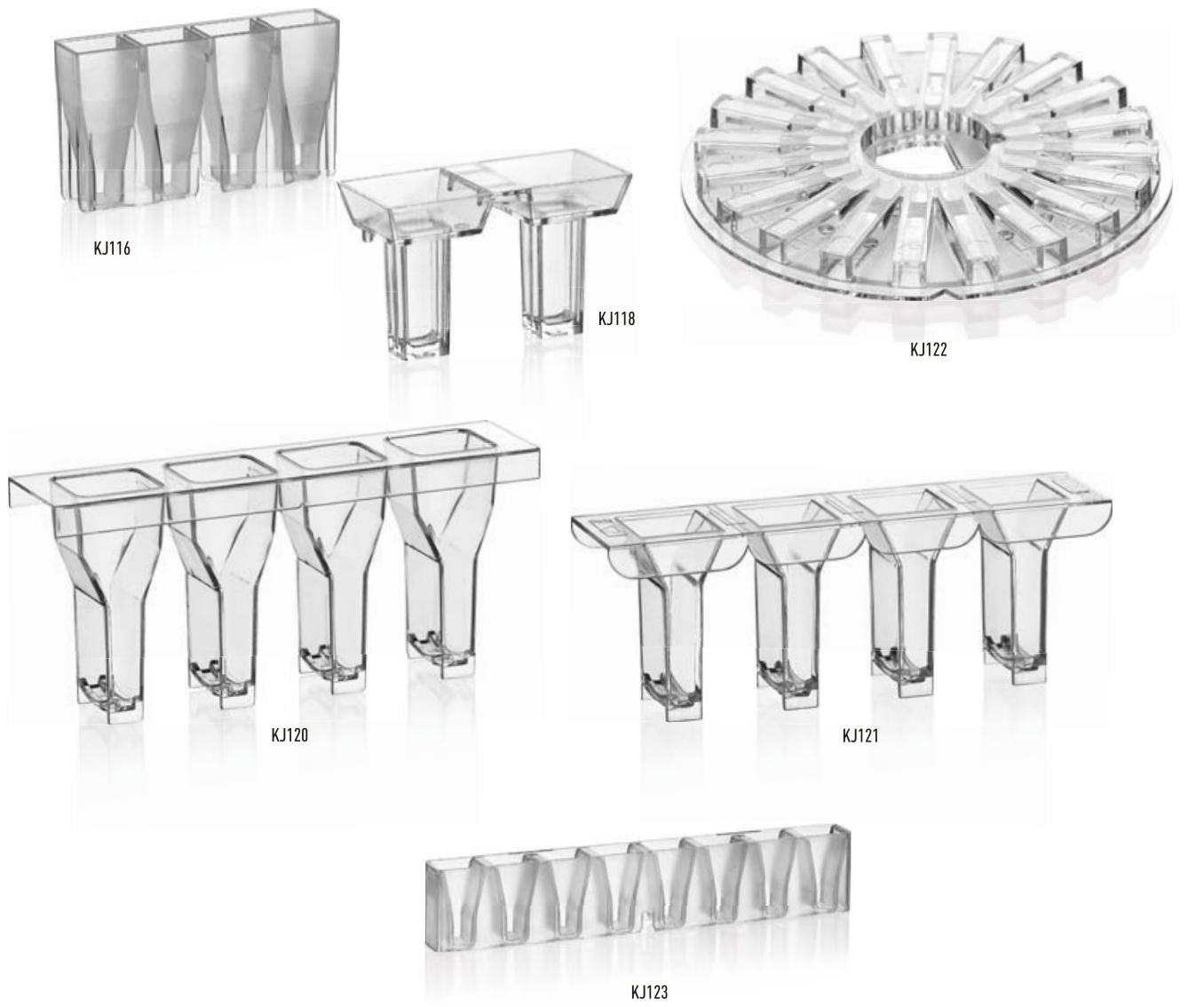

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	i 备注说明	产品编码
KJ116	PS	47.5×9×27mm	200	-	4000	适配：美国太平洋血凝仪	081-130
KJ118	PS	45×19×28mm	100	-	2000	适配：中山培康血凝仪	081-131
KJ122	PS	Ø108mm	1	-	500	适配：美国库尔特血凝仪	081-132
KJ120	PS	66.5×16×24mm	175	-	2100	适配：天津普利生血凝仪（配磁珠）	081-133
KJ121	PS	66×16×30mm	140	-	2800	适配：中勤世帝血凝仪（配磁珠）	081-134
KJ123	PS	96×9×18mm	100	-	2000	适配：贝克曼血凝仪	081-135

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



样品杯

产品概况

- KANG JIAN[®]样品杯采用进口透明高分子材料聚苯乙烯(PS)制成。
- 高精密模具注塑成型，产品平整光洁。
- 精确的杯体尺寸和杯体结构完美适配于不同品牌型号的生化分析仪、免疫分析仪等多种成熟的分析系统。

规格参数



REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ206	PS	Ø24×45mm	180	-	1800	适配：AC900血细胞分析仪	082-101
KJ211	PS	Ø16×38mm	500	-	5000	适配：日立生化仪	082-102
KJ212	PS	Ø13×24mm	1000	-	10000	适配：美国贝克曼CX系列生化仪	082-103
KJ213	PS	Ø14×25mm	1000	-	10000	适配：美国杜邦/贝克曼生化仪	082-104
KJ214	PS	Ø13×20mm	1000	-	15000	适配：柯达生化仪	082-105
KJ215	PS	Ø13×17mm	1500	-	13500	适配：美国IL生化仪	082-106
KJ216	PS	Ø12×20mm	2000	-	20000	适配：康宁550/560生化仪	082-107
KJ219	PS	Ø15×40mm	500	-	5000	适配：雅培CCX	082-108
KJ220	PS	Ø13×38mm	500	-	6000	适配：日立生化仪	082-109
KJ224	PS	-	1000	-	10000	适配：日立生化仪	082-110
KJ225	PS	Ø10×49mm	500	-	5000	适配：雅培生化仪	082-111
KJ226	PS	Ø17.5×53mm	500	-	5000	适配：雅培AXSYM免疫发光仪	082-112

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



样品杯

规格参数



REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ221	PS	Ø7×26mm	2000	-	20000	适配：北京宝灵曼分析仪	082-113
KJ222	PP	Ø9×18mm	2000	-	20000	适配：上海安泰生化仪	082-114
KJ223	PP	Ø11×19mm	2000	-	20000	适配：美国M10生化仪	082-115
KJ223-1	PP	Ø15×22mm	1000	-	10000	适配：英诺华生化仪	082-116
KJ246	PP	Ø15×25mm	1000	-	10000	适配：西门子XP生化仪	082-117
KJ236	PP	40×11mm	1000	-	10000	适配：雅培i2000化学发光仪	082-118
KJ238	PP	-	1000	-	10000	适配：贝克曼DX1800发光仪	082-120
KJ239	PP	-	1000	-	10000	适配：西门子化学发光免疫仪	082-121
KJ247	PS	-	1000	-	10000	适配：希森美康生化仪	082-122
KJ217	PP	Ø8×34mm	1500	-	15000	适配：罗氏生化仪	082-123

* 产品外观尺寸仅供参考。如需准确数据请咨询客服。



样品杯

规格参数




REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ231	PP	138×121×54mm	-	-	96	罗氏E170、E601全自动电化学发光免疫分析仪CUP/TIP盒	082-131
KJ232	PP	112×94×45mm	-	-	120	罗氏E2010电化学发光免疫分析仪TIP盒	082-132
KJ233	PP	95×59×30mm	-	-	240	罗氏E170、E2010系列电化学发光免疫分析仪CUP盒	082-133
KJ234	PP	7×50mm	1000	-	20袋	罗氏电化学发光免疫分析仪导电吸头	082-134
KJ235	PP	7×27mm	2000	-	10袋	罗氏电化学发光免疫分析仪孵育杯	082-135

* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。

规格参数



使用方法图示

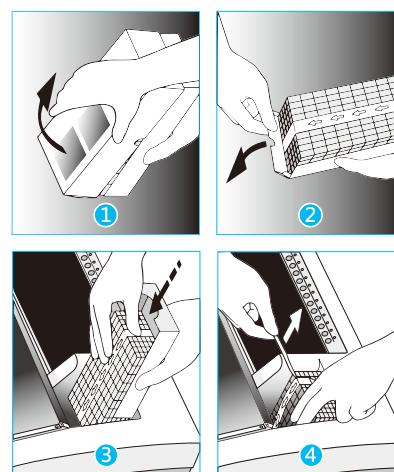

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	条/盒	盒/中盒	条/箱	备注说明	产品编码
KJ245	PS	18×9×7mm	100	2	2000	适配于：贝克曼ACL-TOP血凝仪	082-136


* 产品外观尺寸仅供参考，如需准确数据请咨询客服。

Centrifuge Tube



离心管系列

- | | |
|----------------|-------|
| → 微量离心管 | 55-57 |
| → 10mL与15mL离心管 | 58 |
| → 20mL与50mL离心管 | 59 |
| → 离心管架(盒) | 60-61 |

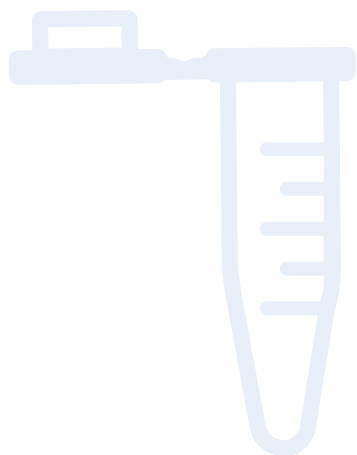




微量离心管

产品概况

- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚丙烯 (PP) 制成，生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂，不含有任何重金属离子，成品具有良好的生物相容性。
- ◎ 微量离心管有 0.2mL、0.5mL、1.5mL、2mL、5mL 等多容量规格。
- ◎ 管盖可单手开合，操作轻松。
- ◎ 产品具有耐化学腐蚀和耐低温，-80℃至 +121℃的温度范围，不变形。
- ◎ 管盖和管身部分区域表面磨砂，便于标记。
- ◎ 根据产品用途，可定制无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原的产品。
- ◎ EO、辐射灭菌方式或不灭菌可选。



管盖磨砂，便于标记

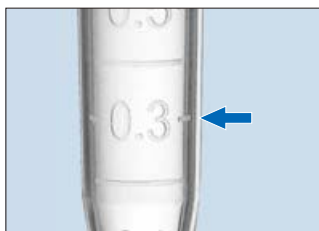

容量刻度准确、清晰



管体区域磨砂，便于标记



5mL锥形底刻度，读取微量液体

产品特点

一、(超)低吸附性

在实验室分子生物学研究中，为最大程度提高样品的回收率，保证后续分析准确可靠，样品损耗的最小化对低浓度样品（如低浓度蛋白质 /DNA 等）非常必要，低吸附性或超低吸附性内壁的离心管显著降低样品（蛋白质 /DNA）被管壁吸附，可最大程度地回收蛋白质 /DNA。



管壁吸附性对比（图一）



管壁吸附性对比（图二）

二、安全性高

- ◎ 卡扣式安全盖设计可有效防止实验操作过程中离心管弹盖或爆盖发生，尤其在加热管体时提供最大安全系数。
- ◎ 螺旋口离心管的管帽带 O 型防漏垫圈，或管帽采用双色注塑工艺可有效防泄漏。管体与螺旋帽的联带式设计避免了交叉污染的可能。



卡扣式安全盖，防爆盖。




管帽采用防漏O型垫圈，或双色注塑工艺，有效防漏。



联带式螺旋帽避免了交叉污染的可能。



微量离心管

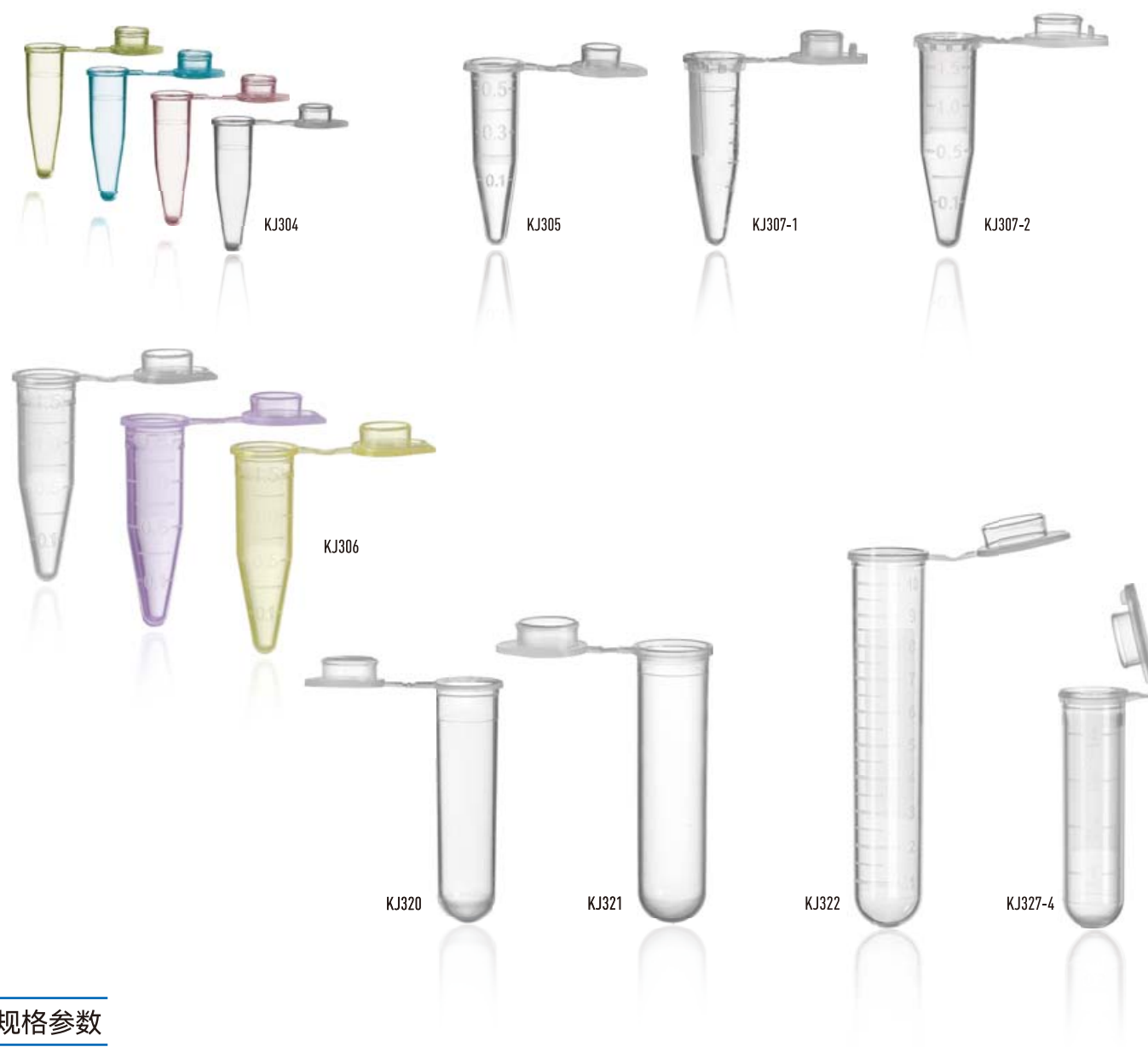


规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	RCF 相对* 离心力	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ304	0.2mL	PP	17800×g	1000	50000	V形底, 透明多色	091-0201
KJ305	0.5mL	PP	17800×g	1000	20000	V形底	091-0501
KJ307-1	0.5mL	PP	17800×g	1000	20000	V形底, 管口带齿	091-0502
KJ307-2	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	V形底, 管口带齿	091-1501
KJ306	1.5mL	PP	16000×g	500	10000	V形底, 透明多色	091-1503
KJ320	5mL	PP	19300×g	300	4500	U形底, 无刻度	091-5004
KJ321	7mL	PP	19300×g	200	2400	U形底, 无刻度	091-7001
KJ322	10mL	PP	16000×g	200	2800	U形底, 注塑刻度	091-0001
KJ327-4	4mL	PP	19300×g	300	4500	U形底, 注塑刻度	091-4001

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异, 所列数据仅供参考。



微量离心管

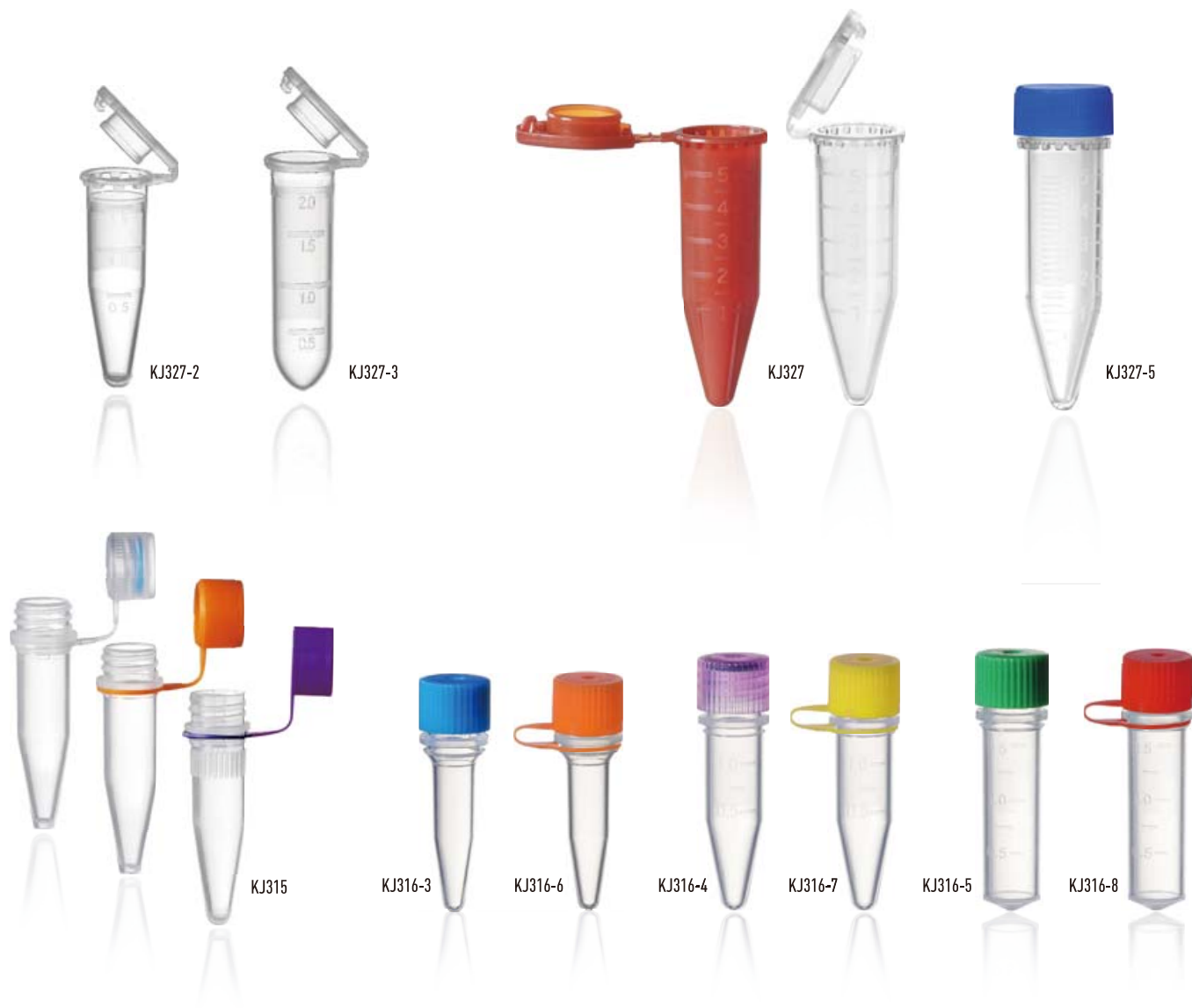

规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	RCF 相对* 离心力	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ327-2	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	卡扣式安全盖, V形底, 管口带齿	091-1502
KJ327-3	2mL	PP	17800×g	500	9000	卡扣式安全盖, U形底	091-2003
KJ327	5mL	PP	19300×g	300	3600	卡扣式安全盖, 多色可选	091-5002
KJ327-5	5mL	PP	19300×g	200	2000	螺旋帽, 带锥形底容量刻度	091-5003
KJ315	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1505
KJ316-3	0.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-0503
KJ316-6	0.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-0505
KJ316-4	1mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1001
KJ316-7	1mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1002
KJ316-5	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1506
KJ316-8	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1507

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异, 所列数据仅供参考。



10mL与15mL离心管

产品概况

10mL/15mL 离心管是分子生物学、细胞生物学、临床检验等实验室样品处理的核心耗材，主要用于样品离心分离、储存、转运等操作，其性能直接影响实验结果的稳定性、准确性和安全性。

◎ 产品采用符合USP Plastic Class VI标准的医用级聚丙烯(PP)或聚苯乙烯(PS)为原料，生产过程中不添加任何塑化剂、润滑剂和抑菌剂等，产成品符合ISO10993标准，具有优良的生物相容性。

◎ 管帽和管身部分区域表面磨砂，便于标记。V形管底部有刻度，方便对微量液体的操作。

◎ 具有较大的操作温度范围:-80 °C ~121 °C。

◎ 根据需要可定制无热原、无DNA酶无RNA酶的产品。


◎ EO或辐射灭菌或不灭菌三种方式可选。



白色或黑色丝印刻度+白色丝印书写区



锥形底部的注塑刻度，方便读取微量液体体积

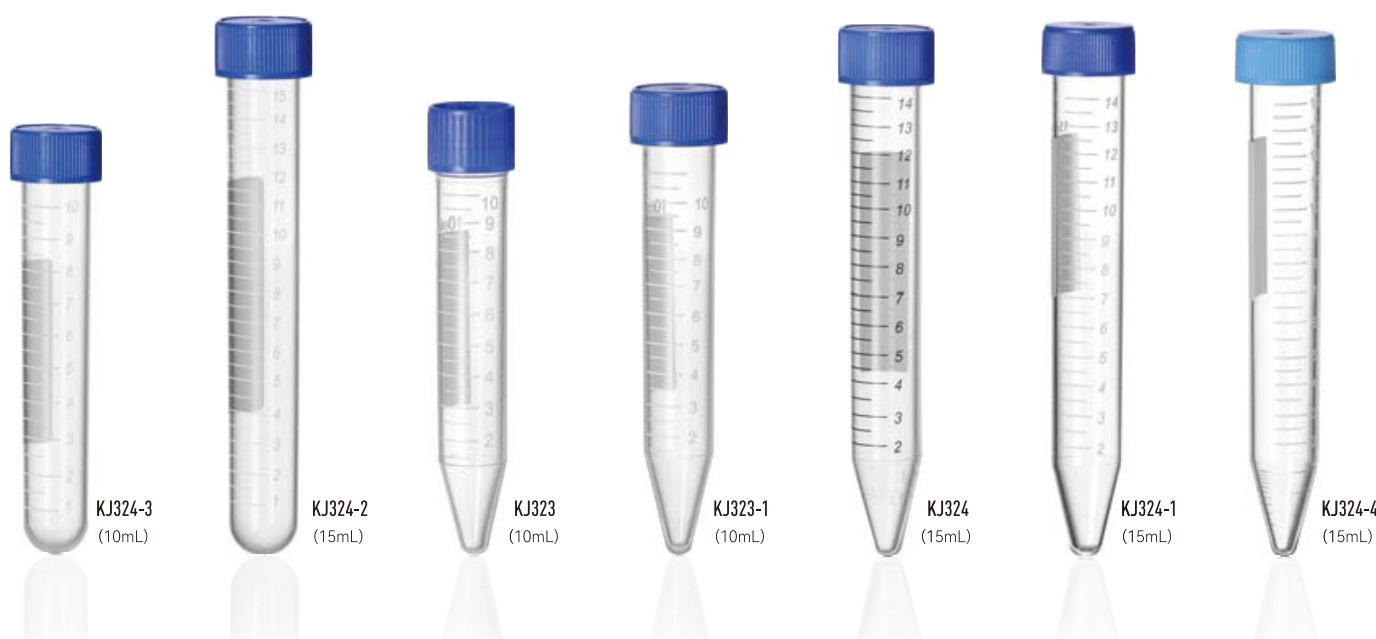

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	尺寸	RCF 相对* 离心力	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ324-3	PP	10mL 圆底	Ø15×96mm	8000×g	单支包装 40支/袋	1500 1200	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1005
KJ324-2	PP	15mL 圆底	Ø16×121mm	8000×g	单支包装 50支/袋	1200 1000	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1506
KJ323	PP	10mL 尖底	Ø15.5×102mm	11000×g	单支包装 40支/袋	1500 1200	1.丝印刻度 2.多种包装方式可选	092-1001
KJ323-1	PP	10mL 尖底	Ø16×106mm	11000×g	单支包装 100支/袋	1500 2000	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1003
KJ324	PP/PS	15mL 尖底	Ø16×121mm	9000×g(PP) 6000×g(PS)	单支包装 50支/袋 50支/盘 50支/架	1200 1000 500 500	1.管体丝印刻度 2.尖底注塑0.5/1mL刻度 3.多种包装方式可选	092-1501
KJ324-1	PS	15mL 尖底	Ø16.5×122mm	6000×g	单支包装 50支/袋 50支/盘 50支/架	1200 1000 500 500	1.丝印刻度 2.多种包装方式可选	092-1504
KJ324-4	PS	15mL 尖底	Ø16.5×121mm	6000×g	单支包装 50支/袋 50支/盘 50支/架	1200 1000 500 500	1.管体丝印刻度 2.尖底注塑0.1mL间隔刻度 3.多种包装方式可选	092-1507

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异，所列数据仅供参考。



20mL与50mL离心管

产品概况

50mL/20mL 离心管适用于大于 15 毫升小于 50 毫升的液体样品的处理。20mL的管身高度降低，即便使用小体积移液器也能轻松取样，大幅降低移液器与管内壁的交叉污染风险。

- 产品采用符合USP Plastic Class VI标准的医用级聚丙烯(PP)为原料，生产过程中不添加任何塑化剂、润滑剂和抑菌剂等，产成品符合 ISO10993 标准，具有优良的生物相容性。
- 管帽和管身部分区域表面磨砂，便于标记。V形管底部有注塑刻度，方便对微量液体的操作。
- 具有较大的操作温度范围:-80 °C ~121 °C。
- 根据需要可定制无热原、无DNA酶无RNA酶的产品。
- EO或辐射灭菌或不灭菌三种方式可选。



丝印和注塑的刻度、书写面



锥形底部的注塑刻度，方便读取微量液体体积



KJ325
(50mL)



KJ326
(50mL)



KJ326-8
(50mL)



KJ326-7
(20mL)

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	尺寸	RCF 相对*离心力	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ325	PP	50mL 可立底	Ø30×118mm	9000×g	单支包装 50支/袋	500 500	1.丝印刻度、书写面 2.可选不同包装方式	092-5001
KJ326	PP	50mL 锥形底	Ø30×118mm	9000×g	单支包装 20支/袋 25支/盘 25支/架	500 500 500 500	1.丝印刻度、书写面 2.锥底注塑0.5/1/2mL刻度 3.多种包装方式可选	092-5003
KJ326-8	PP	50mL 锥形底 卡扣式安全盖	Ø30×118mm	9000×g	单支包装 20支/袋 25支/盘 25支/架	1000 1000 500 500	1.注塑刻度、书写面 2.锥底注塑0.5/1/2mL刻度 3.多种包装方式可选	092-5007
KJ326-7	PP	20mL 锥形底 卡扣式安全盖	Ø30×65mm	9000×g	单支包装 50支/袋	500 500	1.注塑刻度、书写面 2.锥底注塑0.5/1/2mL刻度	092-2001

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异，所列数据仅供参考。

多种包装方式



单支包装



多支袋装



离心管架装



塑料泡沫盘装



离心管架(盒)

产品概况

离心管架是专用于实验中放置和定位装有实验样本溶液的离心管，确保离心过程中样品安全，同时便于样品的组织、处理与存储。不同规格的离心管架适配特定型号的离心管，康健医疗有适配0.2/0.5/1.5/2.0/15/50mL等离心管的管架。产品非一次性使用耗材，经清洁后可多次重复使用。



KJ809-1



KJ810



KJ810-1



KJ816-8



KJ816-9



KJ816-5

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	适用 离心管	孔数	只/箱	备注说明	产品编码
KJ809-1	PP	125×85×30mm	0.2mL	96	50	多色可选，带透明盖	094-0002
KJ810	ABS	165×80×25mm	0.5mL	50	50		094-0003
KJ810-1	ABS	215×110×30mm	1.5mL	50	50		094-0004
KJ816-8	ABS	210×140×55mm	15mL	50	50	可拆装	094-0005
KJ816-9	ABS	205×170×55mm	50mL	25	50	可拆装	094-0006
KJ816-5	ABS	210×170×60mm	15mL	30	50	可拆装多用架	094-0007
			50mL	20			


* 外观尺寸为近似值，仅供参考。



离心管架(盒)



KJ809-2

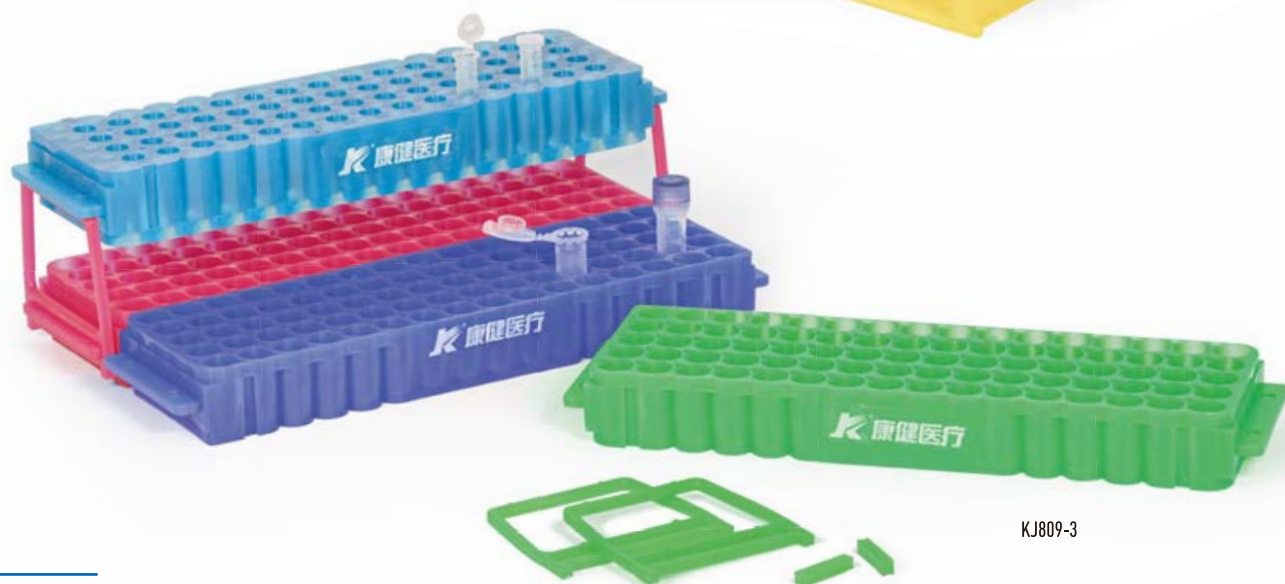

KJ809-3

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	适用离心管	孔数	只/箱	备注说明	产品编码
KJ809-2	PP	175×95×50mm	0.2mL (A面)	96	60	四面多用离心管架	094-0008
			1.5mL / 2mL (B面)	64			
			5mL / 10mL / 15mL (C面)	12			
			50mL (D面)	4			
KJ809-3	PP	232×66×27mm	0.5mL (A面)	60	50(套)	两面用离心管架。每套含：管架1只、支架2只、连接栓2只	094-0009
			1.5mL / 2mL (B面)	80			

* 外观尺寸为近似值，仅供参考。

Biobank Cryo Vial



样本库冻存系列

→ SBS标准2D冻存管	63-65
→ 96格一体式弹性压盖垫	66
→ 96格SBS冻存管帽承载架	66
→ 三码合一冻存管	67
→ 二维码冻存管	68
→ 外旋式冻存管	69
→ 内旋式冻存管	70
→ 冷冻储存管	71
→ 冷冻管	72
→ 冻存管盒(架)	73





SBS标准2D冻存管

产品介绍

康健医疗SBS冻存管使用符合USP Class VI标准的聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)原生塑料为原料制造,具有良好的生物相容性,经第三方实验室按照GB/T16886、ISO10993系列标准及相关医疗器械行业标准检测,无DNase/RNase、无胚胎毒性、无遗传毒性,无热原。

SBS标准2D冻存管采用国际标准DataMatrix二维码编码规则,采用符合ANSI/SLAS行业标准的SBS标准板架与之配套,配合实验室的自动化设备(如液体工作站、自动化冰箱等)使用,符合行业标准的SBS标准板架具有8×12和6×8阵列排布,板架二维码、条形码多码标识,实现板架样本可追溯。



管底二维码用于整板集中扫描识别

激光蚀刻二维码、条形码、数字码多码识别

盒侧二维码、条形码标识

48格和96格SBS标准冻存管盒

特点优势

原料可靠 工艺先进

采用符合USP Class VI标准的原生原料,在十万级净化车间采用双色注塑一体成型工艺制造。

结构合理 密封性强

管体、管帽双色注塑工艺,管盖密封防漏更可靠。管底U型设计,有利于微量样本的充分利用。

激光打码 牢固可靠

管体、盒体均为激光打码:二维码、条形码、数字码不褪色、耐磨损、耐有机溶剂,清晰可读。

用于系统管理 可追溯性高

数字化识别使冻存样本的采集入库、取样、出库全流程监控,与HIS、LIS系统或生物样本库管理系统相联接,实现样本可检索、可追溯。

优良的生物相容性

经第三方实验室按照GB/T16886、ISO10993系列标准及相关医疗器械行业标准检测,冻存管无胚胎毒性、无遗传毒性,无热原。

无菌产品

经辐射灭菌,达到 10^{-6} 的无菌水平。

第三方检测报告

(注:仅列部分第三方检测报告,更多报告可联系客服索取。)



DNA残留/RNase/细菌内毒素
分析检测报告



体外鼠胚试验
检测报告



体外细胞毒性试验
检测报告




热原试验
检测报告



SBS标准2D冻存管

规格参数

96格外旋管 0.5mL、0.75mL、1.4mL

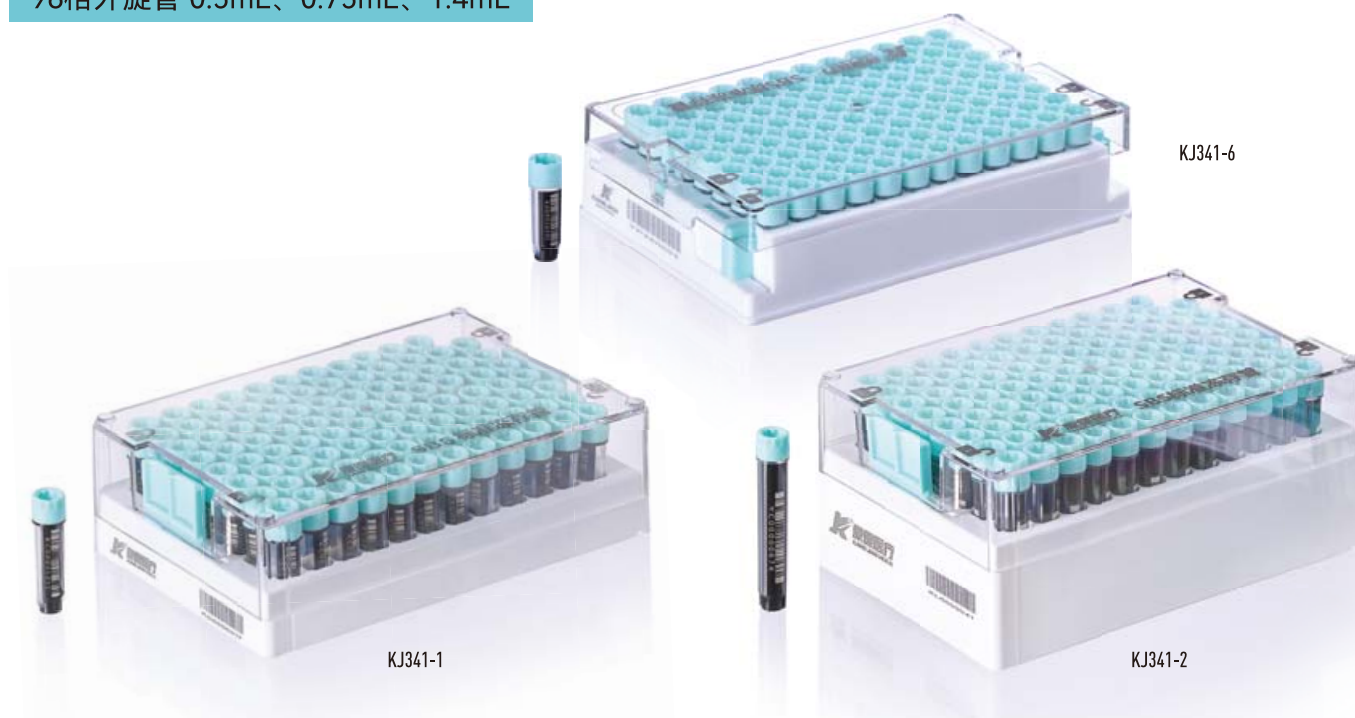

REF	目录 编号	单只 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ341-6		0.50mL	Ø8.9×29mm	127×85×32mm			96	48		105-0505
KJ341-1		0.75mL	Ø8.9×34mm	127×85×38mm	-196~121°C	管帽: 双色注塑 管体: 双色注塑	96	48	辐射灭菌 管体 管底 盒身多码识别 置于液氮气相中保存	105-0504
KJ341-2		1.4mL	Ø8.9×52mm	127×85×56.4mm			96	36		105-1004

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

96格内旋管 0.5mL、1.0mL



规格参数

REF	目录 编号	单只 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ341-3		0.5mL	Ø8.9×34mm	127×85×38mm	-196~121°C	管帽: 双色注塑 管体: 双色注塑	96	48	辐射灭菌 管体 管底 盒身多码识别 置于液氮气相中保存	105-0503
KJ341-4		1.0mL	Ø8.9×52mm	127×85×56.4mm			96	36		105-1003

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



SBS标准2D冻存管

规格参数

48格外旋管 1mL




规格参数

REF 目录 编号	单只 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ342-1	1mL	Ø13×31.5mm	127×85×38mm	-196~121℃	管帽: 双色注塑 管体: 双色注塑	48	48	辐射灭菌 管体 管底 盒身多码识别 置于液氮气相中保存	105-1005
KJ342-4	1mL	Ø13×20mm	127×85×24.5mm		管体: 双色注塑	48	48		105-1006

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

48格外旋管 2mL、5mL

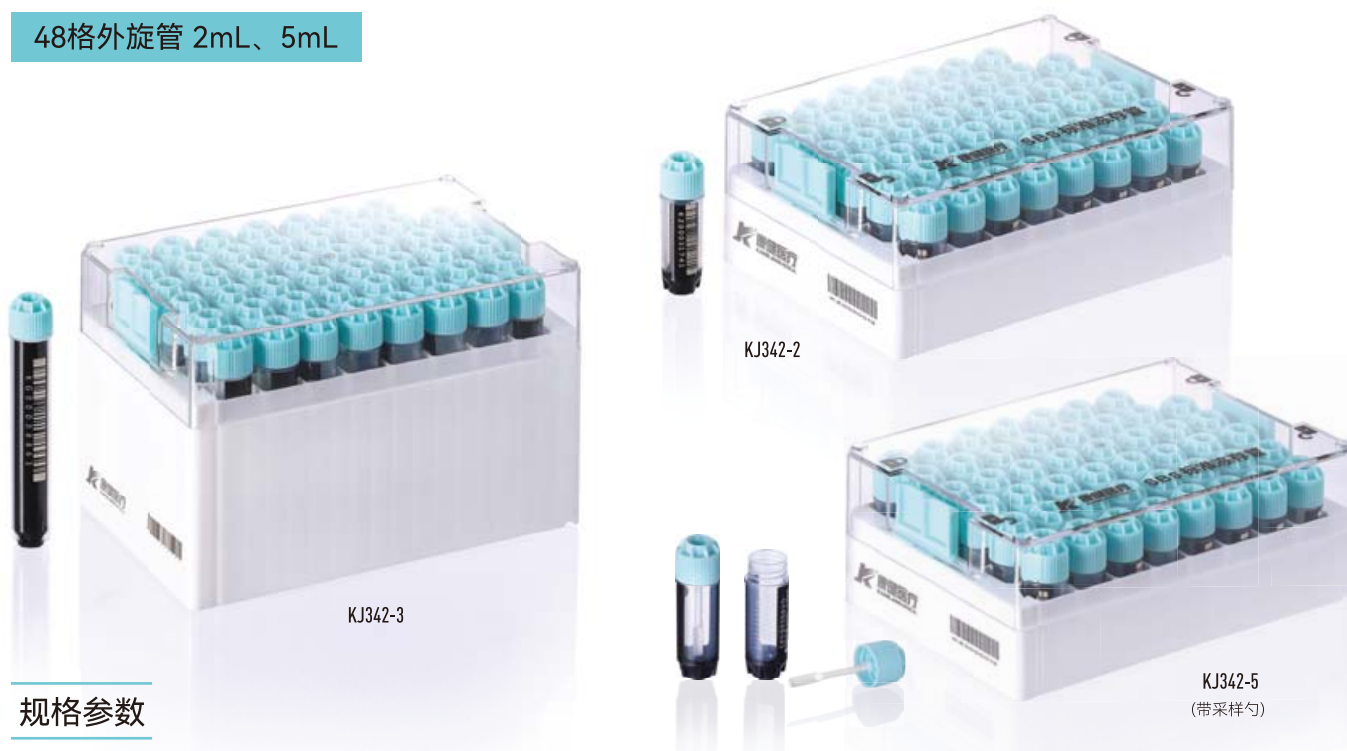

规格参数

REF 目录 编号	单只 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ342-3	5mL	Ø13×80mm	127×85×85mm	-196~121℃	管帽: 双色注塑	48	24	辐射灭菌 管体 管底 盒身多码识别 置于液氮气相中保存	105-5001
KJ342-2	2mL	Ø13×43mm	127×85×50mm		管体: 双色注塑	48	36		105-2001
KJ342-5	2mL	Ø13×43mm(带采样勺)	127×85×50mm			48	36		105-2002


* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



96格一体式弹性压盖垫

产品介绍

- ◎ 本品适配 96 格规格SBS冻存管盒，包括KANGJIAN®的0.5ml、1ml内旋管和0.5ml、0.75ml、1.4ml的外旋管。
- ◎ 管塞为TPE热塑性弹性体，常温下柔软有弹性，可迅速、有效地密封管内样品。
- ◎ 一张包含96个管塞的黑色承载片，一次性封闭整盒96只SBS冻存管，经按压密封后，可轻松移除黑色承载片，每管均被单独封闭。
- ◎ 本品为一次性使用品，可提供本色及多种不同配色，实现可视化颜色标识区分。
- ◎ 无DNase/RNase、无内毒素、无胚胎毒性、无细胞毒性，无热原。
- ◎ 经辐照灭菌，达到 10^{-6} 的无菌水平。

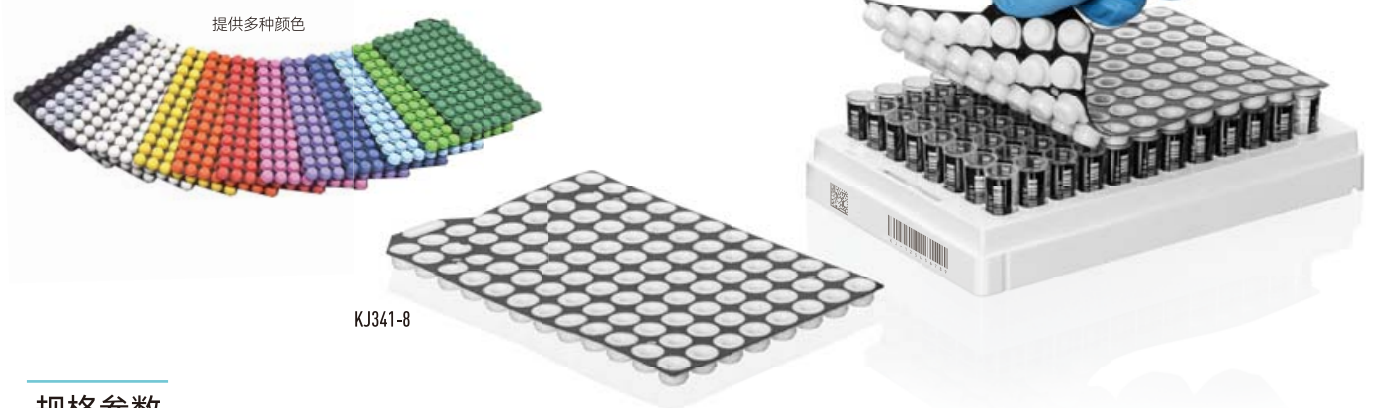

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	整片尺寸	耐受温度	片/盒
KJ341-8	TPE (热塑性弹性体)	114×72mm	-80~100°C (不可液氮存储)	50

96格SBS冻存管帽承载架

产品介绍

- ◎ 产品用于KANGJIAN®全自动旋盖机对96格SBS冻存管开盖后管帽的整盒放置，可承载0.5ml、1ml内旋管管帽和0.5ml、0.75ml、1.4ml的外旋管的管帽。
- ◎ 与冻存管分离的管帽在自动旋盖机内完成整盒96只管帽一次性置入承载架内，具有防止人为污染管帽，避免管内样本发生交叉污染，同时提高了试验人员的工作效率。
- ◎ 具有与SBS冻存盒相对应的A~H、1~12的字母和数字定位坐标，承载架侧面有唯一性条形码，防颠倒放置的倒角设计。
- ◎ 管帽承载架为非一次性使用品，经高温高压清洗消毒后可重复使用。



规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	尺寸	只/盒
KJ345	HIPS	85×127×17.3mm	50



三码合一冻存管

规格参数

100格盒装 5mL、2mL、1mL

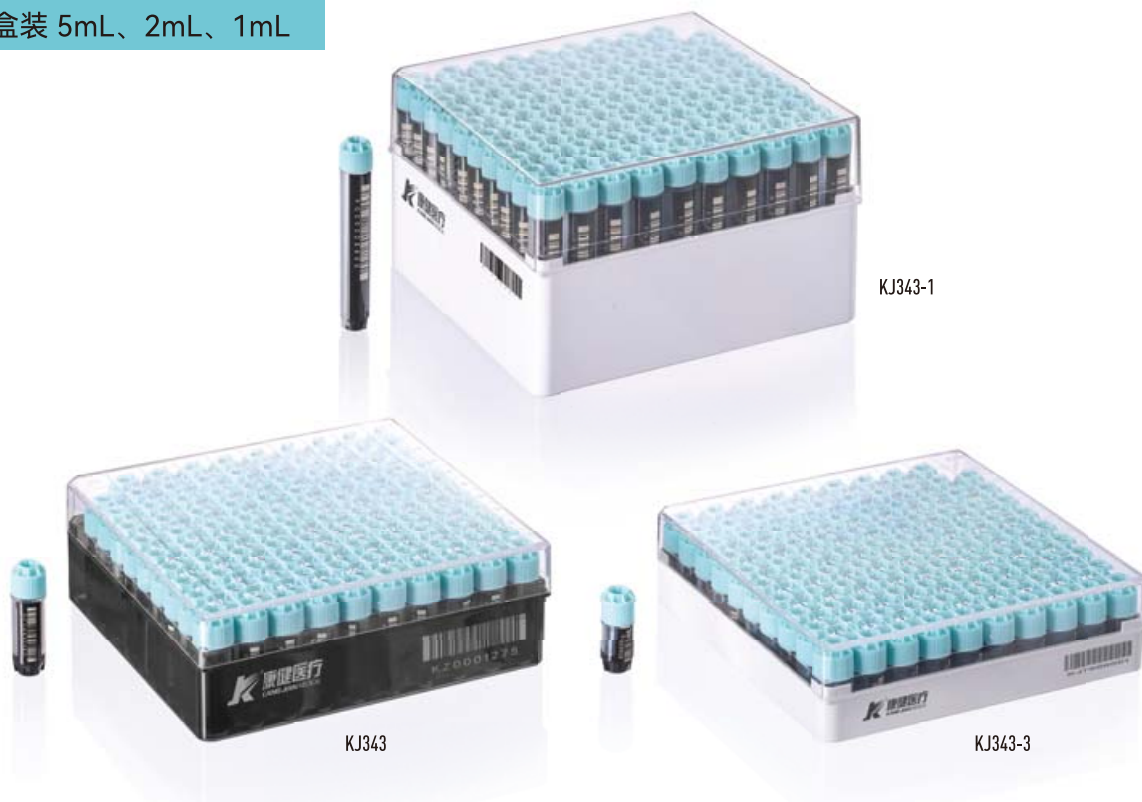

REF 目录 编号	规格 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ343-1	5mL	Ø13×80mm	133×133×85mm	-196~121℃	管帽: 双色注塑 管体: 双色注塑	100	600	管体/管底/盒身多码识别 置于液氮气相中保存	104-5001
KJ343	2mL	Ø13×43mm	133×133×47.4mm			100	1200		104-2001
KJ343-3	1mL	Ø13×31.5mm	133×133×36mm			100	1200		104-1001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。
* 灭菌方式可定制。

196格盒装外旋0.75mL或内旋0.5mL



REF 目录 编号	规格 容量	单只* 尺寸	整盒* 尺寸	耐受 温度	MAT 工艺 材质	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ343-2	0.75mL(外旋管)	Ø8.9×34mm	132×132×36.5mm	-196~121℃	管帽: 双色注塑 管体: 双色注塑	196	2352	管体/管底/盒身多码识别 置于液氮气相中保存	104-0751
KJ343-5	0.5mL(内旋管)	Ø8.9×34mm	132×132×36.5mm			196	2352		104-0503

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。
* 灭菌方式可定制。



二维码冻存管

产品介绍

在高校实验室、医院样本库、科研和检测中心相继建立了众多生物样本库。为适应样本库的安全有序、数字化管理，杜绝人为标识管体而产生的差错，提高工作效率，具有二维码数字标识的冻存管是您的理想选择！

- ◎ 采用符合USP Class VI标准的原料，在10万级净化车间生产。有0.5mL、0.75mL、1.5mL、2mL、5mL等容量规格。
- ◎ 产品具有良好的生物相容性，经第三方实验室按照GB/T16886、ISO10993系列标准及相关医疗器械行业标准检测，无DNase/RNase、无胚胎毒性、无遗传毒性，无热原。
- ◎ 管体与管底升级为双色注塑工艺。管体带注塑刻度、白色书写区、条码区，管盖多色可选。
- ◎ 冻存管多码合一：管底二维码+书写区条形码+数字编号。每支管体识别信息具有唯一性。二维码和条形码经激光蚀刻，不剥落，稳定性强。
- ◎ 管体黑色刻度印刷清晰，大面积白色书写区，管盖多色可选。
- ◎ 冻存管盒盒底每个管底位置镂空设计，专用于台式扫码仪进行集中管底二维码扫描。冻存管盒侧面的唯一性条码方便分类查询和集中归类。
- ◎ 请务必按实验室操作规程规范操作，按规操作的冻存管无爆裂、密封好、不泄漏。特别提醒：本品只能储存于液氮气相中(液氮上的气体状态中)保存，切勿将冻存管直接浸入液氮内保存，防止管内气压急胀造成事故。
- ◎ 辐射灭菌，达到 10^{-6} 的无菌水平。




双色注塑的管底，激光蚀刻二维码




管体条形码+数字编号



100只装冻存盒条形码

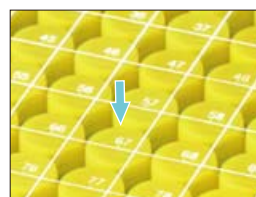

盒盖清晰的区位定格

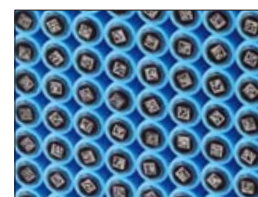

盒底镂空，专用于台式扫码仪集中扫描管底二维码

规格参数

100格盒装 0.5mL、1.5mL



KJ340-3



KJ340-5

REF	目录 编号	规格 容量	MAT 工艺 材质	耐受 温度	外观 尺寸*	只/袋(盒)	只/内盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ340-1		0.5mL	双色注塑	-196~-121°C	管Ø12.3×31.3	25(袋装)	500	1000	管体/管底/盒身多码合一识别， 置于液氮气相中保存	104-0501
KJ340-3		0.5mL	盒盖:PC 底架:PP 管:双色注塑		盒133×133×36	100(盒装)	600	1200		104-0502
KJ340-2		1.5mL	双色注塑		管Ø12.3×46.6	25(袋装)	500	1000		104-1501
KJ340-5		1.5mL	盒盖:PC 底架:PP 管:双色注塑		盒133×133×51.4	100(盒装)	600	1200		104-1503

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



外旋式冻存管

产品介绍

- ◎ 冻存管使用符合USP Class VI 标准的聚丙烯(PP)为原料, 是符合ISO10993生物相容性标准的专用于储存生物样本的一次性耗材。
- ◎ 在液氮气相中(即液氮上方的气体状态环境中), 耐低温至-196℃。
- ◎ 外旋式冻存管的外旋螺纹帽可以降低样品污染机率。
- ◎ 管帽升级为双色注塑工艺。按标准操作时, 无爆裂。即使在最低保存温度下也能保证良好的密封性, 确保样本和实验人员的安全。
- ◎ 管帽纹路易于旋转盖子。管帽配有多色可嵌入式色标, 易于识别。
- ◎ 管帽与管身都采用相同批次和型号的PP原料生产, 相同的膨胀系数确保产品密封性能稳定。
- ◎ 条形码和双数字码用于样本数字化管理和方便识别, 大面积的标记区域方便标记。
- ◎ 弧形底部设计, 便于集中处理液体, 减少残留。
- ◎ 根据不同需求, 有普通级和PCR级。PCR级产品在净化车间生产, 无RNase、无DNase、无内毒素、无热原。辐射灭菌。




条形码+数字码, 方便系统化管理。



管帽双色注塑工艺, 密封防漏更可靠。



管帽嵌入式色标。

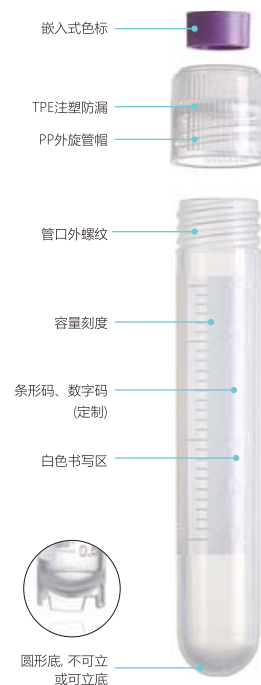

规格参数



REF 目录编号	容量	MAT 工艺材质	耐受温度	外观尺寸 *	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ334-6	1.0mL	管体:PP 管帽:双色注塑	-196~121℃	Ø13.8×41.3mm	500	5000	冻存管只能储存于液化面上方的气相中(如液氮上的气体状态中)保存, 切勿将冻存管直接浸入液化面下方的液体中(如氮气的液体状态, 即液氮中)保存, 防止管内气压急胀造成事故。	102-1001
KJ334-1	1.8mL			Ø13.8×46.5mm	500	5000		102-1801
KJ334	1.8mL			Ø13.8×47.5mm	500	5000		102-1802
KJ334-5	3.6mL			Ø13.8×75.3mm	200	2000		102-3501
KJ334-4	3.6mL			Ø13.8×77mm	200	2000		102-3502
KJ334-3	4.5mL			Ø13.8×90mm	200	2000		102-4501
KJ334-2	4.5mL			Ø13.8×90.5mm	200	2000		102-4502

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

* 根据需求可定制一种灭菌方式: EO、辐射或不灭菌。



内旋式冻存管

产品介绍

- ◎ 冻存管采用医疗级聚丙烯(PP)为原料，是专用于储存生物样本的一次性实验室耗材。
- ◎ 内旋式用于冻存生物样本密封性更强。在液氮气相中冻存样品而设计，耐低温至-196℃。
- ◎ 管帽升级为双色注塑工艺。确保样本和实验人员的安全。
- ◎ 管帽纹路易于旋转盖子。管帽配有多色可嵌入式色标，易于识别。
- ◎ 管帽与管身都采用相同批次和型号的PP原料生产，相同的膨胀系数确保产品密封性能稳定。
- ◎ 条形码和双数字码用于样本数字化管理和方便识别，大面积的标记区域方便标记。
- ◎ 弧形底部设计，便于集中处理液体，减少残留。
- ◎ 请务必按实验室操作规程规范操作，按标准操作时，无爆裂。
- ◎ 根据不同要求，有普通级和PCR级。PCR级产品在净化车间生产，无RNase、无DNase、无内毒素、无热原。辐射灭菌。




条形码+数字码，方便科学管理。




管帽双色注塑工艺，密封防漏更可靠。



管帽嵌入式色标。

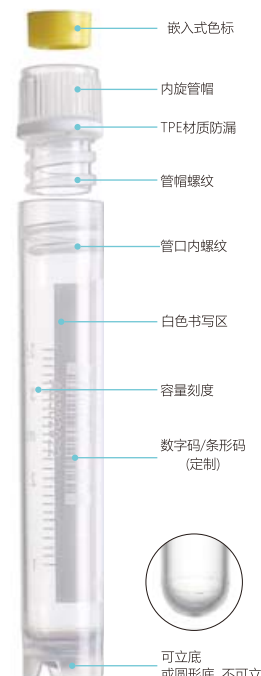

规格参数

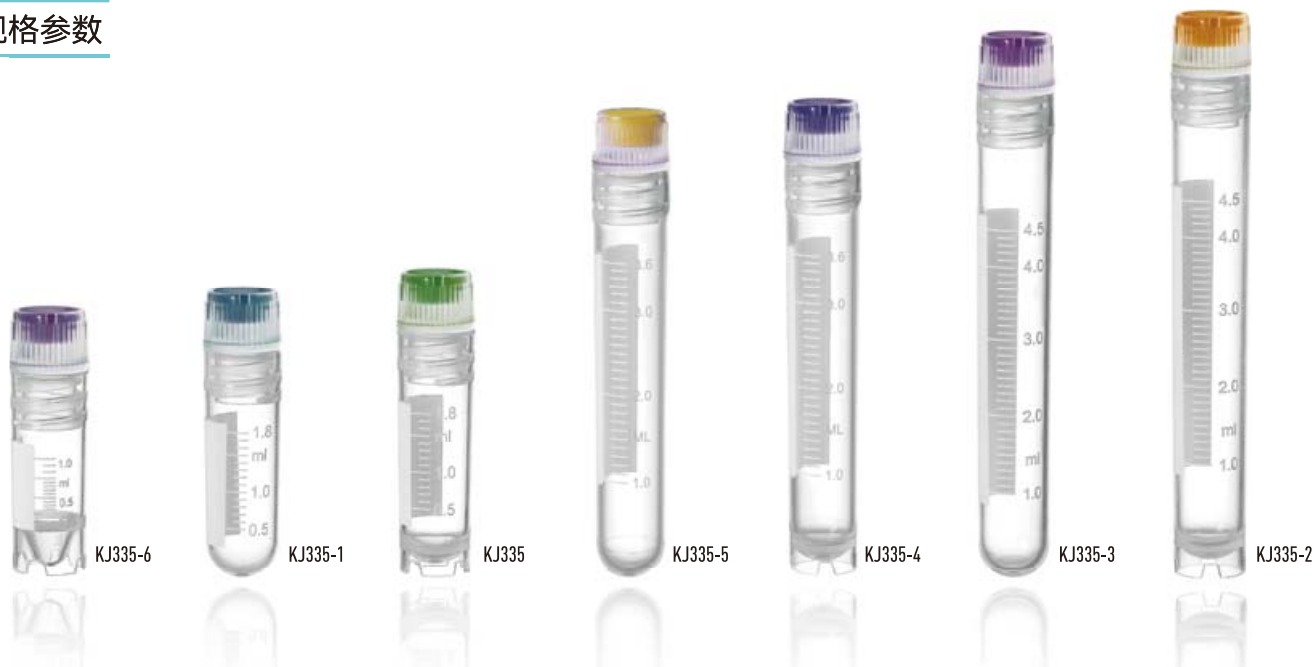

目录 编号	容量	MAT 工艺 材质	耐受 温度	外观 尺寸*	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ335-6	1.0mL	管体:PP 管帽:双色注塑	-196~121℃	Ø12.7×40mm	500	5000	冻存管只能储存于液化面上方的气相中(如液氮上的气体状态中)保存，切勿将冻存管直接浸入液化面下方的液体中(如氮气的液体状态，即液氮中)保存，防止管内气压急胀造成事故。	103-1001
KJ335-1	1.8mL			Ø12.7×48mm	500	5000		103-1801
KJ335	1.8mL			Ø12.7×48mm	500	5000		103-1802
KJ335-5	3.6mL			Ø12.7×76mm	200	2000		103-3501
KJ335-4	3.6mL			Ø12.7×77mm	200	2000		103-3502
KJ335-3	4.5mL			Ø12.7×90mm	200	2000		103-4501
KJ335-2	4.5mL			Ø12.7×92mm	200	2000		103-4502

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。



冷冻储存管

产品介绍

常用于高通量实验，如基因组研究、药物筛选和样品准备，细胞和分子生物学实验，PCR 实验及多样本的基因扩增，DNA/RNA 提取，可以在一次实验中处理大量的样本，提高实验效率。还可用于液体样本的运输和低温储存，保持样本的稳定性和避免交叉污染。


◎ 1.1mL冷冻储存管采用符合USP Class VI标准的聚丙烯(PP)原料生产，96孔盒架尺寸符合ANSI-SBS标准，可适用多通道移液器和 SBS 标准载台的自动化液体工作站。

◎ 产品具有良好的生物相容性，无DNase/RNase、无胚胎毒性、无遗传(基因)毒性，无热原。根据用途可选择辐射灭菌(达到 10^{-6} 的无菌水平)。


◎ KANGJIAN储存管有单管、8联管和8联管帽。

◎ 盒架底部和侧壁镂空设计，热传导性好，并且支持直接带着盒架放入水浴锅进行水浴。

◎ 耐受低温 -80℃储存，并耐受120℃高温、高压、湿热环境。

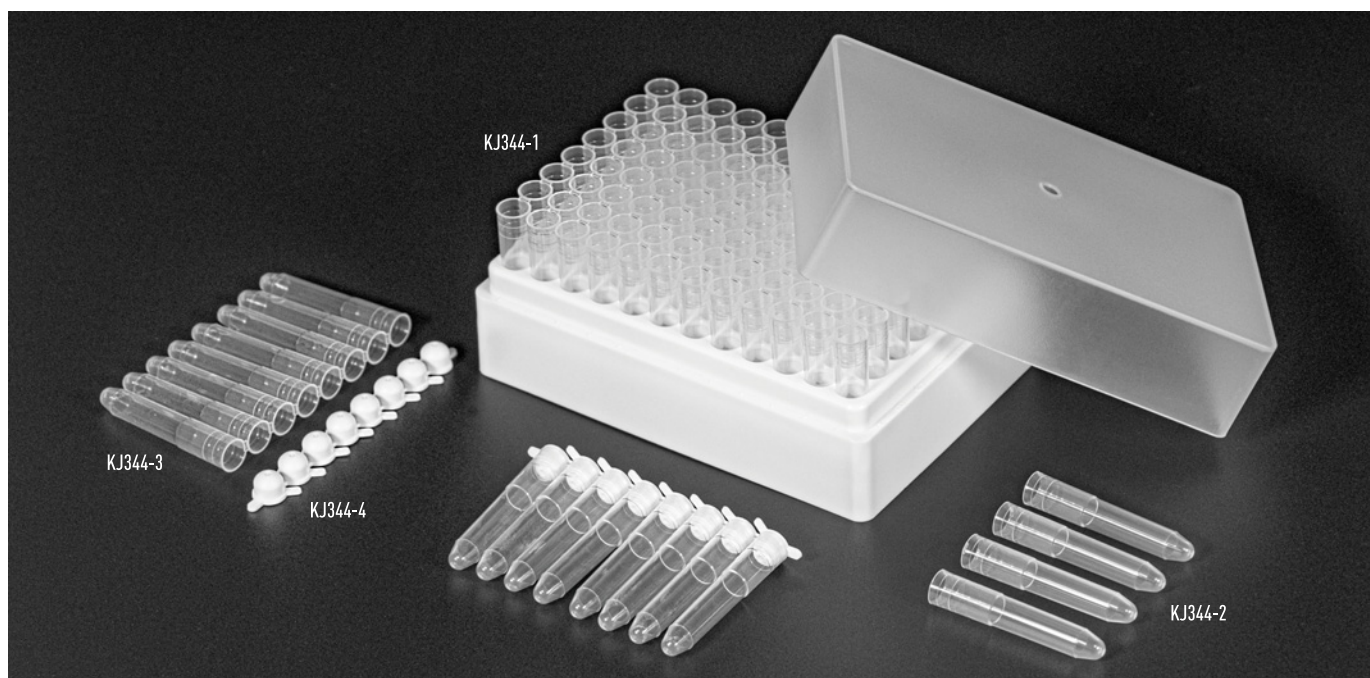

规格参数

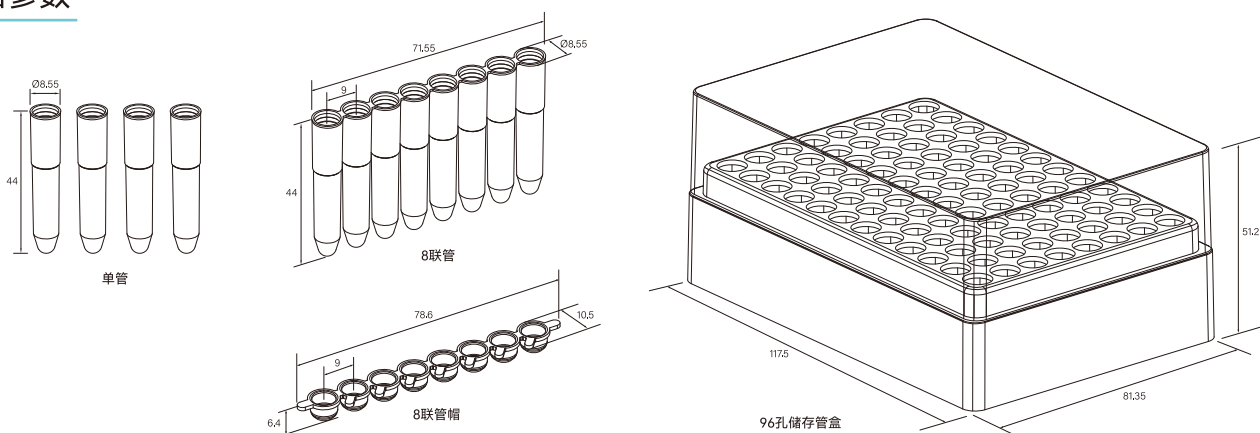

REF 目录 编号	规格	MAT 材质	耐受 温度	只/盒	只/袋	盒/箱	袋/箱	备注说明
KJ344	单管 1.1mL	PP	-80℃ ~ +121℃	96	—	36	—	96孔储存管盒装
KJ344-2	单管 1.1mL	PP		—	960	—	10	自封袋装
KJ344-1	8联管 1.1mL×8	PP		12	—	36	—	96孔储存管盒装
KJ344-3	8联管 1.1mL×8	PP		—	120	—	10	自封袋装
KJ344-4	8联盖	TPE		—	120	—	10	自封袋装



冷冻管

产品介绍


- ◎ KANGJIAN冷冻管采用符合USP Class VI 标准的聚丙烯(PP)为原料, 产品符合ISO10993生物相容性标准的专用于储存生物样本的一次性耗材。
- ◎ 管帽和管体防滑纹路易于旋盖。
- ◎ 管帽升级为双色注塑工艺, 比O型密封垫圈密封防漏更可靠。
- ◎ 冷冻管适用于超低温冰箱(不建议在液氮气相中保存), 耐受温度: -86~121°C, 可反复冻融。
- ◎ 可定制不同颜色的管帽。
- ◎ 根据不同要求, 有普通级和PCR级。PCR级产品无DNase、无RNase、无内毒素和外源DNA。经辐射灭菌, 无菌。



管帽和管身滚花设计, 容易单手操作。



管帽采用双色注塑工艺, 密封防漏更可靠。

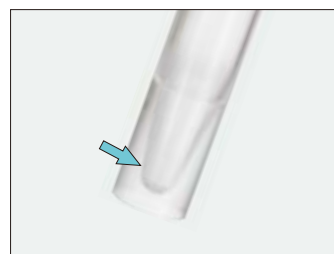

底部尖底或锥形, 利于微量样品集中处理。



规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 管体 材质	MAT 管帽 工艺	耐受 温度	外观* 尺寸	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ320-3	0.5mL	PP	双色注塑	-86~121°C	Ø13×46.5mm	500	5000	本系列冷冻管建议用在超低温冰箱(最低-86°C)内保存样品。	101-0501
KJ320-8	1.5mL				Ø13×46.5mm	500	5000		101-1501
KJ320-1	1.5mL				Ø13×46.5mm	500	5000		101-1502
KJ320-9	2.0mL				Ø13×46.5mm	500	5000		101-2001
KJ320-2	2.0mL				Ø13×46.5mm	500	5000		101-2002
KJ320-10	2.0mL				Ø13×49mm	500	5000		101-2003
KJ318	1.8mL	PP	双色注塑	-86~121°C	Ø14×45mm	500	5000		101-1801
KJ317	5.0mL				Ø20.4×58.6mm	200	2000		101-5001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

* 根据需要可定制一种灭菌方式: EO、辐射或不灭菌。



冻存管盒(架)

产品介绍

- ◎ 用于规整存放冻存管的盒体，适配超低温冰箱及液氮环境，防止管体倾倒、样品污染，便于批量标记与存取。
- ◎ 产品材质通常有：PP、PC、ABS或纸质/硬纸板，耐低温存放。塑料材质的可高压灭菌、抗化学腐蚀，经清理后可重复使用，盒盖透明，兼顾强度与可视性，并带有字母和数字网格编号，方便样本查找。




规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	耐受 温度	外观* 尺寸	只/箱	备注说明	产品编码
KJ319-11	100格	PC	-196~121℃	133×133×53mm	50	透明紫或透明蓝	106-0001
KJ319-15	81格	PC	-196~121℃	133×133×53mm	50		106-0002
KJ319-16	100格	PP	-196~121℃	151×151×56.5mm	50		106-0003
KJ319-13	100格	纸质盒+PP隔条	-196~121℃	130×130×50mm	50		106-0004
KJ319-14	81格	纸质盒+纸质隔档	-196~121℃	130×130×50mm	50		106-0005
KJ319-8	40孔	ABS	-80~121℃	216×100×26mm	50	白色或浅蓝色	106-0006

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。

PCR Strip Tube & Plate

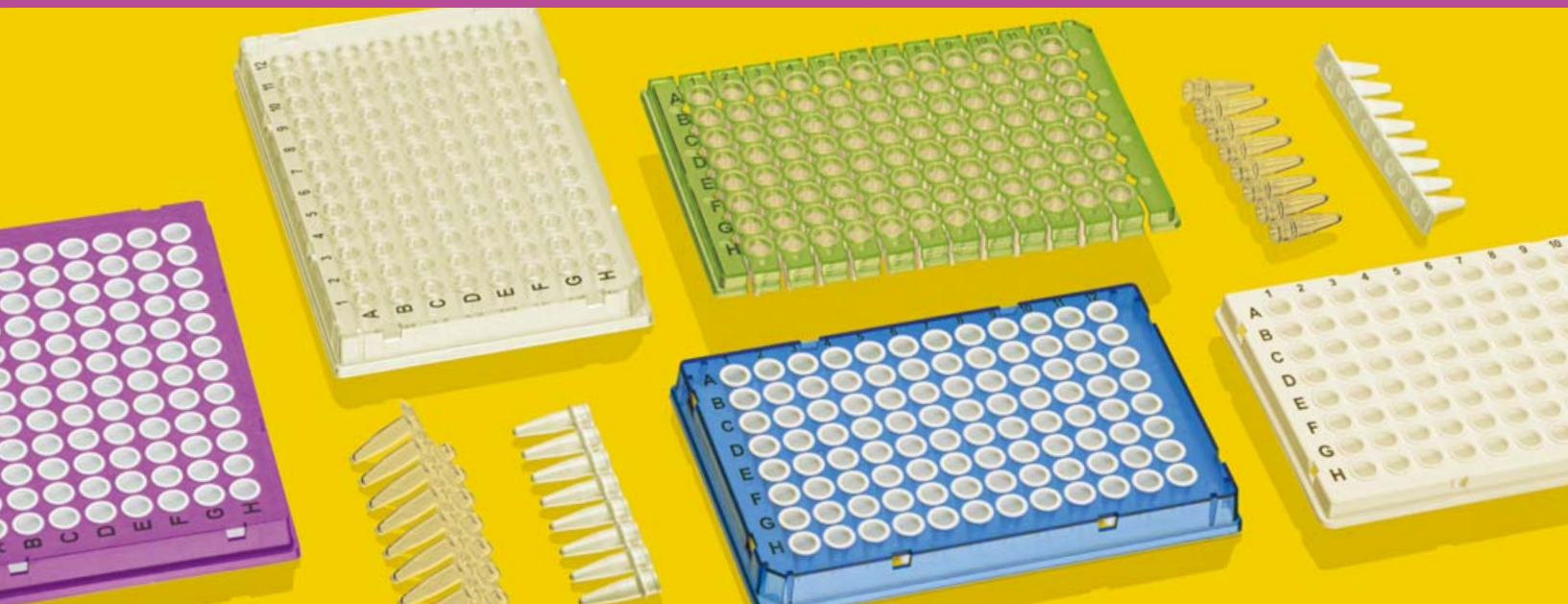

PCR反应管(板)

- | | |
|--------------|-------|
| → PCR反应管 | 75-76 |
| → PCR反应板 | 77-78 |
| → 粘性封板膜与封膜刮板 | 79 |
| → 压盖器与开盖器 | 79 |





PCR反应管

产品介绍


PCR 反应管是分子生物学中聚合酶链式反应实验专用的容器类耗材。采用符合 USP Class VI 医用塑料生物安全性标准的高纯度聚丙烯 PP 为原料，在符合 ISO 13485 医疗器械质量管理体系及 GMP 规范的十万级净化车间生产制造，经第三方专业机构检测，符合 ISO10993 系列标准的生物相容性要求，管体无 PCR 抑制剂、无细胞毒性、无致敏性、无内毒素、无 DNase/RNase、无热原。

PCR单管

- ◎ 用于适合单反应或低通量实验，具有操作灵活的优点，可根据实验需求单独设置反应条件。
- ◎ 薄壁设计，管壁厚度在0.1~0.2mm，确保热量快速、均匀传递。
- ◎ 可耐受 PCR 仪的极端温度(-80℃~105℃)，反复热循环(25~40 次)后无变形。
- ◎ 管盖开合舒适，密封性良好，防止污染，反应体积挥发小于3‰。

PCR 8联管

- ◎ 8 联管一体设计，实现样本批量处理，兼顾操作效率与实验一致性。
- ◎ 薄壁设计，管壁厚度在0.1~0.2mm，确保热量快速、均匀传递。
- ◎ 可耐受 PCR 仪的极端温度(-80℃~105℃)，反复热循环(25~40 次)后无变形。

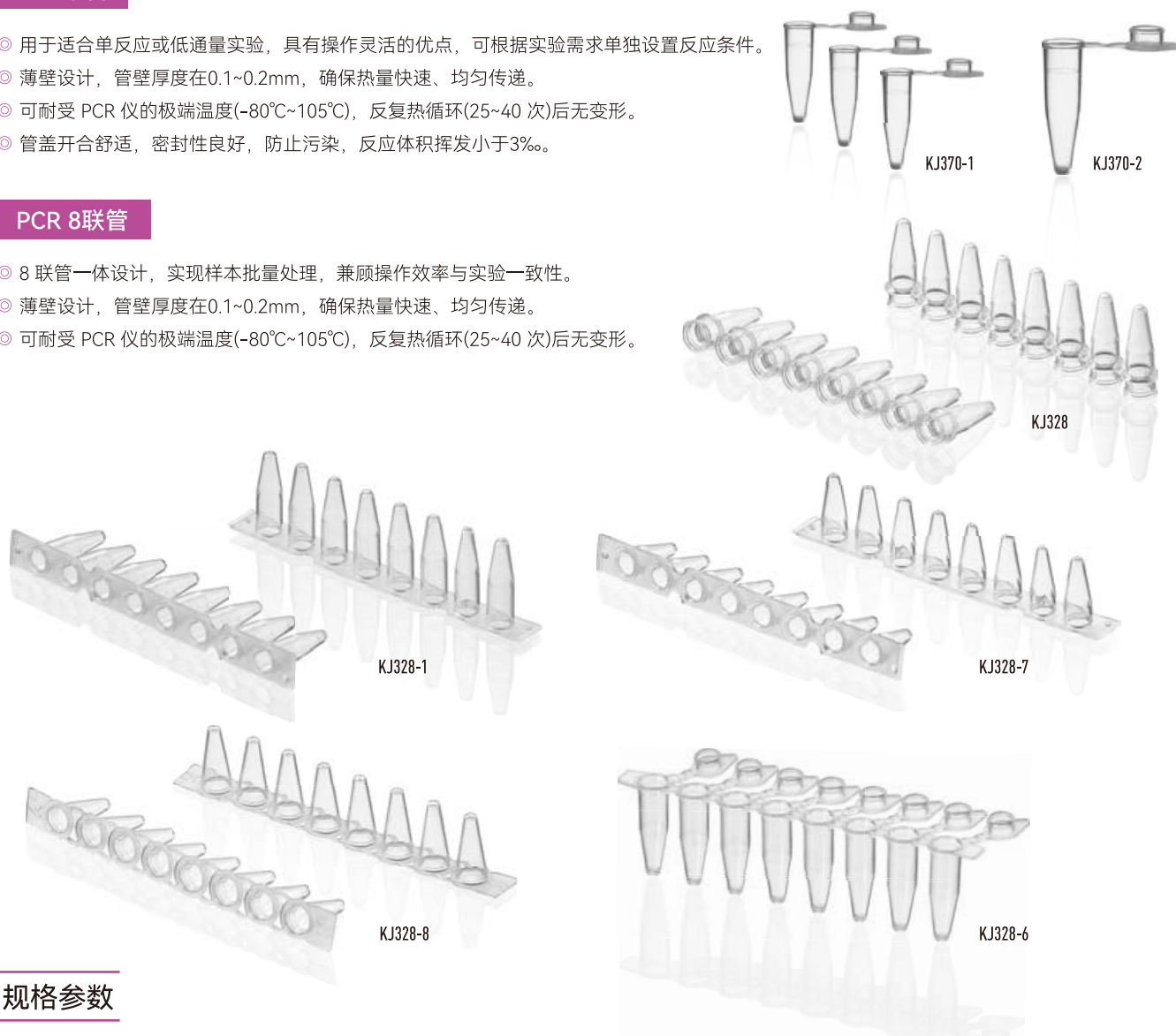

规格参数


REF 目录 编号	MAT 材质	容量	只/袋	只/内盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ370-1	PP	0.2ml	1000	-	50000	薄壁透明	111-0101
KJ370-2	PP	0.5ml	1000	-	20000	薄壁透明	111-0102
KJ328	PP	0.2ml×8联	-	125	1250	薄壁透明，8联可拆	111-0801
KJ328-1	PP	0.2ml×8联	-	125	1250	薄壁透明，条形8联管，不可拆	111-0802
KJ328-7	PP	0.1ml×8联	-	125	1250	薄壁透明，条形8联管，不可拆	111-0808
KJ328-8	PP	0.1ml×8联	-	125	1250	薄壁透明，8联可拆	111-0809
KJ328-6	PP	0.2ml×8联	-	125	1250	薄壁透明，8联可拆，联体盖	111-0803



PCR反应管

qPCR 8联管

- ◎ qPCR 管是为荧光定量 PCR实验用白色PCR管，用于需要核酸定量检测、基因表达分析、病原体精准筛查等。
- ◎ 白色管身的高反射特性，有效提升信号采集效率，同时能有效阻隔外部杂光进入管内，减少杂光对荧光信号的干扰。
- ◎ 薄壁设计，管壁厚度在0.1~0.2mm，确保热量快速、均匀传递。
- ◎ 可耐受 温度-80℃~105℃，反复热循环(25~40 次)后无变形。

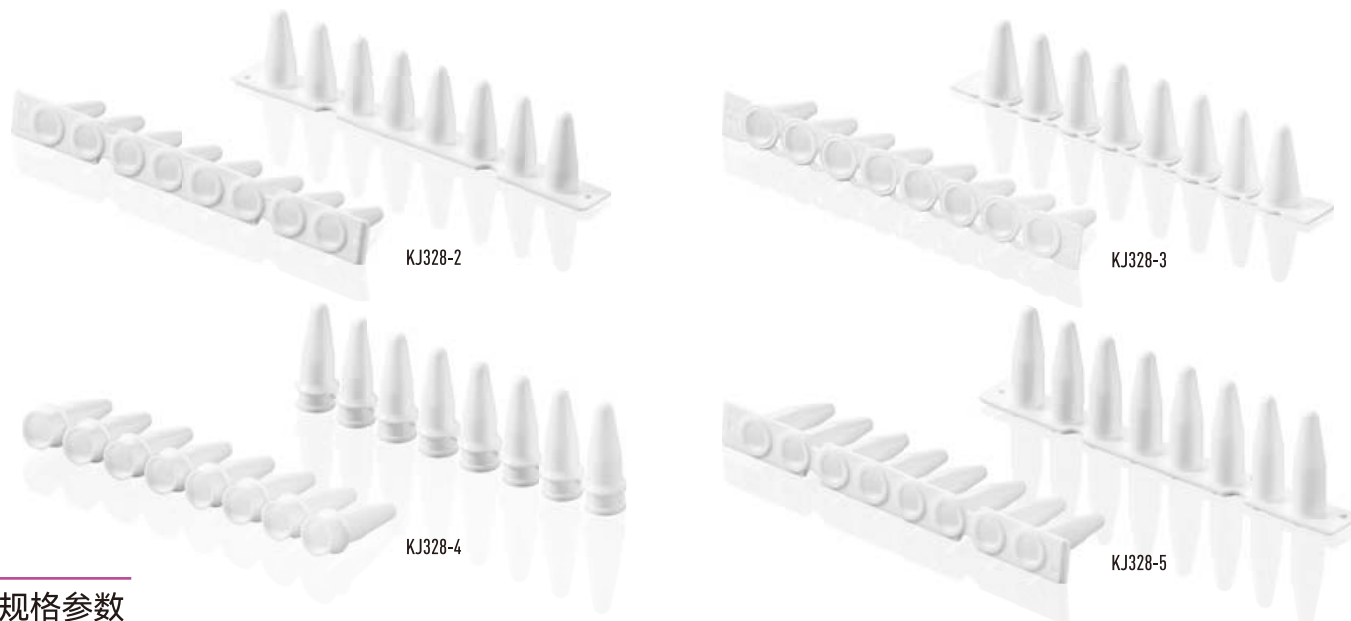


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ328-2	PP	0.1ml×8联	125	1250	条形不可拆	111-0804
KJ328-3	PP	0.1ml×8联	125	1250	可拆	111-0805
KJ328-4	PP	0.2ml×8联	125	1250	可拆	111-0806
KJ328-5	PP	0.2ml×8联	125	1250	条形不可拆	111-0807

PCR 8联管盖

- ◎ PCR 8联管盖分为光学平盖和凸盖，可用于 0.1mL 和 0.2mL 多联管的密封，避免实验过程中液体蒸发导致实验失败。
- ◎ 平盖型：顶部平整且透明，适配从管盖上方采集荧光信号的PCR 仪，信号穿透无衰减，无折射干扰。
- ◎ 凸盖型：弧形顶部更有利于凸盖内壁蒸汽冷凝后回流管内，保障实验结果准确。PCR实验时适合从管体侧壁采集荧光信号。
- ◎ 与8联管配合使用，密封性良好，防止污染，反应体积挥发小于3‰。

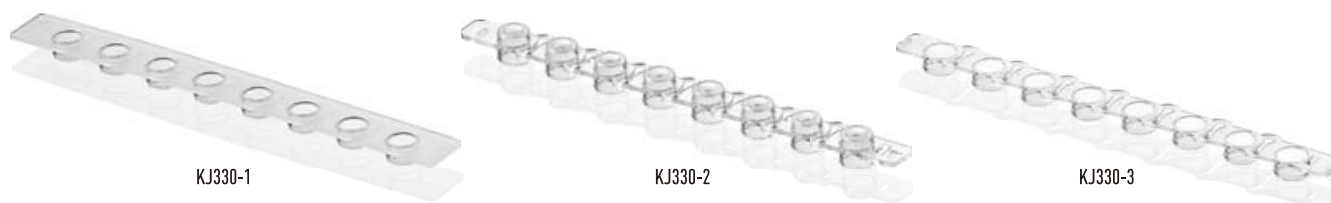

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ330-1	PP	8联盖	125	1250	光学平盖，条形不可拆	112-0801
KJ330-2	PP	8联盖	125	1250	凸形盖，可拆	112-0802
KJ330-3	PP	8联盖	125	1250	光学平盖，可拆	112-0803



PCR反应板


产品介绍

PCR反应板是用于高通量PCR实验，以多孔板状设计实现批量反应，兼容自动化液体处理系统与主流PCR仪，核心解决高通量样本的扩增效率与数据一致性问题。遵循ANSI/SBS标准尺寸，满足高通量实验的全程自动化的要求。

PCR反应板采用符合USP Class VI 医用塑料生物安全性标准的高纯度聚丙烯PP为原料，在符合 ISO 13485 医疗器械质量管理体系及 GMP 规范的十万级净化车间生产制造，经第三方专业机构检测，符合ISO10993系列标准的生物相容性要求，管体无PCR抑制剂、无细胞毒性、无致敏性、无内毒素、无 DNase/RNase、无热原。

全裙边PCR板

- ◎ 双色注塑工艺：聚碳酸酯框架和聚丙烯管孔，框架更坚硬，即使在热循环后仍保持不变形，使其更适合与自动化系统配合使用。
- ◎ 壁厚均匀的薄孔壁可实现高效且一致性的热传递。
- ◎ 每个孔周围凸起的边缘设计可优化封板膜密封以防止蒸发。
- ◎ 边框8个限位孔有助于进行板定位和从热循环仪模块上拆除。
- ◎ 根据需求可提供侧边条形码定制。

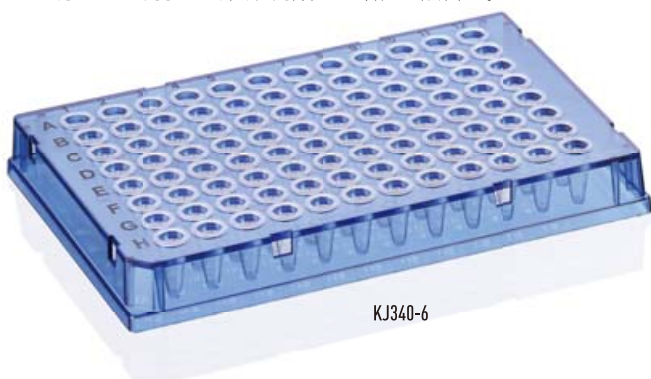
**KJ340-6****KJ340-7**

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	工作容量	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ340-6	双色注塑：框:PC+透明管:PP	0.1ml×96	10	50	透明管+透明/有色/白色框	113-96111
KJ340-7	双色注塑：框:PC+白色管:PP	0.1ml×96	10	50	白色管+透明/有色/白色框	113-96112

半裙边PCR板

- ◎ 半裙边PCR反应板可兼容大多数主要的热循环仪，包括ABI平台和测序仪。
- ◎ 半裙边设计增加板体强度，并支持侧边标注或粘贴条形码。
- ◎ 壁厚均匀的薄孔壁可实现高效且一致性的热传递。
- ◎ 每个孔周围凸起的边缘设计可优化封板膜密封以防止蒸发。
- ◎ 有0.1mL和0.2mL两种规格的管孔。

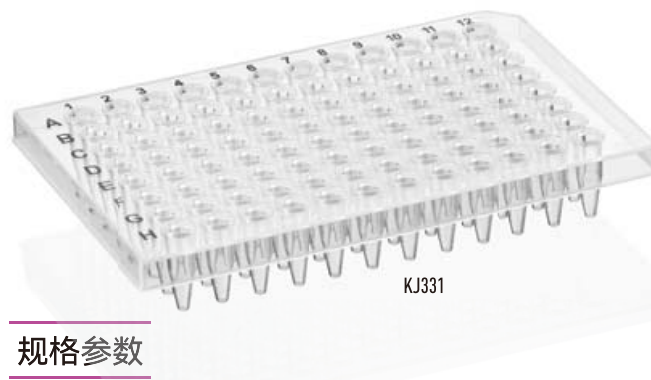**KJ331****KJ331-1**

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	工作容量	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ331	PP	0.2ml×96	10	50	透明	113-96221
KJ331-1	PP	0.1ml×96	10	50	白色	113-96211



PCR反应板

升裙边PCR板

- ◎ 边缘升高设计，与赛默飞PCR仪适配。半裙边可进行标记和粘贴条形码。
- ◎ 壁厚均匀的薄孔壁可实现高效且一致性的热传递。
- ◎ 有0.1mL和0.2mL两种规格的管孔。
- ◎ 每个孔周围凸起的边缘设计可优化封板膜密封以防止蒸发。



KJ331-2




KJ331-3

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	工作容量	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ331-2	PP	0.1ml×96	10	50	兼容赛默飞Applied Biosystems PCR仪	113-96212
KJ331-3	PP	0.2ml×96	10	50	兼容赛默飞Applied Biosystems PCR仪	113-96222

无裙边PCR板


- ◎ 无裙边设计，适配市场上主流标准模块的PCR仪。
- ◎ 有0.1mL和0.2mL两种规格的管孔，透明孔底便于样本观察。
- ◎ 可通过封板膜和多联光学平盖或多联凸盖进行密封。
- ◎ 提供多种颜色板体可选，可选透明或黑色字母数字标识。

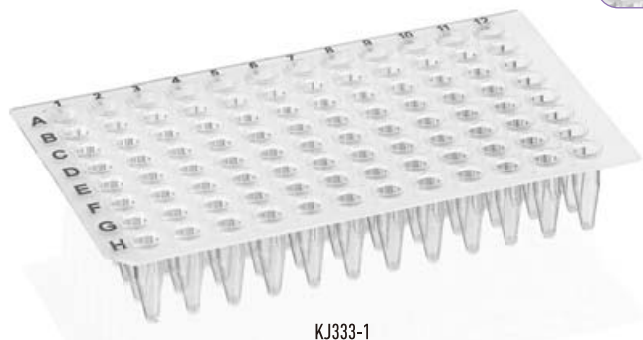

KJ333-1

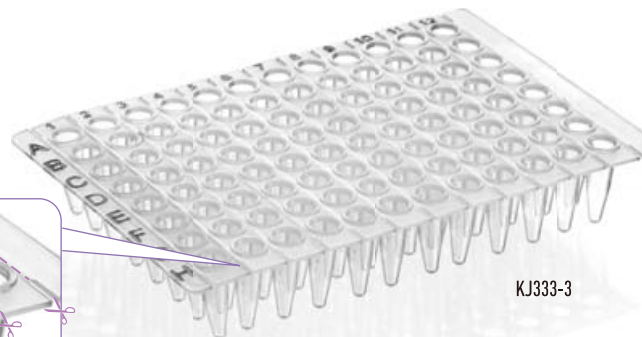

KJ333-3

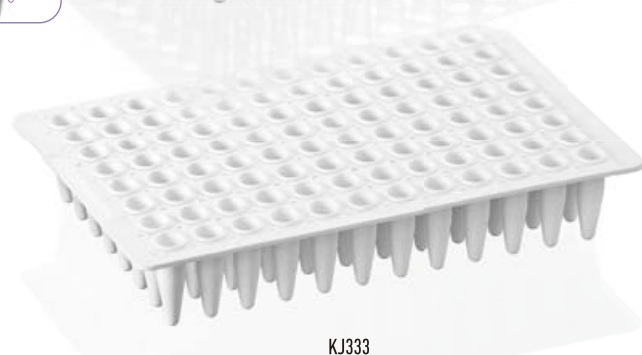

KJ333

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	工作容量	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ333-3	PP	0.2ml×8联×12	10	50	八联可拆	113-96331
KJ333-1	PP	0.1ml×96	10	50	透明或白色	113-96311
KJ333	PP	0.2ml×96	10	50	透明或白色	113-96322



粘性封板膜与封膜刮板

产品介绍

粘性封板膜

- ◎ 有效的粘性密封，防止PCR 反应时样品蒸发。
- ◎ 可从PCR 板上揭取，无残留。
- ◎ 可通过透明膜观察样品。
- ◎ 无人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂污染。



KJ388-1

封膜刮板

- ◎ 用于PCR板封膜操作，使自封膜与孔口边缘充分接触，从而密封更严实。同时，圆润的刮板边缘设计对封板膜损伤小，避免可能的风险。
- ◎ 非一次性使用品，经清洗、灭菌消毒后可重复使用。



KJ388

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	尺寸	张/盒	备注说明	产品编码
KJ388-1		80×130mm	100	单位面粘性	114-101
KJ388	ABS	70×85mm	定制	非一次性用品	114-201

压盖器与开盖器

产品介绍

压盖器


- ◎ 用于PCR多联管盖密封的辅助工具，压盖严实，使用轻松快捷，密封管盖时避免对管内样品产生污染。本品通常为赠送的非卖品。
- ◎ 非一次性使用，经清洗、灭菌消毒后可重复使用。



KJ337

开盖器

- ◎ 用于PCR板上的8联管盖的开启的辅助工具，轻松开启管盖。本品通常为赠送的非卖品。
- ◎ 非一次性使用，经清洗、灭菌消毒后可重复使用。

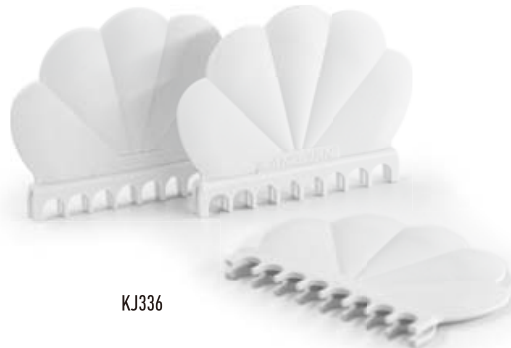

KJ336

Pipetting Consumables



移液处理系列

- | | |
|-----------|--------|
| → 移液器吸头 | 81-92 |
| → 一次性使用吸管 | 93-97 |
| → 血清移液管 | 98-101 |





PIPETTE TIPS



移液器吸头



移液器吸头

产品简介

- ◎ 吸头采用医疗级聚丙烯(PP)原料，采用先进的生产工艺制造，产品挺直，无弯曲变形，具有极高的品质和精准性。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性，完美适配于Gilson、TECAN、Eppendorf、Thermo (Finn)、Keeven、Hamilton、DragonLab等国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 根据不同要求，可选普通级和PCR级。在十万级净化车间生产，达PCR 洁净级，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。γ辐射灭菌。

特点介绍

一、疏水性滤芯阻隔气溶胶产生交叉污染


- ◎ 滤芯吸头具有阻隔气溶胶和生物分子，有效防止移液器被样品溶液所污染。同时滤芯层有效截留液滴和飞溅。

二、加长型吸头有效避免碰触容器内壁

- ◎ 加长型吸头具有细长型设计，当从15mL离心管、50mL锥形离心管、细胞培养瓶、深孔板和其他较深容器中移液或加液时，可避免触碰这些较深容器的内壁，减少交叉污染。
- ◎ 逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体。

三、超低吸附性内壁确保实验结果的准确

- ◎ 看不见的液体薄膜残留在吸头内壁，并随着吸头被丢弃，造成大量珍贵样品的浪费。尤其是对于敏感的 PCR 和实时定量 PCR 实验来说，低吸附表面可提高重复性并显著减少昂贵试剂的损耗。
- ◎ 康健医疗低吸附吸头内表面经涂层工艺处理，具有超疏水性，放液时，几乎无样本液体或极少残留在吸头内。使用这种吸头可最大限度提高珍贵样本的回收率，确保实验数据的准确。

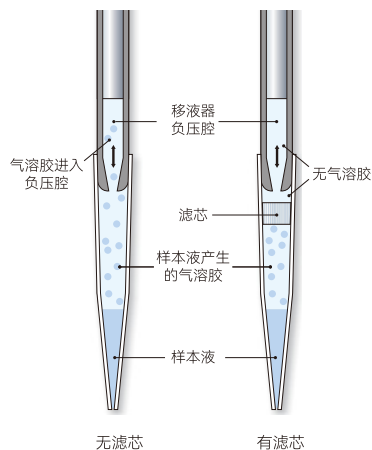


包装方式

吸头有多种包装方式：若干只自封袋装、专用吸头盒装和多层叠装。





移液器吸头

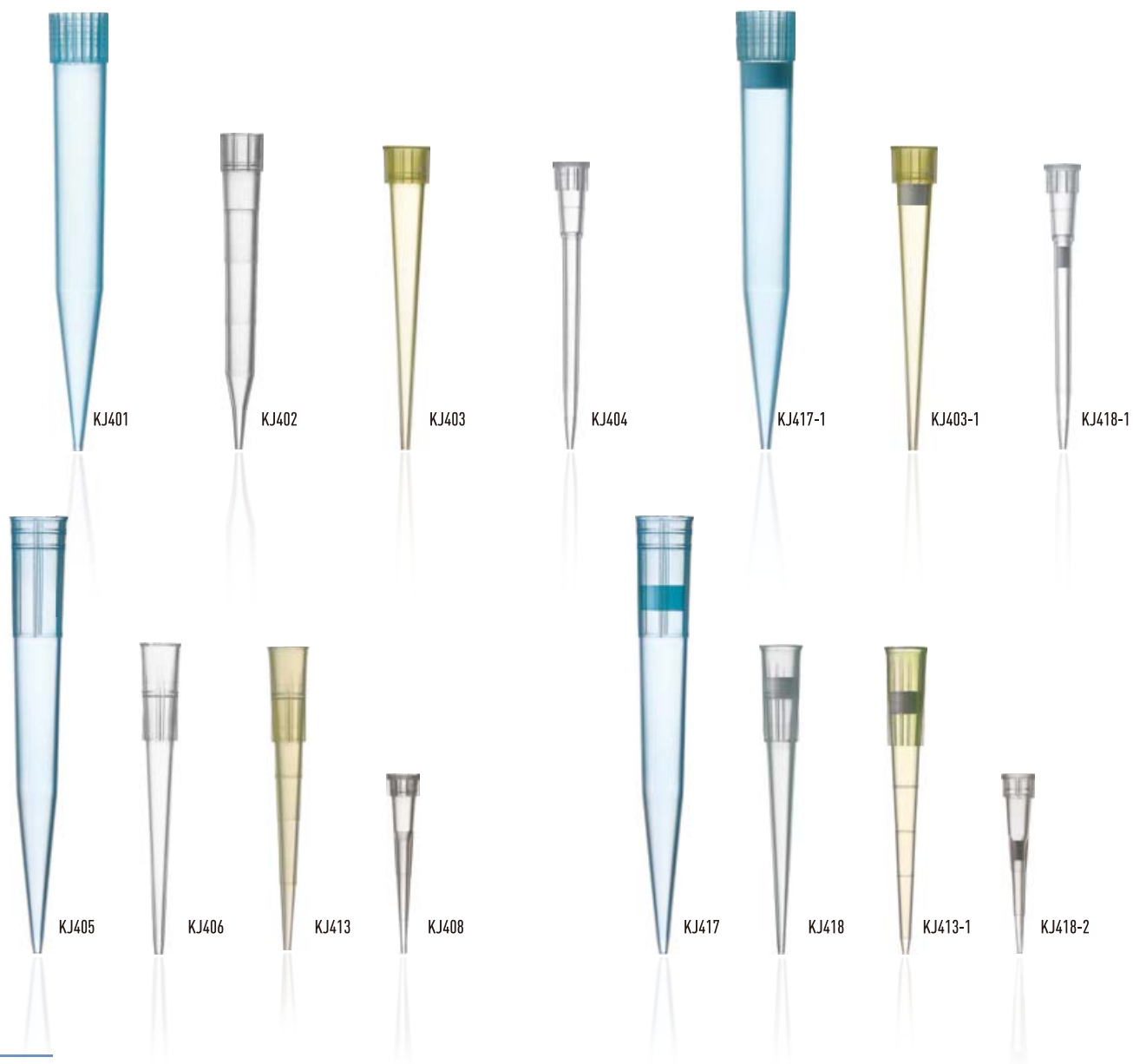


规格参数

REF 目录 编号	尺寸	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ401		1000μL	500	10000	配爱频道夫移液器	121-01801
KJ402		300μL	1000	30000	配爱频道夫移液器	121-01601
KJ403		200μL	1000	30000	配爱频道夫移液器	121-01401
KJ404		10μL	1000	50000	配爱频道夫移液器	121-01101
KJ417-1		1000μL	500	10000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01802
KJ403-1		200μL	1000	20000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01402
KJ418-1		10μL	1000	20000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01102
KJ405	Ø8×71mm	1000μL	100	12000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02801
KJ406	Ø6×52mm	200μL	500	55000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02401
KJ413	Ø6×52mm	200μL	500	30000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带刻度	121-03401
KJ408	Ø5×32mm	10μL	1000	50000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02101
KJ417	Ø8×71mm	1000μL	500	10000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02802
KJ418	Ø6×52mm	200μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02402
KJ413-1	Ø6×52mm	200μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯，带刻度	121-03403
KJ418-2	Ø5×32mm	10μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02102



移液器吸头

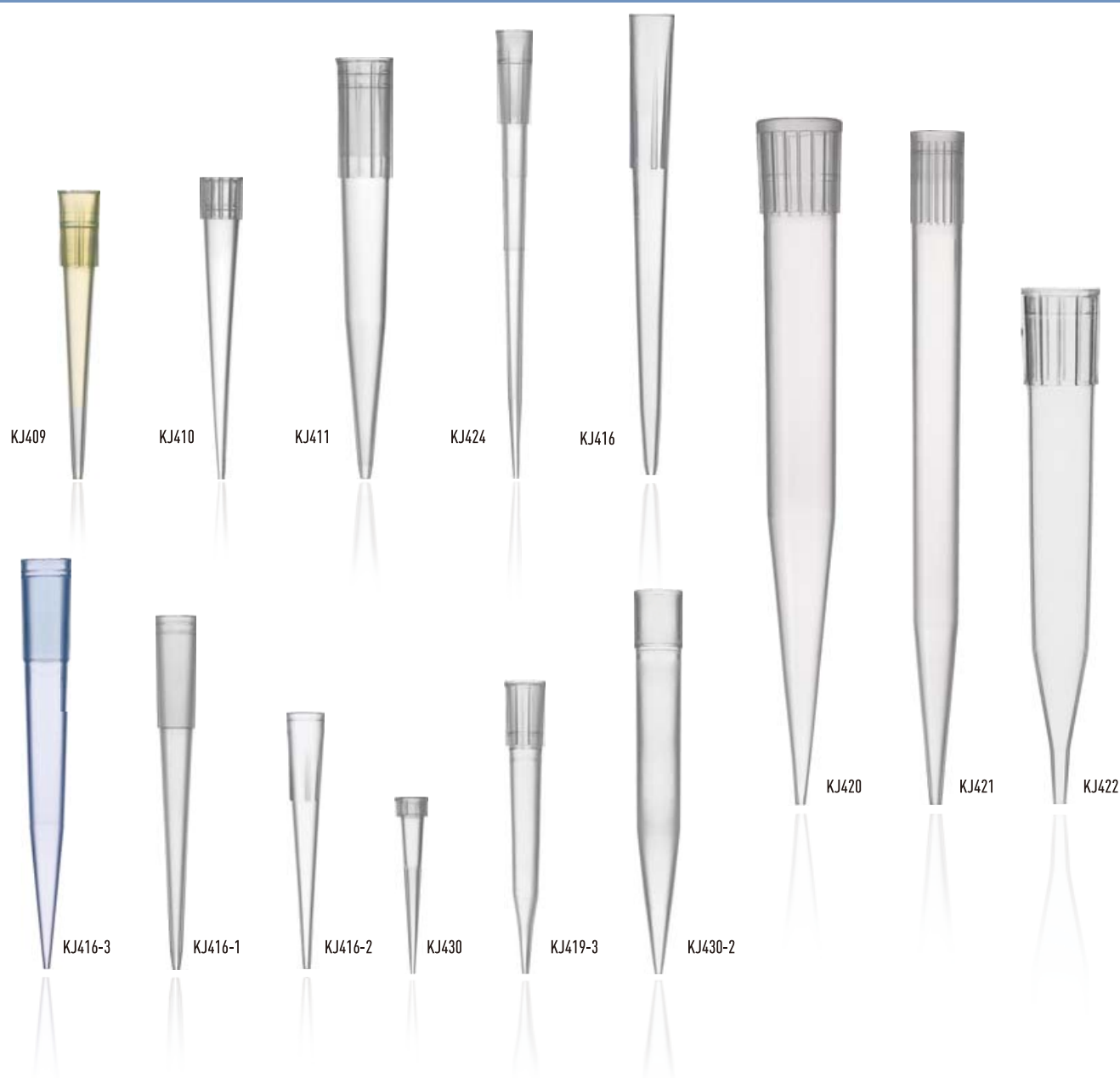

规格参数

REF 目录 编号	尺寸	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ409	Ø4×49mm	250μL	400	44000	配求精移液器	121-04501
KJ410	Ø6×50mm	250μL	500	55000	配求精移液器	121-04502
KJ411	Ø7.4×70mm	1000μL	100	12000	配求精移液器	121-04801
KJ424		200μL	1000	20000	多用加长吸头	121-15401
KJ416		1000μL	1000	12000	配mLA移液器	121-12801
KJ416-3		1000μL	1000	12000	配OXFORD移液器	121-13801
KJ416-1		200μL	1000	50000	配mLA移液器	121-12401
KJ416-2		200μL	1000	50000	多用吸头	121-15402
KJ430		10μL	1000	50000	配大龙移液器	121-05101
KJ419-3		200μL	1000	30000	配大龙移液器	121-05401
KJ430-2		1000μL	500	12000	配大龙移液器	121-05801
KJ420		5mL	300	3000	配大龙移液器	121-05901
KJ421		5mL	300	3000	配芬兰移液器	121-03901
KJ422		5mL	300	3000	配吉尔森或青云移液器	121-06901



移液器吸头



规格参数


REF 目录 编号	 容量	 支/袋	 支/箱	 备注说明	产品编码
KJ427	200μL	1000	50000	无热原多用吸头	121-15403
KJ428	200μL	1000	50000	无热原多用吸头	121-15404
KJ428-1	200μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15405
KJ428-2	200μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15406
KJ429	1000μL	500	10000	无热原多用吸头	121-15801
KJ429-1	1000μL	500	10000	无热原多用吸头	121-15802
KJ429-2	1000μL	500	10000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15803
KJ429-3	1000μL	500	10000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15804
KJ434	10μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15301
KJ422-1	5mL	28(支/盒)	30	吸头盒+28支吸头	122-16901
KJ422-2	用于5mL吸头	-	30	吸头盒(不含吸头)	122-16902
KJ422-3	10mL	15(支/盒)	30	吸头盒+15支吸头	122-16001
KJ422-4	用于10mL吸头	-	30	吸头盒(不含吸头)	122-16002



通用无热原吸头

产品介绍

- ◎ 吸头使用医疗级聚丙烯(PP)原料，采用先进的生产工艺制造，产品挺直，无弯曲变形，具有极高的品质和精准性。
- ◎ 在十万级净化车间生产，PCR 洁净级，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性，完美适配于国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 提供多支袋装、专用吸头盒装或多层叠装。

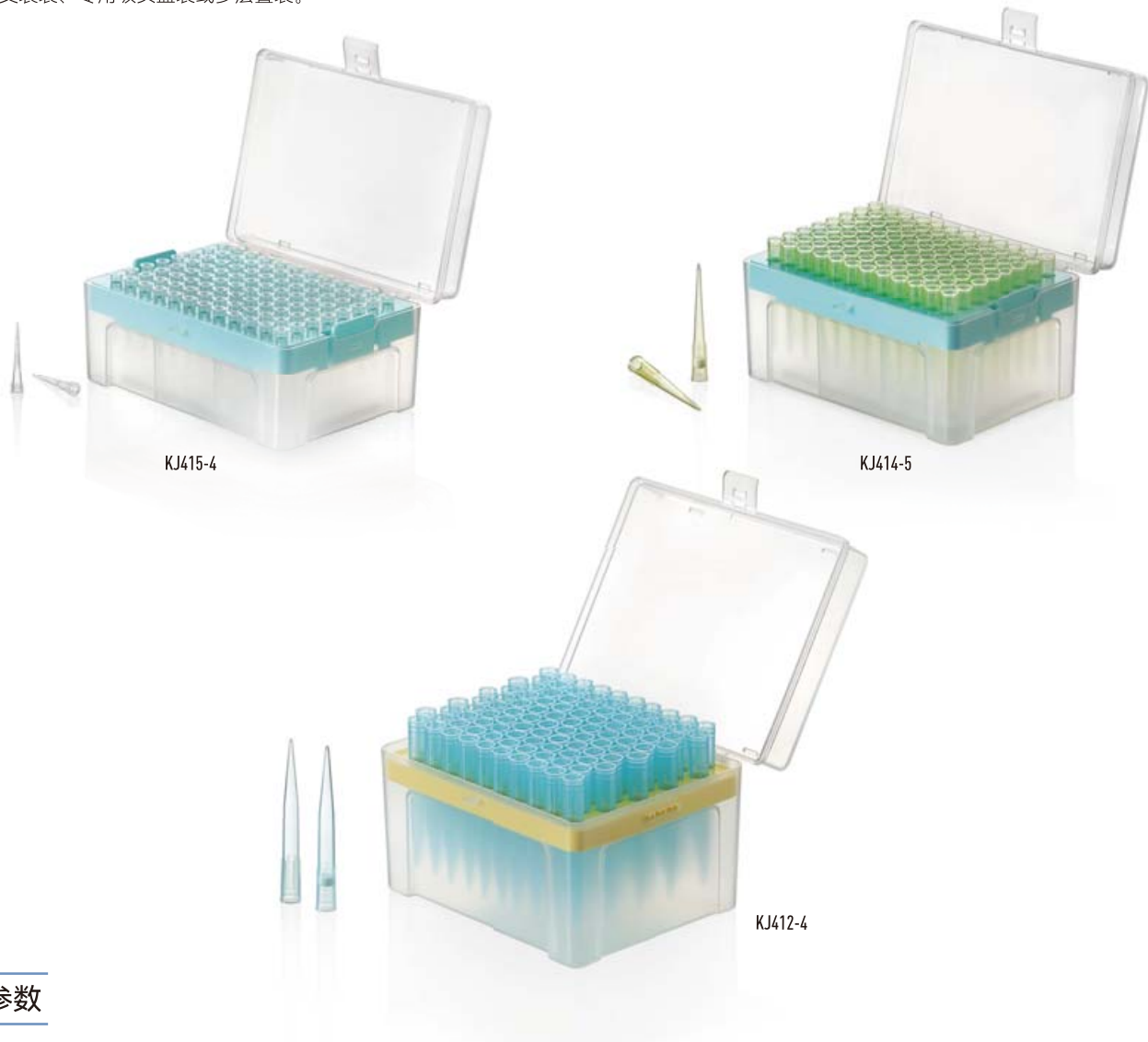

规格参数

REF 目录 编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ415	10µL	32mm	1000		20000	透明本色，多支袋装	123-15101
KJ415-2	10µL	32mm		96	4800	透明本色，专用吸头盒装	123-15102
KJ415-3	10µL	32mm	1000		20000	透明本色，带滤芯，多支袋装	123-15103
KJ415-4	10µL	32mm		96	4800	透明本色，带滤芯，专用吸头盒装	123-15104
KJ414	200µL	51mm	1000		20000	透明黄或本色，多支袋装	123-15401
KJ414-3	200µL	51mm		96	4800	透明黄或本色，专用吸头盒装	123-15402
KJ414-4	200µL	51mm	1000		20000	透明黄或本色，带滤芯，多支袋装	123-15403
KJ414-5	200µL	51mm		96	4800	透明黄或本色，带滤芯，专用吸头盒装	123-15404
KJ412	1000µL	78mm	500		10000	透明蓝，多支袋装	123-15801
KJ412-2	1000µL	78mm		100	5000	透明蓝，专用吸头盒装	123-15802
KJ412-3	1000µL	78mm	500		10000	透明蓝，带滤芯，多支袋装	123-15803
KJ412-4	1000µL	78mm		100	5000	透明蓝，带滤芯，专用吸头盒装	123-15804

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



通用无热原吸头



KJ455-1



KJ455-3



KJ454-1



KJ454-3

规格参数

REF 目录编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ455	10µL 加长	46mm	1000		20000	透明本色, 多支袋装	123-15105
KJ455-1	10µL 加长	46mm		96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15106
KJ455-2	10µL 加长	46mm	1000		20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15107
KJ455-3	10µL 加长	46mm		96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15108
KJ454	200µL 加长	59.5mm	1000		20000	透明本色, 多支袋装	123-15405
KJ454-1	200µL 加长	59.5mm		96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15406
KJ454-2	200µL 加长	59.5mm	1000		20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15407
KJ454-3	200µL 加长	59.5mm		96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15408

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考, 如需准确数据请咨询客服。



移液器吸头



KJ453-1



KJ453-3



KJ462-1



KJ462-3

规格参数

REF 目录 编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ453	200μL 特长	89mm	1000	-	20000	透明本色, 多支袋装	123-15411
KJ453-1	200μL 特长	89mm	-	96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15412
KJ453-2	200μL 特长	89mm	1000	-	20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15413
KJ453-3	200μL 特长	89mm	-	96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15414
KJ462	1250μL	102mm	1000	-	10000	透明本色, 多支袋装	123-15805
KJ462-1	1250μL	102mm	-	96	5000	透明本色, 专用吸头盒装	123-15806
KJ462-2	1250μL	102mm	1000	-	10000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15807
KJ462-3	1250μL	102mm	-	96	5000	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15808

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考, 如需准确数据请咨询客服。



自动化系统专用吸头

产品介绍

- ◎ 专为实验室自动化液体处理工作站设计的一次性耗材，经过严格的质量控制程序，具有更高的精度、一致性和自动化适配性，是高通量实验的关键耗材。
- ◎ 吸头在十万级净化车间内生产，采用原生医疗级聚丙烯PP原料制造而成。对每个批次产品进行仔细评估，确保无DNA酶/RNA酶、无热原、无内毒素或PCR抑制剂污染。
- ◎ 按导电性分类：有导电吸头和非导电吸头。按功能特性分类：有滤芯吸头、低吸附吸头、加长型吸头等。按品牌适配性分：有Addcare系列、Tecan系列、Hamilton系列、Agilent系列等。



规格参数

REF 目录 编号	 单支 容量	 盒装 外观	 支/盒	 盒/中盒	 中盒/箱	 备注说明	产品编码
KJ449-2	200µL	127×88×95mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07401
KJ449-3	1000µL	127×88×159mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07801
KJ450	300µL	125×82×96mm	192	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10601
KJ451	800µL	125×82×126mm	192	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10701

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



自动化系统专用吸头



KJ441



KJ442



KJ443



KJ444



KJ445



KJ446

规格参数

REF 目录 编号	单支 容量	支/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ441	200μL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07402
KJ442	1000μL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07802
KJ443	200μL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07403
KJ444	1000μL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07803
KJ445	30μL	384	50	安捷伦盒装吸头	124-08201
KJ446	250μL	96	50	贝克曼盒装吸头	124-09501



自动化系统专用吸头

KJ458



KJ459



KJ459-1



KJ460



KJ460-1



规格参数

REF 目录 编号	 单支 容量	 支/盒	 盒/箱	 备注说明	产品编码
KJ458	50µL	96	50	Hamilton 50µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17051
KJ459	300µL	96	50	Hamilton 300µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17601
KJ459-1	300µL	96	50	Hamilton 300µL加长 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17602
KJ460	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 黑色导电吸头	124-17801
KJ460-1	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 透明吸头	124-17802



加样槽与移液器



KJ411-1



KJ449



KJ411-2



KJ426

KJ426-9

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	只/箱	备注说明	产品编码
KJ411-1	PVC	250mL	800	加样槽	125-0001
KJ449	PP	10mL×10通道	数量定制	10通道加样槽	125-0002
KJ411-2	PP	3mL×12通道	数量定制	12通道加样槽	125-0003
KJ426-9	-	-	数量定制	有单通道、多通道, 0.5-1000μl的移液量可以选择	126-0200
KJ426	ABS	-	数量定制	移液器挂架	127-0001



DISPOSABLE TRANSFER PIPETTE




一次性使用吸管



一次性使用吸管

产品介绍

- ◆ 精选优级原生低密度聚乙烯 (LDPE) 材料吹塑成型，产品精度良好，适用于少量或微量液体的吸取、转移或封闭携带。
- ◆ 表面张力优化处理，液体的流动性强更易于操作。
- ◆ 透明度好，便于观察。
- ◆ 具有一定的弹性韧性，可以一定的角度范围内弯曲，有利于进入微量或异形容器进行取液、加液操作。
- ◆ 使用方便，精密可靠，滴量的可重复性好。
- ◆ 管端可热封，方便液体的携带。
- ◆ 提供：单支或多支、塑袋或纸塑等不同包装方式。可选EO灭菌、辐射灭菌或不灭菌。

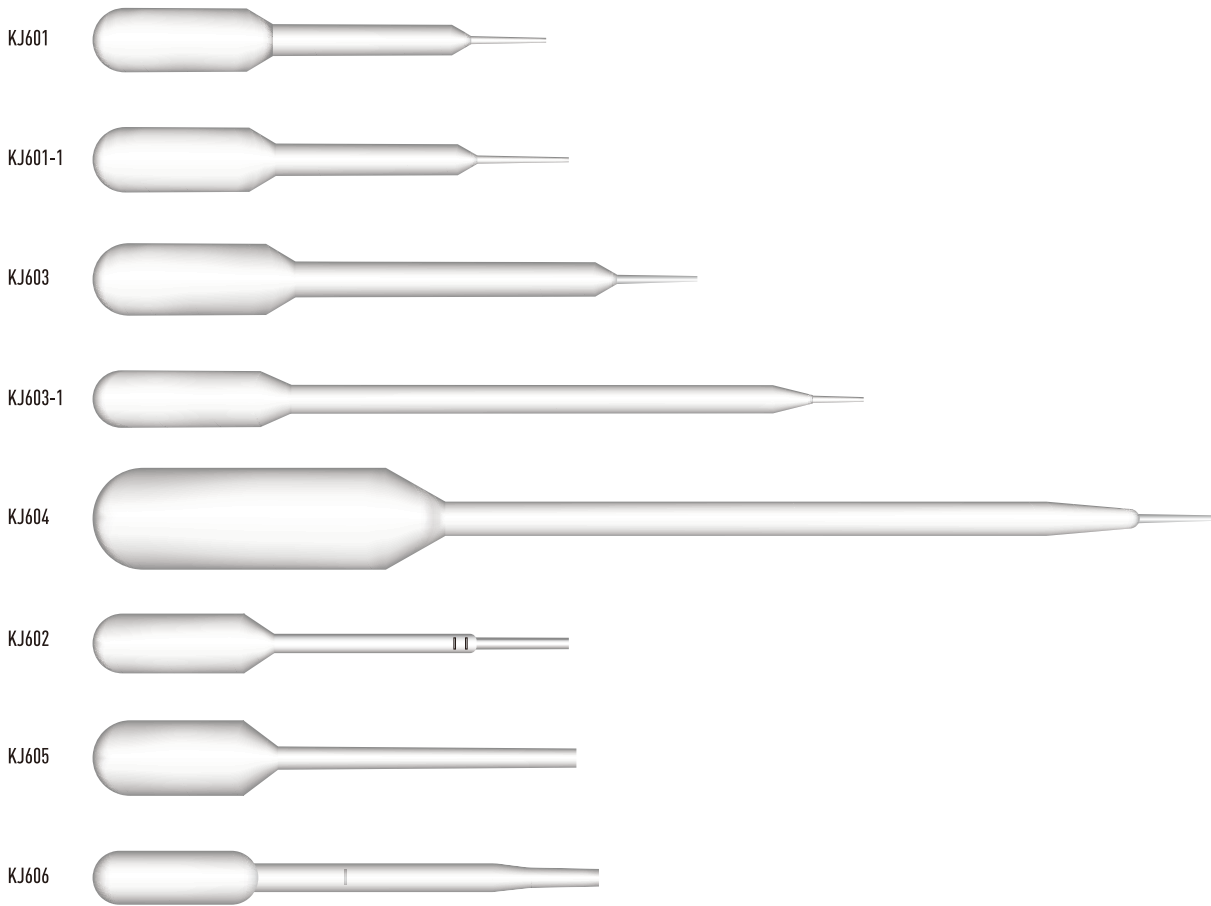


规格参数

REF 目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ601	60	1	0.76	65±4	—	2000支/袋，10袋/箱	141-001
KJ601-1	63	1	0.76	66±4	—	2000支/袋，10袋/箱	141-002
KJ603	80	2	1.4	110±4	—	2000支/袋，10袋/箱	141-003
KJ603-1	102	1.4	0.8	136±4	—	200支/袋，6袋/箱	141-004
KJ604	148	6	5	116±4	—	500支/袋，10袋/箱	141-005
KJ602	63	0.9	0.76	45±3	20/10 μl	2000支/袋，10袋/箱	141-006
KJ605	64	1.4	1.24	41±2	—	2000支/袋，10袋/箱	141-007
KJ606	67	1	0.65	26±2	200 μl	2000支/袋，10袋/箱	141-008

*因主、客观原因，相关参数值与您实际使用时可能存在误差，仅供参考。



一次性使用吸管

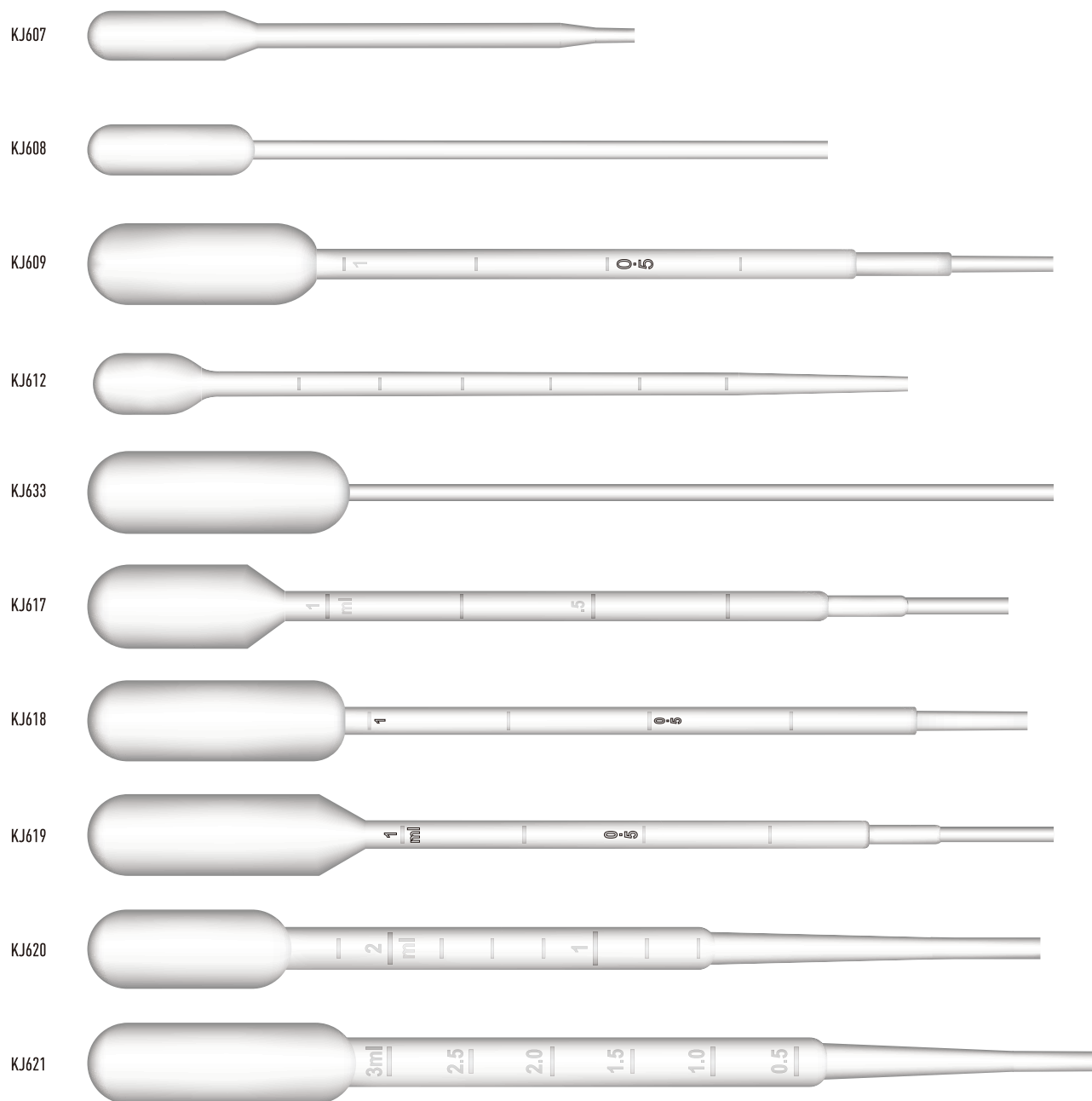


规格参数

REF 目录 编号	长度 (mm)	总容积 (mL)	气囊容积 (mL)	1mL滴数 [*]	刻度值	包装	产品编码
KJ607	85	1.3	0.76	41±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-009
KJ608	115	1.2	0.76	33±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-010
KJ609	150	4.6	1.4	30±2	1/0.75/0.5/0.25ml	400支/袋, 10袋/箱	141-011
KJ612	130	1.5	0.8	44±2	0.5/0.4/0.3/0.2/0.1ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-012
KJ633	150	4.3	5	31±2	—	500支/盒, 10盒/箱	141-013
KJ617	143	4	0.76	27±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-014
KJ618	146	5.25	1.24	24±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-015
KJ619	150	5.77	0.65	29±2	1/0.75/0.5/0.25ml	500支/盒, 12盒/箱	141-016
KJ620	148	5.13	1	24±2	2.25/2/1.75/1.5/1.25/1/0.75/0.5ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-017
KJ621	157	7.4	0.84	25±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 12盒/箱	141-018

^{*}因主、客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



一次性使用吸管

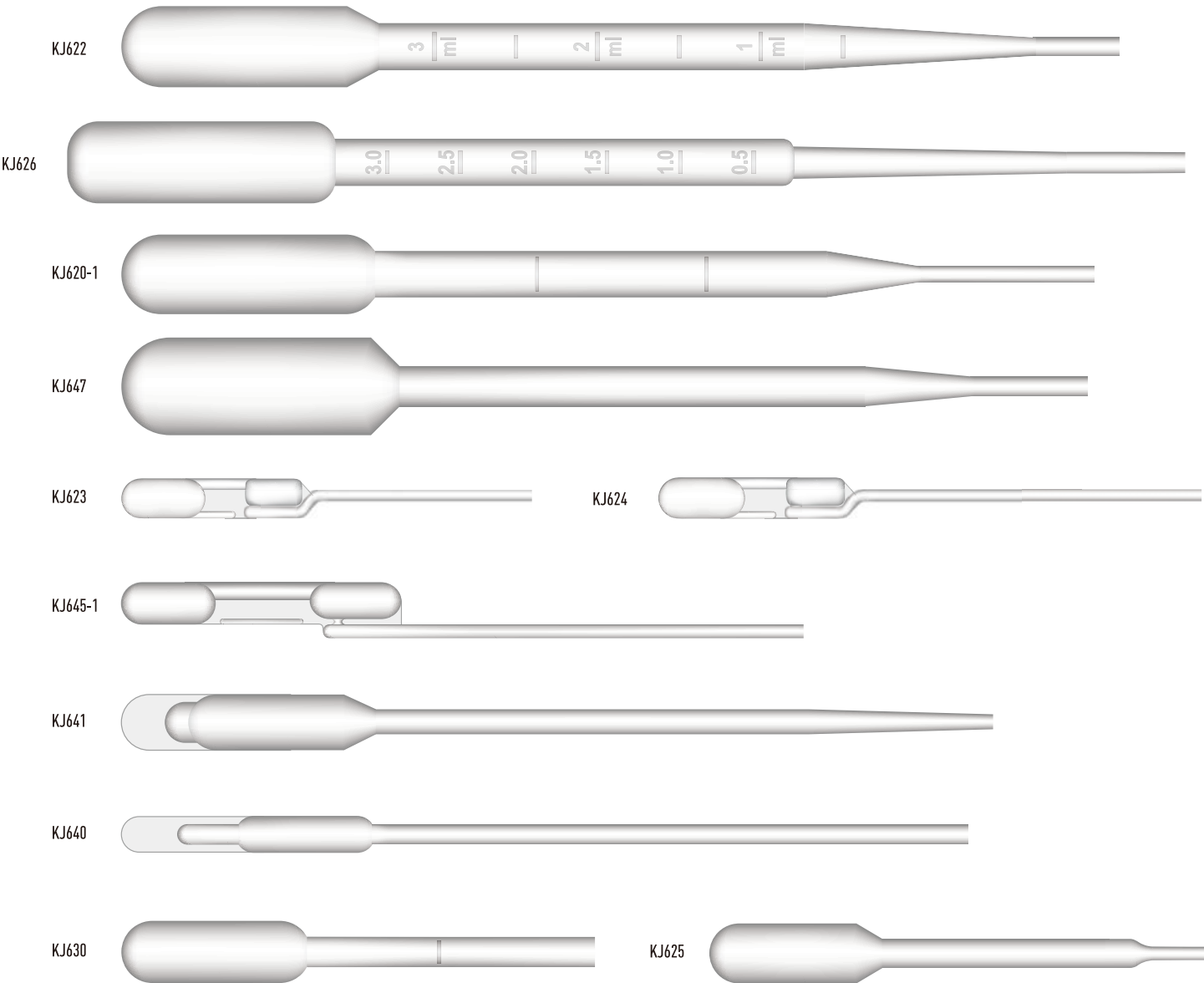

规格参数

REF 目录 编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ622	158	7.63	4.4	24±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒，12盒/箱	141-019
KJ626	177	7.9	4.9	26±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒，10盒/箱	141-020
KJ620-1	154	6.7	3.8	29±2	2/1ml	500支/盒，10盒/箱	141-037
KJ647	153	8.24	6.5	23±2	—	500支/盒，10盒/箱	141-038
KJ623	65	0.5	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋，10袋/箱	141-021
KJ624	86	0.55	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋，10袋/箱	141-022
KJ645-1	108	0.72	0.6 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋，10袋/箱	141-023
KJ641	138	2.23	1.45	29±2	—	500支/盒，18盒/箱	141-024
KJ640	134	1.2	0.5	21±2	—	200支/袋，60袋/箱	141-025
KJ630	75	2	1.4	32±2	300μl	1000支/袋，10袋/箱	141-027
KJ625	78.4	1.9	1.34	45±2	—	2000支/袋，10袋/箱	141-028

*因主、客观原因，相关参数值与您实际使用时可能存在误差，仅供参考。



一次性使用吸管

KJ625-1



KJ606-1




KJ606-2



KJ606-3



KJ643

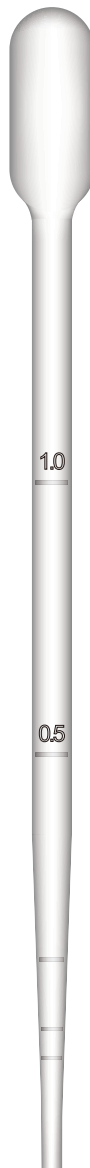

KJ644




KJ642



KJ642-1



KJ638

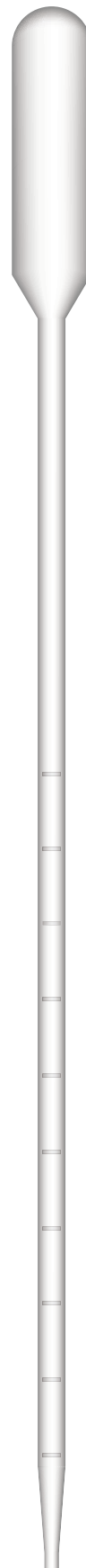

规格参数

REF	目录 编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ625-1		135	1	0.6	36±2	0.5/0.25ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-029
KJ606-1		80	0.6	0.44	36±2	—	2000支/盒, 10盒/箱	141-030
KJ606-2		75	0.29	0.15	50±1	20μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-040
KJ606-3		73	0.28	0.15	50±1	20μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-041
KJ643		154	3.3	1.9	23±2	1/0.5ml, 150/75/50μl	500支/袋, 10袋/箱	141-032
KJ644		138	2.7	1.5	26±2	1000/500/20/10μl	500支/袋, 10袋/箱	141-033
KJ642		208	13.22	12.9	22±3	—	400支/盒, 10盒/箱	141-034
KJ642-1		204	12.3	7	21±2	5/4/3/2/1ml	500支/盒, 12盒/箱	141-039
KJ638		230	5.5	3.6	30±2	1ml~0.1ml	500支/盒, 10盒/箱	141-035

*因主观或客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



SEROLOGICAL PIPETTE



血清移液管



血清移液管

产品介绍

产品采用进口优质聚苯乙烯(GPPS)为原料, 在10万级净化车间生产制造。新颖的移液管口设计可适配市场上大多数移液器。主要用于准确量取或转移一定体积的液体, 广泛应用于细胞培养、细菌学、临床医学、科研实验等领域。

- ◎ 6种容量可选: 1mL、2mL、5mL、10mL、25mL、50mL。容量的校准率: $\pm 2\%$ 之内。
- ◎ 1mL、2mL移液管采用拉伸方式成型。5mL、10mL采用超声波焊接或拉伸方式成型。25mL、50mL移液管采用超声波焊接方式成型。
- ◎ 内外管壁光滑剔透, 无沟槽及丝纹。
- ◎ 不同颜色的色标对应不同规格移液管, 方便识辨。
- ◎ 可最大量的减少液体于管壁的黏附, 提高取样的准确性。
- ◎ 硬质双向刻度设计, 理想地配合了加样与减样的要求。另有无刻度的移液管可供选择。
- ◎ 清晰简明的刻度以及额外容量的阴性刻度, 方便液体的吸取与读数。
- ◎ 每种规格移液管均带有滤芯过滤塞。
- ◎ 无DNA酶和RNA酶、无热原、无内毒素。辐射灭菌。



拉伸型和焊接型管




带滤芯, 不同容量规格对应不同色标



单支纸塑包装



单支塑膜包装

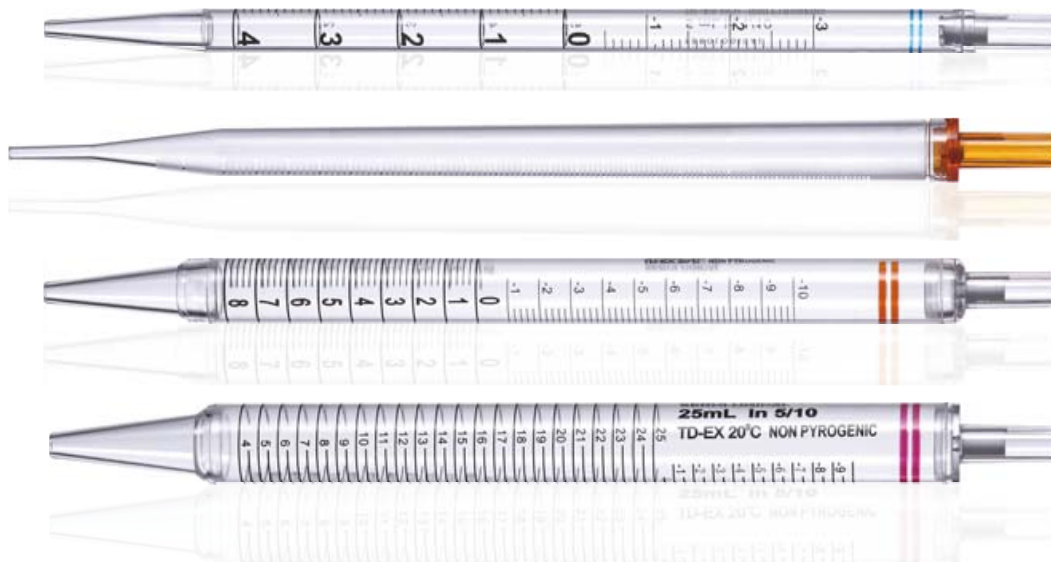

KJ9053

KJ9104

KJ9103

KJ9253


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸 *	规格容量	支/包	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ9053	GPPS	Ø10×235mm	5mL(短款)	100	300	1800	焊接管, 单支包装	131-0531
KJ9104	GPPS	Ø12.5×240mm	10mL(短款)	25	1000	6000	注塑管带刻度, 单支包装	131-1031
KJ9103	GPPS	Ø15×23.5mm	10mL(短款)	100	300	1800	焊接管, 单支包装	131-1041
KJ9253	GPPS	Ø18.5×23.5mm	25mL(短款)	25	600	3600	焊接管, 单支包装	131-2531

* 产品外观尺寸为手工测量, 仅供参考。
* 灭菌方式可定制。



血清移液管

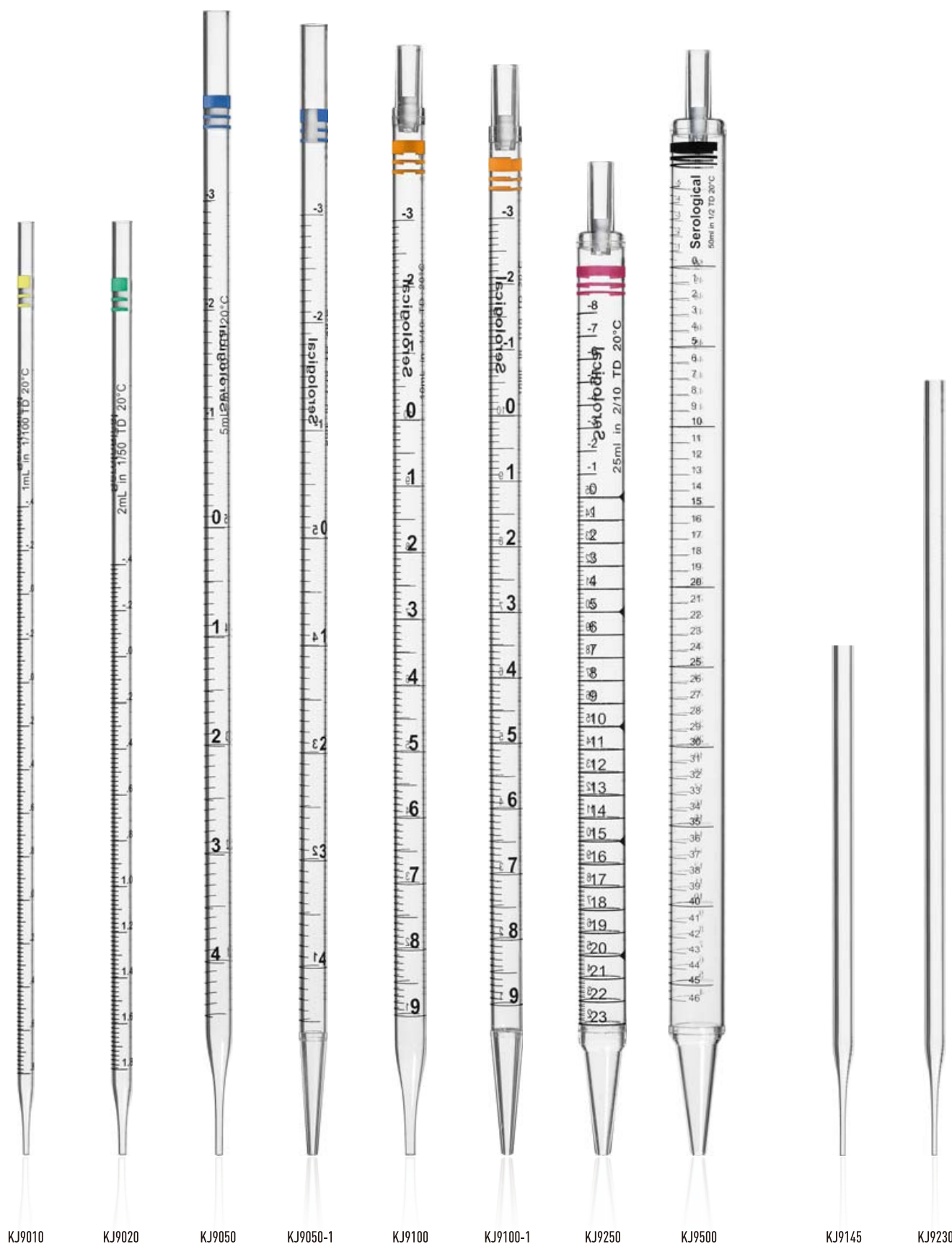



血清移液管

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	刻度* 容量	套/包	支/盒	套/箱	备注说明	产品编码
KJ9010	GPPS	Ø5×280mm	1mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0111
KJ9012	GPPS	Ø5×280mm	1mL	25	1000	4000	拉伸管 散装	131-0112
KJ9020	GPPS	Ø6×280mm	2mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0211
KJ9022	GPPS	Ø6×280mm	2mL	25	600	3600	拉伸管 散装	131-0212
KJ9050	GPPS	Ø8×347mm	5mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-0511
KJ9052	GPPS	Ø8×347mm	5mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-0512
KJ9050-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-0521
KJ9052-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-0522
KJ9100	GPPS	Ø10×342mm	10mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-1011
KJ9102	GPPS	Ø10×342mm	10mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-1012
KJ9100-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-1021
KJ9102-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-1022
KJ9250	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	100	600	焊接管 单支包装	131-2521
KJ9252	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	500	1000	焊接管 散装	131-2522
KJ9500	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	75	450	焊接管 单支包装	131-5021
KJ9502	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	250	1000	焊接管 散装	131-5022
KJ9145	GPPS	Ø6×145mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1001
KJ9230	GPPS	Ø6×230mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
* 灭菌方式可定制。

KJ9000电动移液器

产品介绍

KANGJIAN电动移液器采用先进的设计理念和制造技术，外观光滑美观，结构紧凑牢固，用途广泛，操作简单等优点。在满足移液需求的基础上，电动移液器优化了操作人员的使用感受，灵敏的速度控制功能可以轻松顺利地各种液体移液和分离，LCD显示让电池电量、吸力、放电速度一目了然，在细胞接种或通过程中去除或添加细胞培养基更优。灵活、舒适的液体操作，使实验过程更快捷。



KJ9000

规格参数

吸液速度	25mL<5秒 (6个等级)	适用移液管	塑料或玻璃移液管(0.1~100mL)、巴斯德消毒管		
排液速度	电动6级或重力	过滤器	0.45μm疏水膜	电池类型	锂电池
净重	520g	充电时长	2-3小时	电池满电工作时间	间歇性工作大于8小时

08

Specimen Swab




采样拭子

→ 男性拭子、采样管	103
→ 鼻咽拭子	103
→ 女性拭子	104
→ 简易拭子与植绒拭子	105
→ 介质拭子	106
→ 病毒采样管	107
→ 物表微生物采样管	108
→ 预浸润物表采样海绵	109
→ ATP检测拭子与检测仪	110
→ 一次性使用宫颈刷	111
→ 宫颈脱落细胞采样器	112

男性拭子、采样管

产品介绍

- ◎ 男性拭子由拭子和 PS 拭子管组成，拭子棉头选用优质脱脂棉、人造棉或聚酯棉。不锈钢拭子杆经过特殊处理，棉头缠附更牢靠，适用于主要用于尿道、前列腺、咽喉、肛周等部位的标本采集。本品单支灭菌包装。
- ◎ 采样管由拭子和 PS 拭子管组成。拭子棉头选用优质聚酯棉，或根据需要可定制。本品广泛用于医院临床检验、疾控中心、法医检测等样本的采集、保存和运输。本品单支灭菌包装。标签可定制。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。
- ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

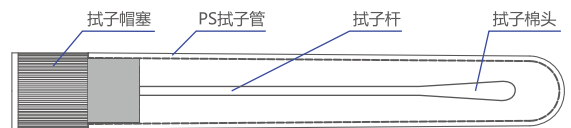

男性拭子



采样管



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质*	尺寸*	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ501	不锈钢杆+人造棉+PS管	Ø12×87mm	200	1800	单支灭菌塑袋包装	151-5201
KJ502-26	PP杆+聚酯棉+PS管	Ø15×100mm	150	1500	单支灭菌塑袋包装	151-3301
KJ502-39	PP杆+聚酯棉+PP管	Ø12×80mm	100支/盘	1800	单支灭菌塑袋包装	151-3302

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。 * 拭子头、拭子杆材质可定制。

鼻咽拭子

产品介绍

- 鼻咽拭子是从鼻咽部采集标本的专用拭子，主要用于采集呼吸道病毒 / 细菌 / 支原体 / 衣原体等样本，是新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）、肺炎支原体等筛查的核心采样方式之一。
- ◎ 鼻咽拭子由拭子和拭子管体组成，可定制不同材质的拭子杆和不同材质的拭子棉头，拭子管利于样本采集后短暂保存和运输。
 - ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级无尘车间内生产制造。标签可定制。
 - ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观* 尺寸	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-27	PS杆+聚酯棉	Ø13×178mm	100	1200	拭子杆和拭子头可定制其它材质	153-2301
	ABS杆+尼龙植绒		150	1800		153-4401

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。





女性拭子

产品介绍

- ◎ 女性拭子主要用于阴道、宫颈、尿道、咽喉、肛周等部位的标本采集，多用于妇科炎症、性病筛查、宫颈癌筛查、尿路感染等检测。
- ◎ 本品主要由拭子和拭子管组成，可定制不同材质的拭子杆（塑料、木质或不锈钢杆）和不同材质的拭子棉头（脱脂棉、人造棉、聚酯棉或植绒）。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。标签可定制。
- ◎ 经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF 目录 编号	MAT 拭子 材质	MAT 拭子管 材质	 尺寸 [*]	 支/袋	 只/箱	 备注说明 [*]	产品编码
KJ502	PS杆+人造棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2201
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2202
	PP杆+人造棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3201
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3202
KJ502-2	PS杆+聚酯棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2301
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2302
	PP杆+聚酯棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3301
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3302
KJ502-3	木杆+脱脂棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-1101
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-1102
	木杆+人造棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-1201
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-1202
KJ502-5	PS杆+脱脂棉	PP	Ø13×168mm	100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-2101
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-2102
	PP+脱脂棉	PP		100	1200	单支纸塑或塑袋包装，灭菌	152-3101
				150	1800	多支袋装，灭菌	152-3102

^{*} 产品外观尺寸为近似值仅供参考。




简易拭子与植绒拭子

产品介绍

- ◎ 植绒拭子由采样头和拭子杆组成。采样头由尼龙短纤维通过静电植绒技术制成。
- ◎ 植绒拭子具有出众的样品收集和释放能力，能够对微量样本快速吸附，样本释放效率高达 95%。靶向样本数量的增加有助于提高快速诊断试验的灵敏度，尤其适用于各类病毒、RNA/DNA 等样本采集。
- ◎ 植绒拭子 ABS 材质的拭子杆具有易折断点设计，采样后可以轻松折断，将采样头密封在保存管内，方便样本的保存、运输和检测。
- ◎ 简易拭子：是单支拭子的纸塑包装，并经环氧乙烷灭菌或辐射灭菌，具有使用方便使用、性价比高的特点。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内由自动化设备生产制造。
- ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无抑制剂污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

植绒拭子

简易拭子

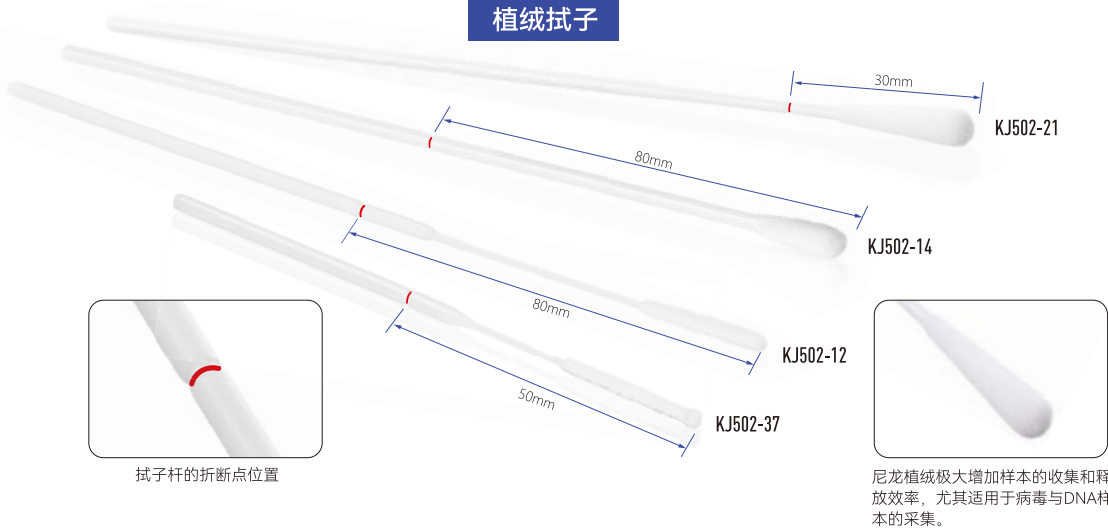

拭子杆的折断点位置

尼龙植绒极大增加样本的收集和释放效率，尤其适用于病毒与DNA样本的采集。

KJ502-16

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质(拭子杆+拭子头)	尺寸*	折断点位置	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-21	ABS+尼龙植绒	长度150mm	30mm	500	5000	单支纸塑包装	155-4404
KJ502-14			80mm	500	5000		155-4405
KJ502-12			80mm	500	5000		155-4406
KJ502-37		长度90mm	50mm	500	5000		155-4407
KJ502-16	简易拭子：拭子的单支纸塑包装或多支袋装，根据需可选择不同材质的拭子杆和拭子头			500	500	单支纸塑包装	155-2301
				定制	定制	多支纸塑或多支PE袋包装，灭菌	155-2302

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

介质拭子(运送培养基)

产品介绍

- ◎ 介质拭子通常是指运送培养基拭子，它是运送培养基和采样拭子的组合，主要用于微生物标本的采集、保存和运送。
- ◎ 产品主要由采样拭子、含培养基的拭子管组成。采样拭子可定制不同材质的拭子杆（如 PP、PS、木质或不锈钢杆），不同材质的拭子棉头（如脱脂棉、人造棉或聚酯纤维丝）。
- ◎ 按培养基可分为 Stuart、Stuart+ 活性炭、Amies、Amies+ 活性炭、Cary-Blair、Cary-Blair+ 活性炭。采样后 72 小时内运送至检验机构。
- ◎ 介质拭子为微生物标本的采集、保存、转运提供专业化的最佳整体解决方案，确保微生物的性状、生理活性等在分析前得到有效保护，提高诊断结果的准确性。同时简化医护人员操作，保护医护人员免受生物污染。
- ◎ 适用于各级医院、临床医学检测实验室、各级疾控中心、检验检疫机构、食品卫生检测机构、化妆品检测机构等。
- ◎ 产品在 ISO13485 质量管控体系下，在符合 GMP 要求的十万级净化车间内生产制造。标签可定制。
- ◎ 经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

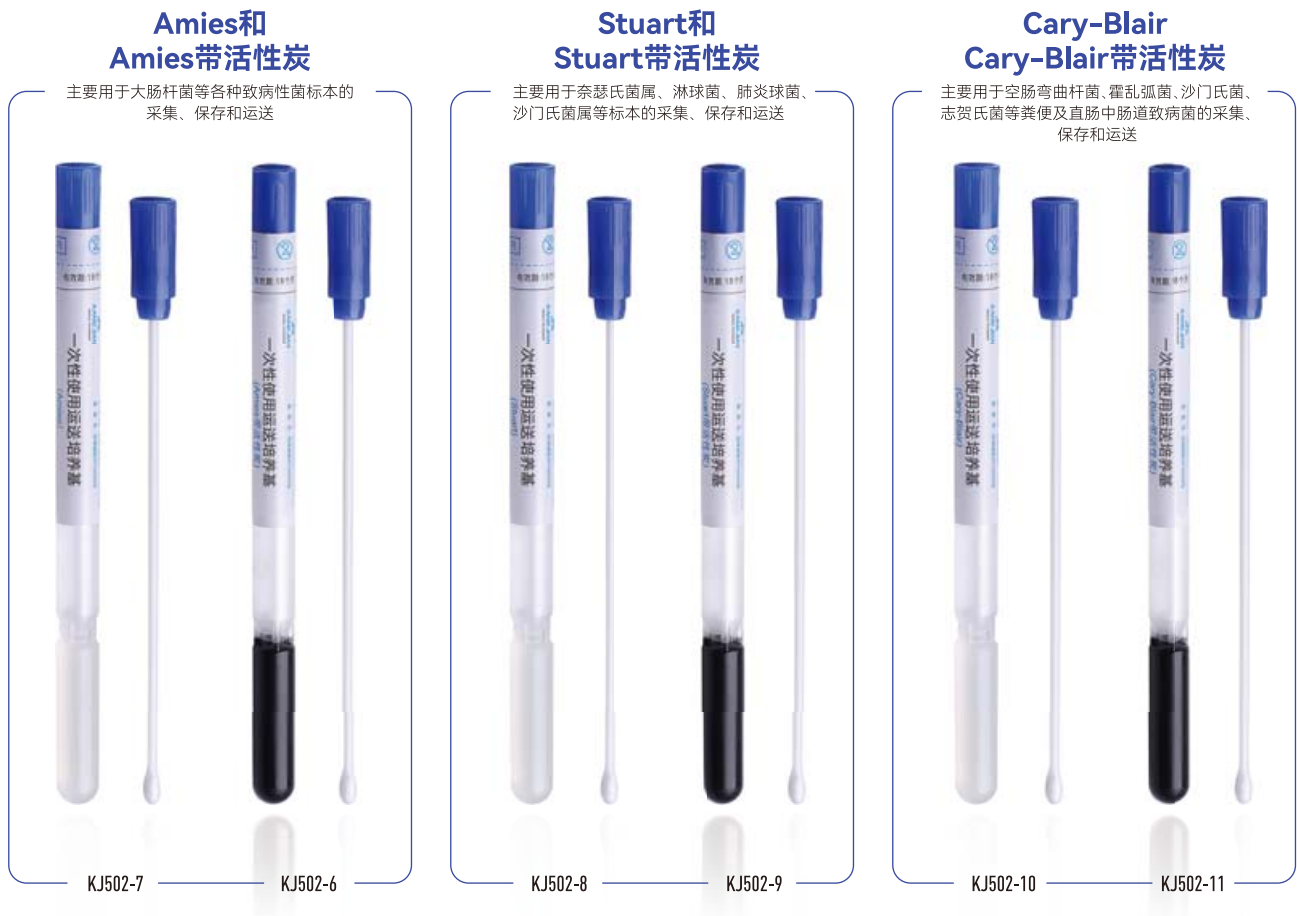

规格参数

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

REF 目录编号	MAT 材质	尺寸 *	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-7	定制杆与棉头材质： PP或PS杆+人造棉或脱脂棉 PP或PS杆+聚酯纤维 木杆+脱脂棉或人造棉	Ø13×178mm	单支	800	培养基：Amies 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-1001
KJ502-6			单支	800	培养基：Amies带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-1101
KJ502-8			单支	800	培养基：Stuart 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-2001
KJ502-9			单支	800	培养基：Stuart带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-2101
KJ502-10			单支	800	培养基：Cary-Blair 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-3001
KJ502-11			单支	800	培养基：Cary-Blair带活性炭 单支纸塑包装，辐射灭菌	154-3101

病毒采样管

产品介绍

本品是由保存管（内置病毒样本保存液）、采样拭子和生物安全袋组成的病毒采样套装。适用于各类流感病毒、禽流感病毒、新冠病毒、手足口、风疹等病毒样本的核酸提取及后期病毒分离。同时也适用于衣原体、支原体、解脲支原体等标本采集和运输。通常在人体的口腔、咽喉、鼻咽、肛门等部位采集标本。

◎ **采样拭子** 推荐使用植绒拭子，其具有出众的样品收集和释放能力，能对微量样本快速吸附，且样本释放效率高达 95%。靶向样本数量的增加有助于提高快速诊断试验的灵敏度，尤其适用于各类病毒、RNA 和 DNA 等样本的采集。

◎ **采样管** 管身及管盖为医用聚丙烯材质，耐高温（121℃）和低温（-80℃），耐静态挤压与动态撞击。底部锥形设计，耐离心与震荡。内置样本保存液，用于样本的释放保存，杜绝渗漏。内置玻璃珠，方便样本洗脱。按采样管容积分为：10ml、7ml 和 5ml。标签可定制。

◎ 样本保存液分类

1、非灭活型保存液 内置 1-3ml UTM 液，粉红色透明液体，适合病毒保存的保存液配方，可在较宽的温度范围内维持病毒的活性，最大程度保持样本的原始性。不含裂解液，可保持病原体的活性与完整性，可用于病毒培养分离。

2、灭活型保存液 内置 1-3ml 含胍盐或不含胍盐保存液，根据需要进行选择。

①**含胍盐保存液**：病毒裂解液和核酸保存液的混合液，无色透明或可定制浅红色的透明液体。本品可瞬间裂解病原体释放核酸，保护液可防止核酸被降解，有效保证样本中的病毒核酸完整性，采集后的标本能够在常温条件下运输和长期保存。


②**不含胍盐保存液**：含有特殊的蛋白变性剂和核酸稳定剂；蛋白变性剂可以迅速破坏病毒外壳蛋白质的二级结构，将病毒灭活，核酸稳定剂可以常温稳定保存病毒核酸不降解，避免样本中的核酸在检测前降解，造成核酸检测“假阴性”。

◎ **生物安全袋** 建议将含病毒样本的采样管置于生物安全袋中保存运输，康健医疗为医务检验工作的安全增码。

◎ **包装方式** 本病毒采样套件采用国际通用的纸塑或吸塑包装。



尼龙植绒拭子能最大程度的增加病毒样本的采集和释放量，多种样式的拭子头适用于鼻、咽等不同部位的样本采集。

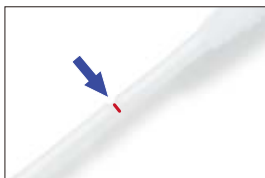


拭子杆折断点设计，使采集操作安全便捷。



保存管内两粒玻璃珠使病毒样本更易洗脱，利于更多样本释放放入保存液中。



使用图示

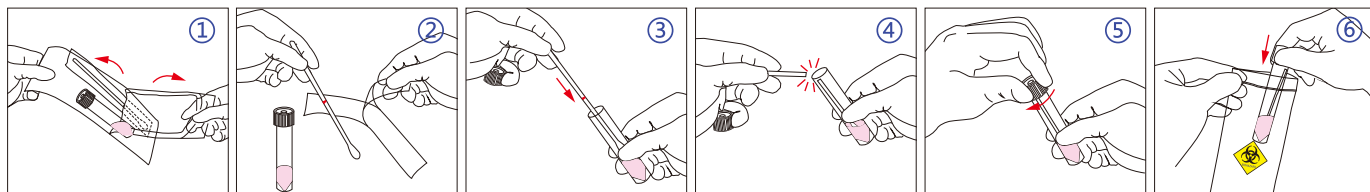

①从撕开处揭开纸塑包装。

②取拭子到目标部位采样。

③将采样后的拭子头浸入管内保存液中。

④沿断痕处折断拭子杆。

⑤旋紧管帽，摇动数次，完成采样。

⑥将采样管置于生物安全袋内，密封转运。

规格参数

REF 目录编号	采样管容量	样本保存液	可选拭子	支/盒	备注说明	产品编码
KJ502-33	5ml	预置1-3mL保存液	KJ502-21	50	采样管、保存液类型、拭子规格和数量均可灵活组合定制。	156-050
KJ502-34	7ml	可选：1、病毒保存液：灭活/非灭活/含胍盐/无胍盐	KJ502-14	100		156-070
KJ502-23	10ml	2、细菌、病毒通用型保存液(无色)	KJ502-12	50		156-100

物表微生物采样管

产品介绍


- 康健医疗物表微生物采样管（预置 0.85% 生理盐水采样管含中和剂）主要用于环境物表面微生物（包括病毒）样本的采集，适用冷链环节、餐饮行业、医院感控及公共卫生监测采样等，其用途广泛。
- 含中和剂的采样管可以有效中和残留在物体表面的消毒剂。本品不仅可以中和季铵盐类消毒剂，还可以中和醇类、酚类、醛类、过氧化物、含氯、含碘等单一消毒剂和不超过 3 种消毒物质的复方消毒剂，让样本中的细菌和病毒可以被顺利检测出来。
- 采用聚酯海绵拭子，采集效率和释放率显著高于常规拭子。大拭子头，与采样物表接触面积大，可以缩短采集时间。
- PP 材质的采样管管体耐高强度的挤压冲击、耐高温 +121℃ 低温 -80℃。安全防渗漏管帽与管体结合紧密，无漏液现象发生。
- 经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。




采用聚酯海绵拭子，采集效率和释放率显著高于常规拭子。

使用注意：采样完成的采样管建议2小时内送达至实验室进行检测，允许在常温4-26℃运送，如超过2小时，应在2-8℃环境下运送并在24小时内进行检测。超过24小时的待测样本培养或病毒检测时，会降低阳性率。


使用图示

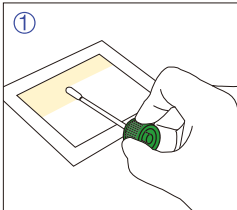


① 选取一定大小的待检面积，打开螺旋盖使用海绵拭子与待检表面呈 30 度采样，交叉涂抹两次采样。

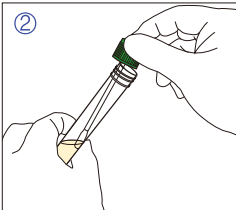


② 将采集完成后的拭子放入管内，旋紧管盖。

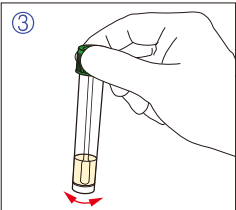

③ 反复振荡混匀，使采集到的微生物充分洗脱到含中和剂的生理盐水中。

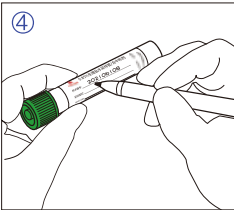


④ 在管体标签上标记采样信息，包括：采样编号、采样面积、采样部位、采样日期等。

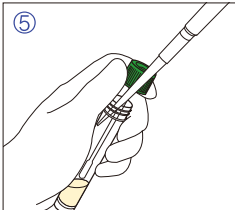

⑤ 取 1ml 样本液用于菌落培养，或适量的样本液用于病毒 RNA 的检测。

拭子采集效率对比：

聚酯海绵拭子具有柔软、吸水性好的特点，与物体凹凸表面接触良好，接触面积更大。（如右图示）

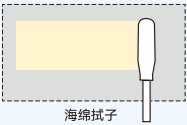

海绵拭子


人造纤维拭子其亲水性弱，与物体凹凸表面接触时变形小，从而接触面积小。（如右图示）



纤维拭子

样本回收效率对比：

推荐使用的聚酯海绵采样拭子的采集回收率是纤维拭子回收率的近两倍。

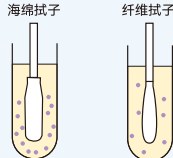

规格参数

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

REF 目录编号	试管规格	外观尺寸	MAT 材质	保存液规格	STERILE	支/盒	盒/箱	产品编码
KJ502-35	10mL	Ø16×100mm	试管: PP 拭子头: 聚酯海绵	3.5mL, 0.85%生理盐水 (含中和剂)	辐射灭菌	50	10	158-1001



预浸润物表采样海绵

产品介绍

- ◎ 本品为预浸润液体，0.9% 生理盐水或中和缓冲液的蓝色聚酯海绵，主要用于屠宰场胴体表面、食品加工设备、冷链仓储等环境物体表面的微生物（如沙门氏菌、李斯特菌、大肠杆菌等）的采样检测。
- ◎ 聚酯海绵材质，吸水性强，不易掉屑。预润湿无需现场配液，提升采样效率与标准化。蓝色海绵便于目视检查残留。
- ◎ 海绵体预浸润液体 10mL，有两种主流配液：1、0.9% 生理盐水，常用于胴体常规微生物采样；2、中和缓冲液常用于有消毒剂残留的环境或设备表面，可中和季铵盐、氯等，保护微生物。
- ◎ 单个自封采样袋包装，经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



KJ502-40



专用自封袋
灭菌包装

规格参数

REF 目录 编号	外观 尺寸	MAT 材质	预浸液	只/袋	只/箱	产品编码
KJ502-40	60×80×3mm	聚酯海绵	10mL, 0.9%生理盐水 或中和缓冲液	1	200	158-1002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

ATP检测拭子与检测仪

产品介绍

- ATP 荧光检测采用生物化学反应方法，“荧光素酶 - 荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷 (ATP)。
- ATP 拭子含有可以裂解细胞膜的试剂，能将细胞内的 ATP 释放出来，与试剂中含有的特异性酶发生反应，产生光，用荧光光度计检测发光值，微生物的数量与发光值成正比。因所有生物活细胞中含有恒量的 ATP，所以 ATP 含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。
- ATP 检测拭子配合 ATP 荧光检测仪使用，广泛应用于细菌微生物检测，包括医药卫生、食品安全、市场执法、医疗防疫、水质检测、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫等流动场所的现场快速检测。
- 拭子经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF 目录编号	外观尺寸	MAT 材质	支/袋	支/箱	产品编码
KJ502-36	Ø13×167mm	拭子管: PET 拭子头: 聚酯棉或植绒	20	200	159-1001

型号品名: J-4 ATP 荧光检测仪	检测时间: 15 秒	供电电源: 可充电锂电池 3AH
检测精度: 1.0×10 ⁻¹⁴ mol	检测干扰: ±5% 或 ±5RLUs	检出模式: RLU、大肠菌群筛查
检测范围: 0-999999RLUs	大肠菌群: 1-106cfu	工作环境: 5-40℃, 环境湿度 20-85%
ATP 回收率: 90-110%	USB 接口: 配有 miniUSB 接口, 可将结果上传至 PC	处 理 器: 32 位高速数据处理芯片
开机自检: 30 秒 (内置自校光源)	数据显示: 大屏幕高清液晶显示屏	尺寸重量: 188 mm×77mm×37mm (L×W×H), 260g



一次性使用宫颈刷

产品介绍

- ◎ 一次性使用宫颈刷是妇科宫颈筛查（如 TCT / 液基细胞学、HPV 检测）专用的一次性采样耗材，用于无创采集宫颈脱落细胞，操作简便、采样率高，是宫颈癌早筛的核心工具。
- ◎ 宫颈刷由符合 USP Class VI 生物安全标准的医用 ABS 或 PP、尼龙丝或低密度聚乙烯为原料，在 ISO13485 和 GMP 医疗器械质量管理体系下，在十万级净化车间生产制造。
- ◎ 宫颈刷的采集刷长度和形状符合宫颈解剖结构，质地柔软，密集度高，采样全面，能够采集更多组织样本，且对人体组织损伤小。
- ◎ 产品符合 ISO10993 和 GB/T 16886 医疗器械生物学评价的国际、国内标准，确保与人体接触时的生物安全性，避免毒性、致敏、炎症、致癌、遗传损伤等风险。
- ◎ 单支纸塑或吸塑包装，防止污染。
- ◎ 经 EO 灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	长度尺寸	折断点位置	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ502-18	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	170mm	52mm	100	1000	单支灭菌 纸塑或吸塑包装	157-4501
KJ502-38	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	185mm	68mm	100	1000		157-4503
KJ502-15	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	190mm	-	100	1000		157-4502
KJ502-13	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	200	2000		157-3601
KJ502-20	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	200	2000		157-3603
KJ502-19	刷杆: PP 刷头: 低密度聚乙烯(LDPE)	200mm	-	200	2000		157-3602



单支灭菌吸塑包装



宫颈脱落细胞采样器

产品介绍

- ◎ 宫颈脱落细胞采样器由宫颈采样刷、取样管和细胞保存液组成，主要用于宫颈脱落细胞收集、胸腹水脱落细胞检查、尿沉渣检查、针吸细胞检查等项目的样本采集与保存。特别适用于所有女性宫颈癌的早期诊断。
- ◎ **取样管** 管体及管盖为聚丙烯材质，高温高压 (121℃, 15min) 不变形。耐静态挤压与动态撞击。底部锥形设计，耐离心与震荡。内装样本保存液，用于样本的保存，杜绝渗漏。标签可定制。
- ◎ **样本保存液** 采样管内 HPV 细胞保存液可抑制细菌生长，保持细胞的形态及核酸的完整性。
- ◎ **宫颈采样刷** 专用采样刷材质 (尼龙丝) 柔软，刷毛直径为 0.05mm，能从宫颈内采取足够量的细胞样本。塑料杆为 ABS 或 PP 材质，独特的折断点设计 (KJ502-18)，折断过程中无碎屑产生。
- ◎ 采用国际通用的纸塑或吸塑包装，经辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。




规格参数

REF 目录编号	MAT 宫颈刷	MAT 取样管	尺寸	套/盒	套/箱	备注说明	产品编码
KJ502-22	刷杆: ABS(或PP) 刷头: 医用不锈钢+尼龙丝	PP管, HPV保存液	宫颈刷: 185mm 取样管: Ø16×75mm	48	480	单支灭菌 纸塑或吸塑包装	158-0001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

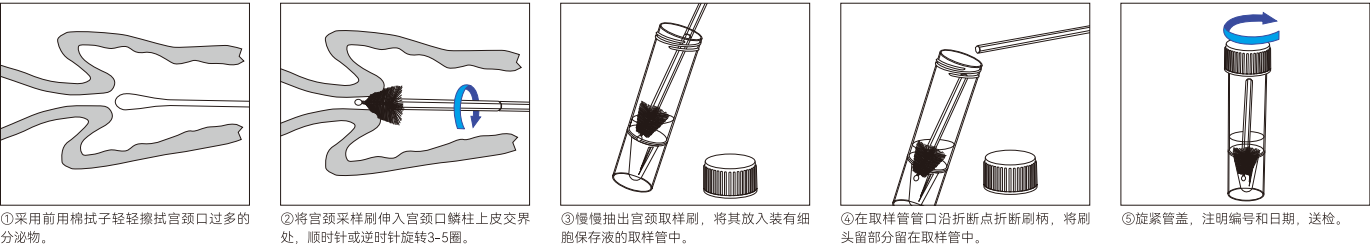

①采用前用棉拭子轻轻擦拭宫颈口过多的分泌物。

②将宫颈采样刷伸入宫颈口鳞柱上皮交界处，顺时针或逆时针旋转3-5圈。

③慢慢抽出宫颈取样刷，将其放入装有细胞保存液的取样管中。

④在取样管管口沿折断点折断刷柄，将刷头留部分留在取样管中。

⑤旋紧管盖，注明编号和日期，送检。



细胞培养系列

- | | |
|----------------|---------|
| → 细胞(细菌)培养皿 | 114-115 |
| → 细胞培养板 | 116-117 |
| → 细胞培养瓶 | 118 |
| → 一次性使用接种环与接种针 | 119 |
| → 细胞推括器 | 120 |
| → 细胞刮铲刀 | 121 |
| → 可拆式96孔酶标板 | 122 |
| → 深孔板 | 123 |






细胞(细菌)培养皿

产品介绍

- ◎ 细胞培养皿用于实验室细胞培养的处理、堆叠和运送。经 TC 表面处理后的聚苯乙烯内壁具有良好亲水性，利于细胞贴壁生长，未表面处理适用于悬浮细胞培养。
- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料，生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂，不含有任何重金属离子，产品具有良好的生物相容性。
- ◎ 多规格：Ø35 Ø55 Ø60 Ø70 Ø90 Ø100 Ø150 等。
- ◎ 皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准确。
- ◎ 皿侧的齿环设计，便于掌握，减少污染。
- ◎ 皿盖内设有透气棱，保证无菌的同时利于气体交换。
- ◎ 盖上的环形突缘与底部良好适配，可多层稳定叠放。
- ◎ 无 DNA 酶无 RNA 酶、无热原、无细胞毒性。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



多种包装方式：单套纸塑、单套塑袋和多套塑袋

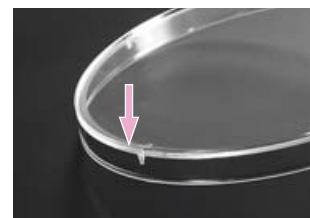

皿盖内侧凸点，满足气体交换的需要



侧边齿环，便于掌握，最大限度减少污染

KJ503



KJ504



KJ505



KJ506



KJ506-1



KJ506-2



KJ506-3



KJ507




规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	克重	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ503	PS	Ø35mm	≈3.53g	单只或10或20	2300	三种包装方式可选	161-0351
KJ504	PS	Ø60mm	≈7.58g	26	1040	可选单套包装	161-0601
KJ505	PS	Ø70mm	≈10g	16	720	可选单套包装	161-0701
KJ506	PS	Ø90mm	≈14g 或 ≈15.3g	20	500	三种克重可选	161-0901
KJ506-1	PS	Ø90mm(齿环)	≈19.47g	20	500	可选单套包装	161-0904
KJ506-2	PS	Ø90mm	≈13.7g	20	500	可选单套包装	161-0905
KJ506-3	PS	Ø60mm(齿环)	≈7.8g	26	1040	可选单套包装	161-0602
KJ507	PS	Ø150mm	≈47g	单只或20	125或120	单套或20套包装	161-1501



细胞(细菌)培养皿

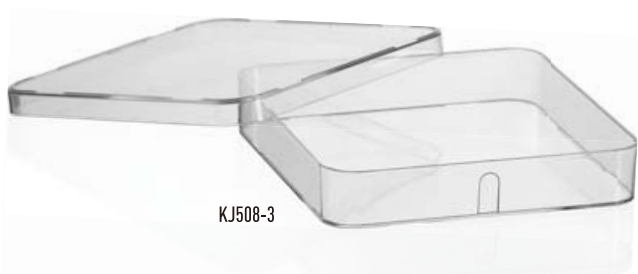

KJ508-3



KJ508-6




KJ508-4




KJ508



KJ509

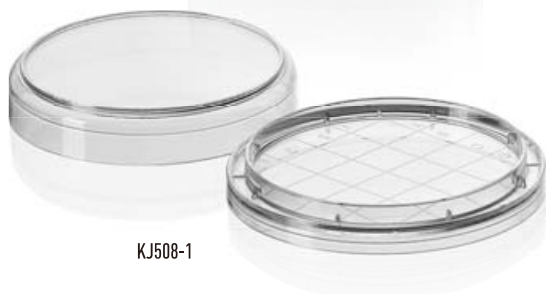

KJ508-1

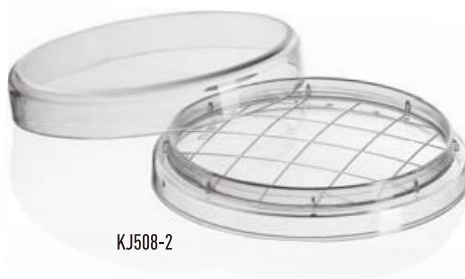

KJ508-2



KJ508-5

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	克重	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ508-3	PS	100×100mm 方皿	≈26g	10	500	可选其它包装方式, 如:单套包装	161-1001
KJ508-6	PS	120×120mm 方皿	≈40.2g	10	500		161-1201
KJ508-4	PS	100×100mm 方皿(网格)	≈10.5g	10	500		161-1002
KJ508	PS	Ø90mm 二分格	≈15.5g	20	500		161-0906
KJ509	PS	Ø90mm 三分格	≈17.5g	20	500		161-0907
KJ508-1	PS	Ø65mm 平底(网格)	≈9.83g	26	1248		161-0651
KJ508-2	PS	Ø55mm 接触皿(弧形)	≈9.86g	20	960		161-0551
KJ508-5	PS	Ø75mm 空气皿	≈18g	10	400		161-0751




细胞培养板

产品介绍

- 细胞培养板用于实验室细胞培养及培养后的分析实验,包括细胞转染、免疫荧光、克隆形成等。
- 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料,生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂,不含有任何重金属离子,具有良好的生物相容性。
- 未处理表面适用于悬浮细胞培养,经 TC 处理的培养板内壁细胞贴壁效果更好。
- 多孔数规格可选 6、12、24、48、96 孔。通常为透明板。符合 ANSI-SBS 标准尺寸。
- 细胞培养板按底部形状不同可分为平底、U 型底和 V 型底。
- 盖子的设计有利于气体流通的同时降低蒸发减少污染的可能性。
- 孔缘高出,防止交叉污染,字母与数字坐标定位,方便实验。
- 可层叠放置,节省空间,条理实验室环境。
- 无 DNA 酶无 RNA 酶、无热原、无细胞毒性。
- 经 EO 或辐射灭菌,达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。




斜侧边角,保证放盖方向唯一,避免交叉污染

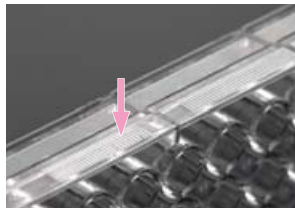


侧边防滑,便于掌握,减少失误



孔缘高出,防止交叉污染

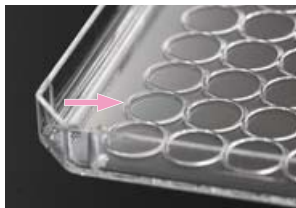


板盖内侧凸起圆形环可有效防止培养基污染和蒸发损耗

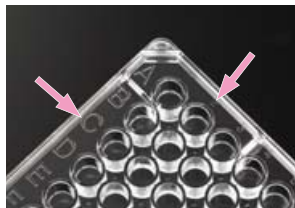

清晰的坐标标识,方便识别

6/12/24/48孔 透明板

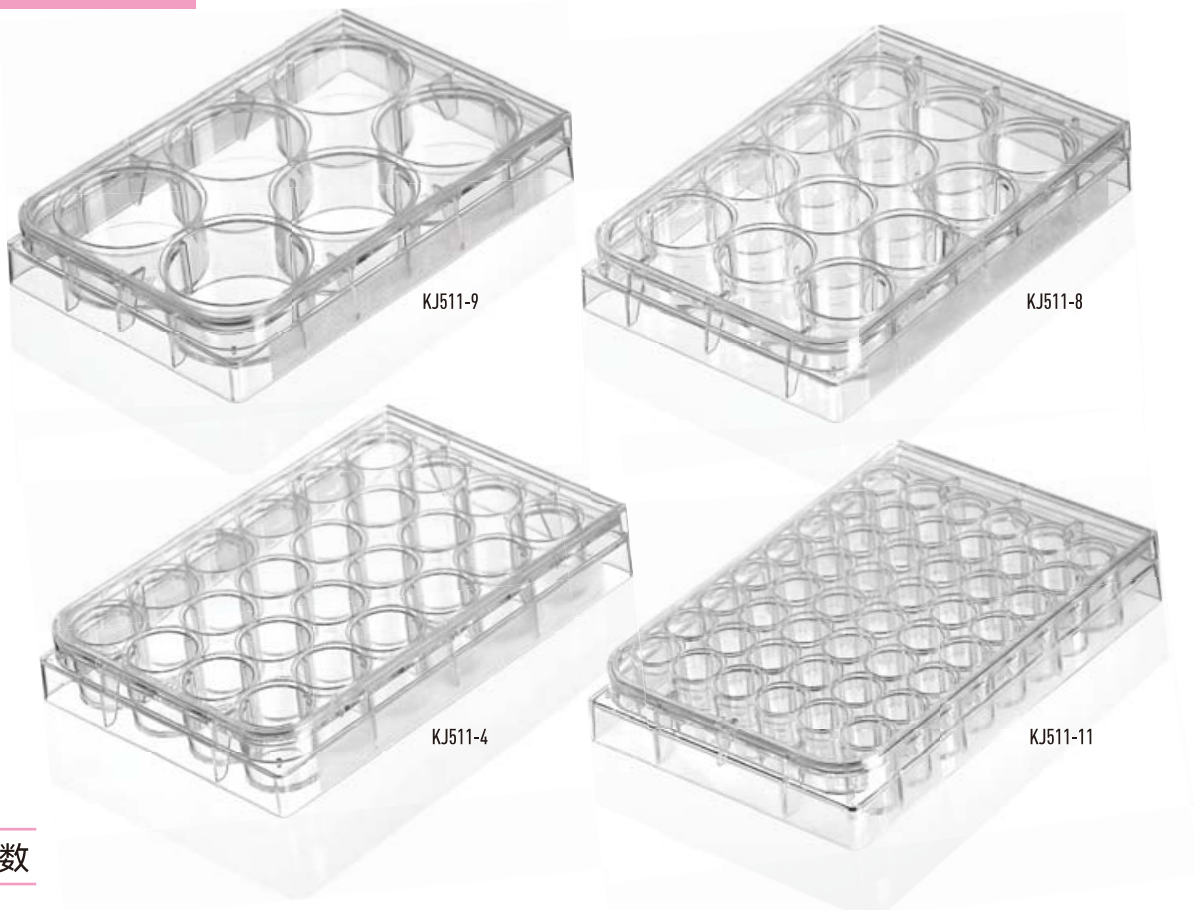


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-9	PS	6孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0061
KJ511-8	PS	12孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0121
KJ511-4	PS	24孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0241
KJ511-11	PS	48孔, 平底, 无色透明	127×85×23mm	单套包装	200		162-0481



细胞培养板

96孔 透明板

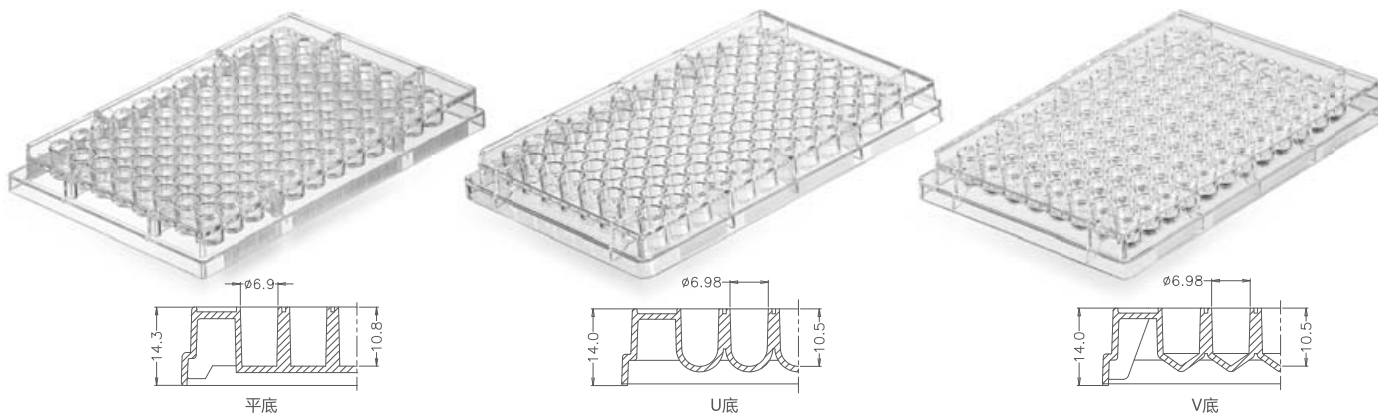

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-3	PS	96孔, 平底, 无色透明	128×85×16mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0961
	PS	96孔, U底, 无色透明		单套包装	200		162-0962
	PS	96孔, V底, 无色透明		单套包装	200		162-0963

96孔 黑白板

◎ 黑色培养板可吸收折射和反射光、降低背景光信号、减少孔间串扰, 适用于荧光分析实验。白色培养板可反射增强光信号、减少孔间串扰, 适用于化学发光分析实验。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	外观尺寸	套/包	套/箱	备注说明	产品编码
KJ511-13	PS	96孔, 平底, 黑色	128×85×16mm	单套包装	200	可定制TC处理和选择不同灭菌方式	162-0964
	PS	96孔, 平底, 白色		单套包装	200		162-0965



细胞培养瓶

产品介绍

细胞培养瓶是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适合的培养器皿。采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 原料生产。未处理表面适用于悬浮细胞培养。经 TC 处理表面具有良好亲水性，适用于常见细胞系的粘附和伸展。


- 斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出。
- 瓶颈附近的磨砂区域方便文字书写，两侧面有清晰的容量刻度。
- 堆叠设计不易滑落，易于叠放，节省培养空间。
- 多种容量规格可选：25mL、50mL、250mL、600mL、850mL。提供密封盖和滤膜透气盖。
- 透气盖（滤膜盖），0.22μm 疏水膜，有利于气体交换，同时防止瓶外微生物通过。
- 每个瓶底及包装袋均有产品批号，便于质量追溯。
- 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无细胞毒性。
- 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



滤膜透气盖和密封盖



清晰的容量刻度

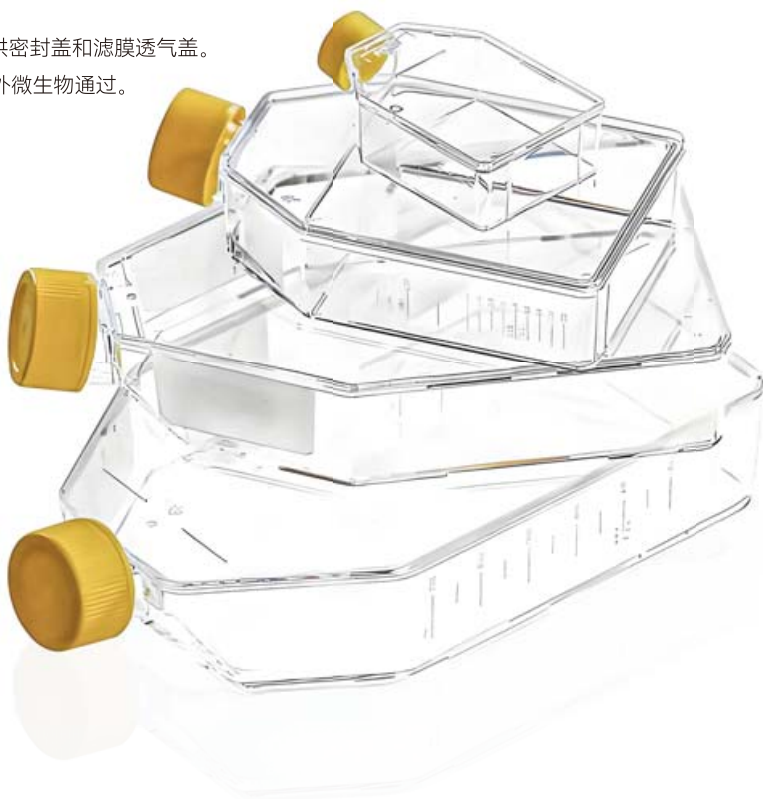

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量规格	最大工作容量	细胞培养表面积	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ512-10	PS	25mL	8mL	12.5cm ²	单只包装	200	可选： 1、密封盖或滤膜盖， 2、TC表面处理。	165-0251
KJ512-2	PS	50mL	17.5mL	25cm ²	单只包装	200		165-0501
KJ512-3	PS	250mL	60mL	75cm ²	单只包装	100		165-2501
KJ512-5	PS	600mL	250mL	180cm ²	单只包装	50		165-6001
KJ512-11	PS	850mL	400mL	12.5cm ²	单只包装	25		165-8501




一次性使用接种环与接种针

产品介绍

KANGJIAN[®] 一次性接种环与接种针采用高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 制造, 原料符合 USP Plastic Class VI 标准, 主要用于微生物的接种、转移和培养等操作, 具有良好的生物相容性和化学稳定性。表面经过处理后具有亲水性, 适用于微生物接种。

- ◎ HIPS 即高抗冲击聚苯乙烯, 是 PS 塑料与聚丁二烯合成的热塑性树脂, 具有柔韧性好、高抗冲击性、刚性大、耐磨性等诸多特点。
- ◎ 接种环的环边缘光滑, 便于在琼脂平板表面进行划线操作, 且不会损伤培养基表面。
- ◎ 接种针杆纤细柔软, 可弯曲, 能用于狭窄或特殊形状的容器内的操作。
- ◎ 无 DNase/RNase, 无热原, 无内毒素, 无细胞毒性、无抑制剂和重金属污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌, 达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。
- ◎ 采用易撕开纸塑单支或多支包装。

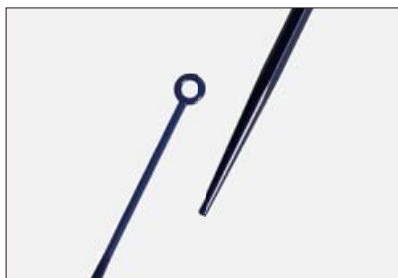

柔顺的接种头最大程度减少对微生物的损伤。针环双功能设计, 一物两用, 操作更方便。



单支和多支纸塑灭菌包装。

KJ509-1

KJ510-7

KJ510-8

KJ510-9

规格参数

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



REF 目录编号	MAT 材质	规格	长度*	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ509-1	HIPS	针式	225mm	单支包装	2000	颜色可定制	167-0011
				5支/10支/20支	10000		167-0012
KJ510-7	HIPS	1ul 两用型	198mm	单支包装	2000		167-0121
				5支/10支/20支	10000		167-0122
KJ510-8	HIPS	10ul 两用型	200mm	单支包装	2000		167-1021
				5支/10支/20支	10000		167-1022
KJ510-9	HIPS	1ul 两用型	198mm	单支包装	2000		167-0131
				5支/10支/20支	10000		167-0132

细胞推刮器

产品介绍

推刮器由符合 USP Plastic Class VI 标准的高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 或聚丙烯 (PP) 制成，具有良好的生物相容性。主要用于收集、传代和转移贴壁细胞。有Δ、T、L 型可选，适用于不同的培养容器。

- ◎ 推刮头平直，表面圆润、平滑，极大减小对细胞的损伤，减少涂布不均。
- ◎ 无 DNase/RNase，无热原，无内毒素，无细胞毒性、无抑制剂和重金属污染。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。
- ◎ 采用易撕开纸塑单支或多支包装。

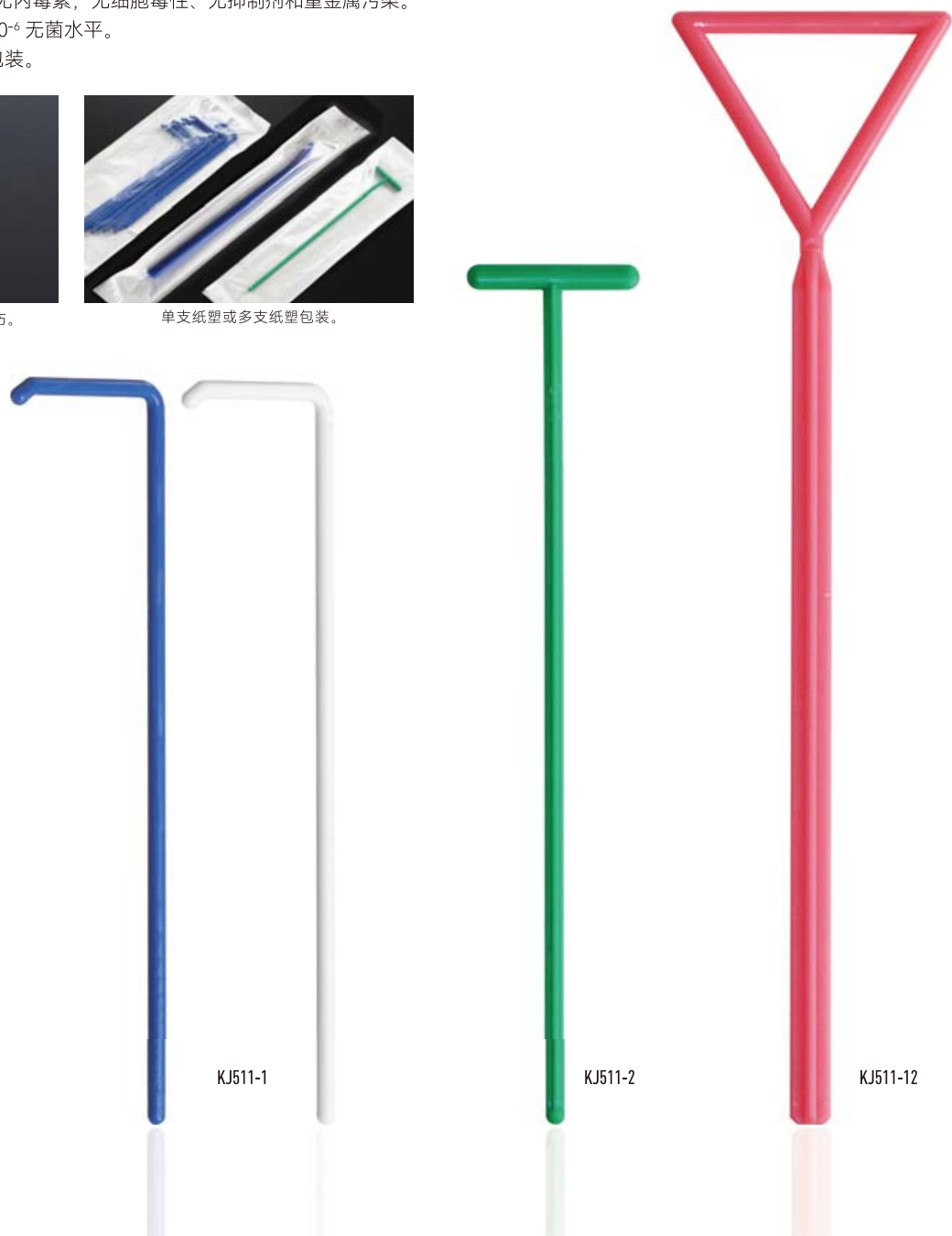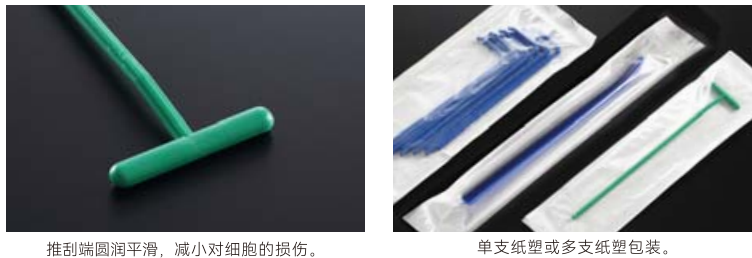

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	 推刮头 [*]	 长度 [*]	 支/袋	 支/箱	 备注说明	产品编码
KJ511-1	HIPS	30mm	148mm	单支包装	2500	EO或辐射灭菌	168-0011
				5支/10支/20支	2500		168-0012
KJ511-2	HIPS	32mm	182mm	单支包装	4000		168-0021
				5支/10支/20支	4000		168-0022
KJ511-12	PP	40mm	160mm	多支散装	3000		168-0033
		46mm	240mm	多支散装	3000		168-0043

^{*} 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



细胞刮铲刀

产品介绍

- ◎ 主要用于从培养瓶、培养皿或培养板中收集贴壁细胞，同时减少对细胞的机械损伤。适用于细胞生物学、免疫学、分子生物学等实验研究，还可用于 RNA、DNA 及蛋白提取等实验前的细胞收集。
- ◎ 细胞刮铲刀的是由符合 USP Plastic Class VI 标准的热塑性弹性体材料 TPE 或聚丙烯 PP 制成，具有良好的生物相容性。TPE 刀头触感柔软有弹性，确保对细胞最小伤害。
- ◎ 可调节刮刀角度，保持理想收刮角度，可能接触细胞生长的所有器皿表面。
- ◎ 产品无热原、无细胞毒性、无 DNase/RNase，不含重金属、荧光剂等，满足细胞培养、分子生物学实验要求。
- ◎ 经 EO 或辐射灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。



刀头有不同宽度且柔软有弹性。



可自由调整刀片角度，保持理想收刮操作。



单支纸塑灭菌包装。



KJ510-3

KJ510-5

KJ510-1

KJ510-2

KJ510-4

KJ510-6

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	刀宽*	长度*	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ510-3	PP	20mm	150mm	单支包装	100	1000	EO或辐射灭菌	169-0111
KJ510-5	PP	10mm/20mm	215mm	单支包装	100	1000		169-0121
KJ510-1	TPE+PP	20mm	180mm	单支包装	100	1000		169-0211
KJ510-2	TPE+PP	20mm	250mm	单支包装	100	1000		169-0221
KJ510-4	TPE+PP	13mm	250mm	单支包装	100	1000		169-0311
KJ510-6	TPE+PP	20mm	300mm	单支包装	100	1000		169-0321

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

可拆式96孔酶标板

产品介绍

- 酶标板主要用于酶联免疫吸附测定（ELISA），通过添加待测样品、抗体、酶标二抗以及底物等试剂，实现对生物样品中蛋白质、激素、抗体等生物分子的定量检测。此外，还可用于酶活性测定、细胞培养实验、细胞毒性实验和药物筛选实验等。
- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚苯乙烯 (PS) 为原料，板框符合 ANSI-SBS 标准尺寸。
 - ◎ 根据检测方法的不同，可选择不同颜色的酶标板，如透明板用于比色分析，白色板用于化学发光检测，黑板用于荧光检测。
 - ◎ 表面经亲水性处理，分为高结合力板和中结合力板。高结合力板适合低浓度蛋白检测，但易产生非特异性反应。中结合力板是通用型，能平衡灵敏度与特异性。
 - ◎ 可拆式酶标板的板条与板架分离，有 8 联孔、12 联孔或 24 联孔可拆，灵活性高，适合样本量不固定的实验。
 - ◎ 产品无 DNase/RNase、无热原、无内毒素、无抑制剂和重金属污染。
 - ◎ 经辐照灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

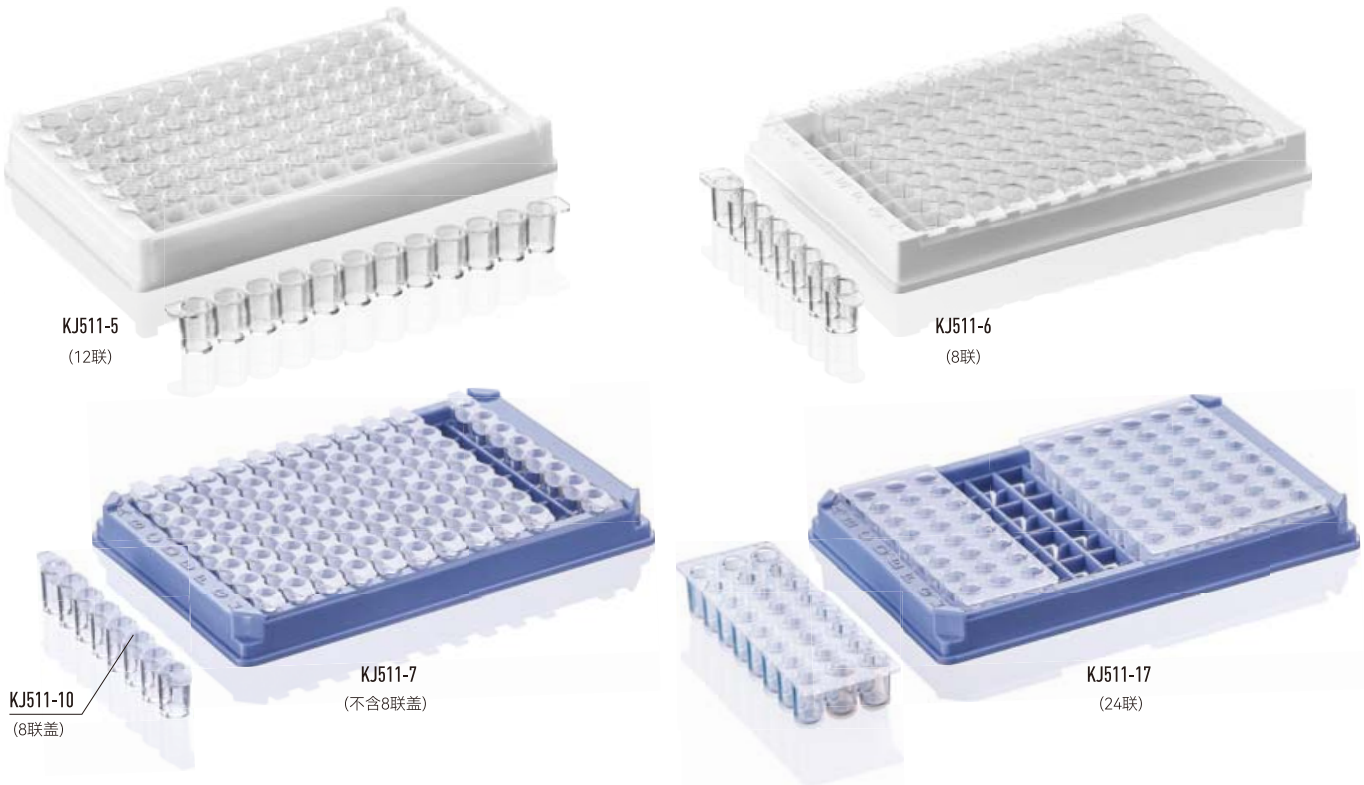

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	AS 规格	外观 尺寸	套/包	套/箱	产品编码
KJ511-5	PS	12联管可拆, 平底, C型框	128×85×16mm	单套包装	200	163-0121
KJ511-6	PS	8联管可拆, 平底, A型框		单套包装	200	163-0081
KJ511-7	PS	8联管可拆, 平底, B型框		单套包装	200	163-0082
KJ511-17	PS	24联管可拆, 平底, B型框		单套包装	200	163-0241
KJ511-10	LDPE	8联密封盖		200只/袋	2000(只)	163-1081



深孔板

产品介绍

深孔板在生命科学学科中可以在多种实验场景下起到储液、液体混合的作用，可用于核酸提取操作。多孔道的设计可以同时储存多种溶液试剂，板面标有清晰序号方便分辨，不同孔型、深度的板类可以根据实验需求进行选择。

◎ 使用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚丙烯 (PP) 为原料制造，具有良好的生物相容性。

◎ 理化性能稳定，耐酸碱腐蚀能力强，可 121℃ 高温高压灭菌，在 -80℃ 低温冷冻。



◎ 孔形有方形孔、圆形孔。孔底形状有 U 形底、V 形底、平底，确保样品最低残留。

◎ 产品符合 ANSI-SBS 标准，可适合多道移液器及自动化设备。



◎ 密封性可靠：孔板上部平整均一，保证密封的有效性。

◎ 产品无 DNase/RNase、无热原、无内毒素、无抑制剂和重金属污染。

◎ 经辐照灭菌，达 SAL=10⁻⁶ 无菌水平。

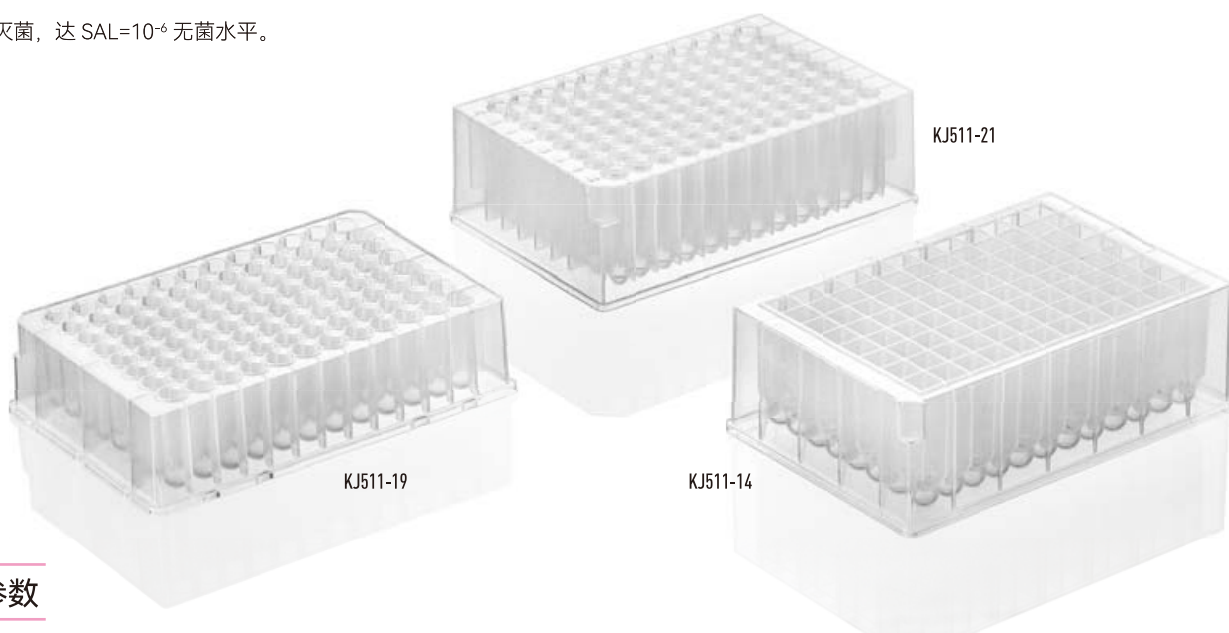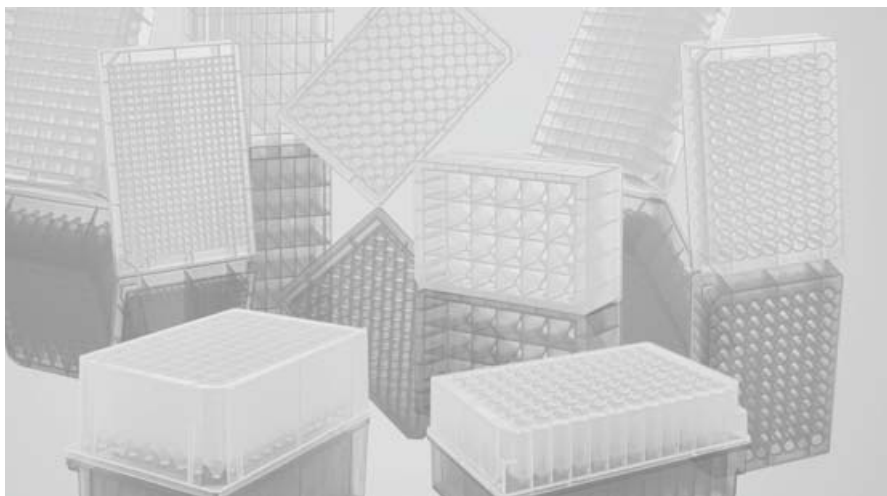

规格参数

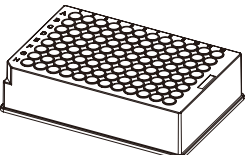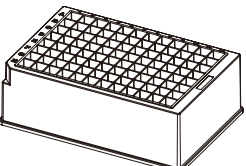圆孔板	REF 目录编号	单孔容量	MAT 材质	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
	KJ511-16	1.0mL	PP	96 圆孔 V 型底	128×85×33mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09611
	KJ511-19	1.0mL	PP	96 圆孔 U 型底	128×85×42mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09612
	KJ511-20	2.0mL	PP	96 圆孔 U 型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09613
	KJ511-21	2.0mL	PP	96 圆孔 V 型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09614
方孔板	REF 目录编号	单孔容量	MAT 材质	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
	KJ511-15	1.6mL	PP	96 方孔 U 型底	128×85×32mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09621
	KJ511-22	1.6mL	PP	96 方孔 V 型底	128×85×32mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09622
	KJ511-23	2.2mL	PP	96 方孔 锥型底	128×85×44mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09623
	KJ511-14	2.2mL	PP	96 方孔 U 型底	128×85×42mm	1 只 / 袋 ×50 袋 / 箱	164-09624

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

Assisted Reproductive Consumables



辅助生殖类耗材

- | | |
|--------------|---------|
| → IVF培养皿/多孔皿 | 125-126 |
| → 显微操作针 | 127-128 |
| → 精卵收集(处理)容器 | 129-130 |
| → 巴斯德吸管 | 131 |
| → IVF专用冻存管 | 131 |





IVF 培养皿/多孔皿

产品介绍

- 康健医疗辅助生殖用系列培养皿使用符合国家标准的聚苯乙烯原料，在十万级净化车间生产。产品用于体外环境下操作、培养或储存人类生殖细胞及胚胎。
- 经严格的检测和评估，本系列产品(培养皿和多孔皿)已获取中华人民共和国医疗器械注册证(二类)，证书编号:苏械注准20262180356。
- 产品经一系列第三方生物相容性检测试验，符合GB/T16886的适用标准和YY/T1434等相关标准，确保器皿无热原、无胚胎毒性、无细胞毒性、无遗传毒性，让精卵在复杂的实验过程中保持活力。
- 经贴壁表面处理(TC处理)的产品具有一致的亲水性表面，有助于正常生长和发育。而未经TC处理(不可湿润)如显微操作皿，可提供最佳的培养基液滴一致性。
- 体外细胞毒性存活率MTT≥92%。囊胚形成率≥80%。
- 经辐射灭菌，达到10⁻⁶的无菌保证水平。



医疗器械注册证(二类)

规格参数

多用途皿

- ◇ 用于胚胎解冻、胚胎微滴培养、捡卵、洗卵、颗粒细胞和卵丘细胞去除等。
- ◇ 平底，无光学失真。
- ◇ 可TC处理，获得良好的亲水表面。



KJ506-5



KJ506-4



KJ506-6

显微操作皿

- ◇ 显微镜下观察卵母、卵丘细胞的形态，处理卵母细胞外周的颗粒细胞群，单精子卵胞浆内注射受精操作。
- ◇ 平底，无光学失真。
- ◇ 促进培养基液滴形成(无需TC处理)。



KJ552

中心孔皿

- ◇ 用于冷冻胚胎的解冻，恢复胚胎的生物活性。
- ◇ 可TC处理，获得良好的亲水表面。



KJ551




KJ551-1

REF 目录编号	MAT 材质	型号/规格	只/包	只/箱	备注说明	产品编码
KJ506-5	PS	VP-A / Ø35	单只或多只	500	高壁，通气盖	191-0352
KJ506-4	PS	VP-A / Ø60	单只或多只	300	通气盖，环状齿	191-0601
KJ506-6	PS	VP-A / Ø90	单只或多只	300	通气盖，环状齿	191-0901
KJ552	PS	VP-A / Ø50	单只	400	密闭盖	191-0502
KJ551	PS	VP-B / Ø55 (中心孔皿)	单只或多只	300	中心孔培养皿，通气盖	191-0551
KJ551-1	PS	VP-B / Ø55 (中心孔皿)	单只或多只	300	中心孔培养皿，孔外二分置，通气盖，齿状夹持耳	191-0552

IVF 培养皿/多孔皿

多孔皿

- IVF 多孔皿有 四孔板、五孔板和六孔板。用于精卵细胞的解冻复苏、囊胚培养、卵裂期胚胎培养等。
- 人性化设计，方便轻松抓握和其他专业化操作，增加安全性。
- 可选择贴壁表面处理 (TC 处理) 的产品，其具有一致的亲水性表面，有助于正常生长和发育。

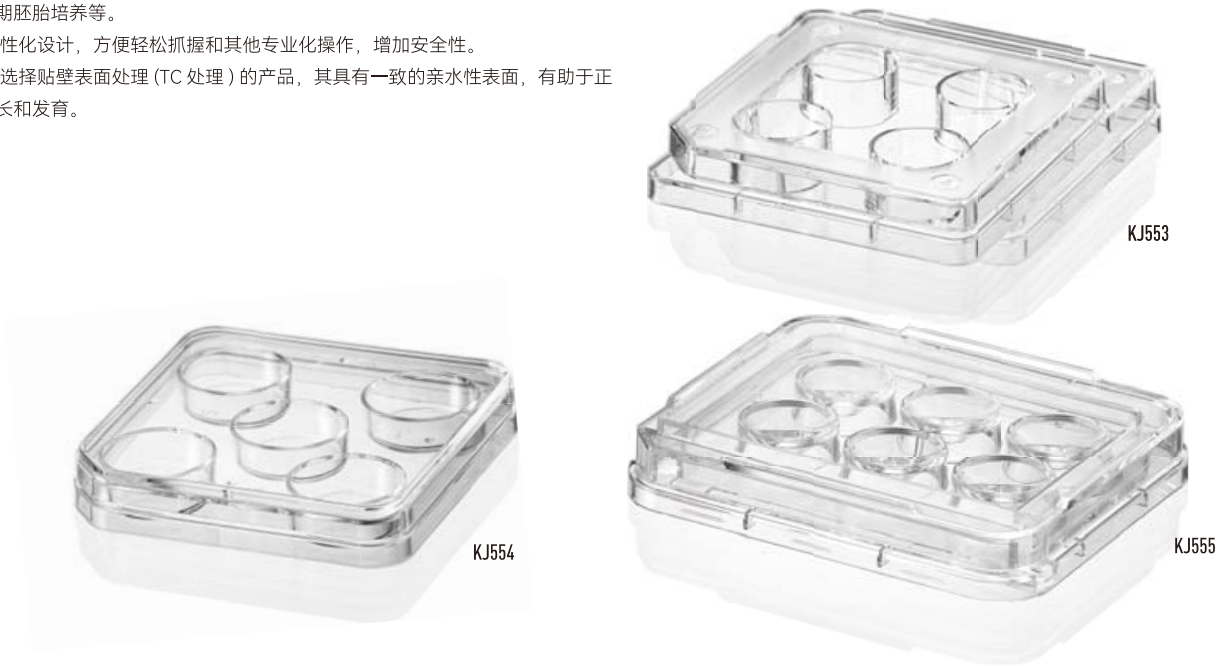

REF 目录 编号	MAT 材质	型号/规格	只/包	只/箱	备注说明	产品编码
KJ553	PS	VP-C / 4孔皿	单只灭菌包装	200	四孔，平底，单孔容积：1.7mL	192-0041
KJ554	PS	VP-D / 5孔皿	单只灭菌包装	200	五孔，平底，单孔容积：1.6mL	192-0051
KJ555	PS	VP-E / 6孔皿	单只灭菌包装	200	六孔，圆锥形平底，单孔容积：0.4mL	192-0061

第三方检测报告






显微操作针

产品介绍


- 辅助生殖用显微操作针在体外受精(VF)显微操作中, 用于注射、持卵、剥离、活检、辅助孵化和取精用的微细管状和针状工具。
- 显微操作针由针柄、针颈、针尖组成。通常由硼硅酸盐玻璃或聚碳酸酯等高分子材料制成。
- 尺寸精度: 严格控制显微操作针的针尖直径、弯曲角度、透光率等参数需, 以适配不同操作需求。
- 机械强度: 针尖承受0.5~1.0牛顿的轴向力而不发生变形或断裂, 确保操作稳定性。
- 表面质量: 采用激光拉制和离子束抛光技术, 针尖边缘粗糙度 ≤ 0.1 微米, 避免对细胞造成机械损伤。
- 经第三方生物相容性检测试验, 符合ISO10993(生物相容性试验通用标准)、USP(美国药典)等相关标准。无胚胎毒性、无细胞毒性、无DNA酶或RNA酶污染、无内毒素、无重金属污染。
- 干热或高温高压灭菌, 达无菌保证水平(SAL) 10^{-6} 。单支彩色盒装。

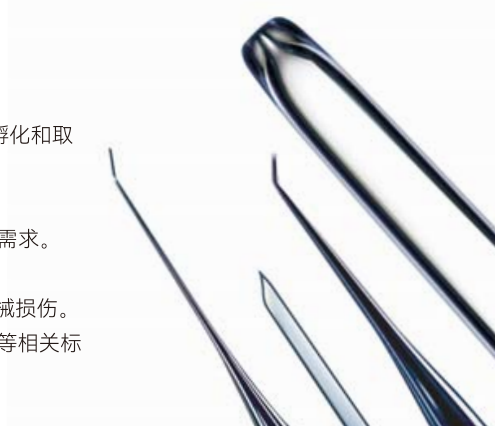

规格参数

ICSI 注射针


本品用于单精子显微注射 (ICSI), 将单个精子注入卵母细胞的操作过程中使用。针尖形态有带尖和无尖。

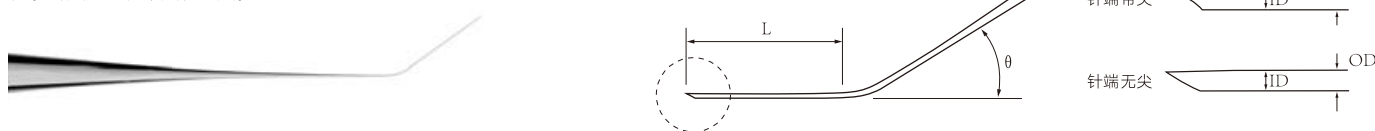

REF 目录编号	针端形态	角度 θ (°)	针端长度L (μm)	针端内径ID (μm)	针端外径OD (μm)	包装
KJ9301	带尖	20/30/35	700/1000	4.0~5.5	5.5~7.0	单支橙色盒装
KJ9302	无尖	20/30/35	700/1000	4.0~5.5	5.5~7.0	单支橙色盒装

持卵针

用于在显微镜操作过程中固定卵母细胞或胚胎。

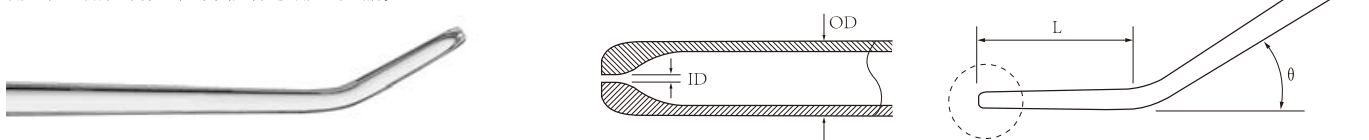

REF 目录编号	针端长度L (μm)	角度 θ (°)	针端内径ID (μm)	针端外径OD (μm)	包装
KJ9303	700	25/30/35	15~25	110~130	单支紫色盒装
KJ9304	1000	25/30/35	15~25	110~130	单支紫色盒装

剥卵针

用于清除卵母细胞和受精卵周围的颗粒细胞或转移卵母细胞及胚胎。




REF 目录编号	末端直径 (μm)	长度L (mm)	针端内径ID (μm)	包装
KJ9305	1200±100	6.5±0.75	120~129 / 130~139 / 140~149 / 150~159 /	单支蓝色盒装
KJ9306	1500±100		160~169 / 170~179 / 180~199 / 200~249 / 250~299 / 300~365	单支蓝色盒装

显微操作针

活检针

用于从卵母细胞或胚胎中收取极体或细胞。

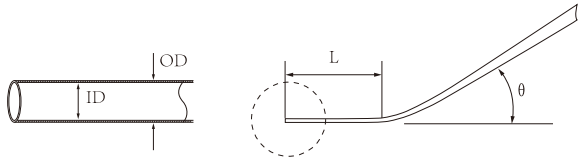

REF 目录 编号	针端内径ID (μm)	针端外径OD (μm)	针端长度L (μm)	角度θ (°)	包装
KJ9307	10~15	12.5~22.5	700/1000	25/30/35	单支绿色盒装
KJ9308	15~25	17.5~32.5	700/1000	25/30/35	单支绿色盒装
KJ9309	25~35	27.5~47.5	700/1000	25/30/35	单支绿色盒装



精卵收集(处理)容器

产品介绍

- 精、卵收集或临时盛装的容器均由符合 USP Class VI 标准的聚丙烯 (PP) 在十万级净化车间生产。
- 产品无划伤, 厚度均匀, 杯体容量刻度清晰易读, 大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
- 产品经一系列第三方生物相容性检测试验, 符合GB/T16886的适用标准和YY/T1434等相关标准, 确保器皿无热原、无胚胎毒性、无细胞毒性、无遗传毒性, 让精卵在复杂的实验过程中保持活力。
- 单只辐射灭菌包装, 达到 10^{-6} 的无菌保证水平。

规格参数

精/卵收集容器

精液收集杯用于采集成年男性精液或专用试剂的配液处理。



REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ556-1	收集管: 7ml	PP	Ø13×83mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	50套	用于精液收集	193-07011
	收集漏斗	PP	Ø50×52mm	辐射灭菌				
KJ556-21	收集管: 15ml	PS	Ø16.5×122mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	50套	用于精液收集	193-15011
	收集漏斗	PP	Ø58×55mm	辐射灭菌				
KJ556-2	90ml	PP	Ø58×67mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	250	主要用于精液收集	193-09013
KJ556-3	120ml	PP	Ø64×75mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	300	主要用于精液收集	193-12013
KJ556-4	15ml	PS/PP	Ø16×120mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	1000	可用于试剂配液处理	193-1501
KJ556-5	50ml	PP	Ø28×116mm	辐射灭菌	单只灭菌包装	500	可用于试剂配液处理	193-5001

卵泡液收集管

用于取卵时与负压装置连接收集卵泡液, 作为卵泡液的临时储存。



精卵收集(处理)容器

IVF巴氏吸管

- ◇ 医用级低密度聚乙烯 (LDPE) 材料制成，适用于少量或微量液体的吸取、转移或封闭携带。
- ◇ 无内毒素、无DNA酶或RNA酶、无热原。
- ◇ 提供单支或多支纸塑或塑封灭菌包装。



IVF移液管

- ◇ 符合USP Class VI标准的聚苯乙烯(GPPS)为原料，在十万级净化车间生产制造。用于体外受精操作过程中颗粒细胞去除液、DPBS缓冲液、配子缓冲液、卵泡冲洗液、卵裂胚培养液等液体的移取。
- ◇ 多种容量可选：1ml、2ml、5ml、10ml。容量的校准率：±2%之内。
- ◇ 无内毒素、无DNA酶或RNA酶、无热原。
- ◇ γ辐射灭菌，单支塑封包装。



单支塑封灭菌包装

KJ556-12	KJ556-13	KJ556-14	KJ556-15	KJ556-16	KJ556-17	目录编号:KJ556-12	规格:1ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 拉伸管	REF:193-0111
						目录编号:KJ556-13	规格:2ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 拉伸管	REF:193-0211
						目录编号:KJ556-14	规格:5ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 拉伸管	REF:193-0511
						目录编号:KJ556-15	规格:5ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 焊接管	REF:193-0521
						目录编号:KJ556-16	规格:10ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 拉伸管	REF:193-1011
						目录编号:KJ556-17	规格:10ML	材质: GPPS 塑料	工艺特性: 焊接管	REF:193-1021



巴斯德吸管

产品介绍

- 体外受精操作时，本品用于清除受精卵周围的颗粒细胞或转移卵母细胞 / 胚胎。
- 巴斯德吸管表面光滑管壁细长，管口圆润，选用硼硅酸盐玻璃制成，不含铅、镉等有害杂质，防止干扰细胞毒性、致敏性等评价结果。
- 符合 ISO10993(生物相容性试验通用标准)、USP(美国药典)等相关标准。
- 可定制长度 150mm~230mm，管外径 7±0.2mm，毛细管外径 1.4±0.1mm。
- 无内毒素、无重金属污染、无 DNA 酶或 RNA 酶、无菌，无热原。单支或多支包装。

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观* 尺寸	支/包	支/箱	备注说明	产品编码
KJ9230-1	无铅玻璃	长230mm，管外径7mm，毛细管外径1.7mm	20	200	带滤芯	193-2301
KJ9230-2	无铅玻璃	长150mm，管外径7mm，毛细管外径1.7mm	20	200	带滤芯	193-1501

* 产品外观尺寸为手工测量，仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



IVF专用冻存管

产品介绍

- 冻存管采用符合 USP Class VI 标准的聚丙烯 (PP) 为原料，在净化车间生产，是专用于储存生物样本的一次性实验室耗材。
- 通常在液氮气相中存储，可耐低温 -196℃，不破裂。
- 具有良好的密封性。外旋式螺纹降低样品污染机率，确保管内精卵细胞安全。
- 管体具有清晰的标识区域，便于记号标识。
- 本品无内毒素，不能含有任何对胚胎发育有害的化学物质。无 DNA 酶或 RNA 酶、无热原。
- 辐射灭菌，达到 10⁻⁶ 的无菌水平。



双色注塑管帽，密封防漏更可靠



激光蚀刻二维码、条形码、数字码多码识别

规格参数

REF 目录编号	容量	MAT 材质	耐受温度	外观尺寸	只/袋	备注说明
KJ556-18	0.5ml	HDPE、TPE、PP	-196~121℃	Ø8.9×29mm	500	辐射灭菌 管体 管底 盒身多码合一识别 建议置于液氮气相中保存
KJ556-19	1ml			Ø13×31.5mm	200	
KJ556-20	2ml			Ø13×43mm	200	

Test Tube



试 管

- | | |
|----------------|---------|
| → 试管 | 133-137 |
| → 试管帽与置换盖 | 138 |
| → 自动尿检仪专用可穿刺试管 | 139 |
| → 试管架 | 140 |






试管


产品介绍

- ◎ KANG JIAN[®] 精选 PS、PP 材料，试管由高精度模具注塑成型，产品平整光洁透明，具有良好的化学兼容性。PP 材料可以适应大多数极性有机溶液、弱酸和弱碱。一次性 PE 材料软管外观平整，管壁均匀。
- ◎ PS、PP 试管成型工艺优良，部分试管最大可承受 15000×g 的相对离心率，无渗漏及破裂。
- ◎ 系列品种及规格，能满足各种实验项目的需要。
- ◎ 可定制标签以满足特定实验的要求。

PE 试管

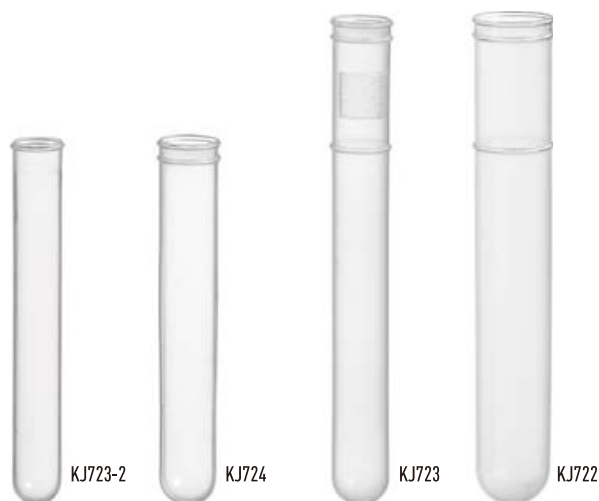

PP/PS 试管

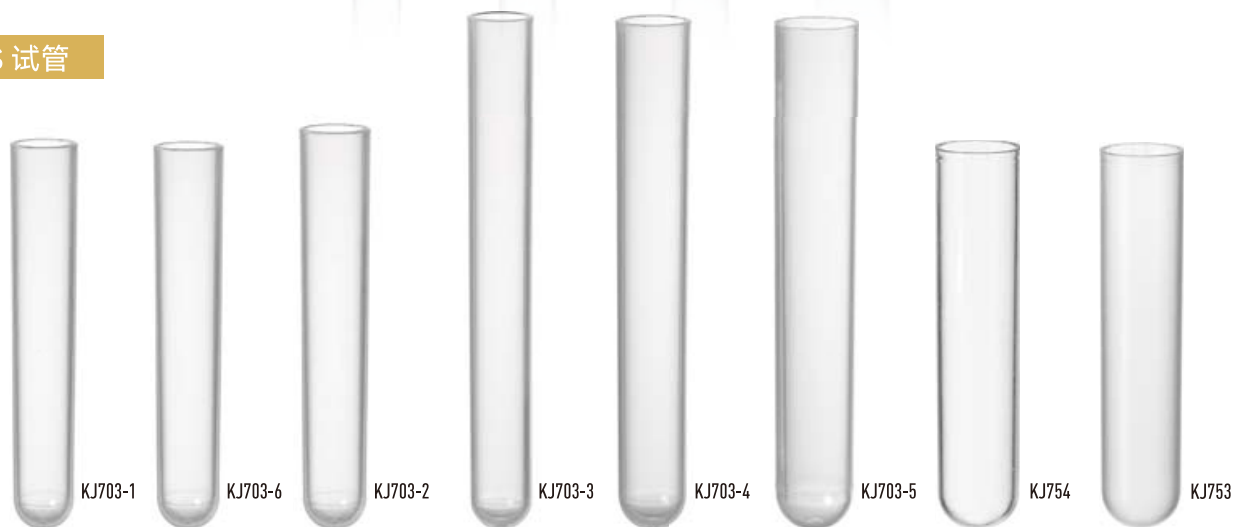

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ723-2	PE	Ø10×75mm	900	-	18000	PE 塑料软管	171-06061
KJ724	PE	Ø12×75mm	-	600	12000		171-09061
KJ723	PE	Ø12×100mm	-	500	9000		171-10061
KJ722	PE	Ø15×100mm	-	300	5400		171-13061
KJ703-1	PP	Ø12×75mm	500	-	5000		171-09041
KJ703-6	PP	Ø13×75mm	400	-	4000		171-01041
KJ703-2	PP	Ø13×78mm	400	-	4000		171-11041
KJ703-3	PP	Ø12×100mm	300	-	3000		171-10041
KJ703-4	PP	Ø15×100mm	250	-	2250		171-13041
KJ703-5	PP	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03041
KJ754	PS	Ø16×75mm	300	-	3000		171-16051
KJ753	PP	Ø16×75mm	300	-	3000		171-16041

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐照灭菌或不灭菌。



试管


PP/PS 试管

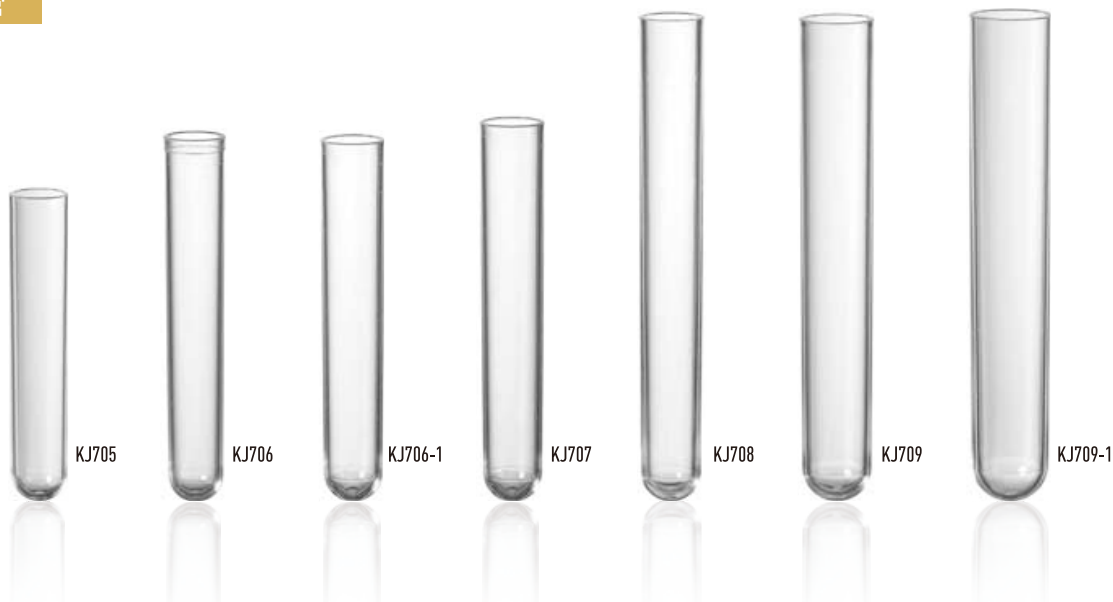

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	试管规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ705	PS	Ø12×60mm	500	-	5000		171-08051
KJ706	PS	Ø12×75mm	-	250	4500		171-09051
KJ706-1	PS	Ø13×75mm	400	250	4000/4500	可选多支袋装或多支盒装	171-01051
KJ707	PS	Ø13×78mm	400	250	4000/4500	可选多支袋装或多支盒装	171-11051
KJ708	PS/PET	Ø12×100mm	-	300	3000		171-10051
KJ709	PS	Ø15×100mm	-	225	2250		171-13051
KJ709-1	PS	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03051

带帽塞试管

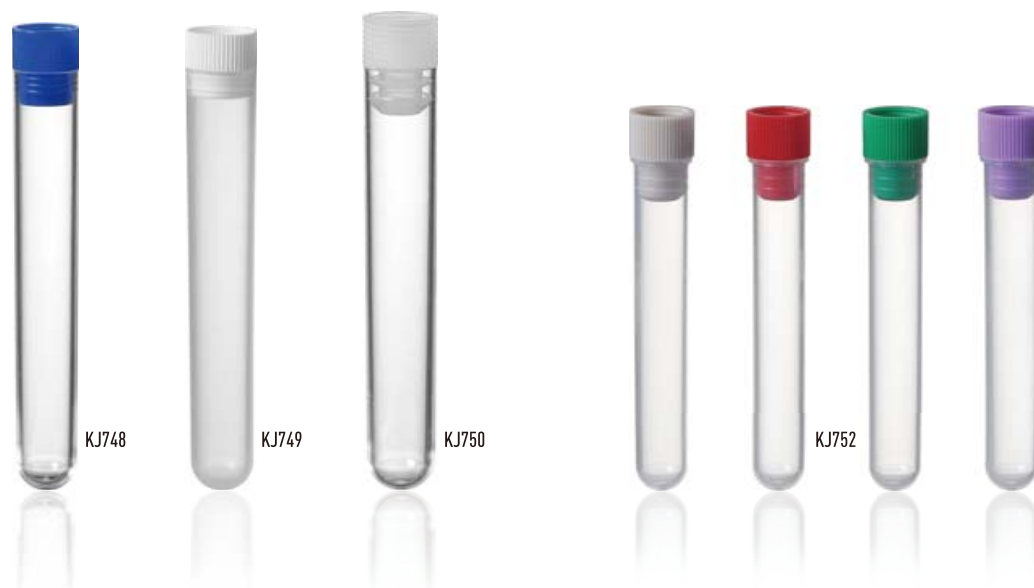

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	试管规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ748	PS	Ø15×100mm	200	-	2000	多色管塞	171-13052
KJ749	PP	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03042
KJ750	PS	Ø16×100mm	-	200	2000		171-03052
KJ752	PP	Ø12×75mm	400	-	4000		171-09042

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。



试管

尖底试管



KJ724-2



KJ724-3



KJ724-4

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ724-2	PS	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，带帽塞	172-12052
	PS	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，不含帽塞	172-12053
KJ724-3	PP	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，带帽塞	172-12041
	PP	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，不含帽塞	172-12042
KJ724-4	PP/PS	15mL	200	2000	尖底，0.5-15mL注塑刻度	172-15051

多功能试管



KJ730



KJ731



KJ729



KJ745



KJ746



KJ746-1



KJ760

规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ730	PP	5mL	200	2000	平底培养管，螺旋盖	174-05041
KJ731	PP	5mL	400	4000	圆底试管，螺旋盖	174-05042
KJ729	PS	10mL	200	2000	平底培养管，螺旋盖	174-10051
KJ745	PP	12mL	200	2000	样本管 螺旋盖	174-12042
KJ746	PP	5mL	250	2500	样本管 螺旋盖	174-05043
KJ746-1	PP	7mL	250	2500	样本管 螺旋盖	174-07041
KJ760	PP	2mL	200	3000	全自动生化免疫分析仪专用试管底	174-02041

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。



试管

培养管

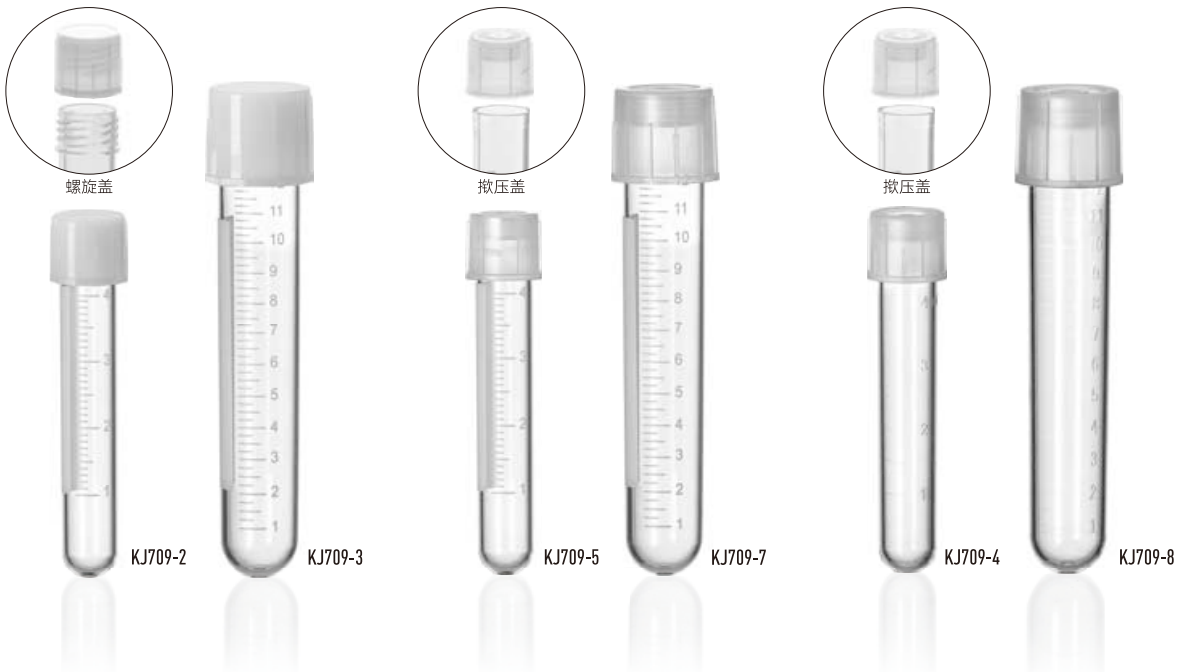


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ709-2	PP	4mL	200	2000	螺旋盖，丝印刻度	174-04041
KJ709-3	PP	12mL	100	1500	螺旋盖，丝印刻度	174-12041
KJ709-5	PP或PS	4mL	200	2000	掀压式双凸位盖，丝印刻度	174-04042
KJ709-7	PP或PS	12mL	100	1500	掀压式双凸位盖，丝印刻度	174-12043
KJ709-4	PS	4mL	200	2000	掀压式双凸位盖，注塑刻度	174-04043
KJ709-8	PS	12mL	100	1500	掀压式双凸位盖，注塑刻度	174-12044

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。

尿检测管

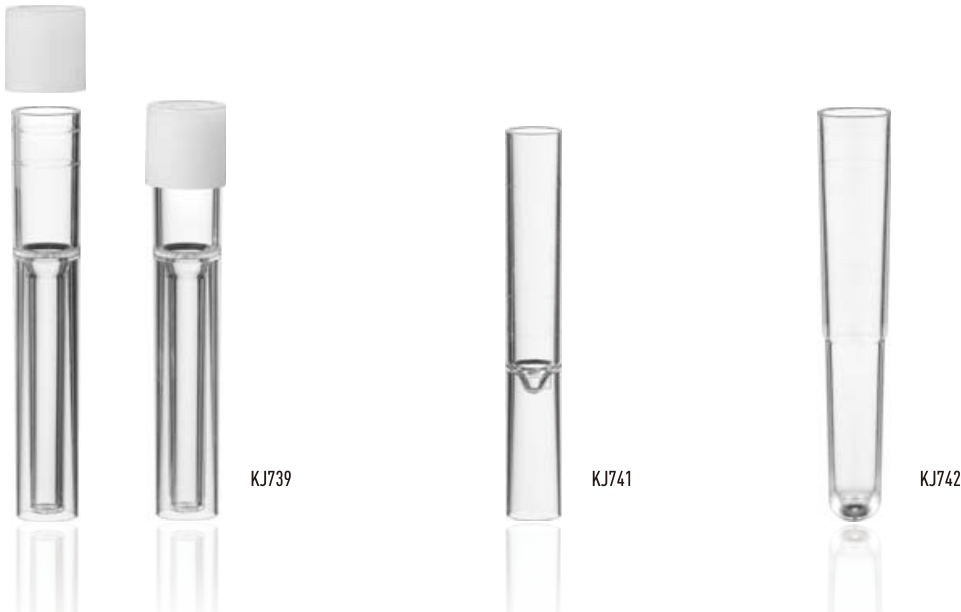

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	规格	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ739	PS	Ø16×106		200	2000	德国科宝尿仪尿液测定管，带盖	175-0001
KJ741	PS			100	2000	尿液测定管	175-0003
KJ742	PS		10mL	100	1500	尿液测定管	175-0004

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。



试管

尿沉渣管



KJ725



KJ726



KJ727



KJ732

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ725	PS	12mL	200	-	2000	尿沉渣管，平口	173-12051
KJ726	PS	12mL	200	-	2000	尿沉渣管，广口	173-12052
KJ727	PS	12mL	-	200	2000	尿沉渣管，螺旋盖	173-12053
KJ732	PS	12mL	200	-	2000	广口，带刻度，带管帽	173-12054

压积管



KJ720



KJ721



KJ721-1


规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ720	PS	1000	20000	压积管，带刻度	176-0401
KJ721	PS	100	10000	压积管，带刻度	176-0101
KJ721-1	PP	500	20000	压积管	176-0402



试管帽与置换盖

试管帽

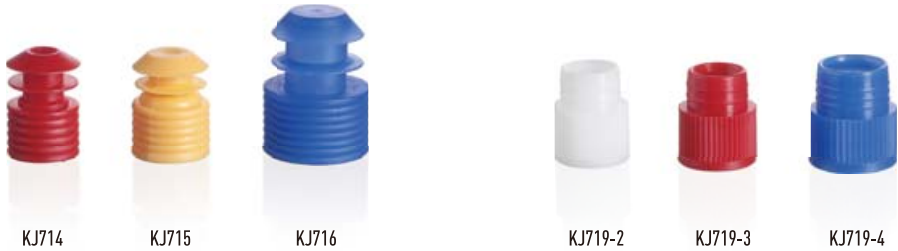

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ714	PE	Ø12	2000	20000	翼型试管塞	177-12061
KJ715	PE	Ø13	2000	20000	翼型试管塞	177-13061
KJ716	PE	Ø16	500	10000	翼型试管塞	177-16061
KJ719-2	PE	Ø12	2000	20000	柱型试管塞	177-12062
KJ719-3	PE	Ø13	2000	20000	柱型试管塞	177-13062
KJ719-4	PE	Ø15	1000	10000	柱型试管塞	177-15061

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。

置换盖



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ719-1	PE	Ø12 / Ø13	500	10000	贝克曼流水线置换盖	178-13061
KJ719-6	PP	Ø12 / Ø13	1000	10000	DXA5000 贝克曼流水线置换盖	178-16042
KJ719-8	PE	Ø12 / Ø13	1000	10000	AU5811/5821贝克曼生化仪置换盖	178-13081
KJ719-5	PP	Ø12 / Ø13 / Ø16	2000	10000	罗氏流水线置换盖	178-16041
KJ719-7	PE	Ø13	500	10000	新产业流水线置换盖	178-13071
KJ715-1	PE	Ø13	2000	20000	迈瑞MT8000TLA 流水线置换盖	178-16043
KJ714-1	PE	Ø12 / Ø13	500	10000	KANGJIAN 置换盖	178-12071



自动尿检仪专用可穿刺试管

产品介绍

医院尿检过程中，检验人员通常需要打开集尿容器盖后才能进行实验。运输、混匀、离心、实验等操作会进一步使气溶胶外泄扩散机率增多，从而增加生物安全风险。遵循临床实验室对实验安全的要求，以及符合 ISO15189 标准的试管加盖密封运送和检测，康健医疗升级尿沉渣试管，管帽采用多种密封方式：可穿刺淋膜纸、可穿刺铝箔、可自动回弹关闭的硅胶瓣，在确保密封性的同时，防破损、防泄漏，方便实验室自动化快速传送，从根本上降低尿液气溶胶对检验人员的生物安全危害。

A款：淋膜纸式

●可穿刺淋膜纸，防潮、防漏，采用生物安全密封设计，防止气溶胶污染。



KJ755-1
(PS,10mL)

KJ755-6
(PS,12mL)

B款：铝箔式

●铝箔表面为黑色绝缘涂层，利于自动分析仪的电感针头顺利穿刺。



KJ755-2
(PS,10mL)

KJ755-7
(PS,12mL)

C款：瓣膜自闭式

●配合集尿漏斗使用，漏斗移除，瓣膜自动恢复关闭。




KJ755-3
(PS,10mL)

KJ755-8
(PS,12mL)

KJ755-4
集液漏斗

D款：软膜自封闭式

●自动分析仪的电感针头可顺畅穿透TPE软膜，针管退出后软膜因弹性自动封闭针孔。

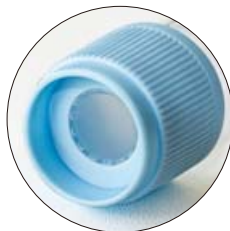

KJ755-10
(PP,10mL)

KJ755-5
(PS,10mL)

KJ755-9
(PS,12mL)

规格参数


REF 目录 编号	MAT 材质	管容量	支/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ755-1	管:PS, 帽:可穿刺淋膜纸	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10051
KJ755-6	管:PS, 帽:可穿刺淋膜纸	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12056
KJ755-2	管:PS, 帽:可穿刺黑色防导电铝箔	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12057
KJ755-7	管:PS, 帽:可穿刺黑色防导电铝箔	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10052
KJ755-3	管:PS, 帽:可穿刺自闭式塑料瓣膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12058
KJ755-8	管:PS, 帽:可穿刺自闭式塑料瓣膜	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10053
KJ755-4	漏斗:PP	-	50	2000	用于液体收集	173-12000
KJ755-10	管:PP, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10060
KJ755-5	管:PS, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10059
KJ755-9	管:PS, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12059



试管架

产品介绍

试管架主要用于固定和分类存放试管、离心管等实验室耗材，具有防止试管倾倒、避免试管碰撞或摔碎、减少试剂污染风险以及提升实验台空间利用率，使实验井然有序。常见的试管架材质有 ABS、PC、PP、不锈钢等。试管架为非一次性实验用品，经清洗消毒后可重复使用。

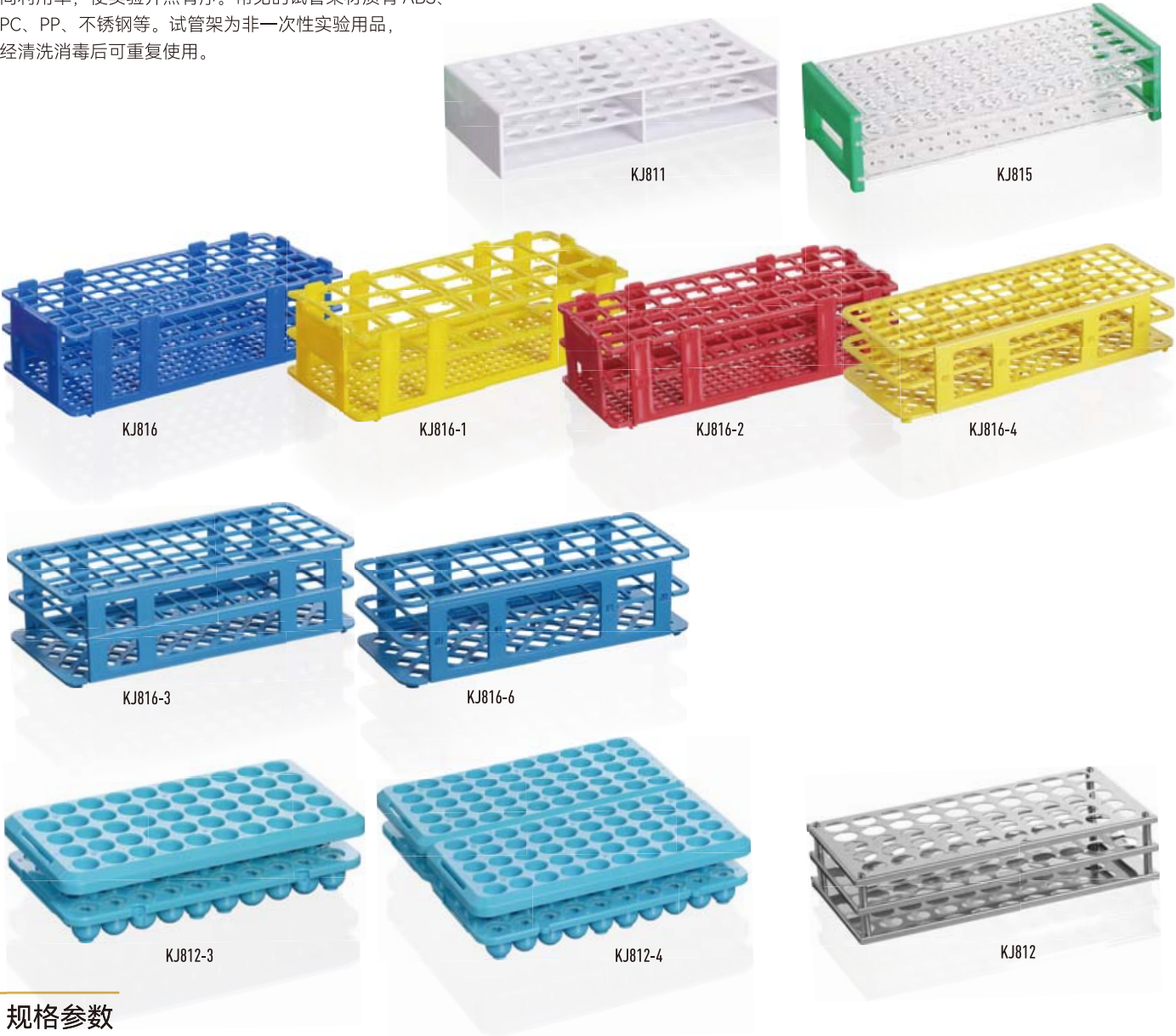

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	外观 * 尺寸	只/箱	备注说明 *	产品编码
KJ811	ABS	Ø13,50孔 Ø16,50孔	235×110×50mm	50	塑料试管架	179-0001
KJ815	PS	Ø13,50孔 Ø16,50孔 Ø18,40孔	255×120×50mm	50	塑料试管架	179-0002
KJ816	PP	90格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0003
KJ816-1	PP	21格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0004
KJ816-2	PP	44格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0005
KJ816-4	PP	90格	250×105×55mm	100	多用试管架	179-0006
KJ816-3	PP	60格	250×110×65mm	100	多用试管架	179-0007
KJ816-6	PP	40格	250×105×60mm	100	多用试管架	179-0008
KJ812-3	ABS	50孔	250×125×60mm	50	多功能试管架	179-0009
KJ812-4	ABS	100孔	250×250×60mm	25	多功能试管架	179-0010
KJ812	不锈钢	Ø13,50孔 Ø16,50孔 (Ø18,40孔)	230×120×50mm	40	不锈钢试管架	179-0011

* 试管架非一次性使用耗材，经清洗消毒后可重复使用。
* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。




病理类耗材及其它

- | | |
|-----------------|---------|
| → 组织包埋盒系列 | 142-150 |
| → 病理级载玻片 | 151-152 |
| → 组织固定与染色 | 153-157 |
| → 组织标本的运输、存储和归档 | 158-161 |
| → 尿沉渣计数板 | 162 |
| → 胶体金检测卡 | 163 |
| → 医用盛装容器/镊子/压舌板 | 164 |





KJ802-6 组织包埋盒

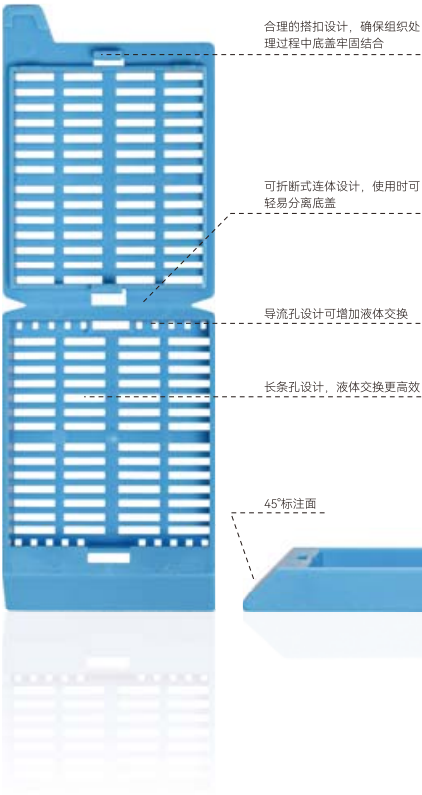


适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，带可折断式的盖子。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-6	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0205

KJ802-8 组织包埋盒

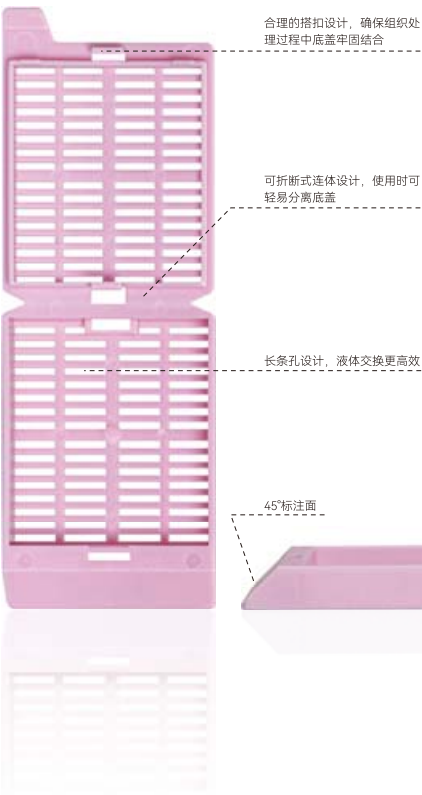


适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，带可折断式的盖子。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-8	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0206



KJ802 组织包埋盒

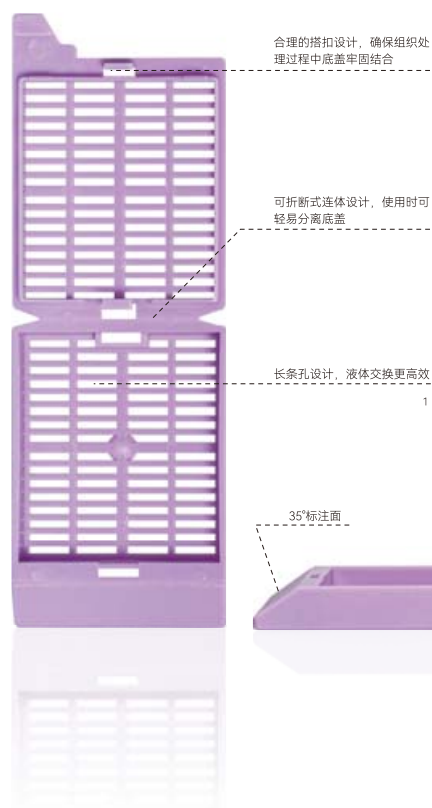

合理的搭扣设计，确保组织处理过程中底盖牢固结合

可折断式连体设计，使用时可轻易分离底盖

长条孔设计，液体交换更高效



35°标注面

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，盖、底一体式，易折断盖。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为35°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录
编号

包装
规格

备注
说明

产品编码


KJ802

40只/叠，200只/盒，2400只/箱

易折断式盖子
胶带叠装

181-0201


KJ803-1 组织包埋盒

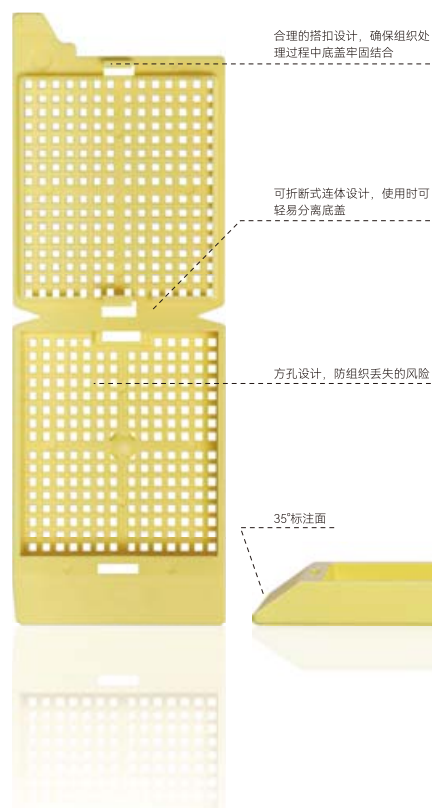

合理的搭扣设计，确保组织处理过程中底盖牢固结合

可折断式连体设计，使用时可轻易分离底盖

方孔设计，防组织丢失的风险

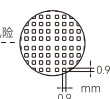

35°标注面

适用于活检样本，0.9×0.9mm的方格孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险，盖子可以容易的折断并移除同时也很方便的扣在包埋盒上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为35°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录
编号

包装
规格

备注
说明

产品编码

KJ803-1

40只/叠，200只/盒，2400只/箱

易折断式盖子
胶带叠装


181-0102



KJ802-3 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔使组织处理过程中，液体交换更高效。铰链式可拆装盖关合牢固，同时方便安装和拆卸。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

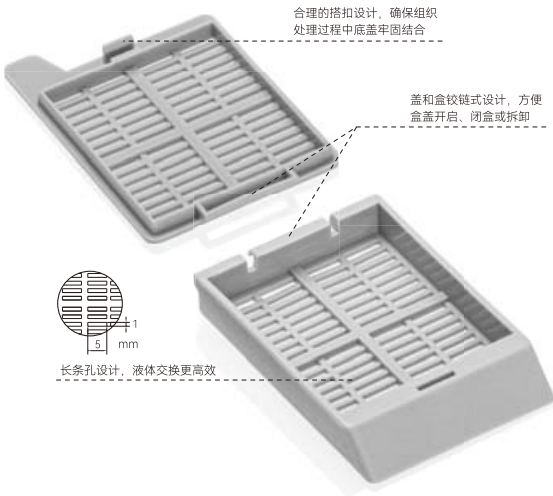

目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ802-3	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	铰链式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0204

KJ803-3 组织包埋盒

0.9×0.9mm方孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险。铰链式可拆装盖关合牢固，同时方便安装和拆卸。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ803-3	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	铰链式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0103






KJ802-1 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，盖子可以移除，同时也很方便的扣在包埋盒上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为30°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和支持30°角打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-1	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	插卡式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0209

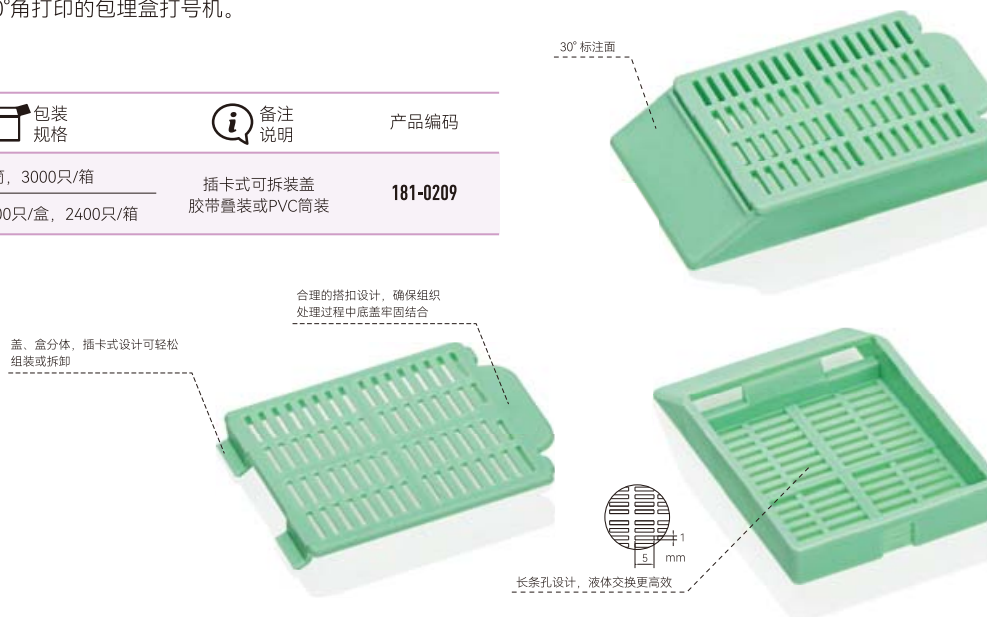

KJ802-2 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-2	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0203





KJ802-7 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ802-7	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0207




KJ803-2 组织包埋盒

0.8×0.8mm方孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ803-2	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0104

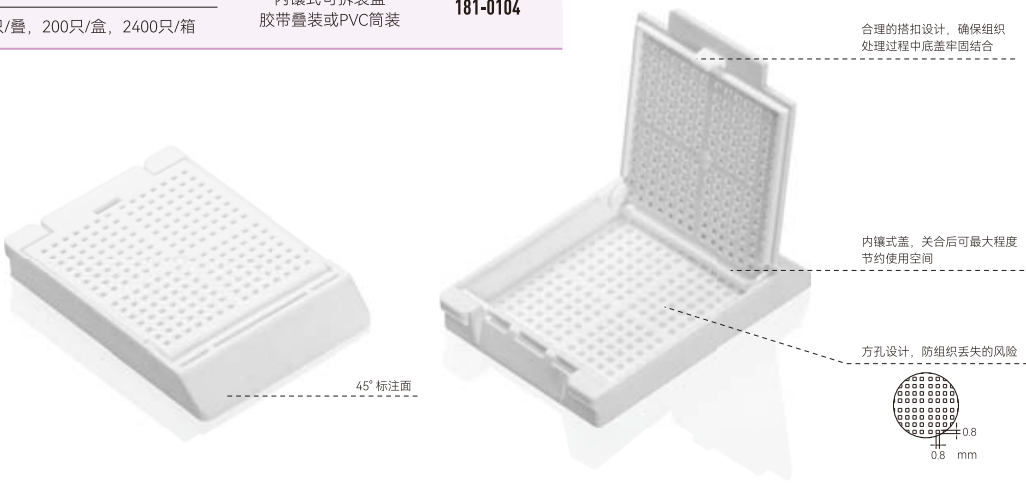




KJ805 组织包埋盒

0.26×0.26mm细方孔，更适合活检样本，特别适用于处理和包埋细小组织，大大降低了组织丢失的风险。内镶式可拆装盖关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

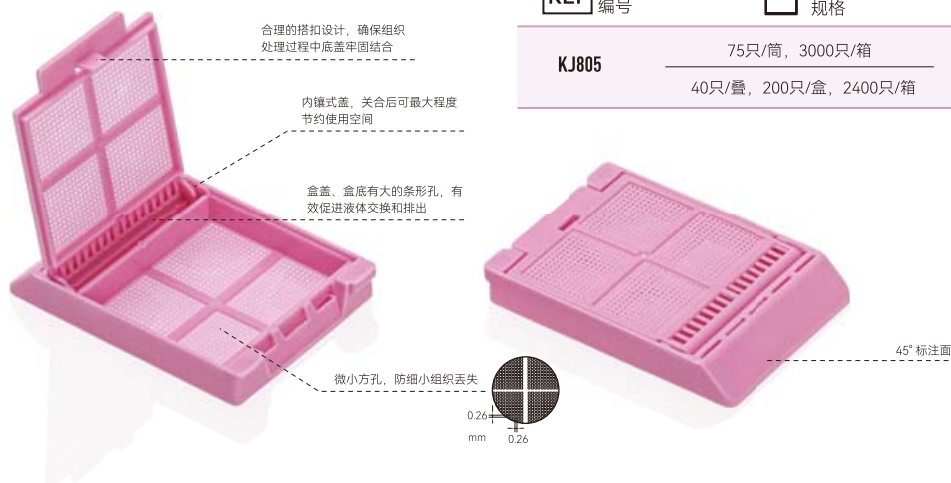


REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ805	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0302

KJ801 组织包埋盒

圆孔直径2.4mm，无盖，标准型。盒壁超厚设计，防止切片时包埋盒变形，能够紧紧的固定在切片机关头上。配合不锈钢包埋盒盖使用。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

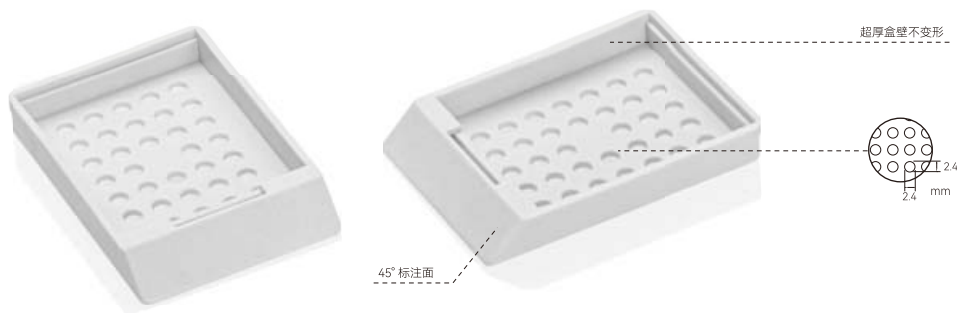

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ801	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱 500只/抽屉式中盒，4000只/箱	胶带叠装或PVC筒装 或抽屉式中盒装	181-0401



KJ801-1 组织包埋盒

圆孔直径2.4mm，无盖，标准型。盒壁超厚设计，防止切片时包埋盒变形，能够紧紧的固定在切片机夹头上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。




目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ801-1	75只/筒，3000只/箱	胶带叠装或PVC筒装 或抽屉式中盒装	181-0402
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱		
	500只/抽屉式中盒，4000只/箱		

KJ818 超大组织包埋盒

康健医疗超大组织包埋盒适用于处理较大组织，如骨骼、肠道、大脑、乳房、肾脏、肝脏、肺、胰腺、前列腺、皮肤、甲状腺等，最常用于前列腺、肠道和乳腺组织。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 产品尺寸：75×52×18mm，盒、盖分体式。
- ◆ 长条孔尺寸：5.8×1mm。
- ◆ 仅适用于手工书写。

目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ818	100套/盒，400套/箱	盒、盖分体式	181-0701

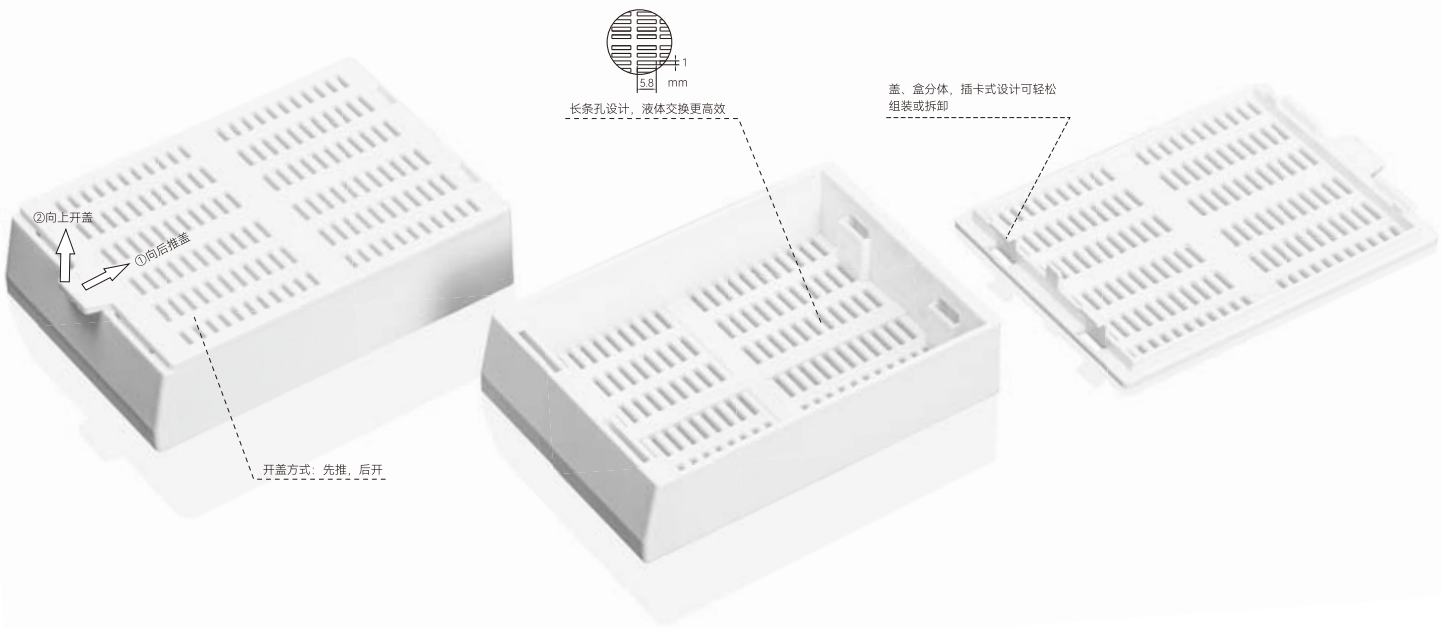



KJ801-2 不锈钢包埋盒盖

直径2.4的圆孔，不锈钢材质，表面抛光处理，配合 KJ801 无盖包埋盒使用，本品非一次性使用产品，经处理后可重复使用。



REF 目录
编号

包装
规格

备注
说明

KJ801-2

50只/袋

可重复使用

KJ836 包埋盒衬垫

一次包埋盒衬垫，配合包埋盒使用，防止组织在操作过程中丢失或脱落，适合所有康健包埋盒。

尺寸：30×25×2mm

REF 目录
编号



包装
规格

备注
说明

KJ836

500片/袋

蓝色海棉垫

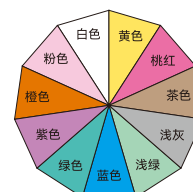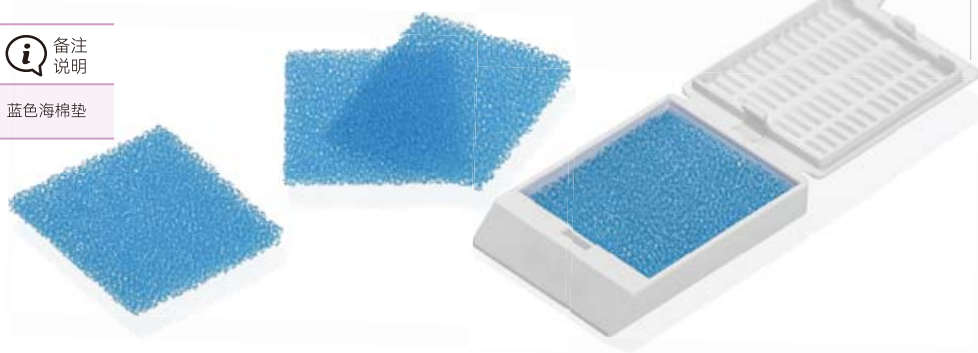

可定制不同颜色的包埋盒



不锈钢包埋盒底模

用于同款同型号的包埋盒和O形圈的组织样本包埋，适配大多数常用的包埋设备。可重复使用的包埋盒底模均由高品质的#304不锈钢材质制成，表面经过很好地抛光处理，边角圆润光滑不伤手。




REF	目录 编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装 规格
KJ813-A01		7mm	7×7mm	58×38×11mm	100只/袋
KJ813-A02			15×15mm		
KJ813-A03			21×21mm		
KJ813-A04			21×26mm		
KJ813-A05			21×32mm		

REF	目录 编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装 规格
KJ813-B01		9mm	7×7mm	60×39×13mm	100只/袋
KJ813-B02			13×13mm		
KJ813-B03			20×20mm		
KJ813-B04			20×25mm		
KJ813-B05			20×32mm		

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

PVC包埋盒底模

用于同款同型号的包埋盒和O形圈的组织样本包埋，适配大多数常用的包埋设备。一次性使用包埋盒底模，均由PVC塑料材质制成，表面光滑平整，边角圆滑，具有一定的强度，可有限次重复使用。

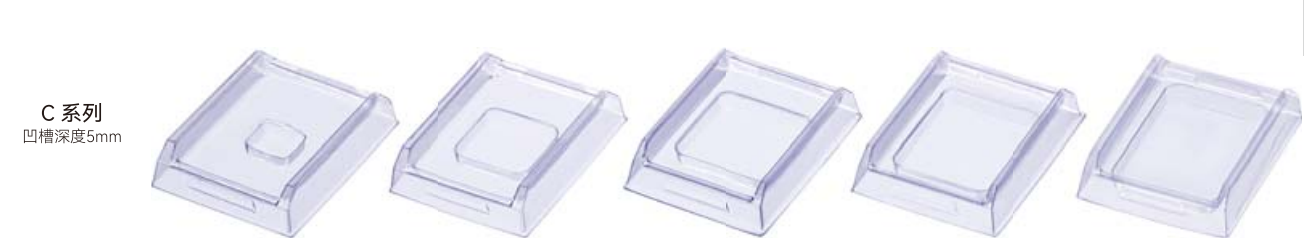

REF	目录 编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装 规格
KJ813-C01		5mm	9×9mm	50×37×12mm	100只/袋×10袋/箱
KJ813-C02			17×17mm		
KJ813-C03			23×23mm		
KJ813-C04			23×30mm		
KJ813-C05			23×36mm		

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



蒙砂载玻片

- 浮法玻璃材质，蒙砂书写面，高清洁度、免清洗。厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25×75mm。
- 采用浮法平板玻璃，结构致密，纯净透明，不易破损，满足绝大多数要求严格的实验需求，如组织病理学、细胞学和血液学等。
- 表面平整度极好，不会出现水波纹；超高的表面平整度，让临床标本铺展更为均匀，组织褶皱和细胞重叠的现象明显减少，制片质量得到了较大提升。
- 厚度一致性好，不同区域厚度更为均匀，避免了阅片过程中不断调整焦距的麻烦，缓解了医师视觉疲劳，让阅片变得轻松。




REF 目录 编号	边角处理	书写面	包装
① KJ7105	磨边，45°倒角	单头单面蒙砂	50只/盒
② KJ7107	磨边，45°倒角	单头双面蒙砂	50只/盒

漆彩载玻片

- 彩色书写面，支持各种病理学打印设备及数字化信息系统。
- 高清洁度、免清洗，厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25×75mm。
- 科学的油墨配方和丝印技术，不仅满足大多数玻片打号机要求，打印清晰，易识别，又能保证载玻片书写面可以耐受各病理常规化学剂的腐蚀，不脱落，不变色。
- 书写顺畅，支持各类载玻片书写仪打印；尺寸精确一致，完美匹配自动化染色设备。
- 品种齐全，超白玻璃和浮法玻璃，直角、45°倒角和八面倒角载玻片，满足众多个性化需求。
- 蓝色、浅蓝色、绿色、浅绿色、紫色、橙色、粉色、白色、黄色可选。




REF 目录 编号	边角处理	书写面	包装
③ KJ7109	磨边，45°倒角	单头单面漆	50只/盒

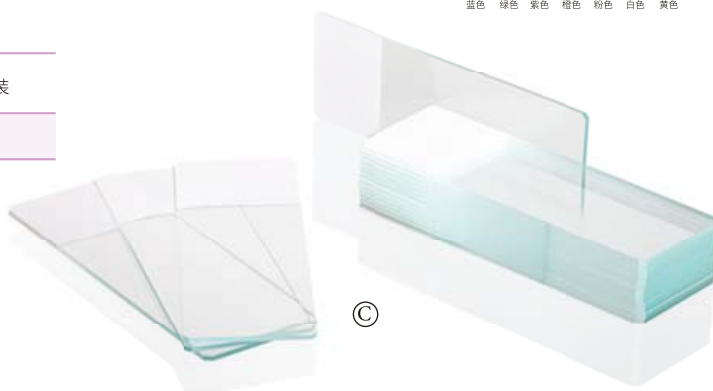




粘附载玻片

- 组织化学染色过程中，在染色液和各化学试剂下的连续水浴处理以及频繁的洗涤，特别是抗原修复后的立即洗涤，确实会增加组织切片或细胞丢失的风险。KANGJIAN粘附载玻片，表面经过特殊试剂与工艺处理后，具有持久的正电荷和粘附力，可将组织切片牢固地结合到载玻片上，大大降低了组织切片或细胞丢失的可能性。
- 采用先进的激光切割技术，保证了玻片尺寸的精准性，满足病理科各种自动化设备对玻片尺寸的要求。
- 本品采用浮法超白玻璃材质制作，浮法超白玻璃与普通玻璃相比，具有透光率佳、耐水解性好、物理强度高和无自发荧光等优点，被公认为是制作显微镜载玻片最理想的原材料之一。
- 科学的油墨配方和丝印技术，不仅满足您的玻片打号机要求，打印清晰，易识别，又能保证载玻片书写面可以耐受各病理常规化学剂的腐蚀，不脱落，不变色。
- 蓝色、浅蓝色、绿色、浅绿色、紫色、橙色、粉色、白色、黄色可选。
- 粘附载玻片也推荐用于常规H&E染色，更好的适用于如大脑和脊髓等难粘附组织的制片。

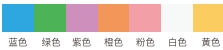

REF	目录 编号	边角处理	书写面	包装
①	KJ004S	磨边，45°倒角	单头单面漆	50只/盒

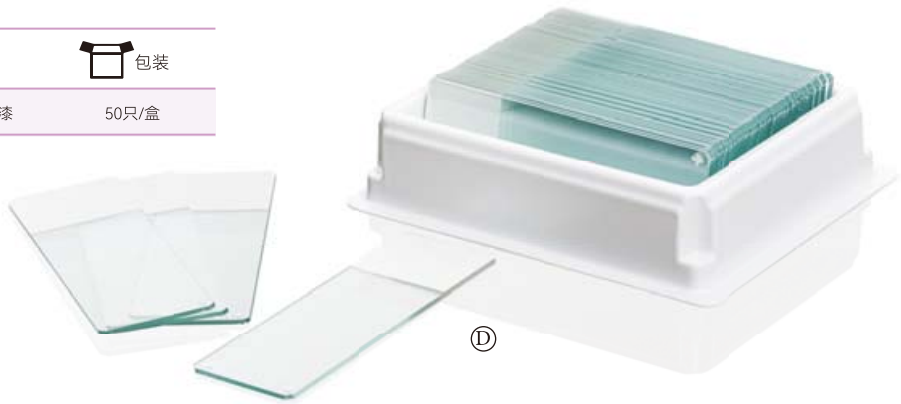



组织固定液(防漏标本杯)

组织固定液用于保存、固定和防腐人体和动物组织，防止细菌的腐蚀和组织的自溶，适用于外科、活检、组织病理和胃镜等科室的样本固定或保存，对组织穿透性好、收缩小，保持组织和细胞处于最自然的状态，且对大多数抗原物质具有较好的保存效果。

◎ 4%中性甲醛固定液：为最常用的固定液，以pH7.2~7.4的磷酸缓冲液为溶剂配制的，渗透性强，组织固定均匀、对细胞损伤小，并有利于维持pH值稳定。中性pH值，抑制甲醛多聚物产生，有利于保护绝大多数抗原。其固定效果及对组织抗原性的保存均优于一般约4%甲醛固定液。能满足常规HE及免疫组化PCR等工作。一般无特殊要求的病理标本均适用。

◎ 即开即用，杜绝污染；透明杯身，便于观察样本的固定状态。

◎ 防漏设计，确保使用和运输安全；预贴标签，方便及时记录样本信息。

◎ 多种规格，满足各种样本离体后的制备需求；多种包装形式可选，满足各种需求。

◎ 根据您的需要，可定制4%多聚甲醛固定液或10%中性福尔马林固定液。



装量3mL, 64只/盒架



装量10mL, 25只/盒架



装量20mL, 16只/盒架



装量30mL, 16只/盒架



装量50mL, 9只/盒架



装量60mL, 9只/盒架



装量175mL, 4只/盒架



装量250mL, 4只/盒架



REF 目录 编号	AB 固定液 类型	装液量	容器 规格	包装 方式	备注 说明	产品编码
KJ829-1	4%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	3mL(红色)	5mL	64只/纸架×10纸架/箱	另可定制： 5L或10L桶装	187-0301
KJ829-2		10mL(红色)	20mL	25只/纸架×10纸架/箱		187-1001
KJ829-3		20mL(无色)	40mL	16只/纸架×10纸架/箱		187-2001
KJ829-4		30mL(无色)	60mL	16只/纸架×10纸架/箱		187-3001
KJ829-5		50mL(无色)	80mL	9只/纸架×8纸架/箱		187-5001
KJ829-6		60mL(无色)	120mL	9只/纸架×8纸架/箱		187-6001
KJ829-7		175mL(无色)	250mL	4只/纸架×8纸架/箱		187-1501
KJ829-8		250mL(无色)	500mL	4只/纸架×8纸架/箱		187-2501



盒架式分装




5L桶装(需定制)

活检组织标本杯

活检组织标本杯的杯盖内置(铝箔密封)10mL左右的组织固定液，通过按压杯盖弧形凸起的顶部将密封铝箔截破，组织固定液快速释放入杯内。本品以人为本，最大程度减少操作人员接触有害气体溶胶，完全隔绝与组织固定液的接触。其安全便捷的特点，让越来越多的实验室及医疗机构选用该产品进行活检组织固定。

- ◎ 标本杯采用医用级聚丙烯PP材质，在洁净车间生产，产品无细胞毒性，无热原。
- ◎ 杯体防漏设计，确保使用和运输过程安全无泄漏。
- ◎ 根据需要，可定制4%多聚甲醛固定液或10% 中性福尔马林固定液。

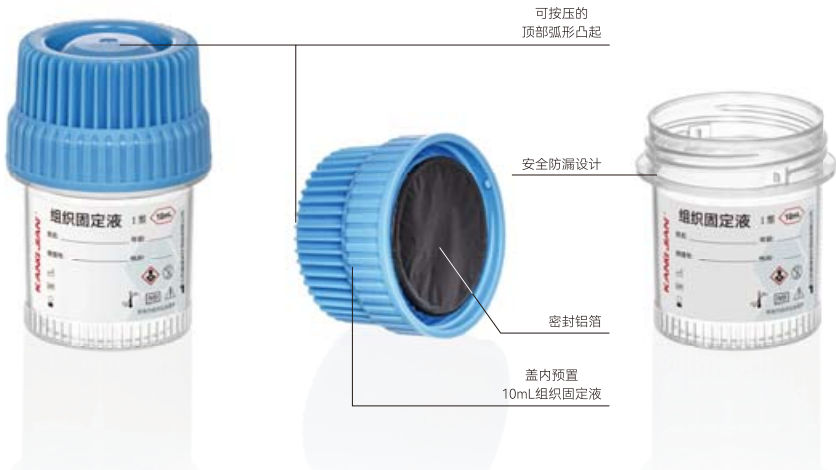

REF 目录 编号	AB 固定液 类型	杯盖 预置液	容器 规格	包装 方式	备注 说明	产品编码
KJ829-14	4%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	10mL	20mL	25只/纸架×10纸架/箱	另可定制 其它类型的固定液	187-1002




桶装10%中性福尔马林固定液

甲醛按照1:9的比例配置成10%的福尔马林溶液，甲醛水溶液渗透力强，固定均匀，对组织收缩较少，能保存脂类和类脂体，对脂肪、神经及髓鞘的固定效果很好。本品加入了0.02mol浓度的磷酸盐缓冲液，其固定效果更佳，特别是对免疫组化、原位杂交、FISH、突变、PCR、二代测序等检查效果更优越，而且避免了甲醛色素的形成。适用于科研实验室、手术室、病理科等科室。

- ◎ 高分子材料试剂瓶，能耐弱酸、耐弱碱和油类等
- ◎ 配铝箔垫片，可防漏。
- ◎ 有5L和10L规格可选。



使用步骤

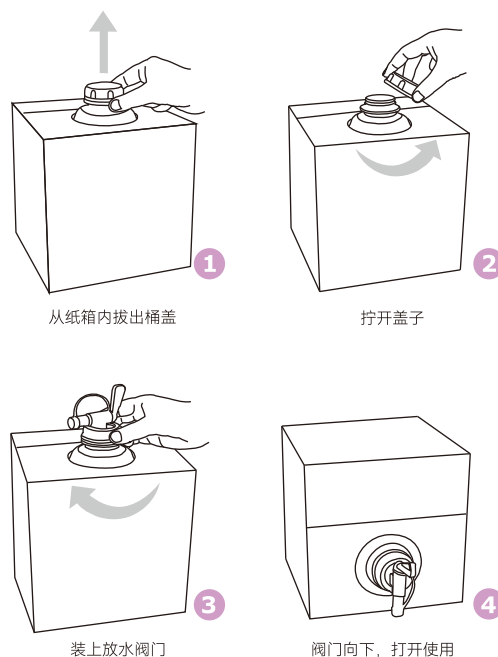

REF	目录编号	固定液类型	容器规格	包装方式
KJ829-9		10%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	5L	1桶/盒×4盒/箱
KJ829-10			10L	1桶/盒×2盒/箱

苏木素染色液

M-Gill's苏木素染色液(Modified Gill's Hematoxylin)是改良型吉尔苏木素，开瓶即用，为病理实验室主流即用型核染液，主打稳定、低沉淀、适配自动化，是Gill系列的优化版。

- ◎ 改良 Gill 配方，染色稳定高效
核染清晰锐利、蓝亮均匀，对比度佳，病理诊断更精准。
- ◎ 低沉淀、不易氧化，上机更稳定
适配全自动染色流水线，减少堵针与维护，高通量更省心。
- ◎ 即开即用，操作简便
无需配制、开瓶即用、步骤简化，批间差异小、结果一致性高。



REF	目录编号	染色液类型	容量规格	包装方式	备注说明
KJ837-1		M-Gill's型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



伊红染色液

醇溶型伊红染色液是以乙醇为溶剂的酸性胞浆染色试剂，主要用于病理组织学HE染色。本品着色鲜艳、嗜酸性结构染色清晰，红色均匀透亮，与组织结合牢固，脱水过程不褪色、不流失，背景洁净，对比度佳，适用于手工染色及全自动病理染色机，是常规病理切片、教学切片与高质量诊断切片的理想选择。

- ◎ 醇溶配方，着色牢固，染色鲜艳红润，对比度高。
- ◎ 不易过染，背景干净，无脏染、无杂色，切片质量稳定。
- ◎ 即开即用，无需配制，适配全自动染色机高通量病理实验室。

REF 目录 编号	AB 染色液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-2	醇溶型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



脱钙液

EDTA 型脱钙液是以乙二胺四乙酸盐（EDTA）为主要脱钙成分的温和型组织脱钙试剂，通过螯合作用去除骨及钙化组织中的钙盐，不破坏组织形态与细胞结构。

- ◎ 产品作用温和、脱钙均匀彻底，对组织抗原性、核酸及染色效果影响极小，脱钙后组织切片完整、染色清晰，适用于骨组织、钙化组织及对后续病理染色、免疫组化、分子病理有较高要求的样本处理。
- ◎ 本品无强酸、无刺激性气味，操作安全环保，适用于各类病理组织处理及实验室样本脱钙使用。

REF 目录 编号	AB 脱钙液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-3	EDTA型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



分化液

分化液是病理组织学 HE 染色中专用的脱色调节试剂，主要成分为稀盐酸乙醇。

- ◎ 用于苏木素染色后，适度脱去组织切片上多余染料，使细胞核着色深浅适中、轮廓清晰，降低背景非特异性染色，提升核浆对比度，保障病理切片诊断质量。
- ◎ 本品作用温和、易于控制，适配手工操作及全自动病理染色机，操作简便、结果稳定。

REF 目录 编号	AB 分化液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-5	稀盐酸乙醇	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格





返蓝液

- ◎ SA 型返蓝液由醋酸钠和纯化水组成。病理组织学染色配套的专用蓝化试剂，采用温和缓冲体系配制，作用稳定、蓝化均匀。
- ◎ 用于苏木素染色分化后，快速中和切片酸性环境，使细胞核由淡红色转为清晰、鲜亮的蓝色，核质对比鲜明，染色结果一致性好。
- ◎ 本品性能温和、操作简便、无刺激性气味，适用于手工染色及各类全自动病理染色机。

REF	目录 编号	返蓝液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-4		SA型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



载玻片染色缸

适用于标准尺寸25×75mm的载玻片25片，染色缸和配套的染色架为PP材质耐酸碱，有白色、浅蓝和灰色可选。

REF	目录 编号	外观 尺寸	包装 方式
KJ821-1		108×54×115mm (盖、盒分体)	1只/袋×20只/箱
KJ821-2		108×54×115mm (盖、盒连体)	1只/袋×20只/箱

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



不锈钢载玻片染色架

适用于标准尺寸25×75mm(1"×3")的载玻片，不锈钢材质。


REF	目录 编号	规格	包装 方式
KJ821-3		20片装	1只/盒×50只/箱
KJ821-4		30片装	1只/盒×40只/箱
KJ821-5		60片装	1只/盒×20只/箱





载玻片标本盒

- 适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片，ABS材质。
- 盒内底部放置软木垫，有效防止在运输及存储中对玻片的损坏；盒内顶部有索引表，便于标识和查找。
- 为缓解视觉疲劳，每种规格的产品均可提供灰色、蓝色、橙色、白色和红色等颜色。

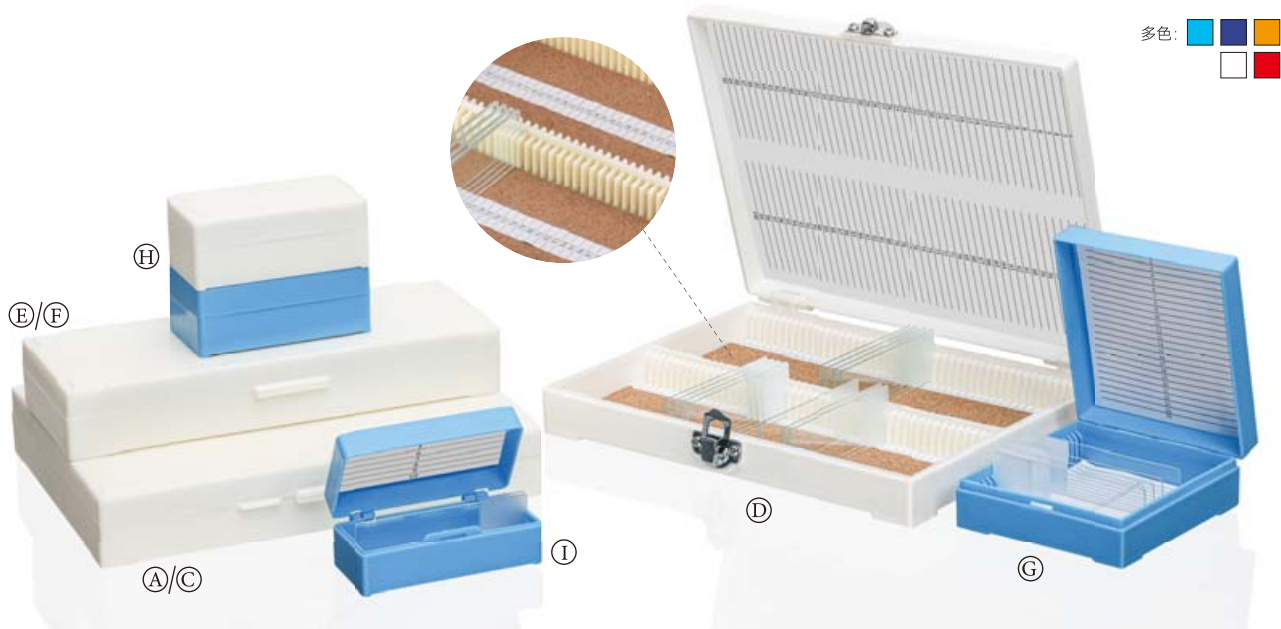


REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	备注说明	产品编码
Ⓐ	KJ808	100格	210×160×30mm	50		182-1001
Ⓑ	KJ808-1	100格	210×160×30mm	50	金属锁扣	182-1002
Ⓒ	KJ808-2	100格	210×160×35mm	50	加软木垫	182-1003
Ⓓ	KJ808-3	100格	210×160×35mm	50	金属锁扣、加软木垫	182-1004
Ⓔ	KJ807	50格	210×80×30mm	100		182-0501
Ⓕ	KJ807-1	50格	210×80×30mm	100	加软木垫	182-0502
Ⓖ	KJ806	25格	82×95×32mm	200		182-0251
Ⓗ	KJ806-1	12格	82×49×32mm	200		182-0121
Ⓘ	KJ806-2	10格	82×41×32mm	200		182-0101

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	备注说明	产品编码
Ⓙ	KJ808-4	100格	210×180×35mm	50	金属锁扣, 加软木垫	182-1005

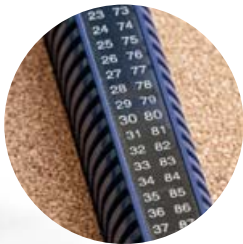



载玻片滑动器、晾片板

• 20格载玻片晾片板

20格塑料晾片板，适用标准尺寸的载玻片。确保实验样本在显微镜观察前后保持整洁有序。

- 使用PC+ABS 塑料制成，抗冲击能力是普通 ABS 的 3-5 倍。
- 结构稳定，耐酸碱，可重复使用。
- 适用尺寸为25×75mm (1"×3")的载玻片。
- 可多层层叠，或与20格晾片板混叠放置，节约实验及存放空间。

多色: 



REF 目录编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	产品编码
KJ824	20格	300×195×12mm	50	183-0005

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

• 10格载玻片晾片板

10格载玻片晾片板用于较大组织切片的载玻片的晾干和存放，确保实验样本在显微镜观察前后保持整洁有序。

- 使用PC+ABS 塑料制成，抗冲击能力是普通 ABS 的 3-5 倍。
- 结构稳定，耐酸碱，可重复使用。
- 适用79×54mm及以下尺寸的载玻片(可定制)。
- 可多层层叠，或与20格晾片板混叠放置，节约实验和存放空间。



REF 目录编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	产品编码
KJ824-1	10格	300×195×12mm	50	183-0007

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

• 载玻片滑动器

每次可批量放置载玻片到滑动器上方盒内，取单只玻片时只需旋动出片旋钮。适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片。ABS材质。

REF 目录编号	外观* 尺寸	只/箱	产品编码
KJ821	100×100×200mm	50	183-0001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。





载玻片邮寄夹


- 适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片，有PP材质和纸质。
- 可放1-48片的多款筒装载玻片邮寄夹(盒)，便于保存、邮寄和携带。
- 产品上贴有可书写标贴，便于标识，特别推荐病理读片使用。

• 载玻片专用塑料邮寄盒




REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	产品 编码
A	KJ820-6	可装5片	Ø30×90mm	60	183-0006
B	KJ820-3	可装2片	90×70×6mm	800	183-0002
C	KJ820-4	可装5片	30×18×82mm	800	183-0003

• 载玻片专用纸质邮寄夹

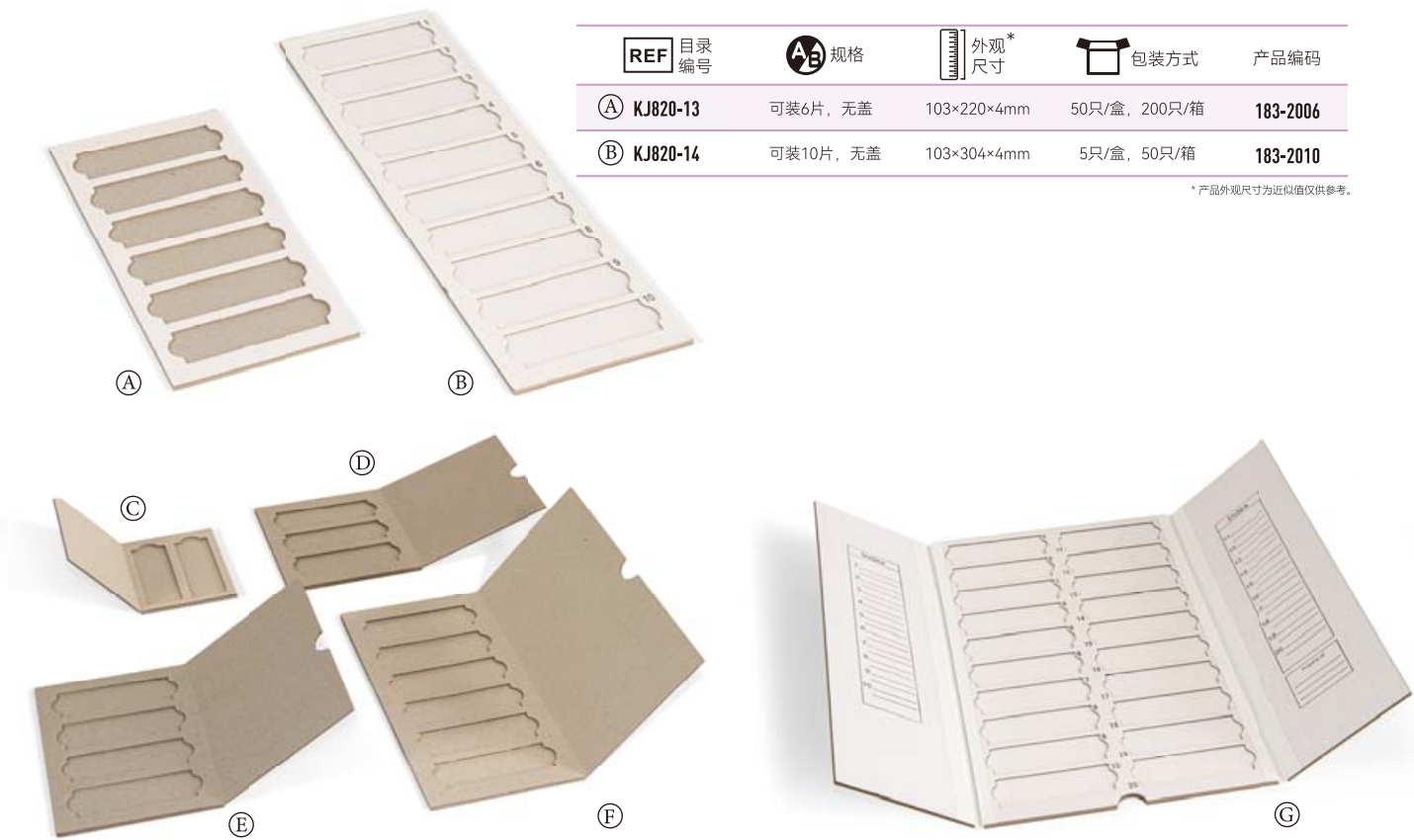

REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
A	KJ820-13	可装6片，无盖	103×220×4mm	50只/盒，200只/箱	183-2006
B	KJ820-14	可装10片，无盖	103×304×4mm	5只/盒，50只/箱	183-2010

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

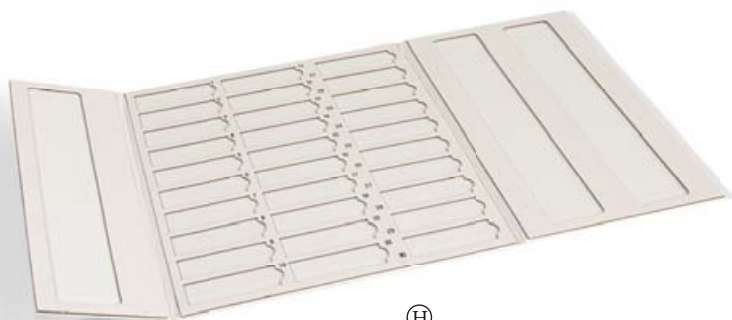

⑨



①


REF 目录 编号	规格	关盖* 尺寸	包装方式	产品编码
③ KJ820-9	可装2片, 有盖	75×95×6mm	50只/盒, 500只/箱	183-2102
④ KJ820-10	可装3片, 有盖	110×118×6mm	50只/盒, 500只/箱	183-2103
⑤ KJ820-11	可装4片, 有盖	110×148×6mm	50只/盒, 200只/箱	183-2104
⑥ KJ820-12	可装6片, 有盖	110×214×6mm	50只/盒, 200只/箱	183-2106
⑦ KJ820-2	可装20片, 有盖	205×340×8.5mm	5只/盒, 50只/箱	183-2120
⑨ KJ820-7	可装30片, 有盖	290×340×8.5mm	5只/盒, 50只/箱	183-2130
① KJ820-8	可装48片, 有盖	383×403×8.5mm	5只/盒, 50只/箱	183-2148

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



尿沉渣计数板

- ◆ 康健医疗尿沉渣计数板采用医用级PS原料生产，用于临床检验的尿沉渣镜检，对尿液中有形成分进行体外计数和分析。
- ◆ 尿沉渣计数板共有10个计数池，可检测10份尿液标本，每个计数孔都有一个固定的体积和精确定量。
- ◆ 尿沉渣计数板的设计使尿沉渣的显微检查更具准确性、一致性和安全性。使检测变得更为简单实用，同时避免标本受到污染，使尿液标本的有形成份的计数变得更为简捷。

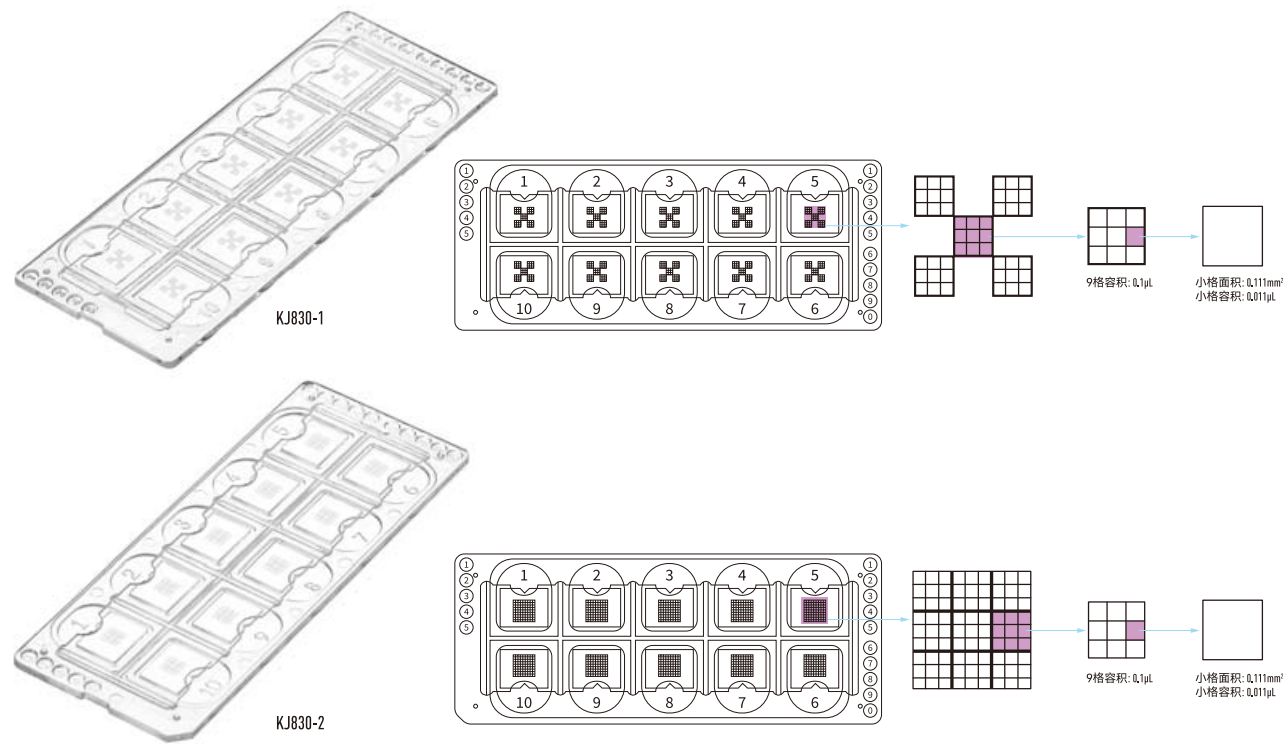

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	计数池 规格	只/盒	只/箱	备注说明	产品编码
KJ830-1	PS	83.3×32.4mm	10计数池，5中方格，45小方格	100	2000	定制灭菌方式	186-001
KJ830-2	PS	83.3×32.4mm(有定位角)	10计数池，9中方格，81小方格	100	2000	定制灭菌方式	186-002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用方法:

- ◆ 充分搅拌尿样后，取尿液10ml盛入尿沉渣离心管。
- ◆ 1000-1500的转速离心5分钟。
- ◆ 离心后弃去上清液，留下尿沉渣0.2ml。
- ◆ 摇动离心管使尿沉渣充分混匀。
- ◆ 用微量毛细吸管吸取15-20µl尿沉渣，注入计数池。
- ◆ 在放大400倍的显微镜下观察。
- ◆ 报告方式：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型若干个/µl。



胶体金检测卡

◆ 康健医疗为您提供或定制各种规格的胶体金检测卡(空白卡壳)，材质采用医用级HIPS为原料，产品无生物毒性，无荧光剂污染，无重金属污染。化学和物理性能稳定，耐高温不变形、批次一致性好。



KJ835-1

KJ835-2



KJ835-3

KJ835-4



KJ835-5

KJ835-6



KJ835-7

KJ835-8

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ835-1	HIPS	88×25mm	360	1800	5孔检测卡	185-0001
KJ835-2	HIPS	88×25mm	360	1800	7孔检测卡	185-0002
KJ835-3	HIPS	20×75mm	360	1800	胶体金检测卡壳	185-0003
KJ835-4	HIPS	20×75mm	360	1800	胶体金检测板卡壳	185-0004
KJ835-5	HIPS	25×75mm	360	1800	胶体金检测板卡壳	185-0005
KJ835-6	HIPS	25×75mm	360	1800	胶体金检测板卡壳	185-0006
KJ835-7	HIPS	18×100mm	300	1200	胶体金检测板卡壳	185-0007
KJ835-8	HIPS	18×100mm	300	1200	胶体金检测板卡壳	185-0008

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



医用盛装容器/镊子/压舌板



REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ517	PVC	40×30mm	500	10000	一次性服药杯(圆形)	184-0001
KJ517-4	PVC	35×35×30mm	500	10000	一次性服药杯(方形)	184-0002
KJ819	PP	30×30mm	20	3000	儿童服药杯(带小勺,EO灭菌)	184-0003
KJ820	PP	125mm	-	1200	一次性使用镊子	184-0007
KJ820-1	PP	150mm	200	2000	一次性使用压舌板	184-0008
KJ522	PP	42×45mm	50	700	三层多色服药杯	184-0004
KJ522-1	PP	42×55mm	50	700	三层服药杯	184-0005
KJ820-5	PVC	110×110×45mm	-	1000	一次性使用换药碗(方形)	184-0006
KJ820-18	PET	185×115×25mm	-	2000	一次性使用换药碗(肾形)	184-0012
KJ820-15	PS	82.6×58.3×14mm	50	4000	菱形,防静电称量盘	184-0009
KJ820-16	PS	123.5×97×16.5mm	50	2000	菱形,防静电称量盘	184-0010
KJ820-17	PS	80×80×24mm	50	2000	方形,防静电称量盘	184-0011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



实验辅助仪器

- 水平旋转摇床 166-168
- 翘板式摇床 169-170
- 三维旋转摇床 171
- 混匀器 172-175
- 旋涡混合器 176-177
- 振荡器 178-180
- 菌落计数器 181
- 离心机 182-183
- 采血管封膜机 184
- 激光标注仪 185
- 开盖机系列 186-188
- 样本扫描识别管理 189-190
- 细胞复苏仪 191





水平旋转摇床

DSR-10 数控摇床

产品特点

- 多种夹具选择，可对三角瓶、圆底烧瓶、分液漏斗、培养皿、测试卡等进行混匀，满足不同实验要求。
- 通过简单调整，可实现圆周与往复旋转方式的更换。
- 选用高效无刷直流电机进行驱动，运行安静、平稳，经久耐用。
- 数字调节时间与速度，可轻松实现定时、定速、持续运转模式。
- LCD 显示速度、时间、工作模式，方便读取与设定。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。



DSR-10 平板式托盘 (A 型)



DSR-10 夹棍式托盘 (B 型)



DSR-10 弹簧卡式托盘 (C 型)

适配工作盘

平板式托盘，带防滑硅胶垫，适用于柔和混匀培养皿、培养瓶、测试卡

夹棍式托盘，通过改变辊轴的位置，可夹持各种不同形状的容器

空白弹簧卡式托盘，与锥形瓶弹簧卡配合使用。

锥形瓶弹簧卡，规格分为 25ml、50ml、100ml、200/250ml 500ml，与空白弹簧卡式托盘配合使用

技术参数

DSR-10

运行方式	圆周 / 往复
周转直径	10mm
允许震荡承重量(含夹具)	7.5Kg
仪器输入功率	35W
电机输出功率	10W
电机类型	无刷直流
速度范围	100-500rpm/40-350rpm
转速与计时器显示	LCD
时间设置范围	0-99h59min
运行模式	定时 / 连续
允许环境温度	5-50℃
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP21
模拟输出	有
交流电电压	AC100-240V
交流电频率	50/60Hz
外形尺寸	420x360x100mm
重量	13Kg



水平旋转摇床

DSR-22 数控摇床

产品特点

- 应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验等，亦可应用于混匀各类培养皿、酶标板等平板型实验器皿。
- 可选透明罩型与普通型。
- 透明罩式机型可有效防止液体溅洒、挥发，保证人、机、样的安全，自带四区划分防滑硅胶垫，方便识别同批次混匀的不同样品。
- 选用高效无刷直流电机进行驱动，运行安静、平稳，经久耐用。
- 数字调节时间与速度，可轻松实现定时、定速、持续运转模式。
- LCD显示速度、时间、工作模式，方便读取与设定。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。

技术参数

DSR-22

运行方式	圆周
周转直径	22mm
允许承重	2kg
速度范围	40-350rpm
时间设置范围	0-99h59min
运行模式	定时 / 连续
输入电压（频率）	AC100-240V(50/60Hz)
输入功率	20W
工作面尺寸	普通型315x315mm 透明罩型255x255mm
外壳防护等级	IP21
允许环境温度	5-50℃
允许相对湿度	80%
外形尺寸	普通型 420x360x125mm 透明罩型 420x360x145mm
净重	普通型7Kg 透明罩型7.8Kg



DSR-22
普通型



DSR-22
透明罩型

KJ-201BX / KJ-201BE / KJ-201BH 水平旋转摇床

产品特点

应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验等，亦可应用于混匀各类培养皿、酶标板等平板型实验器皿。选用高效直流电机进行驱动，结构紧凑合理，运行平稳安静无噪音。

- 可加装透明罩(KJ-201BX)，有效防止液体溅洒、挥发所造成对人机和环境的污染。



KJ-201BX



水平旋转摇床



KJ-201BE



KJ-201BH

KJ-201BXA 水平旋转摇床

产品特点

KJ-201BXA水平旋转摇床专门应用于梅毒非特异性抗体检测，专为VDRL、RPR、TRUST实验设计，符合WS/T491卫生行业标准，选用高效直流电机驱动，结构紧凑合理，运行平稳安静、无噪音。

- 数字控制时间与速度，控制更精确。
- LED数字显示速度与时间，方便读取与操作。
- 宽电压设计有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。
- 透明罩与保湿水槽设计可减少外界温度和湿度对样本的干扰。
- 一键式反应程序按键设计，一键直达目标实验所需的运行的参数。
- 托盘内置防滑硅胶垫和磁吸式压板条，使用方便，避免反应板在摇动时变形或滑动。



KJ-201BXA



防护罩保湿保湿



双保湿水槽设计



一键式程序设置

技术参数

	KJ-201BX	KJ-201BE	KJ-201BH	KJ-201BXA
运行方式	圆周	圆周	圆周	圆周
周转直径	22mm / 19mm	22mm / 19mm	22mm / 19mm	19±1 mm
允许承重	3kg	1kg	1kg	1kg
速度范围	20-230rpm	20-230rpm	20-210rpm	20-230rpm
时间设置范围	0-999min	0-999min	0-15min或0-60min可选	0-999min
运行模式	定时/ 连续	定时/ 连续	定时/ 连续	连续/定时
输入电压（频率）	AC100-240V(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)	AC 220V±10%(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)
输入功率	10W	10W	10W	10W
工作面尺寸	280×210mm(普通型) 245×167mm(透明护罩型)	302×212mm	302×212mm	245×167mm
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃
允许相对湿度	80%	80%	80%	80%
外形尺寸	320×315×120mm	330×320×110mm	330×320×110mm	335×320×145mm
净重	4.5Kg	4.2Kg	4.6Kg	4.6Kg



翘板式摇床

KJ-201BYA / KJ-201BYA-S 翘板式数控摇床

产品特点

- 可实现上下摆幅为9度（摆幅可按需定制）的波浪动作，使得容器中液体温和的产生波状运动。
- 特制硅胶防滑垫，配合紧固带可适合多数的培养瓶和培养皿进行操作。
- 选用高效直流电机进行驱动，运行平稳，噪音小使用寿命长。
- 数字显示调节时间与速度，可轻松实现定时、定速、持续运转模式。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。



KJ-201BYA

KJ-201BY / KJ-201BY-T 翘板式摇床

产品特点

- 可实现上下摆幅为20度的波浪动作，使得容器中液体温和的产生波状运动。
- 选用高效交流电机进行驱动，运行平稳，噪音小使用寿命长。
- 结构紧凑，占用空间小，适用于多种场所。
- 特制梯状硅胶垫板，可适应大多数试管、离心管等管状容器摇匀。



KJ-201BYA-S



KJ-201BY



KJ-201BY-T
(工作盘1)



KJ-201BY-T
(工作盘2)

技术参数

	KJ-201BYA	KJ-201BYA-S	KJ-201BY	KJ-201BY-T
运行方式	上下波浪摇摆	上下波浪摇摆	上下波浪摇摆	上下波浪摇摆
倾斜角度	7度（可定制 7度-12度）	7度（可定制 7度-12度）	20度	20度
允许承重	10Kg	5Kg	1Kg	1Kg
电机类型	直流电机	直流电机	交流电机	交流电机
速度范围	10-80rpm	10-80rpm	15rpm	10-90rpm
时间设置范围	0-19h59min	0-999min	-	-
运行模式	定时 / 连续	定时 / 连续	连续	连续
输入电压（频率）	AC100-240V(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)	AC 220V±10% (50/60Hz)	AC 100-240V (50/60Hz)
输入功率	40W	20W	6W	6W
工作盘尺寸	320×280mm	318×230mm	252×170mm	252×170mm(两种可选)
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃
允许相对湿度	80%	80%	80%	80%
外形尺寸	420×355×180mm	350×320×175mm	346×196×95mm	346×196×118mm
净重	11.5Kg	5.3Kg	2.5Kg	2.8Kg



翘板式摇床

KJ-201BYM 智能采血称重摇床

产品特点

KJ-201BYM智能采血称重摇床主要用于血站和移动采血车，在采血过程中，防止血液凝固，适用于各级医院和血站。

- 4.3英寸触摸屏，采血过程数据化实时检测。
- 采血量可自定义，最大可达1000ml。
- 具备采血流速监控功能，流速异常自动报警。
- 采血完成，工作盘自动停平，自动声光报警提示。
- 阻断器可选，采血完成可自动阻断采血过程。
- 磁吸式工作盘，便于装卸，方便清洗。
- 标配大容量锂电池，连续工作时间大于8小时。
- 可连接扫码枪，便于录入血袋条码信息。
- 自动记录采集时间、采血量、流速，最大可记录1000条信息。
- 信息可导出为txt文本格式，方便采血信息管理。



KJ-201BYM (工作图示，产品不包括采血袋)



技术参数

	KJ-201BYM
采血范围	10ml-1000ml
采血流速设定	0-100ml/min
分辨率	1ml/1g
采液误差	±5ml
液体比重	1.05g/ml
摇摆角度	5-15 度
摇摆速度	10-40rpm
输入功率	25w (带阻断器)
输入电压	DC 24V
阻断器适用管道	Ø3-Ø6mm，壁厚 0.5mm

技术参数

	KJ-201BYM
阻断推力	>15N
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP43
允许环境温度	5-50
外形尺寸	300×190×120mm (不含阻断器)
净重	1.7Kg (包含电池，不包含阻断器，阻断器重量 0.18Kg)
电池容量	12000mAh
提示功能	流速异常报警、超时报警、采血完成声光提示、采血完成自动阻断



三维旋转摇床

KJMR-VA / KJMR-VA-S 三维旋转式数控摇床

产品特点

可实现以固定倾斜角做三维圆周转动动作，特别适合低泡沫的振荡、DNA萃取、染色和脱色等过程。

- 特制硅胶防滑垫，配合紧固带可适合多数的培养瓶和培养皿进行操作。
- 选用高效直流电机进行驱动，运行平稳，噪音小使用寿命长。
- 数字调节时间与速度，可轻松实现定时、定速、持续运转模式。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。



KJMR-VA



KJMR-VA-S



KJMR-V

KJMR-V 三维旋转式摇床

产品特点

可实现以固定倾斜角做三维圆周转动动作，特别适合低泡沫的振荡、DNA萃取、染色和脱色等过程。

- 选用高效交流电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 结构紧凑，占用空间小，适用于多种场所。
- 特制钉状硅胶垫板，可适应大多数试管、离心管等管状容器混匀。

技术参数

技术参数	KJMR-VA	KJMR-VA-S	KJMR-V
运行方式	三维圆周旋转	三维圆周旋转	三维圆周旋转
倾斜角度	9 度 (可定制 7 度 -12 度)	1-12 度 (可调)	20 度
允许承重	5Kg	2Kg	1Kg
电机类型	直流电机	直流电机	交流电机
速度范围	10-80rpm	10-80rpm	20rpm
时间设置范围	0-19h59min	0-999min	-
运行模式	定时 / 连续	定时 / 连续	连续
输入电压 (频率)	AC100-240V(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)	AC220V±10%(50/60Hz)
输入功率	40W	20W	6W
工作面尺寸	320×280mm	318×230mm	240×170mm
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃
允许相对湿度	80%	80%	80%
外形尺寸	420×355×190mm	350×320×175mm	200×160×160mm
净重	12Kg	5.3Kg	2.5Kg



混匀器

KJMR-I / KJMR-I-S 混匀器

产品特点

可同时实现滚动与摇摆两个动作，摆动角度大，适用于血液样品，粘性物质和液-固悬浮物的混合。

- 选用高效交流电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 五根滚轴，结构紧凑，空间占用少，可放置于冷藏室或培养箱内使用，适用于多种场所。
- 合理的滚轴间距设计，适用于多种规格样品管。



KJMR-I



KJMR-I-S

KJMR-II 混匀器

产品特点

可同时实现滚动与摇摆两个动作，摆动角度大，适用于血液样品，粘性物质和液-固悬浮物的混合。

- 选用高效直流减速电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 七根滚轴设计，结构紧凑，空间占用少，适用于多种场所。
- 合理的滚轴间距设计，滚轴数量可选择，适用于多种规格的样品管。
- 根据实际实验需要，可提供正反交叉运转模式，滚轴可在一定范围内加长，增大混匀量。



KJMR-II

KJMR-IIA 混匀器

产品特点

可同时实现滚动与摇摆两个动作，摆动角度大，适用于血液样品，粘性物质和液-固悬浮物的混合。

- 选用高效直流减速电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 七根滚轴设计，结构紧凑，空间占用少，适用于多种场所。
- 数字控制时间与速度，控制更加精确。
- LED 数字显示速度、时间，方便读取与操作。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。
- 合理的滚轴间距设计，滚轴数量可选择，适用于多种规格的样品管。
- 根据实际实验需要，滚轴可在一定范围内加长，增大混匀量。



KJMR-IIA

技术参数

	KJMR-I	KJMR-I-S	KJMR-II	KJMR-IIA
运行方式	滚动、摇摆	滚动、摇摆	滚动、摇摆	滚动、摇摆
摆动角度 / 摆幅	±11 度	±7 度	22mm±1mm	22mm±1mm
额定转速	36rpm	15-50rpm	20-80rpm	20-100rpm
允许承重	0.8Kg	0.8Kg	1.5Kg	1.5Kg
运行模式	连续	连续	连续	定时、连续
时间设置范围	-	-	-	0-999min
输入电压（频率）	AC 220V±10%（50/60Hz）	DC 12V	AC 220V±10%（50/60Hz）	AC100-240V（50/60Hz）
允许相对湿度	80%	80%	80%	80%
输入功率	6W	10W	10W	10W
滚轴长度	212mm	212mm	240(可定制 270 或 340mm)	240(可定制 270 或 340mm)
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	260×155×140mm	255×155×115mm	410×270×100mm	410×270×100mm
净重	3Kg	3Kg	4.5Kg	4.0kg
电池容量	-	3000mAh	-	-



混匀器

KJMR-IV / KJMR-IVA 混匀器

产品特点

360 度颠倒旋转式温和混匀，使样品处于悬浮液状态，适用于血液、尿液等样品的混匀。选用高效直流减速电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。结构紧凑，空间占用少，适用于多种场所。4 种规格弹性卡可自由组合，适用于 0.5ml、1.5ml、15ml、50ml 离心管以及管径为 13mm、16mm 和 1.28ml 血沉试验管。



KJMR-IV



KJMR-IVA

适配工作盘



大号管夹，适用于 50ml 离心管



中号管夹，适用于 Ø16mm 试管、10ml 和 15ml 离心管



小号管夹，适用于 Ø13mm 试管、Ø12mm 试管、1.5ml 离心管



特小号管夹，适用于 0.5ml 离心管、1.28ml 血沉管

技术参数

	KJMR-IV	KJMR-IVA
运行方式	360 度颠倒旋转式	360 度颠倒旋转式
圆盘倾斜角	38 度	38 度
速度范围	6-32rpm	5-35rpm
时间设置范围	-	0-999min
工作盘管夹数量 (注：标配 1 只工作盘，管夹可选。)	大号 12 个 / 盘 中号 24 个 / 盘 小号、特小号 24 个 / 盘	大号 12 个 / 盘 中号 24 个 / 盘 小号、特小号 24 个 / 盘
运行模式	连续	定时、连续
圆盘直径	Ø300mm	Ø300mm
输入电压 (频率)	AC220V±10%(50/60Hz)	AC 100-240V (50/60Hz)
输入功率	10W	10W
外壳防护等级	IP31	IP31
允许环境温度	5-50℃	5-50℃
允许相对湿度	80%	80%
外形尺寸	310×300×420mm	310×300×420mm
净重	4.3Kg	4.0Kg



混匀器

KJMR-IVD 混匀器

产品特点

- 速度和时间电子调节，LED显示。
- 转速范围为5-35转/分。
- 滚动动作，提供温和有效的混合。
- 工作盘倾斜角度0到90°可调。
- 多功能圆盘夹具，不同夹具可选。



广泛应用于 50ml, 15ml, 10ml 离心管，Ø16mm, Ø13mm, Ø12mm, Ø8-9mm 等规格的试管。



通过调节手柄可轻松调节混匀角度。



特制硅胶底脚，仪器固定更稳固。



KJMR-IVD

KJMR-III 混匀器

产品特点

- 三种混匀程序模式可供选择，适用于血液样品，尿样、注射物、血浆等物质的混匀。
- 选用高效直流步进电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 特制硅胶圈夹具，适用于各类型的试管、离心管。
- 结构紧凑，空间占用少，适用于多种场所。
- 数字控制时间与速度，控制更加精确。
- LCD 液晶显示速度、时间、工作模式，方便读取与操作。
- 轻触式薄膜开关面板设计，使得操作更加轻松。



KJMR-III



工作板 1：
适用于装夹 Ø12、Ø13、Ø16 试管以及 1.5ml-15ml 之间各类型离心管

工作板 2：
适用于装夹 Ø12、Ø13、Ø16 试管以及 1.5ml-50ml 之间各类型离心管

技术参数

KJMR-IVD

运行方式	360°颠倒旋转式
圆盘倾角	0-90°
速度范围	5-35rpm
时间设置	0-999min
工作盘管夹数量 (注：标配 1 只工作盘，管夹可选。)	大号 16 个 / 盘 中号 16 个 / 盘 小号 64 个 / 盘 特小号 64 个 / 盘
运行模式	定时或连续
圆周直径	Ø280mm
输入电压（频率）	AC 100-240V(50/60Hz)
输入功率	10W
外壳防护等级	IP31
允许环境温度	5-50°C
允许相对湿度	80%
外形尺寸	280×210×300mm
净重	4.0Kg

技术参数

KJMR-III

运行方式	转动：360°顺时针转，360°逆时针转，360°顺、逆时针交叉转动 振动：以 <5°的旋转角前后往复式运动 漩涡：以 <5°的旋转角前后往复式 +360°顺时针转动
速度范围	5-40rpm
工作板 1	1.5ml-15ml 试管或离心管 22 只
工作板 2	50ml 离心管 6 只，1.5-15ml 试管或离心管 4 只
运行模式	定时
时间设置范围	1min-60h
输入电压（频率）	AC 220V±10% (50/60Hz)
输入功率	15W
外壳防护等级	IP31
允许环境温度	5-50°C
允许相对湿度	80%
外形尺寸	380×182×190mm
净重	3 kg



混匀器

KJMR-III A 混匀器

产品特点

- 适用于血液样品、尿样、注射物、血浆等物质的混匀。
- 选用高效直流电机进行驱动，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 可自由搭配选择多种试管夹，适用于各类型的试管、离心管。
- 结构紧凑，空间占用少，适用于多种场所。
- 数字控制时间与速度，控制更加精确。
- LED显示速度、时间、工作模式，方便读取与操作。



KJMR-III A

技术参数

KJMR-III A

运行方式	360°逆时针转动
速度范围	10-80rpm
运行模式	连续 / 定时
定时范围	0-999min
工作盘 1	样品管数量 24 只 (适用于 50ml 离心管)
工作盘 2	样品管数量 24 只 (适用于 Ø16mm 试管、10ml 离心管、15ml 离心管)
工作盘 3	样品管数量 24 只 (适用于 Ø16mm、Ø13mm 试管、1.5ml 离心管)
工作盘 4	样品管数量 48 只 (适用于 0.5ml 离心管)
输入电压	AC90-240V(50/60Hz)
允许相对湿度	80%
输入功率	40W
外壳防护等级	IP31
允许环境温度	5-50℃
外形尺寸	490×186×262mm
净重	7.5Kg



旋涡混合器

XH-B 旋涡混合器

产品特点

- 适用范围广，可应用于对离心管、试管、烧瓶等容器内标本的混匀。
- 高性能、低噪音交流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 特殊加工制作的操作面，易清洗且耐磨。
- 根据操作者手压力度，自动调节振荡速度。



XH-B

XH-C 旋涡混合器

产品特点

- 适用血常规末梢采血管的混匀，混匀彻底且不破坏血细胞，亦适用于各类离心管。
- 高性能、低噪音交流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 具备连续、点动两种运行模式，操作灵活、简便。
- 设计合理，结构紧凑，性能稳定。



XH-C

XH-D 旋涡混合器

产品特点

- 适合重新悬浮颗粒，涡旋细胞悬浮物或者药物的提取，混合组织样品，酶联反应和RIA 检测。
- 多种适配器可选，适用于多种类型的试管与小容器。
- 高性能、低噪音交流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 具备连续、点动两种运行模式，可轻松实现无级调速，操作灵活、简便。
- 设计合理，结构紧凑，性能稳定。



XH-D

XH-D适配工作盘



多孔式适配器，适用于 1.5ml 以及 2ml 离心管



橡胶防滑钉板，适用于直径小于 99mm 的试管或容器



硅胶标准夹头，适用于直径小于 30mm 的试管和小容器



塑料标准夹头，适用于 10ml 至 50ml 尖底离心管以及各类试管



技术参数	XH-B	XH-C	XH-D
运行方式	圆周	圆周	圆周
周转直径	3.6mm	4mm(可定制 3mm)	4.4mm(可定制 3mm)
额定速度	2800rpm	2800rpm	800-2800rpm
运行模式	连续	连续、点动	连续、点动
工作面尺寸	Ø100mm	Ø55mm	适配 4 种工作盘
输入电压（频率）	AC 220V±10%（50/60Hz）	AC 220V±10%（50/60Hz）	AC 220V±10%（50/60Hz）
允许相对湿度	80%	80%	80%
电机功率	30W	30W	30W
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	100×130×135mm	Ø110×150mm	180×120×180mm
净重	2.3Kg	2.5Kg	4.5Kg



旋涡混合器

XH-E / XH-F 旋涡混合器

产品特点

- 适用于悬浮颗粒物、细胞悬浮物或者药物的提取，混合组织样品、酶链反应和RIA检测。
- 7种适配器可选，适用于0.2ml-50ml各类离心管以及试管、烧瓶等容器。
- 转速精准可调，强劲中不失平稳。
- 合理的设计、性能稳定、操作灵活、简便。

适配工作盘



橡胶防滑垫，适用于直径小于 99mm 的试管或容器



硅胶标准夹头，适用直径小于 30mm 的试管和小容器



4孔适配器，适用于 50ml 离心管



8孔适配器，适用于 5ml、10ml、15ml 离心管



24孔适配器，适用于 1.5ml、2ml、离心管



37孔适配器，适用于 0.5ml、离心管




88孔适配器，适用于 0.2ml 离心管



XH-S / XH-SA 旋涡混合器

产品特点

- 适用于少量样品液体的混合。
- 触摸操作，按下工作面立即工作，松开即停。
- 身材小巧可爱，方便转移携带。
- 直流无刷电机，性能稳定。

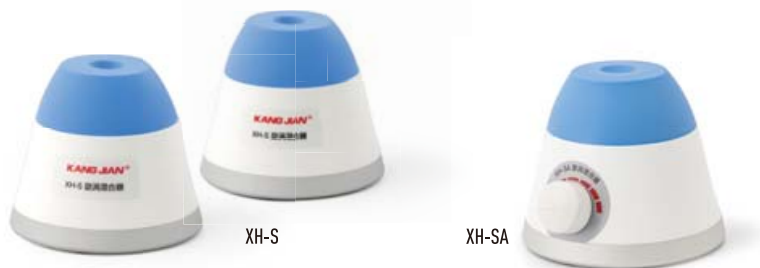

技术参数

	XH-E	XH-F	XH-S	XH-SA
运行方式	圆周	圆周	圆周	圆周
周转直径	4.4mm	4mm	4.5mm	4.5mm
电机类型	罩极电机	直流无刷	直流无刷	直流无刷
额定速度	0-2800rpm	200-3000rpm	3000rpm	0-3000rpm
运行模式	连续 / 点动	连续 / 定时 / 点动	点动	点动
额定时间	-	0-99min	-	-
工作面尺寸	按配件	按配件	直径小于等于 30mm 的小型容器	直径小于等于 30mm 的小型容器
输入电压（频率）	AC220V±10%(50/60Hz)	AC 100-240V (50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)
允许相对湿度	80%	80%	80%	80%
输入功率	60W	40W	5W	5W
外壳防护等级	IP21	IP21	IP43	IP43
允许环境温度	5-50℃	5-40℃	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	130×160×155mm	130×160×155mm	Ø100×90mm	Ø100×90mm
净重	2.5Kg	2.5Kg	0.6Kg	0.6Kg



振荡器

KJ-201B 振荡器

产品特点

- 采用敞开式工作平板，表面易清洗，一次最大可装载4 只细胞培养板。
- 高性能、低噪音直流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 可调旋钮设计，可轻松实现无级调速与60min内任意时间的定时运行。



KJ-201B

KJ-201C 振荡器

产品特点

- 采用弹性硅胶托盘，工作面易清洗且耐磨，可应用于各类型的细胞培养板，一次最大可装载6 只细胞培养板。
- 高性能、低噪音直流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 可调旋钮设计，可轻松实现无级调速与15min 内任意时间的定时运行。



KJ-201C

KJ-201ZT 振荡器

产品特点

- 设计合理，正常工作时，机身稳定，不移位、无噪音。
- 高性能、低噪音直流电机，确保混匀迅速、彻底。
- 可调旋钮设计，可轻松实现无级调速。
- 可根据实验要求，定制工作盘，以满足不同类型的容器混匀。



KJ-201ZT



技术参数

	KJ-201B	KJ-201C	KJ-201ZT
运行方式	圆周	圆周	圆周
周转直径	3.2mm	9mm	4mm
速度范围	600-2200rpm	200-2800rpm	600-2800rpm
允许承重	1-4 块细胞培养板	1-6 块细胞培养板	50ml 离心管 15 只或 3-10ml 试管 50 只
运行模式	连续、定时	连续、定时	连续
时间设置范围	0-60min	0-15min	-
允许相对湿度	80%	80%	80%
输入电压（频率）	AC 220V±10%(50/60Hz)	AC 220V±10%（50/60Hz）	AC 220V±10%(50/60Hz)
输入功率	10W	10W	10W
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	240×250×135mm	310×280×225mm	260×200×260mm
净重	3.8Kg	6.2Kg	2.2Kg



振荡器

KJ-201MT 振荡器

产品特点

适用于对各类试管架、离心管架进行整板混匀，一次性最大可混匀 96 只样本管。选用高性能、低噪音直流电机进行驱动，混匀更充分、彻底。设计合理，选取高品质缓冲棉，上下双层夹紧固定，长时间使用机身稳定、不移位。

- 可调旋钮设计，轻松实现定时工作、无级调速。



KJ-201MT

KJ-201MTA 振荡器

产品特点

适用于对各类试管架、离心管架进行整板混匀，一次性最大可混匀96只样本管。选用高性能、低噪音直流电机进行驱动，混匀更充分、彻底。设计合理，选取高品质缓冲棉，上下双层夹紧固定，长时间使用机身稳定、不移位。

- 数字显示速度与时间，按键修改参数，方便操作，使得实验结果更准确。
- 脉冲振荡模式可对粘稠样本混匀。



KJ-201MTA

适配工作盘



Ø29mm 的 15 孔工作盘，适用 Ø28-32mm 管径的样品管



Ø25mm 的 15 孔工作盘，适用 Ø24-27mm 管径的样品管



Ø20mm 的 50 孔工作盘，适用 Ø18-21mm 管径的样品管



Ø15mm 的 50 孔工作盘，适用 Ø14-17mm 管径的样品管



Ø12mm 的 50 孔工作盘，适用 Ø11-13mm 管径的样品管



Ø10mm 的 50 孔工作盘，适用 Ø9-10mm 管径的样品管

技术参数

	KJ-201MT	KJ-201MTA
运行方式	圆周	圆周
周转直径	4mm	4mm
额定速度	500-2500rpm	500-2500rpm
运行模式	连续、定时	连续、定时、点动、脉冲
定时时间设置范围	定时 0-15min	1S-99min
脉冲模式间隙停止定时范围	-	1S-99S
脉冲模式间隙运行定时范围	-	1S-20min
脉冲模式最大循环次数	-	99 次
工作面尺寸	340×220 mm	340×220 mm
输入电压（频率）	AC 220V±10% (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)
允许相对湿度	80%	80%
输入功率	180W	180W
外壳防护等级	IP21	IP21
允许环境温度	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	440×290×480mm	440×290×480mm
净重	16.5Kg	17Kg



工作实例一
批量混匀：10ML 病毒采样管、真空采血管、10ML、15ML 离心管或试管等。



工作实例二
批量混匀：30ML 病毒采样管、50ML 离心管。



振荡器

KJ-201BA 振荡器

产品特点

- 适用于对各类PCR板、酶标板进行混匀，一次性最大可混匀4只PCR板、酶标板。
- 选用高性能、低噪音直流电机进行驱动，混匀更充分、彻底。
- 数字显示速度与时间，按键修改参数，方便操作，使得实验结果更准确。
- 敞开式工作平台，易于装卸酶标板，且无倾翻移位风险发生。
- 应用范围:各类医疗机构、疾控中心PCR实验室、食品检测与分析实验室、农林科研院所科研、各类药物研究所或法医鉴定机构。



KJ-201BA

技术参数

KJ-201BA

运行方式	圆周
周转直径	3mm
额定速度	200-1500rpm
运行模式	连续、定时
时间设置范围	0-99h59min
工作面尺寸	适配 4 只酶标板
输入功率	40W
输入电压	AC100-240V(50/60Hz)
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP21
允许环境温度	5-50℃
外形尺寸	330×320×110mm
净重	6.5Kg

KJ-202 振荡器

产品特点

- 设计合理，正常工作时，机身稳定，不移位、无噪音。
- 选用不同规格的工作盒，可实现对粉剂药物、液基细胞标本进行快速混匀。
- 采用高效交流电机，特有的风冷装置，可保证仪器长时间安全有效运行。
- 可根据实验要求，定制工作盘，以满足不同类型的容器混匀。



KJ-202

可选工作盒

(推荐使用样品瓶瓶径小于胶圈直径 1-3mm, 瓶高与工作盒高度参考下图)



标准工作盒，高度 30mm, Ø38 胶圈 1 只，Ø35 胶圈 2 只，Ø29 胶圈 8 只，Ø25 胶圈 8 只



12 孔工作盒，高度 37mm, Ø33 胶圈 12 只，适用于液基细胞标本瓶



12 孔工作盒，高度 45mm, Ø33 胶圈 12 只



12 孔工作盒，高度 30mm, Ø33 胶圈 6 只，Ø38 胶圈 6 只



20 孔工作盒，高度 30mm, Ø25 胶圈 20 只



20 孔工作盒，高度 30mm, Ø29 胶圈 20 只

技术参数

KJ202

运行方式	圆周
周转直径	3.4mm/4mm
速度范围	1000rpm/1200rpm
运行模式	连续
允许相对湿度	AC 220V±10% (50/60Hz)
输入电压 (频率)	80%
输入功率	12W、24W
外壳防护等级	IP21
允许环境温度	5-50℃
外形尺寸	235×160×160mm
净重	2.3Kg



菌落计数器

J-2 / J-3 菌落计数器

产品特点

- 紧凑的结构设计，占用空间小，适用于多种场合。
- LED 色温为5600K, 可调亮度节能照明，为操作者提供一个最佳的菌落计数视野。
- 计数时，声响提示，避免漏计、多计情况的发生。
- 独有的上光源补偿照明，便于对难于观察的菌落进行计数。
- 特制轻触式计数笔，确保计数无任何遗漏。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。



J-2



J-3



J-2S 菌落计数器

产品特点

- 压力感应计数系统，适用于任何记号笔。
- 紧凑的结构设计，占用空间小，适用于多种场合。
- LED 色温为5600K, 可调亮度节能照明，为操作者提供一个最佳的菌落计数视野。
- 计数时，声响提示，证实每次计数。
- 独有的上光源补偿照明，便于对难于观察的菌落进行计数。
- 宽电压设计，有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。



J-2S



光源亮度和压感调节旋钮左前置，设计贴心，操作顺手。



通过压力感应进行直观计数，任何钻头记号笔均可使用。

技术参数

	J-2	J-3	J-2S
照明	白光 LED 阵列	白光 LED 阵列	白光 LED 阵列
数字显示	3 位 LED 显示	3 位 LED 显示	3 位 LED 显示
计数范围	0-999	0-999 或 0-9999	0-999
计数方式	开关式轻触探笔	开关式轻触探笔	压力感应式
适用培养皿	50-90mm	50-150mm	50-90mm
输入电压 (频率)	AC 100-240V(50/60Hz)	AC 100-240V (50/60Hz)	AC 100-240V (50/60Hz)
输入功率	20W	40W	20W
放大倍数	3 倍 (9 倍)	3 倍 (9 倍)	3 倍 (9 倍)
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
允许相对湿度	80%	80%	80%
允许环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃
外形尺寸	255×210×160mm	360×300×180mm	255×210×160mm
净重	2.2Kg	4.0Kg	2.8Kg



离心机

KJLC-II 掌上离心机

产品特点

- KJLC-II掌上离心机采用高性能直流电机，运用闭环控制技术，可应用于学校、科研实验室、医院检验科等不同使用环境，配合多种适配器，适用于0.2ml，0.5ml，1.5ml，2.0ml，0.1ml和0.2ml PCR-8联管，适合需要进行微量离心、细胞分离和迅速与试管壁分离试验的使用。
- 选用高性能电机，动力强劲，运行安静，运行噪音小于50dB；
 - 闭环控制技术，转速控制精准；
 - 宽电压设计，避免电源波动对运转精度的干扰；
 - LED显示转速与时间，更加科学严谨；
 - 转速与运行时间可调，满足各类实验需求；
 - 大容量设计，最大可装载2ml×8、0.2mlPCR管×16；
 - 升降速迅速，按最大转速10000rpm计时，升速时间小于10S，降速时间小于5S；
 - 更换转子方便，无需借助任何工具；
 - 开盖状态监测，有效保证人机安全；
 - 透明安全罩五种颜色可选，为枯燥的实验室生活增添添彩。

适配转子



KJLC-II-S1 掌上离心机

产品特点

- 专为微滤以及快速沉降设计。
- 适用于2ml x 8 离心管；0.2ml×32 PCR管或0.2mlPCR8排管×4，与适配器联用时，亦可适用于0.5ml或0.1ml离心管，应用范围广。
- 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便。
- 运行安静：噪音≤52 dB。
- 转子拆卸快捷方便。



技术参数

	KJLC-II	KJLC-II-S1
额定转速	3000-10000rpm（每 1Krpm 一个步进档）	6000rpm
最大相对离心力	5460×g	3280×g
适用试管	1) 8×0.2ml / 8×0.5ml / 8×1.5ml / 8×2ml 离心管 2) 2×0.1ml PCR-8 联管，2×0.2ml PCR-8 联管	1) 8×0.2ml / 8×0.5ml / 8×1.5ml / 8×2ml 离心管 2) 2×0.1ml PCR-8 联管，2×0.2ml PCR-8 联管
运行模式	定时 / 连续	连续
定时时间	0s-99min	合盖运转 / 开盖即止
安全性能	盖开 / 合状态监控	盖开 / 合状态监控
驱动电机	直流电机	直流电机
输入功率	40W	20W
输出功率	16W	5W
电 源	AC100-240V (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)
噪音等级	<50dB	<50dB
尺 寸	195×170×135mm	195×170×135mm
净 重	0.8kg	0.6kg



离心机

KJLC-I 医用离心机

产品特点

KJLC-I 型医用离心机采用无刷电机, 智能芯片控制, 具有液晶显示, 转头预制, 定时, 高精度无极调速适用于临床检验、生物化学、免疫学、检验学等领域, 是医疗卫生、食品、环保、科研、教学、生化实验等优选的离心分离设备。

性能出众: ◆ CPU 精确控制, 采用高性能直流无刷电机, 免维护。

- ◆ 转速控制精度高, 性能出色。
- ◆ 稳速后计时, 离心时间更精确。
- ◆ 多种加减速模式, 可自由搭配, 保证样品没有混淆, 分离效果更佳。

安全可靠: ◆ 高强度、耐腐蚀的304 不锈钢离心腔, 给转子运行提供更安全可靠的保证。

- ◆ 合金材质转子, 保证转子能长期使用。
- ◆ 四大安全功能设置: 电子门锁, 盖开/ 合状态监控, 超速保护, 系统自检; 有效保证人机安全。

人性化设计: ◆ 分区式液晶屏显示, 方便监控运行状态。

- ◆ 10s-99min59s 定时、连续以及点动三种工作模式选择, 满足特殊试验的需要。
- ◆ 离心力值跟转速, 切换显示, 方便读取。
- ◆ 10 组运行参数组合记忆, 有效提高工作效率。
- ◆ 安静的运行过程, 小于65dB 的运行噪音。



适配转子

转子型号	转子名称	试管规格	数量	试管尺寸	最高转速	最大相对离心力	适配管尺寸 (内径×管长)	适配管附件
1	24 孔角转子	8.5-10mL 试管	24	Ø15×107	4500rpm	2558 × g	Ø16×85mm	—
		4-7mL 试管		Ø13×106		2558 × g		—
		1.5-5mL 试管		Ø13×82		2264 × g		23mm 垫块
		4-7mL 试管		Ø16×75				
2	12 孔角转子	8.5-10mL 试管	12	Ø16×107	4000rpm	1968 × g	Ø17×105mm	23mm 垫块
		4-7mL 试管		Ø13×106		1968 × g		23mm 垫块
		1.5-5mL 试管		Ø13×82		1681 × g		48mm 垫块
		15mL 培养管	8	Ø17×120		2200 × g		—
3	6 孔角转子	50mL 离心管	6	Ø29×117	4000rpm	2200 × g	Ø32×100mm	—



24 孔角转子, 彩色 Ø16×85mm 适配管



12 孔角转子, Ø17×105mm 适配管

6 孔角转子, Ø32×100mm 适配管,
专用于 50mL 离心管

48mm 垫块



23mm 垫块

技术参数

KJLC-I

转速范围	100-4500rpm 步进:100rpm
最大相对离心力	角转子 1: 2558×g 步进:10×g/100×g(快旋)
	角转子 2 和 3: 2200×g 步进:10×g/100×g(快旋)
转速精度	±2.5%
最大容量	300mL
运行模式	定时 / 连续 / 点动
定时时间	10s-99min59s 步进:1S/1min(快旋)
转子形式	6 孔角转子 / 12 孔角转子 / 24 孔角转子
安全性能	电子门锁、机盖开合状态监控、超速保护、系统自检

技术参数

KJLC-I

驱动电机	无刷直流电机
输入功率	300W
输出功率	94W
输入电压 (频率)	AC100-240V(50/60Hz)
噪音等级	小于 65dB
加速/减速曲线	加速: 快速 (加速至最高速 < 23S)、柔和 (加速至最高速 < 66S)
	减速: 快速 (停机时间 < 23S)、柔和 (停机时间 < 66S)、自然 (由具体样品质量决定)
尺寸/净重	450×340×230mm 10Kg



采血管封膜机

KJMC-VII 全自动采血管封膜机



产品简介


全自动采血管封膜机应用于对PET材质的真空采血管进行封膜工作，适用于各级医院对检验后的血样进行封存存储。

设备使用先进的物联网理念，可与各类自动化流水线互联，并能提供远程维护服务，旨在提供自动化、标准、可控、易用与可靠的操作流程、减轻医技人员的工作负担，提高日常工作的效率，降低因疲劳重复操作带来的不可控风险，是各检验科的理想配套产品。


适配管架



KANGJIAN 采血管适配架

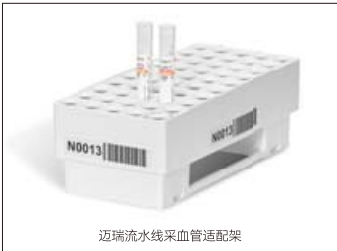

迈瑞流水线采血管适配架

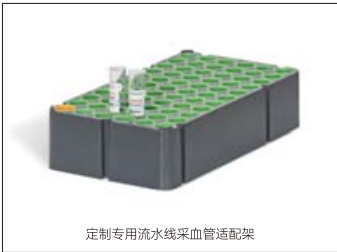

定制专用流水线采血管适配架

产品特点

- 高效快捷，一键封膜，一次性封膜66只，时间低于20s，提高工作效率。
- 智能化设计，自动识别试管高度，无需人工干预。
- 封膜牢固，在保证良好密封性能的同时亦能保证易撕，符合冷冻、冷藏需求。
- 适用范围广，可适配市面各品牌流水线试管架。
- 体积小巧，适用于多个应用场景，节约空间。
- 安全可靠，内置空气过滤器，防止气溶胶交叉污染。
- 操作便捷，触摸屏控制与显示工作过程，工作过程更直观与可控。
- 实时报警功能，通过数据管控和报警，减少因人为误操作而损坏样本的行为。
- 可根据具体应用需求，整合至自动化流水线。

技术参数

适用试管管径	12-13mm
适用试管管高	60-120mm
适用试管材质	PET
封膜数量	66 只 / 次（根据流水线试管架试管数量定制）
封膜时间	~20s
预热时间	~120s
操作方式	触控输入
提示功能	错误提示、操作提示、膜状态提示
输入电压 / 功率	AC100-240V(50/60Hz) 600W

通讯接口	RS232
波特率	115200
校验位	8n1
工作环境温度	5-40℃
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP30
运输与存储环境温度	5-50℃
外形尺寸	300×500×470mm
净重	~28Kg



激光标注仪

KJLS-II 智能激光标注系统

产品简介

KJLS-II智能激光打标机主要用于实验室对各类样本容器进行特定信息的标记，是传统标签纸标记方式的理想替代品，日常使用过程中无其他耗材成本付出，可有效避免标签易脱落，易被污染与涂改而造成的无法识别的问题，适用于各类实验室、样本库、科研机构及院校等。

产品简介

- ◎ **适用范围广** 可对各种规格的离心管、冻存管、样品杯、包埋盒、载玻片等进行激光打标。
- ◎ **操作方便** 10.1 英寸电容触摸屏，一键操作，方便快捷；自带无线鼠标与键盘，方便不适应触摸屏操作的使用者进行操作。
- ◎ **使用成本低** 激光打标，无需色带、油墨和墨粉。
- ◎ **识别率高** 可杜绝标签易污染、不防水、低温脱落等不安全问题所带来的无法识别的情况。
- ◎ **使用效率高** 最快可以 1s 完成一只样本的标记。
- ◎ **降低错误率** 标注信息可由系统自动导入，降低人工输入带来的错误风险。
- ◎ **接口开放** 适用于多种实验室管理系统或样本库管理系统。



技术参数

	KJLS-II
最大打标面积	175×175mm
最小打标面积	直径 5mm
打标精度	0.05mm
打标速度	6000mm/s
设计寿命	>20000h
支持打标容器	离心管、包埋盒、冻存管等（对应匹配各类适配架）
支持打标材质	POM, PP, PS, TPE, ABS, HDPE 等各类塑料材质
支持打印内容	二维码、一维码、图像、数字、字母、中文字
激光器	355nm 紫外激光 2W 风冷一体固体激光器
工控机	10.1 英寸电容触摸屏，i5-10 代以上处理器，16G 内存，256G 固态硬盘
相机分辨率	2000W 像素
数据输入	EXCEL 文件导入，JPG 图像导入，手动输入
数据导出	日志导出
外部接口	提供与各类实验室管理系统对接的 SDK 接口
接口内容	适配器校验，打标内容数据交互，打标结果回传，设备状态回传
特殊功能	自动识别容器适配架，自动匹配打标参数（需在后台界面进行数据维护）自动校验打标内容，打标内容出错自动标记 NG
工作环境	温度：15~35℃，湿度≤90%
电源输入	~220V±10% (50/60Hz)
设备尺寸	560×360×680mm，42 kg（台式）



开盖机系列

KJMC-I 采血管开帽机

产品特点

- 使用自动开帽机更加简捷方便，减少工作人员的劳动强度，提高工作效率。
- 有效地防止医护人员在开启玻璃管帽时因管口破裂而划伤皮肤引起感染。
- 解决了因管内有负压，人工拔塞时用力过猛而将血液溅出，工作人员要时时洗手并且容易造成交叉感染的危险。
- 从根本上杜绝了因手工开启管帽时，管内残留气溶胶对操作人员所造成的潜在生物污染的威胁，对生物安全具有实际意义。
- 结构紧凑，可放入生物安全柜中操作。

适配工作台



适用于 $\varnothing 16 \times 100\text{mm}$ 采血管



适用于 $\varnothing 13 \times 100\text{mm}$ 采血管



适用于 $\varnothing 13 \times 75\text{mm}$ 采血管



KJMC-I



自动开盖

技术参数

KJMC-I

输入电压（频率）	AC 220V $\pm 10\%$ 50/60Hz
输出功率	45W
开帽速度	60 支 / 分钟
采血管架	24 孔 / 架
适用管径	13 $\times 75\text{mm}$ 、13 $\times 100\text{mm}$ 或 16 $\times 100\text{mm}$
外形尺寸	420 $\times 250 \times 200\text{mm}$

KJMC-II 自动旋盖机

产品特点

- 采用步进式伺服控制系统，能够精准控制旋动力矩与角度，专为试管开合盖设计，适用于医院、疾控、海关、科研单位等，能够有效降低检验人员的交叉感染风险，减轻工作强度，提高检验效率。
- 高效快捷：自动感应病毒管有无，单手操作，3秒完成开合盖动作。
- 人性化设计：自由切换自动与手动控制方式，三种工作模式可选，适用于多种操作习惯以及工作场合。
- 安全稳定：直流24V输入以及先进的伺服控制设计，杜绝液体泄露引起的漏电或无致死机现象。
- 安静便携：250 $\times 140 \times 370\text{mm}$ ，适用于多类型生物安全柜。
- 适用范围广：多种夹头可选，兼容12mm-35mm螺旋盖管体。

技术参数

KJMC-II

输入电压	AC100-240V (50/60Hz)
工作模式	持续开盖、持续关盖、开盖后再关盖
操作模式	自动、手动
开 / 合盖速度	≤ 2 秒 / 支
适用管径	$\varnothing 12-35\text{mm}$
外型尺寸 / 净重	250 $\times 140 \times 370\text{mm}$ 6.5kg





开盖机系列

KJMC-V48 / KJMC-V96 全自动旋盖机

产品特点

全自动旋盖机应用于对 SBS 冻存管整板 96 管和 48 管进行开盖与闭盖工作，适用于生物学研究、新药开发、生物银行库、辅助生殖、动植物物种保护、干细胞与再生医学、免疫细胞治疗等领域中对样本处理需求量较大的场所。设备使用先进的物联网理念，可与各类自动化操作流水线互联，并能提供远程维护服务，旨在提供自动化、标准、可控、易用与可靠的操作流程、减轻工作人员的工作负担，提高日常工作的效率，降低因疲劳重复操作带来的不可控风险，是各类生物标本库以及研究所理想的配套产品。

- 高效快捷，开盖或闭盖动作流程低于 20s，降低样本暴露风险，提高工作效率。
- 扭矩可控，均一的扭矩分配设置，避免人工开、闭盖带来的不确定性。
- 模块化设计，通过更换定制化的批头，可适用于市面各品牌冻存管。
- 体积小巧，适用于多个应用场景。
- 操作便捷，触摸屏控制与显示工作过程，工作过程更直观与可控。
- 实时报警功能，通过数据管控和报警，减少因人为误操作而损坏样本的行为。
- 可根据具体应用需求，整合至自动化系统中。



抽屉式输入输出，开盖过程避免样品污染的风险。



整盒旋盖快捷，安全高效。



KJMC-V48
(适用于SBS 48管)



KJMC-V96
(适用于SBS 96管)

技术参数

	KJMC-V48	KJMC-V96
适用管型	SBS 标准 48 孔冻存管	SBS 标准 96 孔冻存管
开盖或闭盖时间	<20s	<20s
开盖扭矩	约 19N/cm	约 9.5N/cm
闭盖扭矩	约 11N/cm	约 5.5N/cm
操作方式	触控输入	触控输入
定位精度	±0.05mm	±0.05mm
输入功率	200W	200W
输入电压	AC100-240V(50/60Hz)	AC100-240V(50/60Hz)
通讯接口	RS232	RS232
波特率	115200	115200
校验位	8n1	8n1
工作环境温度	5-40℃	5-40℃
允许相对湿度	80%	80%
外壳防护等级	IP30	IP30
运输与存储环境温度	5-50℃	5-50℃
提示功能	错误提示、操作提示、设备状态提示	错误提示、操作提示、设备状态提示
外形尺寸	400×230×380mm	400×230×380mm
净重	18Kg	18.5Kg



开盖机系列

KJMC-III / KJMC-IV 多通道自动开盖器

产品特点

手持式多通道自动开盖器提供了更为轻巧，便捷的螺旋盖管帽批量开启方式。起子头遵循SBS排布，同时实现单排6个/8个管帽同时开启/关闭功能。开盖器里的扭力限制结构，既保证管帽完全密封，又避免因扭力过大损伤密封圈的情况发生。灵活高效的储存耗材解决方案满足您的需求。

- 3秒内完成6/8个管帽的开启或关闭，提高效率。
- 避免实验室人员因开关管帽接触样品或试剂，减少生物化学试剂和生物样本带来的安全隐患。
- 目前所有手持式开盖器中重量最轻产品，避免长期持握使用造成的疲劳。
- 中央的大尺寸的离盖按钮，且旋帽、脱帽键分开设置。
- 高容量锂电池提供动力，USB充电接口。
- 8通道自动开盖器对内旋式和外旋式管帽均可适用。
- 48格SBS 使用6通道，型号为KJMC-III。
- 96格SBS 使用8通道，型号为KJMC-IV。

技术参数

KJMC-III / KJMC-IV

通道数量	6 通道 / 8 通道
开 / 合盖速度	4s
充电时间	90min
允许环境温度	2-50℃
允许相对湿度	80%
适配器输入电源	AC 100-240V 50/60HZ
适配器输出电源	DC3V, 0.5A
仪器输入功率	10W
重量	380g



KJMC-VI 电动式单通道SBS冻存管开盖器

产品特点

本品用于康健医疗全系列SBS冻存管和二维码冻存管单管开闭管帽时使用，笔式便携式设计，让使用更灵活方便。可定制旋帽批头以配合不同样品管。适用于生物样本库、科研机构实验室、检测检疫机构等几乎所有场所的使用。

- 人性化动态显示电量、操作动作与旋转方向。
- 方便手指灵活控制顺逆旋向按钮。
- Type-C快充接口。
- 两侧隐藏式LED照明，提高操作时的准确性和安全性。
- 耐磨金属批头，可更换，以灵活适用于不同样式的管帽。

技术参数

KJMC-VI

机身材质	铝合金
批头材质	Cr12 (镀镍)
空转转速	170rpm
手动扭矩	3.5 N·M
电动扭矩	0.3 N·M
电池规格	350mAh 锂电池
额定电压	DC3.7V
充电参数	USB Type-C 接口 5V 2A
充电时间	60 分钟
续航	待机 90 天 / 持续运转 180 分钟
尺寸与重量	Ø17×134.5mm, 52g





样本扫描识别管理

KJSC-I 二维码冻存管扫描仪


产品特点

- 适用范围广，可应用于48格、96格、196格整盒SBS冻存管盒和100格普冻存盒底部二维码的集中扫描识别。
- 识别效率高，整盒识别时间小于2秒。
- 识别性能突出，底部模糊的二维码也可轻松识别。
- 高位相机取景结构，有效降低冻存管结霜后识别错误率。
- 机身结构紧凑，适合多种应用场合。
- 高速USB3.0接口传输数据，避免数据接收的延迟性。
- 丰富的扩展接口，可选配增加冻存盒侧边码识别模块，识别位置四边可置。
- 允许环境温度-20℃，从而可保证样品在识别过程中的质量。
- 人性化的软件设置，对缺失、重复、读码失败等位置标记。
- TCP开发包软件接口，方便对接各类系统软件。



(电脑另配)

KJSC-I

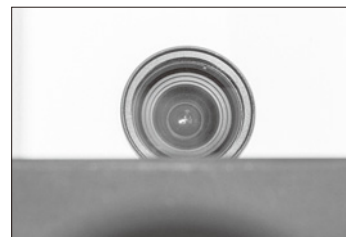

高清晰度工业相机镜头，有效保障识别率。



冻存盒侧边码识别模块，灵活置于四侧扫码。



高速USB3.0数据传输接口，与生物样本库管理系统和自动化标本处理系统无缝联接。

技术参数

KJSC-I

识别速率	<2 秒
取景方式	工业相机
分辨率	500 万像素
适用规格	适用规格：48/96/100/196 格冻存盒
接口类型	USB3.0
数据保存类型	JPG、TXT、EXCEL、CSV 表格等多种格式
支持二维码类型	Data Matrix ECC200, GS1 Aztec Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code 等
外形尺寸	232×185×187 mm
重量	6Kg

样本扫描识别管理

KJSC-D 二维码扫描仪

产品特点

- 适用范围广，可应用于各类试管顶部二维码的识别；
- 识别效率高，整盒识别小于2S；
- 识别性能突出，模糊的二维码也可以轻松识别；
- 高位相机取景结构，有效降低试管结霜后识别错误率；
- 机身结构紧凑，适合多种应用场合；
- 高速USB3.0接口传输数据，避免数据接收的延迟性；
- 允许环境温度-20℃，从而可保证样品在识别过程中质量；
- 人性化的软件设置，对缺失、重复、读码失败等位置标记；
- TCP/IP软件接口，方便对接各类系统软件。



容器如离心管，置于定制模块内批量扫码识别。



技术参数

	KJSC-D
识别速率	<2S
取景方式	工业相机
分辨率	2000 万像素
适用规格	顶部具备二维码的试管
接口类型	USB3.0
数据保存类型	JPG、TXT、EXCEL、CSV 表格等多种格式
支持二维码类型	Data Matrix ECC200, GS1 Aztec Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code 等
外形尺寸	385×295×390mm
重量	6.5Kg



细胞复苏仪

KJCT-I2 / KJCT-I8 干式细胞复苏仪

产品简介


KJCT-I 干式细胞复苏仪为冻存管中的细胞样本提供自动化、可控和标准的解冻处理。设备使用干热技术和多个传感器来确定复苏终点，消除了非受控系统 and 手动操作相关的不确定性，结合专用的控制软件能够生产完整的批次电子记录，适用于生物学研究、新药开发、生物银行库、辅助生殖、动植物物种保护、干细胞与再生医学、免疫细胞治疗等领域。

产品特点



- 干式复苏有效避免水浴复苏带来的交叉污染。
- 自动控制复苏温度与时间，避免人工操作带来的差异化。
- 体积小巧，适用于多个应用场景。
- 磁吸式上盖，自带消毒功能，清洁清理更方便。
- TFT LCD 动态显示复苏过程，复苏过程更直观与可控。
- 实时报警功能，通过数据管控和报警，减少因人为误操作而影响细胞成活率的行为。
- 节能高效，单只通道工作功率小于 40W，且可根据实验需求，选择性进行各通道工作状态的控制。
- 具备数据导出功能，可形成电子批次记录。
- 可根据具体应用需求，整合至自动化细胞培养设备中。



操作流程

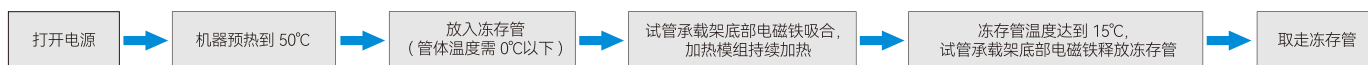

解冻效果对比

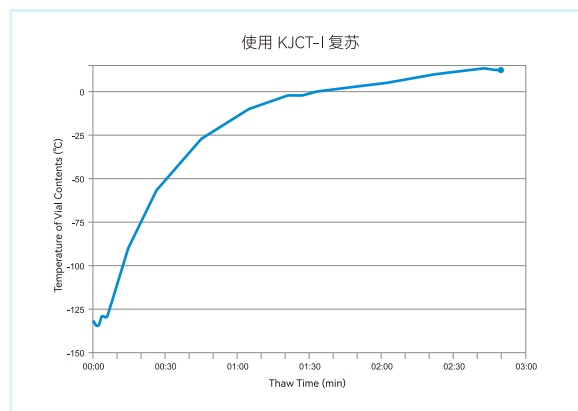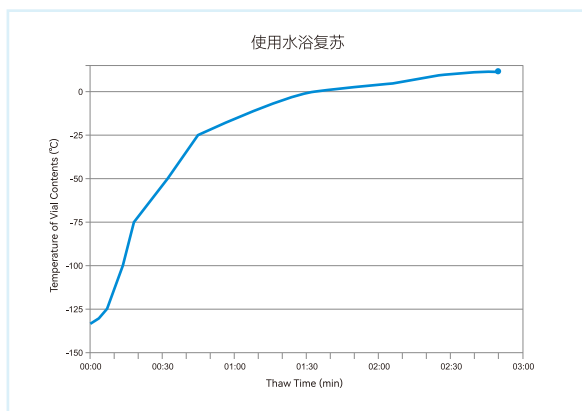

技术参数

KJCT-I2 / KJCTI8

通量	2 通道 / 8 通道
解冻时间	<3min(根据样本容量)
解冻温度	< -70°C
温度显示精度	0.1°C
温度分辨精度	0.5°C
允许启动温度	0°C
适用试管	2mLSBS 冻存管
时间显示	TFT LCD
温度显示	TFT LCD
冻存管温度检测方式	热电堆 (热释红外线传感器)
加热模块检测方式	NTC 热电阻

技术参数

KJCT-I2 / KJCTI8

结束温度	15°C (冻存管温度, 设定值可自定义)
输入功率	200W(2 通道) / 500W(8 通道)
加热方式	PI 加热膜
单个通道加热功率	40W
输入电压	AC100-240V(50/60Hz)
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP43
允许环境温度	5-50°C
外形尺寸	205×200×151mm / 350×278×170mm
净重	2.9kg(2 通道) / 8.5kg(8 通道)
提示功能	预热、复苏、错误操作、设备状态提示



江苏康健医疗用品有限公司

JIANGSU KANGJIAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD.

📍 泰州市姜堰区火车站站前路16号
☎ 0523-88662233、88663355、88665500、88668855
📠 0523-88665588

📞 400-001-9988
🌐 www.kangjian.com
✉ info@kangjian.com