

HISTOLOGY PATHOLOGY



组织病理学类耗材



原生原料生产 自动化组装完成

塑料材质的产品采用医用级原生原料，在洁净车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成，保证产品的生物安全性。



质量监控 流程管理

在ISO13485医疗器械质量监控体系下，确保对生产过程进行连续的质量监控，生产高效有序、可追溯。满足ISO15189、CAP 等实验室认可标准。



定制个性化产品 满足差异化需求

根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制不同的材质、配方、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。


组织包埋盒系列	Histology Cassettes
组织包埋盒	2-8
不锈钢包埋盒盖	9
包埋盒衬垫	9
不锈钢包埋盒底模	10
PVC包埋盒底模	10

病理级载玻片	Pathology Microscope Slides
蒙砂载玻片	12
漆彩载玻片	12
粘附载玻片	13

组织固定与染色	Tissue Fixation & Staining
组织固定液(防漏标本杯分装)	15-16
桶装10%中性福尔马林固定液	17
染色液系列	17-19
载玻片染色缸与染色架	19


运输、存储和归档	Transport Storage & Archiving
载玻片标本盒	21
载玻片滑动器、晾片板	22
载玻片邮寄盒(夹)	23-24

HISTOLOGY CASSETTES

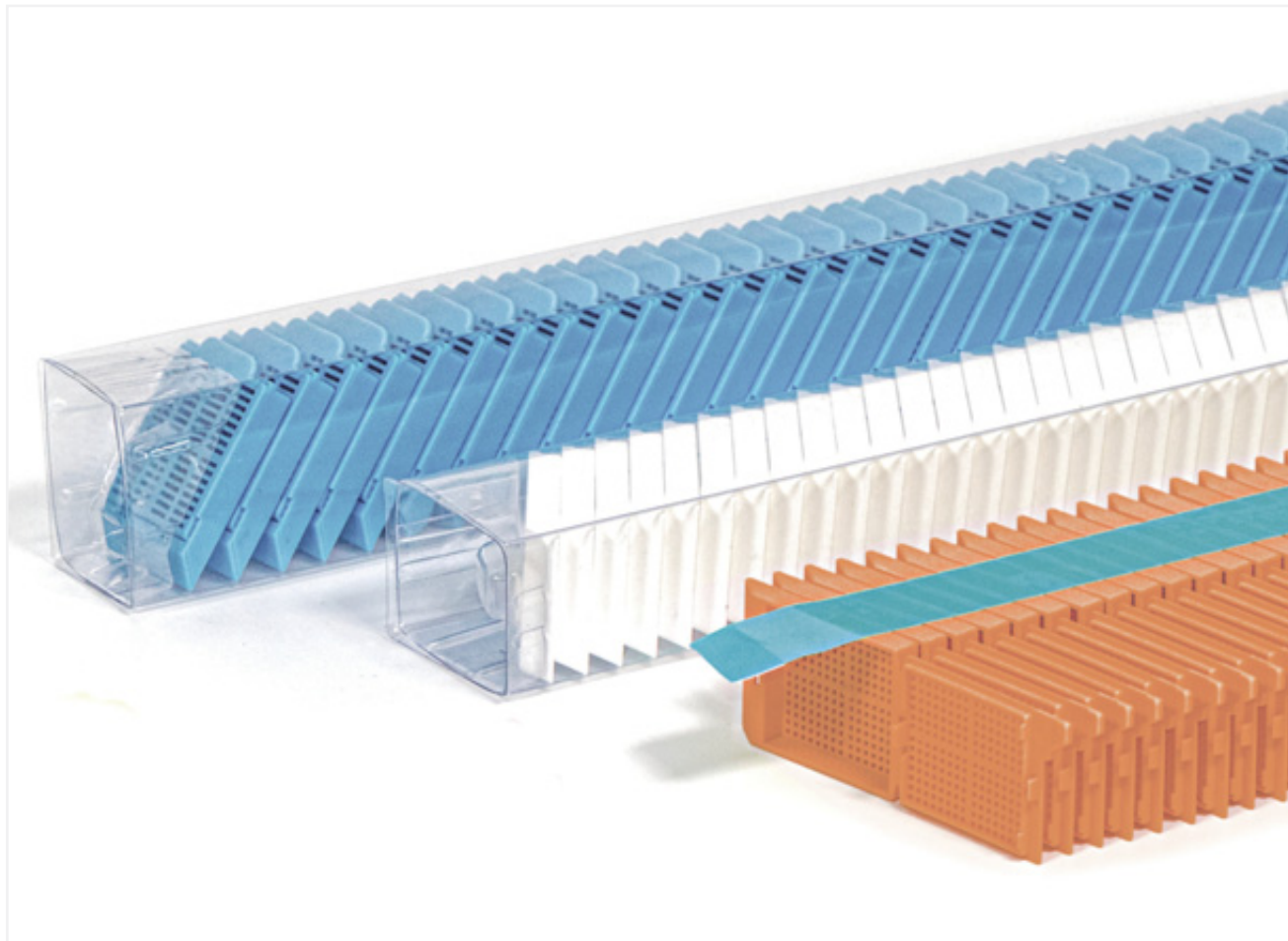


组织包埋盒

康健医疗组织包埋盒均采用POM原料制造，最大程度上降低了蜡块在包埋、冷冻和切片时因温差而造成的变形。科学的搭扣设计确保了组织在处理过程中包埋盒底部和盖子之间的紧密性。多种角度的书写面设计，适用于国内外主流的包埋盒打号机。多种孔型和组装方式的设计，满足专业用户不同的实验要求和使用习惯。为缓解工作中的视觉疲劳，并方便区分不同类型组织样本，可以提供多种颜色的产品。

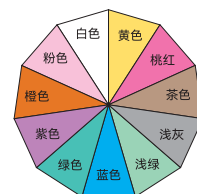

KJ802-6 组织包埋盒

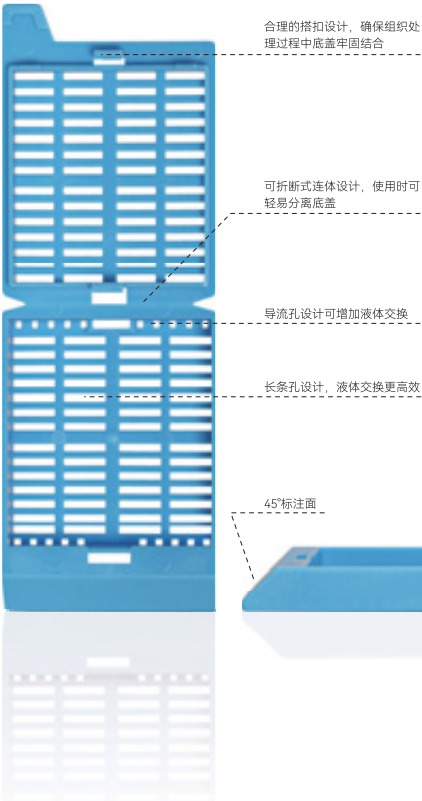


适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，带可折断式的盖子。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-6	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0205

KJ802-8 组织包埋盒

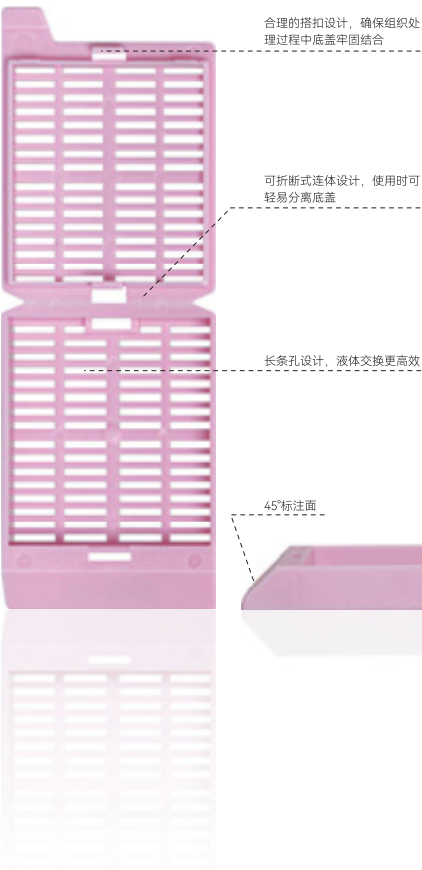


适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，带可折断式的盖子。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-8	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0206

KJ802 组织包埋盒

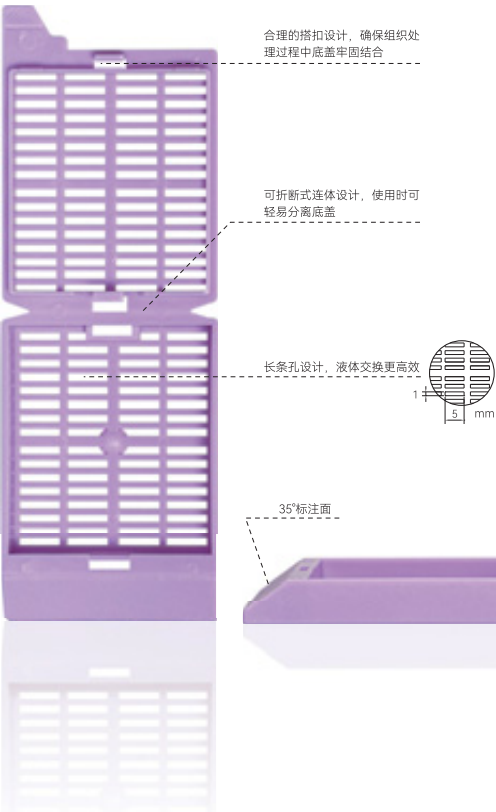


适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，盖、底一体式，易折断盖。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为35°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0201

KJ803-1 组织包埋盒

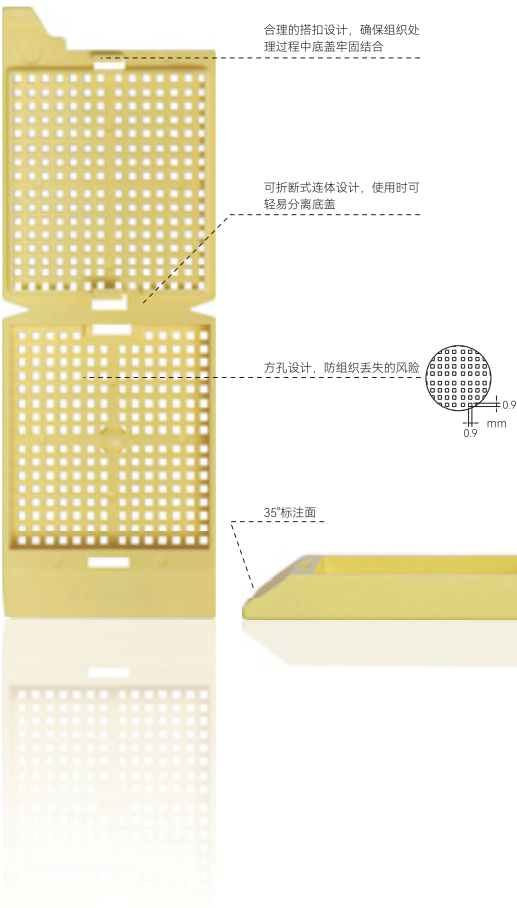

适用于活检样本，0.9×0.9mm的方格孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险，盖子可以容易的折断并移除同时也很方便的扣在包埋盒上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为35°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

REF 目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ803-1	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	易折断式盖子 胶带叠装	181-0102


KJ802-3 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔使组织处理过程中，液体交换更高效。铰链式可拆装盖关合牢固，同时方便安装和拆卸。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。



45°标注面

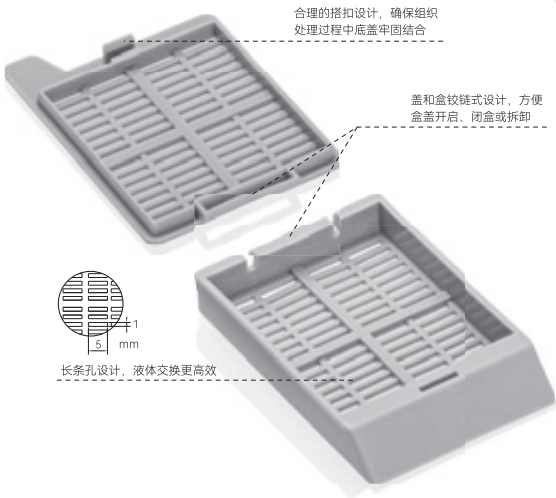

合理的搭扣设计，确保组织处理过程中底盖牢固结合

盖和盒铰链式设计，方便盒盖开启、闭盒或拆卸



长条孔设计，液体交换更高效


目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ802-3	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	铰链式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0204

KJ803-3 组织包埋盒

0.9×0.9mm方孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险。铰链式可拆装盖关合牢固，同时方便安装和拆卸。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工标注和支持连体带盖打印的包埋盒打号机。

目录编号	包装规格	备注说明	产品编码
KJ803-3	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	铰链式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0103

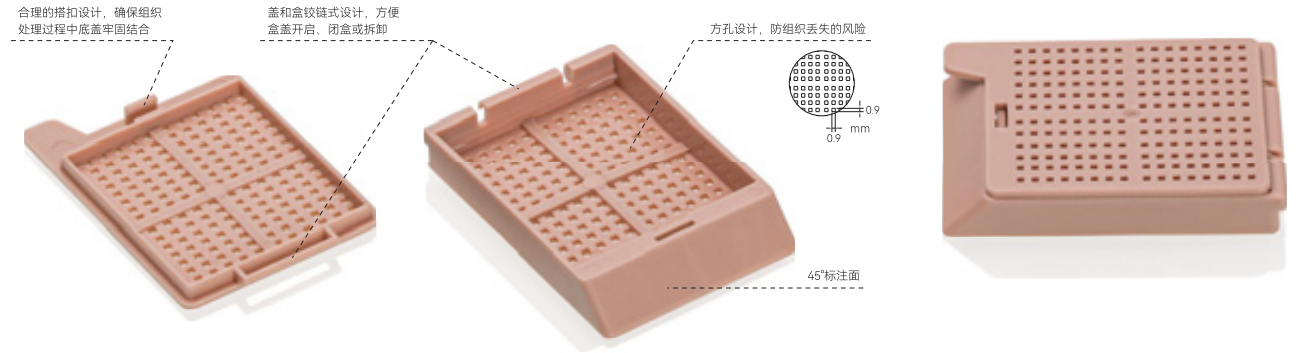

合理的搭扣设计，确保组织处理过程中底盖牢固结合

盖和盒铰链式设计，方便盒盖开启、闭盒或拆卸

方孔设计，防组织丢失的风险




45°标注面

KJ802-1 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，盖子可以移除，同时也很方便的扣在包埋盒上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为30°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和支持30°角打印的包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ802-1	75只/筒，3000只/箱	插卡式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0209
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱		

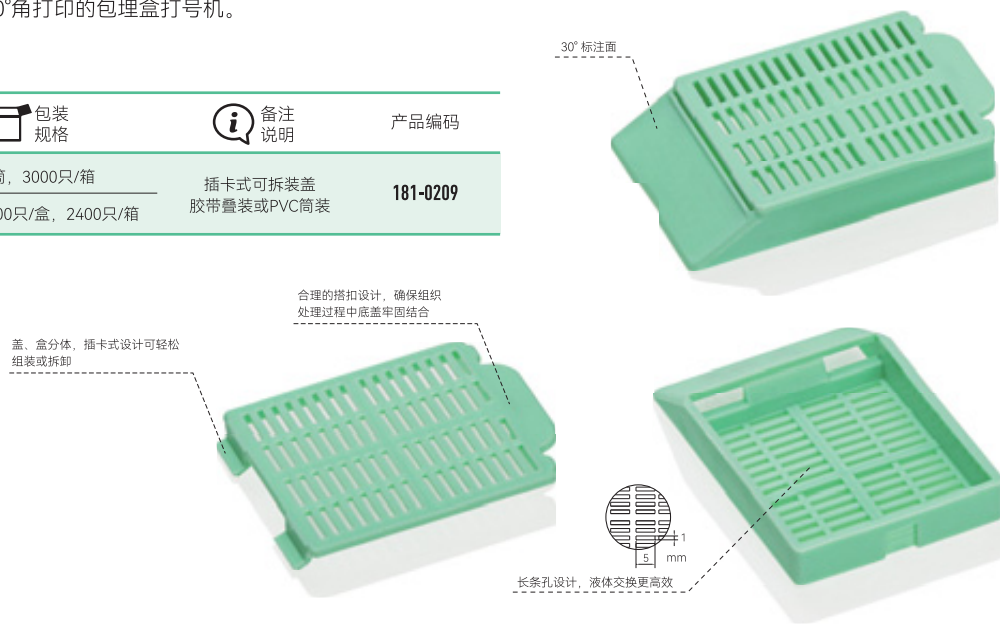

KJ802-2 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ802-2	75只/筒，3000只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0203
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱		



KJ802-7 组织包埋盒

适用于组织学样本，5×1mm长条孔，使组织处理过程中，液体交换更高效，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ802-7	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0207




KJ803-2 组织包埋盒

0.8×0.8mm方孔，更适合活检样本，降低了组织丢失的风险，内镶式可拆装盖，关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ803-2	75只/筒，3000只/箱 40只/叠，200只/盒，2400只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0104

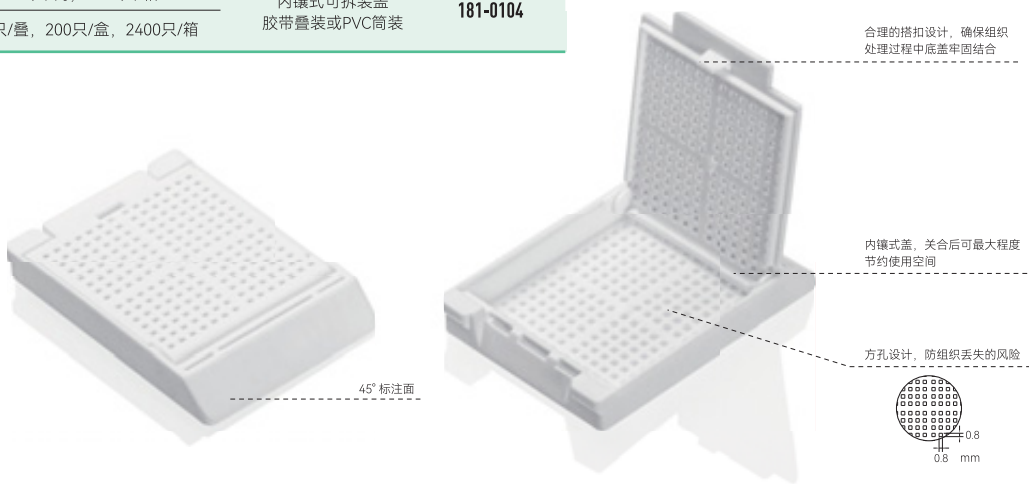

KJ805 组织包埋盒

0.26×0.26mm细方孔，更适合活检样本，特别适用于处理和包埋细小组织，大大降低了组织丢失的风险。内镶式可拆装盖关合牢固，同时节省了很大空间。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

合理的搭扣设计，确保组织处理过程中底盖牢固结合

内镶式盖，关合后可最大程度节约使用空间

盒盖、盒底有大的条形孔，有效促进液体交换和排出

微小方孔，防细小组织丢失

45°标注面

0.26 mm

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ805	75只/筒，3000只/箱	内镶式可拆装盖 胶带叠装或PVC筒装	181-0302
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱		

KJ801 组织包埋盒

圆孔直径2.4mm，无盖，标准型。盒壁超厚设计，防止切片时包埋盒变形，能够紧紧的固定在切片机关头上。配合不锈钢包埋盒盖使用。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

超厚盒壁不变形

45°标注面


2.4 mm

REF 目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ801	75只/筒，3000只/箱	胶带叠装或PVC筒装 或抽屉式中盒装	181-0401
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱 500只/抽屉式中盒，4000只/箱		

KJ801-1 组织包埋盒

圆孔直径2.4mm，无盖，标准型。盒壁超厚设计，防止切片时包埋盒变形，能够紧紧的固定在切片机夹头上。

- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 两侧有大书写面，前端为45°书写面。
- ◆ 适用于手工书写和绝大多数包埋盒打号机。

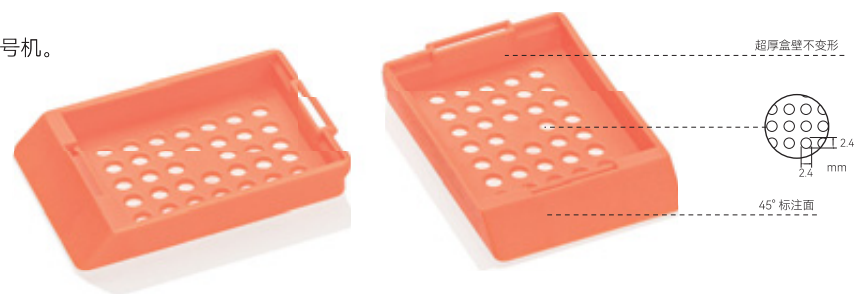


目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ801-1	75只/筒，3000只/箱		
	40只/叠，200只/盒，2400只/箱	胶带叠装或PVC筒装 或抽屉式中盒装	181-0402
	500只/抽屉式中盒，4000只/箱		

KJ818 超大组织包埋盒

康健医疗超大组织包埋盒适用于处理较大组织，如骨骼、肠道、大脑、乳房、肾脏、肝脏、肺、胰腺、前列腺、皮肤、甲状腺等，最常用于前列腺、肠道和乳腺组织。


- ◆ POM材质，具有高耐化学腐蚀性。
- ◆ 产品尺寸：75×52×18mm，盒、盖分体式。
- ◆ 长条孔尺寸：5.8×1mm。
- ◆ 仅适用于手工书写。

目录 编号	包装 规格	备注 说明	产品编码
KJ818	100套/盒，400套/箱	盒、盖分体式	181-0701

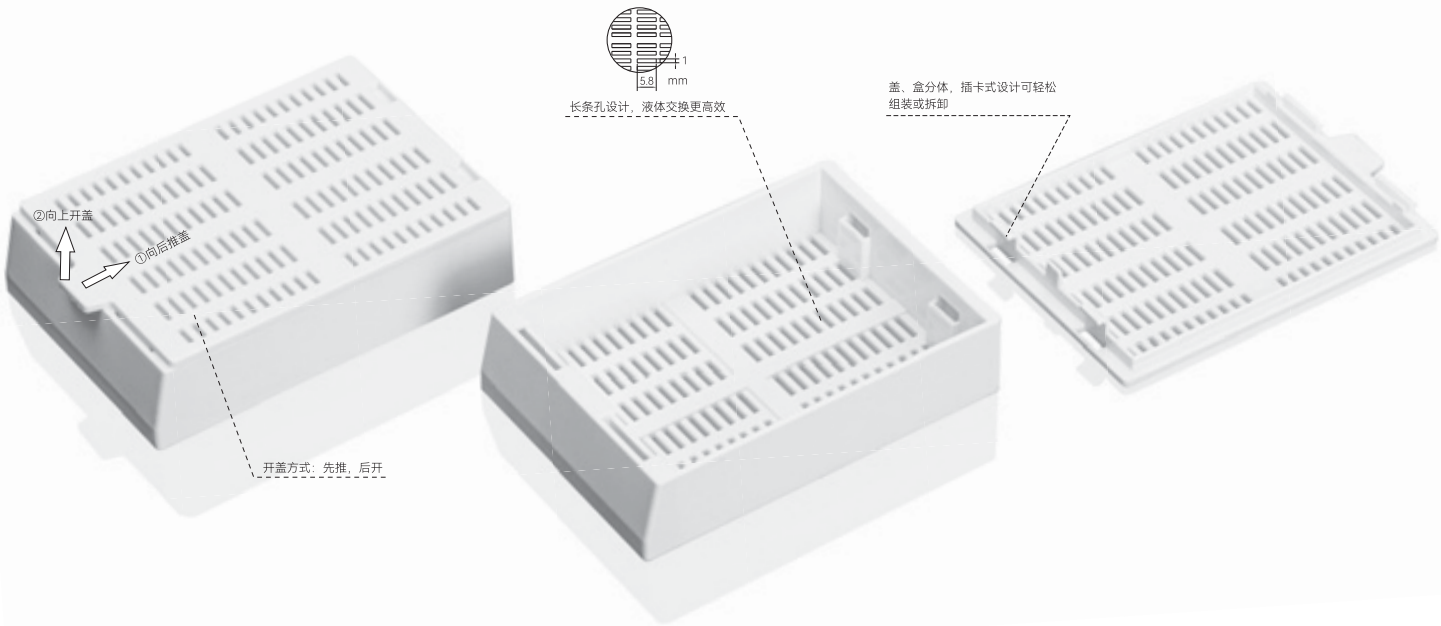

KJ801-2 不锈钢包埋盒盖

直径2.4的圆孔，不锈钢材质，表面抛光处理，配合 KJ801 无盖包埋盒使用，本品非一次性使用产品，经处理后可重复使用。

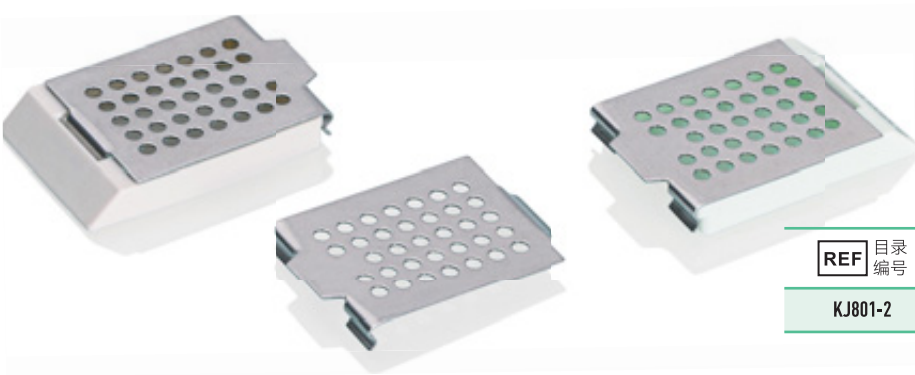

REF	目录 编号	包装 规格	备注 说明
KJ801-2		50只/袋	可重复使用

KJ836 包埋盒衬垫

一次包埋盒衬垫，配合包埋盒使用，防止组织在操作过程中丢失或脱落，适合所有康健包埋盒。
尺寸：30×25×2mm

REF	目录 编号	包装 规格	备注 说明
KJ836		500片/袋	蓝色海绵垫



不锈钢包埋盒底模

用于同款同型号的包埋盒和O形圈的组织样本包埋，适配大多数常用的包埋设备。可重复使用的包埋盒底模均由高品质的#304不锈钢材质制成，表面经过很好地抛光处理，边角圆润光滑不伤手。




REF	目录编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装规格
KJ813-A01		7mm	7×7mm	58×38×11mm	100只/袋
KJ813-A02			15×15mm		
KJ813-A03			21×21mm		
KJ813-A04			21×26mm		
KJ813-A05			21×32mm		

REF	目录编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装规格
KJ813-B01		9mm	7×7mm	60×39×13mm	100只/袋
KJ813-B02			13×13mm		
KJ813-B03			20×20mm		
KJ813-B04			20×25mm		
KJ813-B05			20×32mm		

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

PVC包埋盒底模


用于同款同型号的包埋盒和O形圈的组织样本包埋，适配大多数常用的包埋设备。一次性使用包埋盒底模，均由PVC塑料材质制成，表面光滑平整，边角圆滑，具有一定的强度，可有限次重复使用。

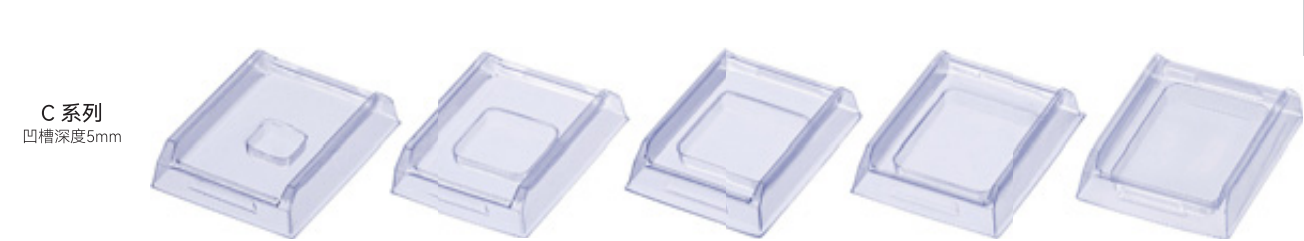

REF	目录编号	凹槽深度	槽底尺寸	外观尺寸	包装规格
KJ813-C01		5mm	9×9mm	50×37×12mm	100只/袋×10袋/箱
KJ813-C02			17×17mm		
KJ813-C03			23×23mm		
KJ813-C04			23×30mm		
KJ813-C05			23×36mm		

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

PATHOLOGY MICROSCOPE SLIDES

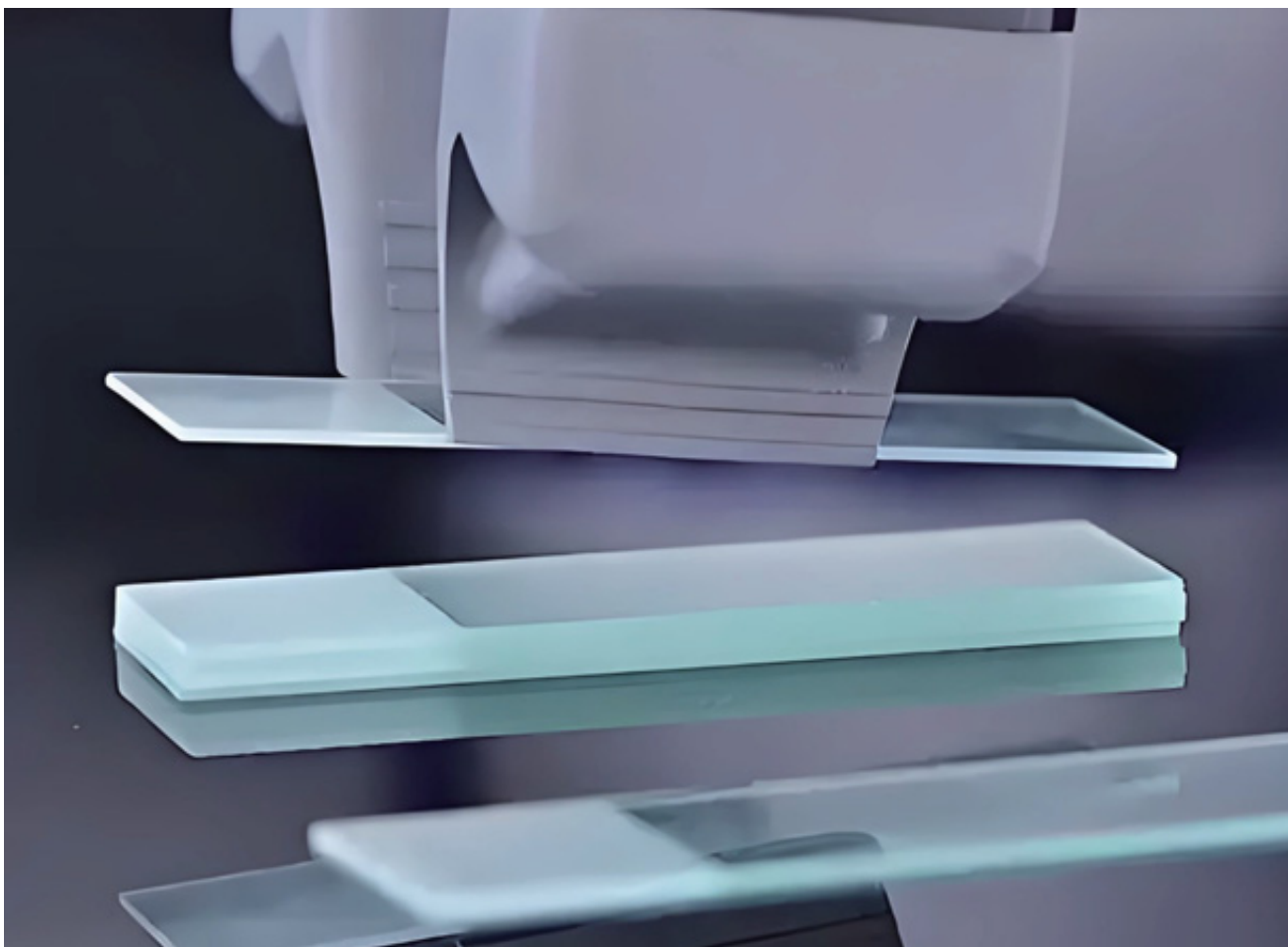

病理级载玻片

蒙砂载玻片

- 浮法玻璃材质，蒙砂书写面，高清洁度、免清洗。厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25×75mm。
- 采用浮法平板玻璃，结构致密，纯净透明，不易破损，满足绝大多数要求严格的实验需求，如组织病理学、细胞学和血液学等。
- 表面平整度极好，不会出现水波纹；超高的表面平整度，让临床标本铺展更为均匀，组织褶皱和细胞重叠的现象明显减少，制片质量得到了较大提升。
- 厚度一致性好，不同区域厚度更为均匀，避免了阅片过程中不断调整焦距的麻烦，缓解了医师视觉疲劳，让阅片变得轻松。




REF 目录 编号	边角处理	书写面	包装
Ⓐ KJ7105	磨边，45°倒角	单头单面蒙砂	50只/盒
Ⓑ KJ7107	磨边，45°倒角	单头双面蒙砂	50只/盒

漆彩载玻片

- 彩色书写面，支持各种病理学打印设备及数字化信息系统。
- 高清洁度、免清洗，厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25×75mm。
- 科学的油墨配方和丝印技术，不仅满足大多数玻片打号机要求，打印清晰，易识别，又能保证载玻片书写面可以耐受各病理常规化学剂的腐蚀，不脱落，不变色。
- 书写顺畅，支持各类载玻片书写仪打印；尺寸精确一致，完美匹配自动化染色设备。
- 品种齐全，超白玻璃和浮法玻璃，直角、45°倒角和八面倒角载玻片，满足众多个性化需求。
- 蓝色、浅蓝色、绿色、浅绿色、紫色、橙色、粉色、白色、黄色可选。



REF 目录 编号	边角处理	书写面	包装
Ⓒ KJ7109	磨边，45°倒角	单头单面漆	50只/盒

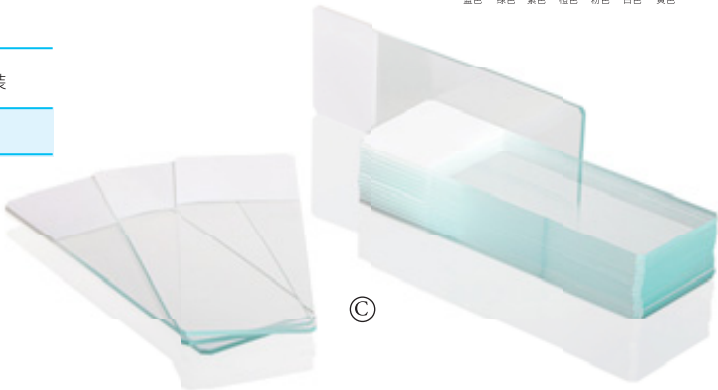


粘附载玻片


- 组织化学染色过程中，在染色液和各化学试剂下的连续水浴处理以及频繁的洗涤，特别是抗原修复后的立即洗涤，确实会增加组织切片或细胞丢失的风险。KANGJIAN粘附载玻片，表面经过特殊试剂与工艺处理后，具有持久的正电荷和粘附力，可将组织切片牢固地结合到载玻片上，大大降低了组织切片或细胞丢失的可能性。
- 采用先进的激光切割技术，保证了玻片尺寸的精准性，满足病理科各种自动化设备对玻片尺寸的要求。
- 本品采用浮法超白玻璃材质制作，浮法超白玻璃与普通玻璃相比，具有透光率佳、耐水解性好、物理强度高和无自发荧光等优点，被公认为是制作显微镜载玻片最理想的原材料之一。
- 科学的油墨配方和丝印技术，不仅满足您的玻片打号机要求，打印清晰，易识别，又能保证载玻片书写面可以耐受各病理常规化学剂的腐蚀，不脱落，不变色。
- 蓝色、浅蓝色、绿色、浅绿色、紫色、橙色、粉色、白色、黄色可选。
- 粘附载玻片也推荐用于常规H&E染色，更好的适用于如大脑和脊髓等难粘附组织的制片。



REF	目录 编号	边角处理	书写面	包装
①	KJ004S	磨边，45°倒角	单头单面漆	50只/盒

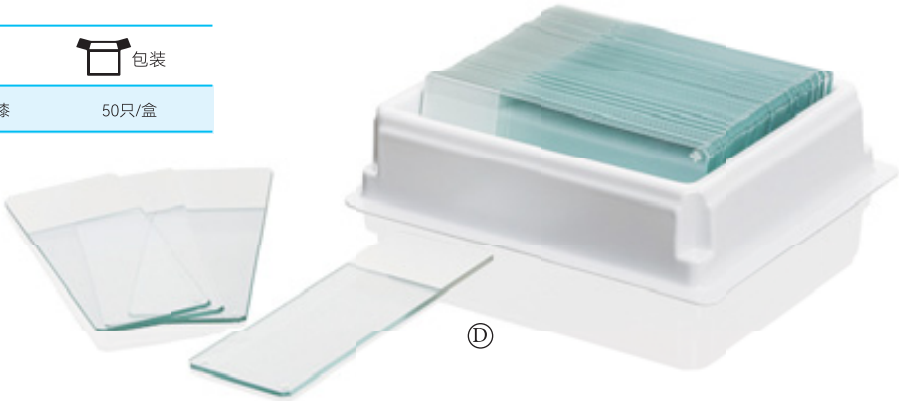

TISSUE FIXATION & STAINING

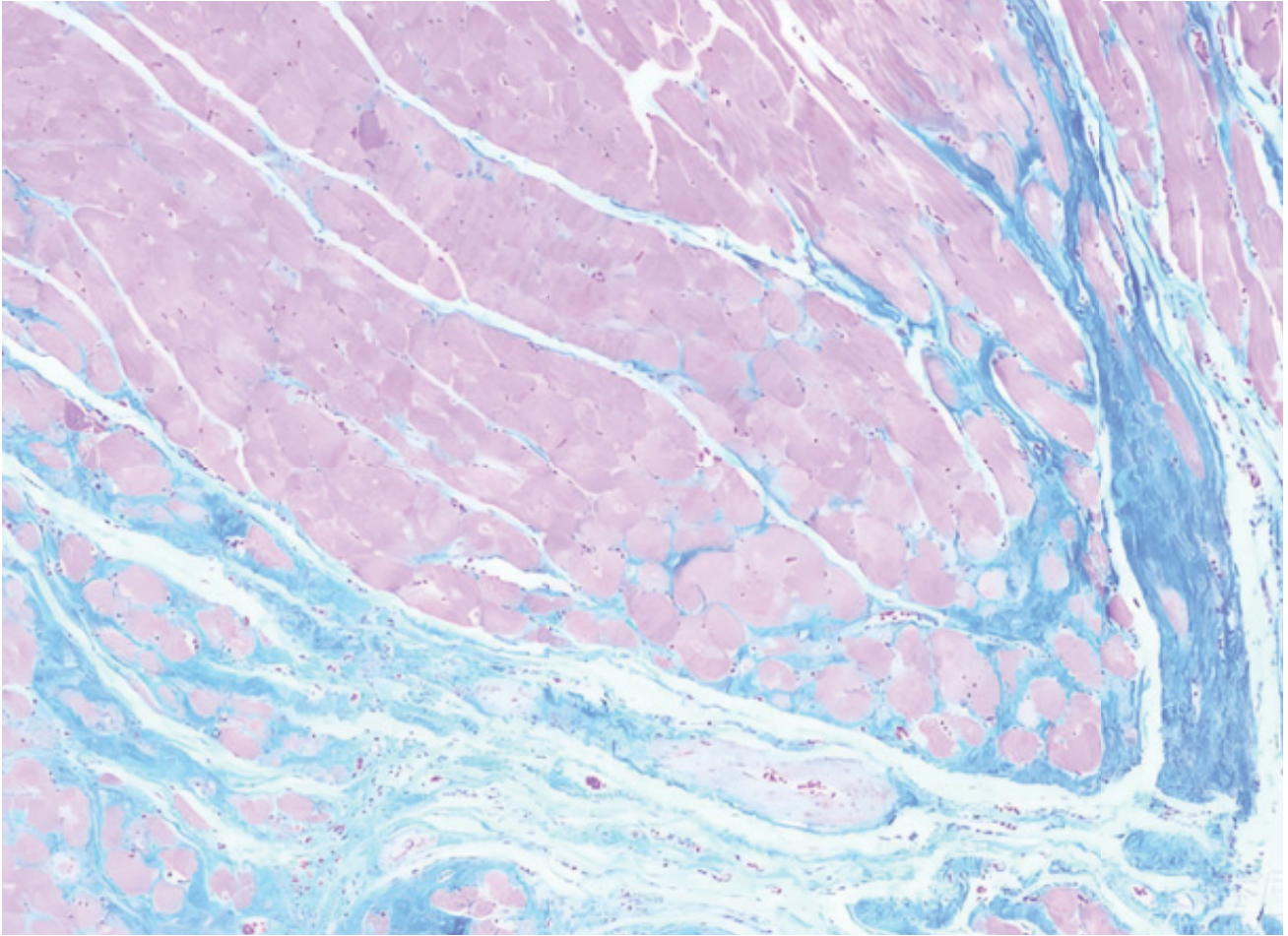

组织固定与染色

组织固定液(防漏标本杯)

组织固定液用于保存、固定和防腐人体和动物组织，防止细菌的腐蚀和组织的自溶，适用于外科、活检、组织病理和胃镜等科室的样本固定或保存，对组织穿透性好、收缩小，保持组织和细胞处于最自然的状态，且对大多数抗原物质具有较好的保存效果。

◎ 4%中性甲醛固定液：为最常用的固定液，以pH7.2~7.4的磷酸缓冲液为溶剂配制的，渗透性强，组织固定均匀、对细胞损伤小，并有利于维持pH值稳定。中性pH值，抑制甲醛多聚物产生，有利于保护绝大多数抗原。其固定效果及对组织抗原性的保存均优于一般约4%甲醛固定液。能满足常规HE及免疫组化PCR等工作。一般无特殊要求的病理标本均适用。

◎ 即开即用，杜绝污染；透明杯身，便于观察样本的固定状态。

◎ 防漏设计，确保使用和运输安全；预贴标签，方便及时记录样本信息。

◎ 多种规格，满足各种样本离体后的制备需求；多种包装形式可选，满足各种需求。

◎ 根据您的需要，可定制4%多聚甲醛固定液或10%中性福尔马林固定液。



装量3mL, 64只/盒架



装量10mL, 25只/盒架



装量20mL, 16只/盒架



装量30mL, 16只/盒架



装量50mL, 9只/盒架



装量60mL, 9只/盒架



装量175mL, 4只/盒架



装量250mL, 4只/盒架

REF 目录 编号	AB 固定液 类型	装液量	容器 规格	包装 方式	备注 说明	产品编码
KJ829-1	4%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	3mL(红色)	5mL	64只/纸架×10纸架/箱	另可定制： 5L或10L桶装	187-0301
KJ829-2		10mL(红色)	20mL	25只/纸架×10纸架/箱		187-1001
KJ829-3		20mL(无色)	40mL	16只/纸架×10纸架/箱		187-2001
KJ829-4		30mL(无色)	60mL	16只/纸架×10纸架/箱		187-3001
KJ829-5		50mL(无色)	80mL	9只/纸架×8纸架/箱		187-5001
KJ829-6		60mL(无色)	120mL	9只/纸架×8纸架/箱		187-6001
KJ829-7		175mL(无色)	250mL	4只/纸架×8纸架/箱		187-1751
KJ829-8		250mL(无色)	500mL	4只/纸架×8纸架/箱		187-2501



盒架式分装




5L桶装(需定制)

活检组织标本杯

活检组织标本杯的杯盖内置(铝箔密封)10mL左右的组织固定液，通过按压杯盖弧形凸起的顶部将密封铝箔截破，组织固定液快速释放入杯内。本品以人为本，最大程度减少操作人员接触有害气溶胶，完全隔绝与组织固定液的接触。其安全便捷的特点，让越来越多的实验室及医疗机构选用该产品进行活检组织固定。

- ◎ 标本杯采用医用级聚丙烯PP材质，在洁净车间生产，产品无细胞毒性，无热原。
- ◎ 杯体防漏设计，确保使用和运输过程安全无泄漏。
- ◎ 根据需要，可定制4%多聚甲醛固定液或10% 中性福尔马林固定液。

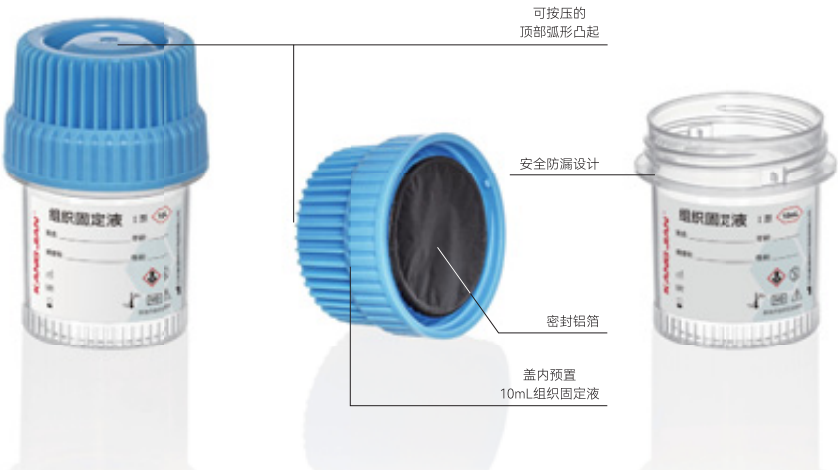

REF 目录 编号	AB 固定液 类型	杯盖 预置液	容器 规格	包装 方式	备注 说明	产品编码
KJ829-14	4%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	10mL	20mL	25只/纸架×10纸架/箱	另可定制 其它类型的固定液	187-1002


桶装10%中性福尔马林固定液

甲醛按照1:9的比例配置成10%的福尔马林溶液，甲醛水溶液渗透力强，固定均匀，对组织收缩较少，能保存脂类和类脂体，对脂肪、神经及髓鞘的固定效果很好。本品加入了0.02mol浓度的磷酸盐缓冲液，其固定效果更佳，特别是对免疫组化、原位杂交、FISH、突变、PCR、二代测序等检查效果更优越，而且避免了甲醛色素的形成。适用于科研实验室、手术室、病理科等科室。

- ◎ 高分子材料试剂瓶，能耐弱酸、耐弱碱和油类等
- ◎ 配铝箔垫片，可防漏。
- ◎ 有5L和10L规格可选。



使用步骤

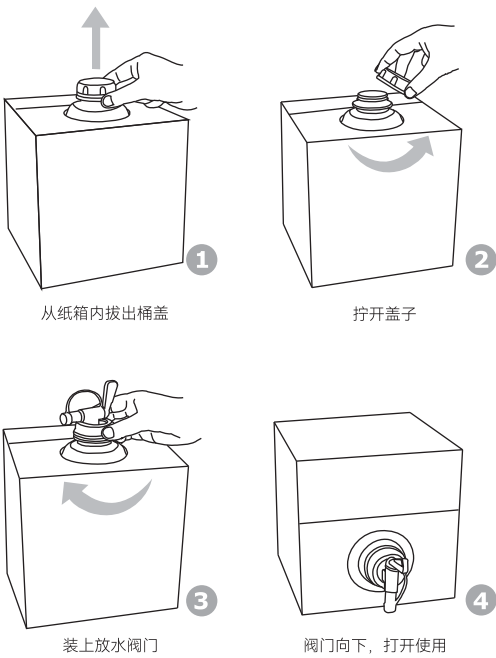

REF	目录 编号	固定液 类型	容器 规格	包装 方式
KJ829-9		10%中性甲醛固定液 (含磷酸盐缓冲液)	5L	1桶/盒×4盒/箱
KJ829-10			10L	1桶/盒×2盒/箱

苏木素染色液

M-Gill's苏木素染色液(Modified Gill's Hematoxylin)是改良型吉尔苏木素，开瓶即用，为病理实验室主流即用型核染液，主打稳定、低沉淀、适配自动化，是Gill系列的优化版。

- ◎ 改良 Gill 配方，染色稳定高效
核染清晰锐利、蓝亮均匀，对比度佳，病理诊断更精准。
- ◎ 低沉淀、不易氧化，上机更稳定
适配全自动染色流水线，减少堵针与维护，高通量更省心。
- ◎ 即开即用，操作简便
无需配制、开瓶即用、步骤简化，批间差异小、结果一致性高。



REF	目录 编号	染色液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-1		M-Gill's型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格

伊红染色液

醇溶型伊红染色液是以乙醇为溶剂的酸性胞浆染色试剂，主要用于病理组织学HE染色。本品着色鲜艳、嗜酸性结构染色清晰，红色均匀透亮，与组织结合牢固，脱水过程不褪色、不流失，背景洁净，对比度佳，适用于手工染色及全自动病理染色机，是常规病理切片、教学切片与高质量诊断切片的理想选择。

- ◎ 醇溶配方，着色牢固，染色鲜艳红润，对比度高。
- ◎ 不易过染，背景干净，无脏染、无杂色，切片质量稳定。
- ◎ 即开即用，无需配制，适配全自动染色机高通量病理实验室。

REF 目录 编号	AB 染色液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-2	醇溶型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



脱钙液

EDTA 型脱钙液是以乙二胺四乙酸盐（EDTA）为主要脱钙成分的温和型组织脱钙试剂，通过螯合作用去除骨及钙化组织中的钙盐，不破坏组织形态与细胞结构。

- ◎ 产品作用温和、脱钙均匀彻底，对组织抗原性、核酸及染色效果影响极小，脱钙后组织切片完整、染色清晰，适用于骨组织、钙化组织及对后续病理染色、免疫组化、分子病理有较高要求的样本处理。
- ◎ 本品无强酸、无刺激性气味，操作安全环保，适用于各类病理组织处理及实验室样本脱钙使用。

REF 目录 编号	AB 脱钙液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-3	EDTA型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



分化液

分化液是病理组织学 HE 染色中专用的脱色调节试剂，主要成分为稀盐酸乙醇。

- ◎ 用于苏木素染色后，适度脱去组织切片上多余染料，使细胞核着色深浅适中、轮廓清晰，降低背景非特异性染色，提升核浆对比度，保障病理切片诊断质量。
- ◎ 本品作用温和、易于控制，适配手工操作及全自动病理染色机，操作简便、结果稳定。

REF 目录 编号	AB 分化液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-5	稀盐酸乙醇	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



返蓝液

- ◎ SA 型返蓝液由醋酸钠和纯化水组成。病理组织学染色配套的专用蓝化试剂，采用温和缓冲体系配制，作用稳定、蓝化均匀。
- ◎ 用于苏木素染色分化后，快速中和切片酸性环境，使细胞核由淡红色转为清晰、鲜亮的蓝色，核质对比鲜明，染色结果一致性好。
- ◎ 本品性能温和、操作简便、无刺激性气味，适用于手工染色及各类全自动病理染色机。

REF	目录 编号	返蓝液 类型	容量 规格	包装 方式	备注 说明
KJ837-4		SA型	500mL	1瓶/盒	可定制容量规格



载玻片染色缸

适用于标准尺寸25×75mm的载玻片25片，染色缸和配套的染色架为PP材质耐酸碱，有白色、浅蓝和灰色可选。

REF	目录 编号	外观 尺寸	包装 方式
KJ821-1		108×54×115mm (盖、盒分体)	1只/袋×20只/箱
KJ821-2		108×54×115mm (盖、盒连体)	1只/袋×20只/箱



不锈钢载玻片染色架

适用于标准尺寸25×75mm(1"×3")的载玻片，不锈钢材质。

REF	目录 编号	规格	包装 方式
KJ821-3		20片装	1只/盒×50只/箱
KJ821-4		30片装	1只/盒×40只/箱
KJ821-5		60片装	1只/盒×20只/箱



* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。


TRANSPORT STORAGE & ARCHIVING



运输、存储和归档

载玻片标本盒

- 适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片，ABS材质。
- 盒内底部放置软木垫，有效防止在运输及存储中对玻片的损坏；盒内顶部有索引表，便于标识和查找。
- 为缓解视觉疲劳，每种规格的产品均可提供灰色、蓝色、橙色、白色和红色等颜色。

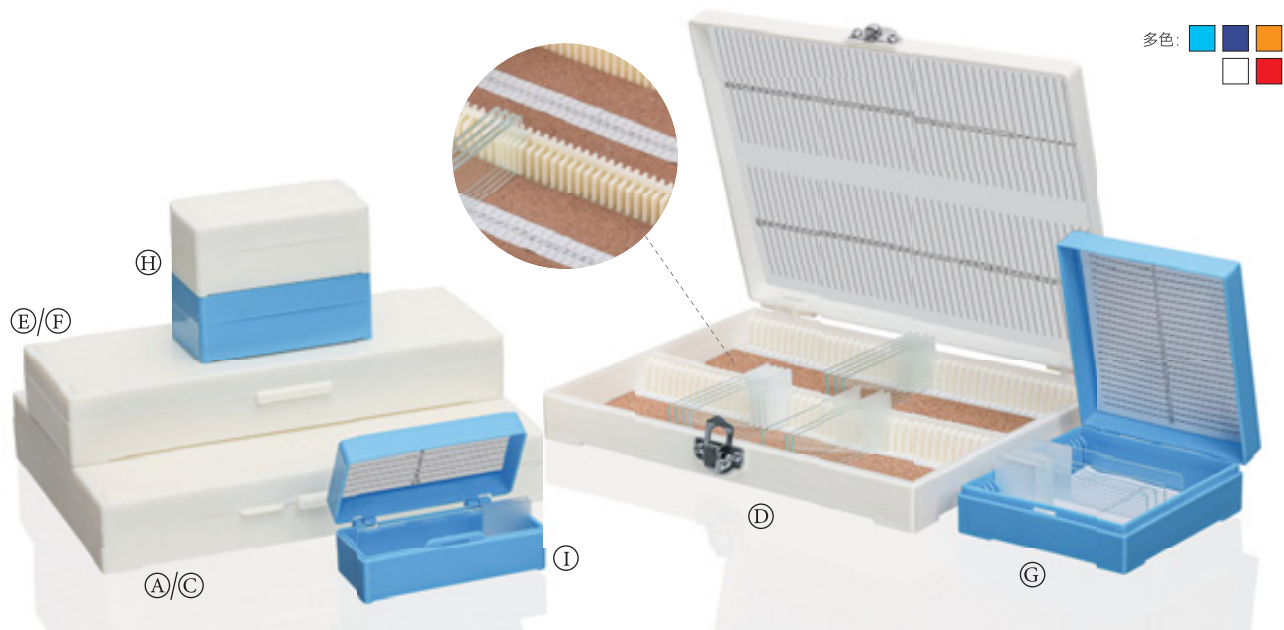

REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	备注说明	产品编码
(A)	KJ808	100格	210×160×30mm	50		182-1001
(B)	KJ808-1	100格	210×160×30mm	50	金属锁扣	182-1002
(C)	KJ808-2	100格	210×160×35mm	50	加软木垫	182-1003
(D)	KJ808-3	100格	210×160×35mm	50	金属锁扣、加软木垫	182-1004
(E)	KJ807	50格	210×80×30mm	100		182-0501
(F)	KJ807-1	50格	210×80×30mm	100	加软木垫	182-0502
(G)	KJ806	25格	82×95×32mm	200		182-0251
(H)	KJ806-1	12格	82×49×32mm	200		182-0121
(I)	KJ806-2	10格	82×41×32mm	200		182-0101

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	备注说明	产品编码
(J)	KJ808-4	100格	210×180×35mm	50	金属锁扣, 加软木垫	182-1005

多色:



载玻片滑动器、晾片板


• 20格载玻片晾片板

20格塑料晾片板，适用标准尺寸的载玻片。确保实验样本在显微镜观察前后保持整洁有序。

- 使用PC+ABS 塑料制成，抗冲击能力是普通 ABS 的 3-5 倍。
- 结构稳定，耐酸碱，可重复使用。
- 适用尺寸为25×75mm (1"×3")的载玻片。
- 可多层层叠，或与20格晾片板混叠放置，节约实验及存放空间。

 目录 编号	 规格	 外观* 尺寸	 只/箱	产品 编码
KJ824	20格	300×195×12mm	50	183-0005

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

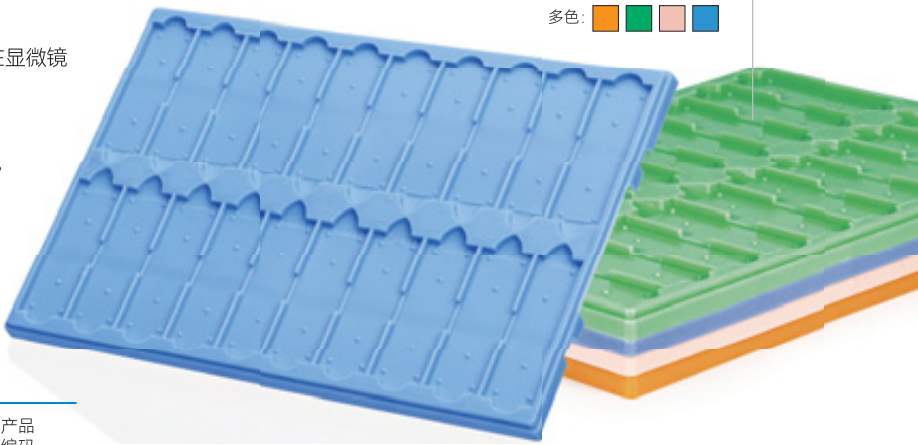

• 10格载玻片晾片板

10格载玻片晾片板用于较大组织切片的载玻片的晾干和存放，确保实验样本在显微镜观察前后保持整洁有序。

- 使用PC+ABS 塑料制成，抗冲击能力是普通 ABS 的 3-5 倍。
- 结构稳定，耐酸碱，可重复使用。
- 适用79×54mm及以下尺寸的载玻片(可定制)。
- 可多层层叠，或与20格晾片板混叠放置，节约实验和存放空间。

 目录 编号	 规格	 外观* 尺寸	 只/箱	产品 编码
KJ824-1	10格	300×195×12mm	50	183-0007

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



• 载玻片滑动器

每次可批量放置载玻片到滑动器上方盒内，取单只玻片时只需旋动出片旋钮。适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片。ABS材质。

 目录 编号	 外观* 尺寸	 只/箱	产品 编码
KJ821	100×100×200mm	50	183-0001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



载玻片邮寄夹


- 适用标准尺寸25×75mm (1"×3")的载玻片，有PP材质和纸质。
- 可放1-48片的多款筒装载玻片邮寄夹(盒)，便于保存、邮寄和携带。
- 产品上贴有可书写标贴，便于标识，特别推荐病理读片使用。

• 载玻片专用塑料邮寄盒



REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	只/箱	产品 编码
A	KJ820-6	可装5片	Ø30×90mm	60	183-0006
B	KJ820-3	可装2片	90×70×6mm	800	183-0002
C	KJ820-4	可装5片	30×18×82mm	800	183-0003

• 载玻片专用纸质邮寄夹

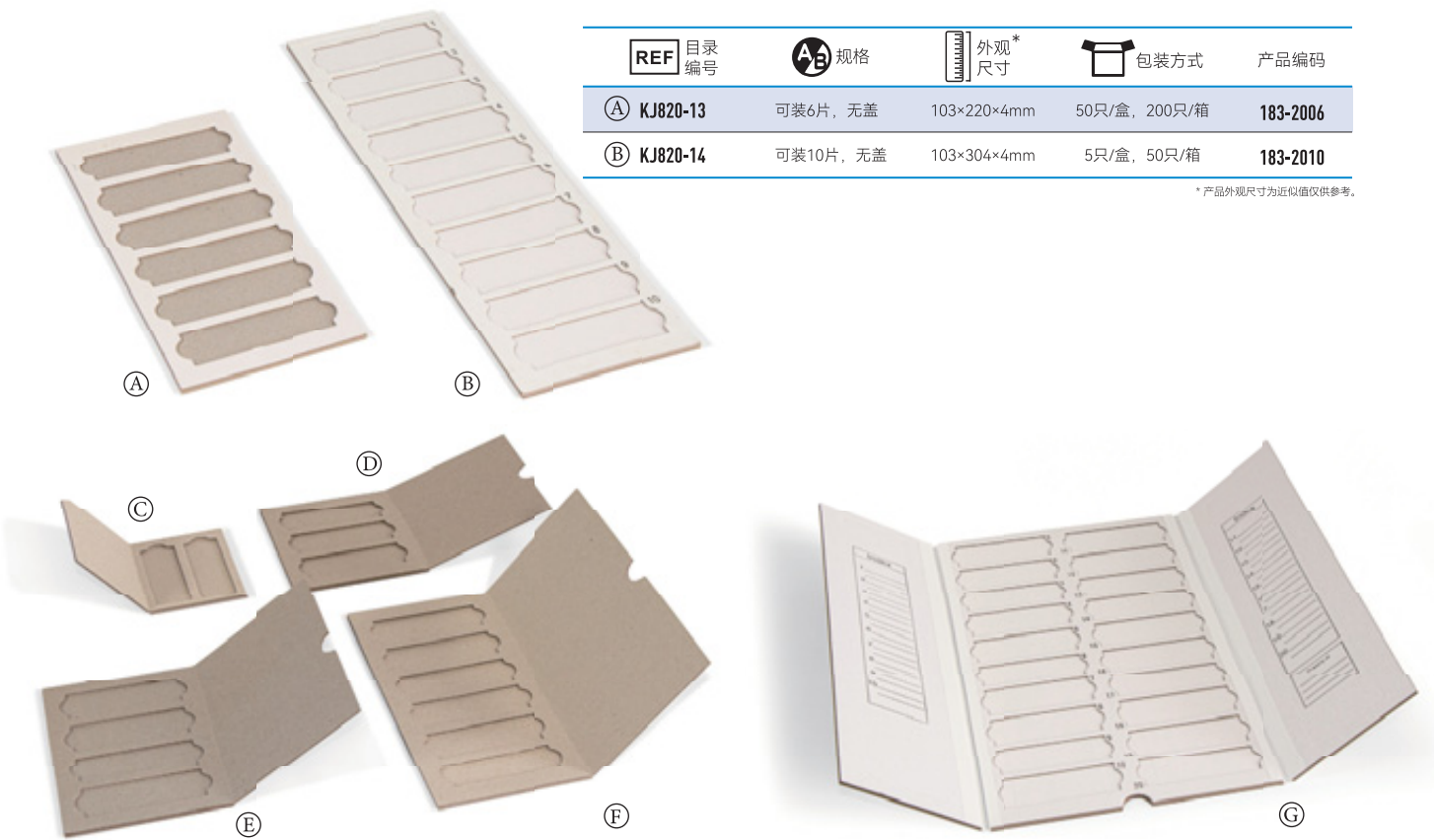

REF	目录 编号	规格	外观* 尺寸	包装方式	产品编码
A	KJ820-13	可装6片，无盖	103×220×4mm	50只/盒，200只/箱	183-2006
B	KJ820-14	可装10片，无盖	103×304×4mm	5只/盒，50只/箱	183-2010

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



REF 目录 编号	规格	关盖* 尺寸	包装方式	产品编码
Ⓒ KJ820-9	可装2片，有盖	75×95×6mm	50只/盒，500只/箱	183-2102
Ⓓ KJ820-10	可装3片，有盖	110×118×6mm	50只/盒，500只/箱	183-2103
Ⓔ KJ820-11	可装4片，有盖	110×148×6mm	50只/盒，200只/箱	183-2104
Ⓕ KJ820-12	可装6片，有盖	110×214×6mm	50只/盒，200只/箱	183-2106
Ⓖ KJ820-2	可装20片，有盖	205×340×8.5mm	5只/盒，50只/箱	183-2120
Ⓗ KJ820-7	可装30片，有盖	290×340×8.5mm	5只/盒，50只/箱	183-2130
Ⓘ KJ820-8	可装48片，有盖	383×403×8.5mm	5只/盒，50只/箱	183-2148

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。


NOTE



康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号

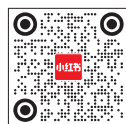

康健医疗小红书



康健医疗抖音号