


Pipetting Consumables




移液处理系列

- | | |
|-----------|--------|
| → 移液器吸头 | 84-93 |
| → 一次性使用吸管 | 94-98 |
| → 血清移液管 | 99-102 |

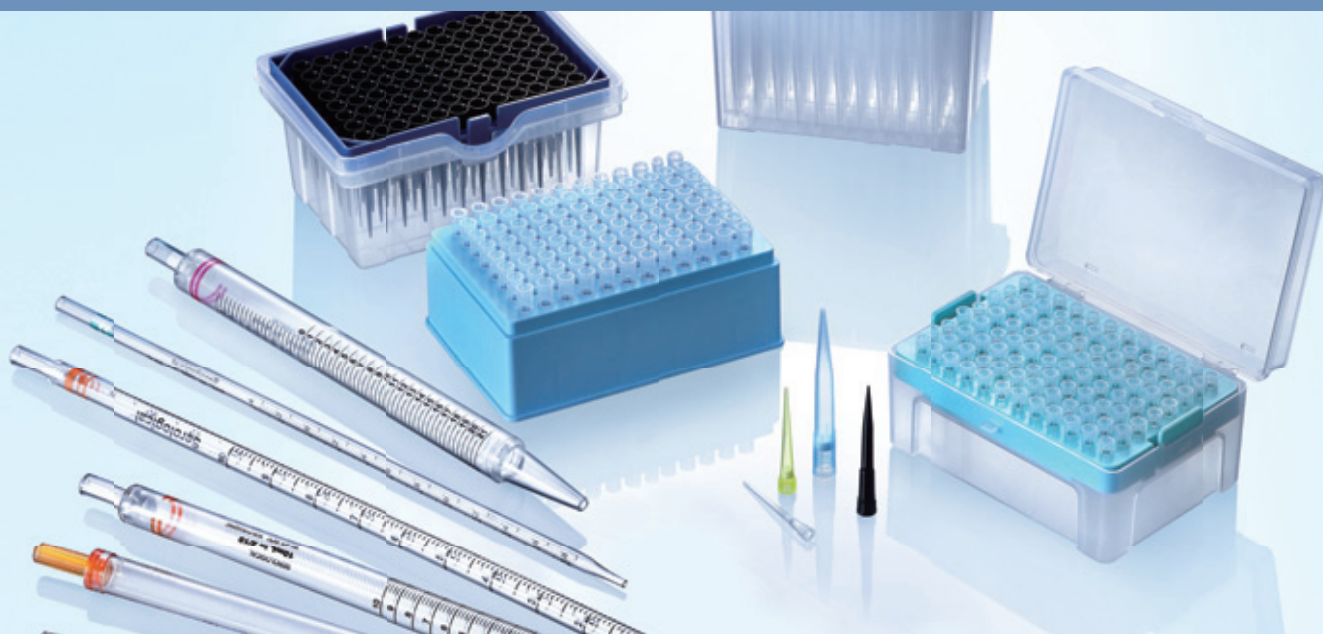



PIPETTE TIPS

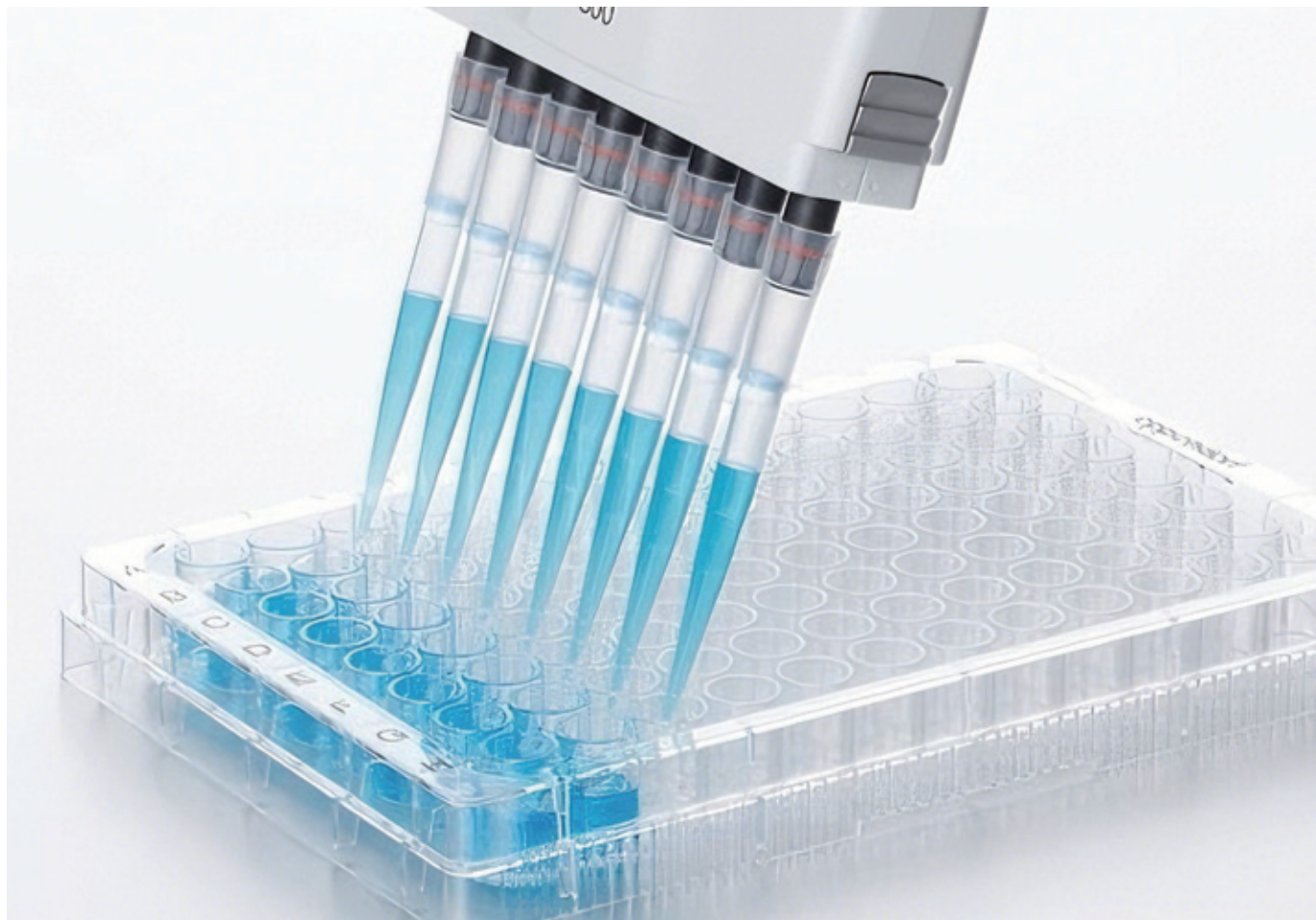

移液器吸头



移液器吸头

产品简介

- ◎ 吸头采用医疗级聚丙烯(PP)原料, 采用先进的生产工艺制造, 产品挺直, 无弯曲变形, 具有极高的品质和精准性。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性, 完美适配于国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 在十万级净化车间生产, γ 辐射灭菌。

特点介绍

一、疏水性滤芯阻隔气溶胶产生交叉污染


- ◎ 滤芯吸头具有阻隔气溶胶和生物分子, 有效防止移液器被样品溶液所污染。同时滤芯层有效截留液滴和飞溅。

二、加长型吸头有效避免碰触容器内壁

- ◎ 加长型吸头具有细长型设计, 当从15mL离心管、50mL锥形离心管、细胞培养瓶、深孔板和其他较深容器中移液或加液时, 可避免触碰这些较深容器的内壁, 减少交叉污染。
- ◎ 逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体。



三、超低吸附性内管壁确保实验结果的准确

- ◎ 看不见的液体薄膜残留在吸头内壁, 并随着吸头被丢弃, 造成大量珍贵样品的浪费。尤其是对于敏感的 PCR 和实时定量 PCR 实验来说, 低吸附表面可提高重复性并显著减少昂贵试剂的损耗。
- ◎ 康健医疗低吸附吸头内表面经涂层工艺处理, 具有超疏水性, 放液时, 几乎无样本液体或极少残留在吸头内。使用这种吸头可最大限度提高珍贵样本的回收率, 确保实验数据的准确。

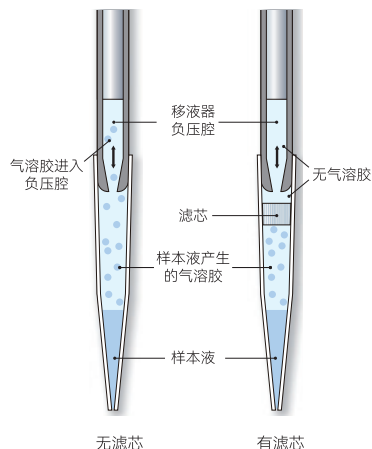

包装方式


吸头有多种包装方式: 若干只袋装、专用吸头盒装和多层叠装。

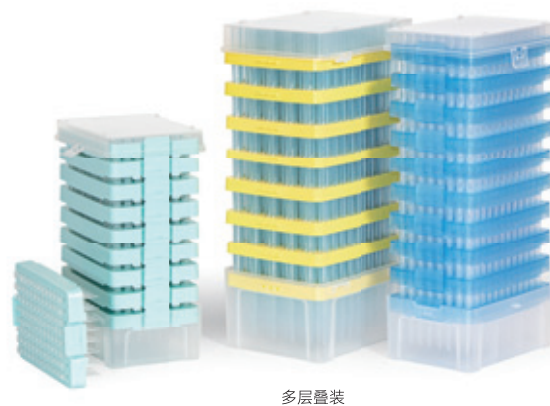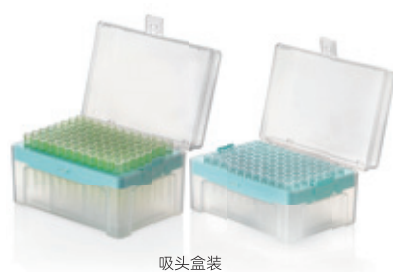



移液器吸头

规格参数

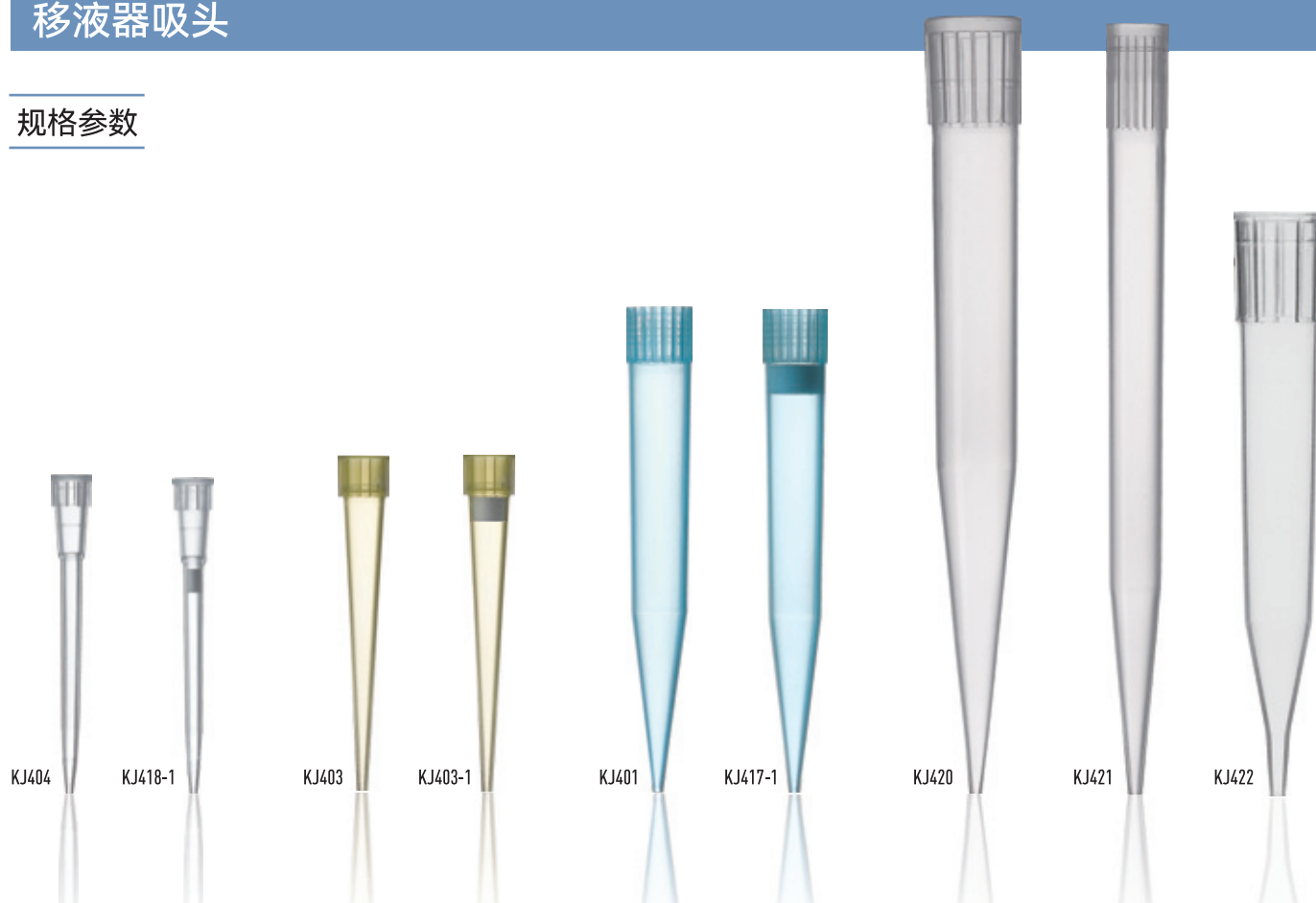

REF		*	袋装	盒装	叠装		
KJ404	10 μ L	$\varnothing 5 \times 46 \text{ mm}$	1000	-	-	50000	包装方式与灭菌方式 均可定制
			-	96	-	4800	
			-	-	96 $\times$ 10	9600	
KJ418-1	10 μ L (with tip filter)	$\varnothing 5 \times 46 \text{ mm}$	1000	-	-	50000	
			-	96	-	4800	
			-	-	96 $\times$ 10	9600	
KJ403	200 μ L	$\varnothing 6 \times 48 \text{ mm}$	1000	-	-	30000	
			-	96	-	4800	
			-	-	96 $\times$ 10	9600	
KJ403-1	200 μ L (with tip filter)	$\varnothing 6 \times 48 \text{ mm}$	1000	-	-	20000	
			-	96	-	4800	
			-	-	96 $\times$ 10	9600	
KJ401	1000 μ L	$\varnothing 8 \times 70 \text{ mm}$	500	-	-	10000	
			-	100	-	5000	
			-	-	100 $\times$ 8	8000	
KJ417-1	1000 μ L (with tip filter)	$\varnothing 8 \times 70 \text{ mm}$	500	-	-	10000	
			-	100	-	5000	
			-	-	100 $\times$ 8	8000	
KJ420	5mL	$\varnothing 13 \times 147 \text{ mm}$	300	-	-	3000	
KJ421	5mL	$\varnothing 9 \times 146 \text{ mm}$	300	-	-	3000	
KJ422	5mL	$\varnothing 12 \times 98 \text{ mm}$	300	-	-	3000	

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



吸头盒

产品简介

吸头盒采用聚丙烯(PP)塑料材质，于十万级洁净车间生产，保障无尘、无菌、无污染环境。该系列产品专门用于放置10微升、200微升、1000微升以及1250微升规格的移液器吸头。实验人员在使用过程中无需直接接触吸头，可避免污染，提升工作效率，优化实验操作空间。



规格参数

REF 目录 编号	规格	只/箱	备注说明
KJ463-1	96孔, 用于10 μ L吸头	50	空盒, 不包含吸头
KJ463-2	96孔, 用于200 μ L吸头	50	
KJ463-3	96孔, 用于200 μ L加长吸头	50	
KJ463-4	100孔, 用于1000 μ L吸头	50	
KJ463-5	96孔, 用于1250 μ L吸头	40	




通用无热原吸头

产品介绍

- ◎ 吸头使用医疗级聚丙烯(PP)原料, 采用先进的生产工艺制造, 产品挺直, 无弯曲变形, 具有极高的品质和精准性。
- ◎ 在十万级净化车间生产, 无热原、无胚胎毒性、无细胞毒性、无DNA酶或RNA酶、无内毒素、无重金属污染。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性, 完美适配于国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 提供多支袋装、专用吸头盒装或多层叠装等多种包装方式。

规格参数

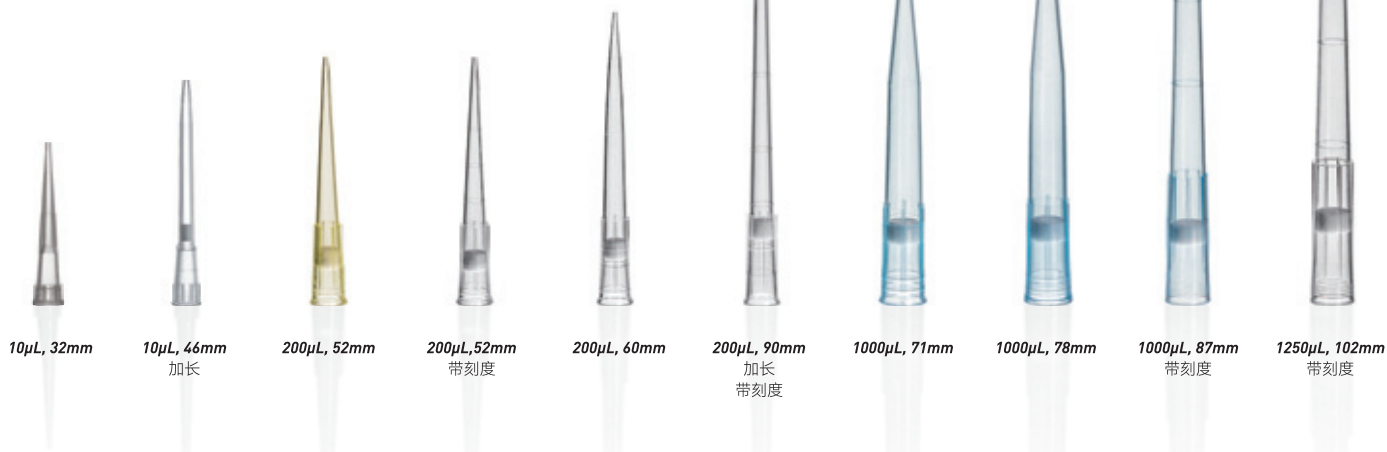

REF 目录编号	规格	L 长度*	袋装	盒装	叠装	只/箱	备注说明	产品编码
KJ408	10µL	32mm	1000	-	-	50000	本色透明, 袋装	121-02101
KJ408-2			-	96	-	4800	本色透明, 盒装	121-02105
KJ408-3			-	-	96×10	9600	本色透明, 叠装	121-02106
KJ408-4			1000	-	-	50000	本色透明, 袋装	121-02107
KJ408-5			-	96	-	4800	本色透明, 带滤芯, 盒装	121-02108
KJ404-1	10µL 加长	46mm	1000	-	-	50000	本色透明, 袋装	121-01103
KJ404-2			-	96	-	4800	本色透明, 盒装	121-01104
KJ404-3			1000	-	-	50000	本色透明, 带滤芯, 袋装	121-01105
KJ404-4			-	96	-	4800	本色透明, 带滤芯, 盒装	121-01106
KJ406	200µL	52mm	1000	-	-	20000	本色或黄色透明, 袋装	121-02401
KJ406-1			-	96	-	4800	本色或黄色透明, 盒装	121-02403
KJ406-2			1000	-	-	20000	本色或黄色透明, 带滤芯, 袋装	121-02404
KJ406-3			-	96	-	4800	本色或黄色透明, 带滤芯, 盒装	121-02405
KJ406-4			-	-	96×10	9600	本色或黄色透明, 叠装	121-02406
KJ413	200µL 带刻度	52mm	1000	-	-	20000	本色或黄色透明, 袋装	121-03401
KJ413-4			-	96	-	4800	本色或黄色透明, 盒装	121-03404
KJ413-5			1000	-	-	20000	本色或黄色透明, 带滤芯, 袋装	121-03405
KJ413-6			-	96	-	4800	本色或黄色透明, 带滤芯, 盒装	121-03406
KJ413-7			-	-	96×10	9600	本色或黄色透明, 叠装	121-03407

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



通用无热原吸头

REF 目录 编号	规格	L 长度*	袋装	盒装	叠装	只/箱	备注说明	产品编码
KJ454	200μL	60mm	1000	-	-	20000	本色透明, 袋装	123-15405
KJ454-1			-	96	-	4800	本色透明, 盒装	123-15406
KJ454-2			1000	-	-	20000	本色透明, 带滤芯, 袋装	123-15407
KJ454-3			-	96	-	4800	本色透明, 带滤芯, 盒装	123-15408
KJ424	200uL 加长带刻度	90mm	1000	-	-	10000	本色透明, 袋装	121-15401
KJ424-1			-	96	-	4800	本色透明, 盒装	121-15407
KJ424-2			1000	-	-	10000	本色透明, 带滤芯, 袋装	121-15408
KJ424-3			-	96	-	4800	本色透明, 带滤芯, 盒装	121-15409
KJ405	1000μL	71mm	500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 袋装	121-02801
KJ405-3			-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 盒装	121-02806
KJ405-4			500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 袋装	121-02807
KJ405-5			-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 盒装	121-02808
KJ405-6			-	-	100×8	8000	本色或蓝色透明, 叠装	121-02809
KJ412			500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 袋装	123-15801
KJ412-2	1000μL	78mm	-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 盒装	123-15802
KJ412-3			500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 袋装	123-15803
KJ412-4			-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 盒装	123-15804
KJ412-5			-	-	100×8	8000	本色或蓝色透明, 叠装	123-15809
KJ407			500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 袋装	123-15815
KJ407-1	1000μL 带刻度	87mm	-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 盒装	123-15816
KJ407-2			500	-	-	10000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 袋装	123-15817
KJ407-3			-	100	-	5000	本色或蓝色透明, 带滤芯, 盒装	123-15818
KJ407-4			-	-	100×8	8000	本色或蓝色透明, 叠装	123-15819
KJ462			1000	-	-	10000	本色透明, 袋装	123-15805
KJ462-1	1250μL 带刻度	102mm	-	96	-	4800	本色透明, 盒装	123-15806
KJ462-2			1000	-	-	10000	本色透明, 带滤芯, 袋装	123-15807
KJ462-3			-	96	-	4800	本色透明, 带滤芯, 盒装	123-15808

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



自动化系统专用吸头

产品介绍

- ◎ 专为实验室自动化液体处理工作站设计的一次性耗材，经过严格的质量控制程序，具有更高的精度、一致性和自动化适配性，是高通量实验的关键耗材。
- ◎ 吸头在十万级净化车间内生产，采用原生医疗级聚丙烯PP原料制造而成。对每个批次产品进行仔细评估，确保无DNA酶/RNA酶、无热原、无内毒素或PCR抑制剂污染。
- ◎ 按导电性分类：有导电吸头和非导电吸头。按功能特性分类：有滤芯吸头、低吸附吸头、加长型吸头等。按品牌适配性分：有Addcare系列、Tecan系列、Hamilton系列、Agilent系列等。



规格参数

REF 目录 编号	单支 容量	盒装 外观	支/盒	盒/中盒	中盒/箱	备注说明	产品编码
KJ449-2	200μL	127×88×95mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07401
KJ449-3	1000μL	127×88×159mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07801
KJ450	300μL	125×82×96mm	96+96	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10601
KJ451	800μL	125×82×126mm	96+96	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10701

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。



自动化系统专用吸头



KJ441




KJ442



KJ443



KJ444

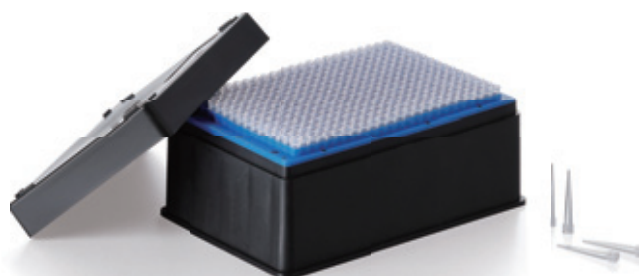

KJ445



KJ446

规格参数

REF 目录 编号	 单支 容量	 支/盒	 盒/箱	 备注说明	产品编码
KJ441	200µL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07402
KJ442	1000µL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07802
KJ443	200µL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07403
KJ444	1000µL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07803
KJ445	30µL	384	50	安捷伦盒装吸头	124-08201
KJ446	250µL	96	50	贝克曼盒装吸头	124-09501



自动化系统专用吸头



KJ458



KJ459



KJ459-1



KJ460



KJ460-1

规格参数

REF 目录 编号	 单支 容量	 支/盒	 盒/箱	 备注说明	产品编码
KJ458	50µL	96	50	Hamilton 50µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17051
KJ459	300µL	96	50	Hamilton 300µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17601
KJ459-1	300µL	96	50	Hamilton 300µL加长 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17602
KJ460	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 黑色导电吸头	124-17801
KJ460-1	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 透明吸头	124-17802



加样槽与移液器



KJ411-1



KJ449



KJ449-1



KJ426

KJ426-9

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	只/箱	备注说明	产品编码
KJ411-1	PVC	250mL	800	加样槽	125-0001
KJ449	PP	10mL×10通道	数量定制	10通道加样槽	125-0002
KJ449-1	PP	3mL×12通道	数量定制	12通道加样槽	125-0003
KJ426-9	-	-	数量定制	有单通道、多通道, 0.5-1000μl的移液量可以选择	126-0200
KJ426	ABS	-	数量定制	移液器挂架	127-0001



DISPOSABLE TRANSFER PIPETTE



一次性使用吸管



一次性使用吸管

产品介绍

- ◆ 精选优级原生低密度聚乙烯 (LDPE) 材料吹塑成型，产品精度良好，适用于少量或微量液体的吸取、转移或封闭携带。
- ◆ 表面张力优化处理，液体的流动性强更易于操作。
- ◆ 透明度好，便于观察。
- ◆ 具有一定的弹性韧性，可以一定的角度范围内弯曲，有利于进入微量或异形容器进行取液、加液操作。
- ◆ 使用方便，精密可靠，滴量的可重复性好。
- ◆ 管端可热封，方便液体的携带。
- ◆ 提供：单支或多支、塑袋或纸塑等不同包装方式。可选EO灭菌、辐射灭菌或不灭菌。

KJ601



KJ601-1



KJ603



KJ603-1



KJ604



KJ602



KJ605



KJ606




规格参数

REF 目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ601	60	1	0.76	65±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-001
KJ601-1	63	1	0.76	66±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-002
KJ603	80	2	1.4	110±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-003
KJ603-1	102	1.4	0.8	136±4	—	200支/袋, 60袋/箱	141-004
KJ604	148	6	5	116±4	—	500支/袋, 10袋/箱	141-005
KJ602	63	0.9	0.76	45±3	20/10 μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-006
KJ605	64	1.4	1.24	41±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-007
KJ606	67	1	0.65	26±2	200 μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-008

*因主、客观原因，相关参数值与您实际使用时可能存在误差，仅供参考。



一次性使用吸管

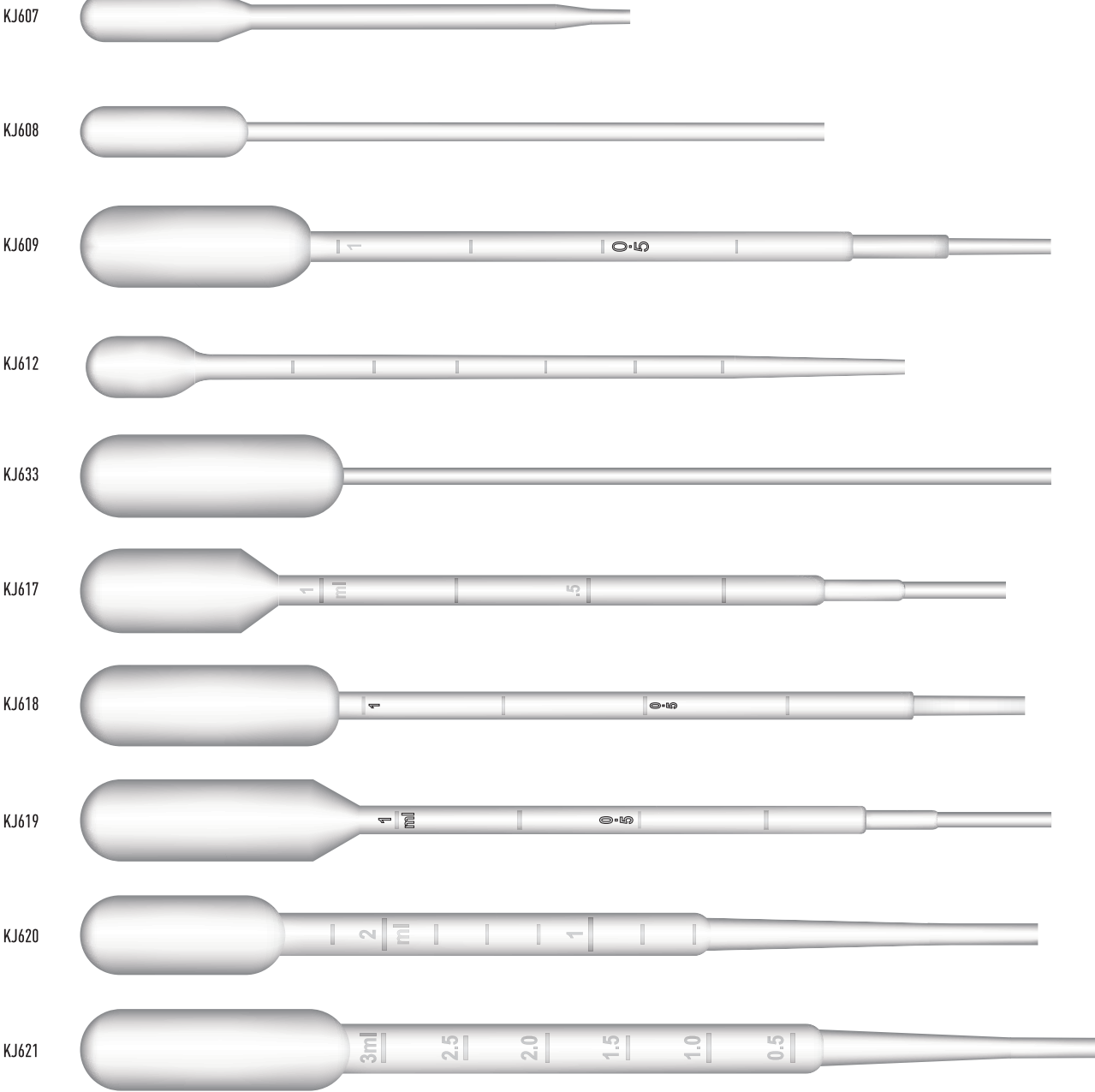


规格参数

REF 目录 编号	长度 (mm)	总容积 (mL)	气囊容积 (mL)	1mL滴数 [*]	刻度值	包装	产品编码
KJ607	85	1.3	0.76	41±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-009
KJ608	115	1.2	0.76	33±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-010
KJ609	150	4.6	1.4	30±2	1/0.75/0.5/0.25ml	400支/袋, 10袋/箱	141-011
KJ612	130	1.5	0.8	44±2	0.5/0.4/0.3/0.2/0.1ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-012
KJ633	150	5	4.3	31±2	—	500支/盒, 10盒/箱	141-013
KJ617	143	4	0.76	27±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-014
KJ618	146	5.25	1.24	24±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-015
KJ619	150	5.77	0.65	29±2	1/0.75/0.5/0.25ml	500支/盒, 12盒/箱	141-016
KJ620	148	5.13	1	24±2	2.25/2/1.75/1.5/1.25/1/0.75/0.5ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-017
KJ621	157	7.4	0.84	25±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 12盒/箱	141-018

^{*}因主、客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



一次性使用吸管

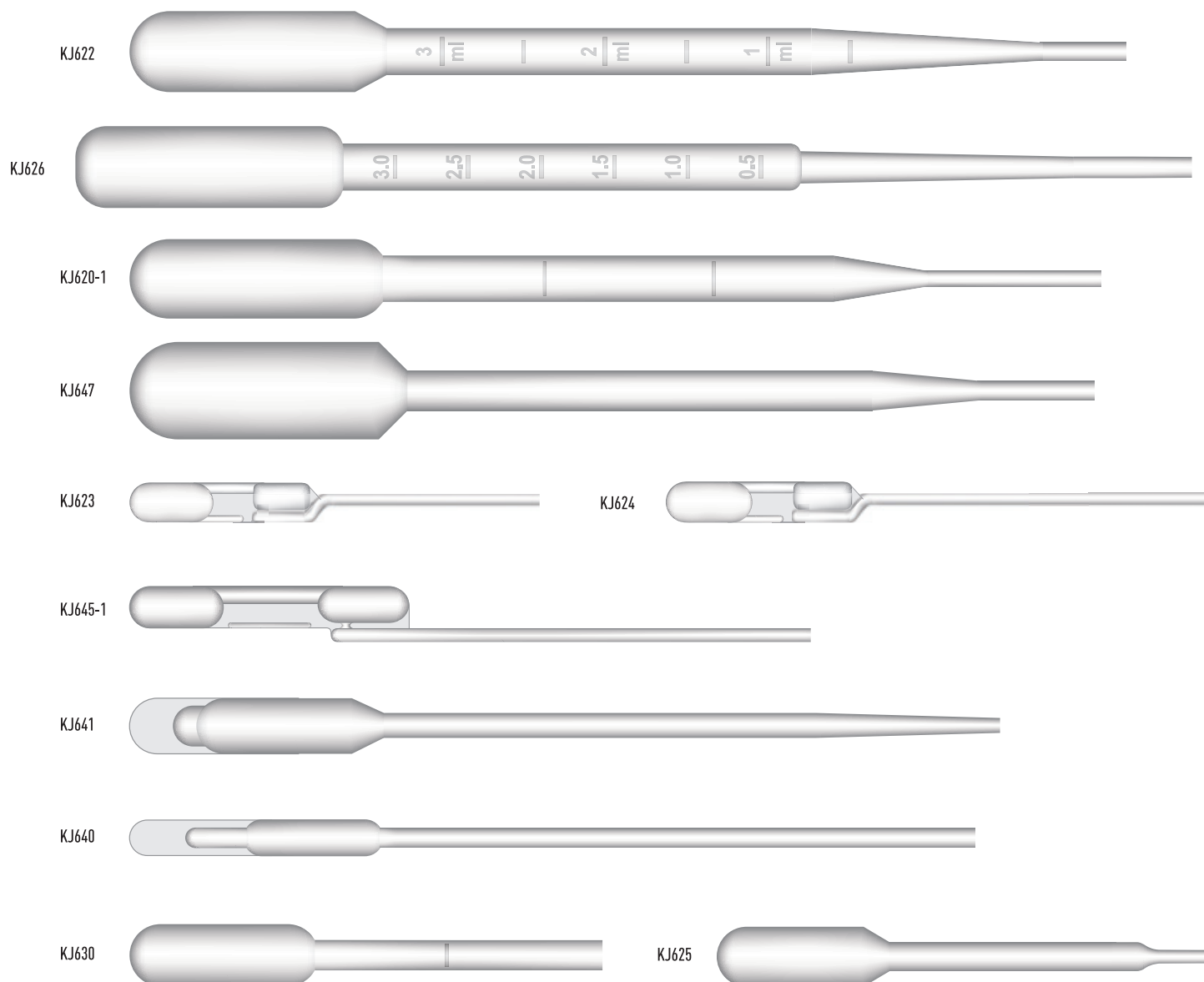


规格参数

REF 目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ622	158	7.63	4.4	24±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 12盒/箱	141-019
KJ626	177	7.9	4.9	26±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 10盒/箱	141-020
KJ620-1	154	6.7	3.8	29±2	2/1ml	500支/盒, 10盒/箱	141-037
KJ647	153	8.24	6.5	23±2	—	500支/盒, 10盒/箱	141-038
KJ623	65	0.5	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-021
KJ624	86	0.55	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-022
KJ645-1	108	0.72	0.6 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-023
KJ641	138	2.23	1.45	29±2	—	500支/盒, 18盒/箱	141-024
KJ640	134	1.2	0.5	21±2	—	200支/袋, 60袋/箱	141-025
KJ630	75	2	1.4	32±2	300μl	1000支/袋, 10袋/箱	141-027
KJ625	78.4	1.9	1.34	45±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-028

*因主、客观原因,相关参数值与您实际使用时可能存在误差,仅供参考。



一次性使用吸管

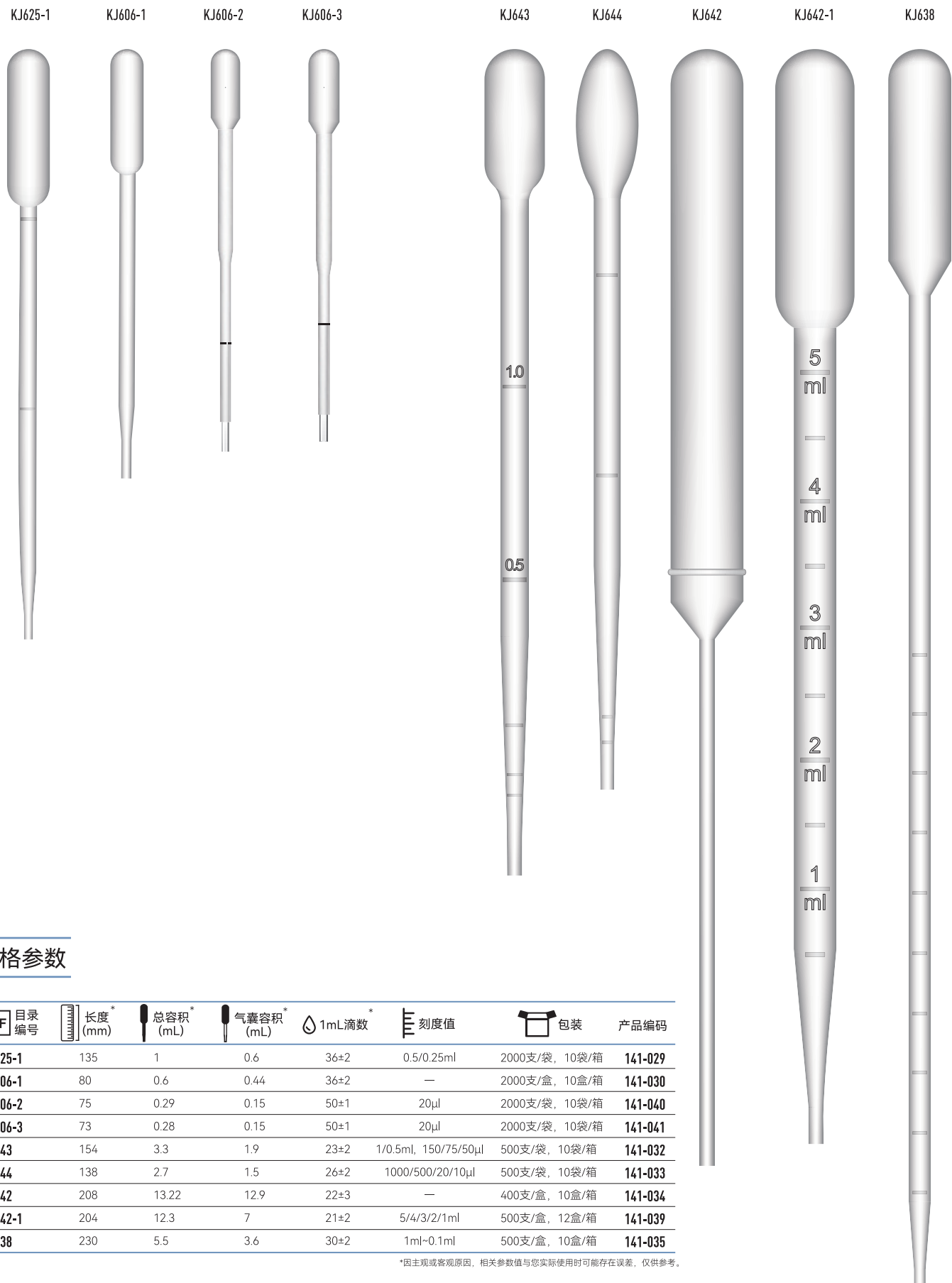

规格参数

REF	目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ625-1		135	1	0.6	36±2	0.5/0.25ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-029
KJ606-1		80	0.6	0.44	36±2	—	2000支/盒, 10盒/箱	141-030
KJ606-2		75	0.29	0.15	50±1	20µl	2000支/袋, 10袋/箱	141-040
KJ606-3		73	0.28	0.15	50±1	20µl	2000支/袋, 10袋/箱	141-041
KJ643		154	3.3	1.9	23±2	1/0.5ml, 150/75/50µl	500支/袋, 10袋/箱	141-032
KJ644		138	2.7	1.5	26±2	1000/500/20/10µl	500支/袋, 10袋/箱	141-033
KJ642		208	13.22	12.9	22±3	—	400支/盒, 10盒/箱	141-034
KJ642-1		204	12.3	7	21±2	5/4/3/2/1ml	500支/盒, 12盒/箱	141-039
KJ638		230	5.5	3.6	30±2	1ml~0.1ml	500支/盒, 10盒/箱	141-035

*因主观或客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



SEROLOGICAL PIPETTE



血清移液管



血清移液管

产品介绍

- 产品采用进口优质聚苯乙烯(GPPS)为原料，在10万级净化车间生产制造。新颖的移液管口设计可适配市场上大多数移液器。主要用于准确量取或转移一定体积的液体，广泛应用于细胞培养、细菌学、临床医学、科研实验等领域。
- ◎ 6种容量可选：1mL、2mL、5mL、10mL、25mL、50mL。容量的校准率：±2%之内。
 - ◎ 1mL、2mL移液管采用拉伸方式成型。5mL、10mL采用超声波焊接或拉伸方式成型。25mL、50mL移液管采用超声波焊接方式成型。
 - ◎ 内外管壁光滑剔透，无沟槽及丝纹。
 - ◎ 不同颜色的色标对应不同规格移液管，方便识辨。
 - ◎ 可最大量的减少液体于管壁的黏附，提高取样的准确性。
 - ◎ 硬质双向刻度设计，理想地配合了加样与减样的要求。另有无刻度的移液管可供选择。
 - ◎ 清晰简明的刻度以及额外容量的阴性刻度，方便液体的吸取与读数。
 - ◎ 每种规格移液管均带有滤芯过滤塞。
 - ◎ 无DNA酶和RNA酶、无热原、无内毒素。辐射灭菌。



拉伸型管和焊接型管




带滤芯，不同容量规格对应不同色标



单支纸塑包装



单支塑膜包装

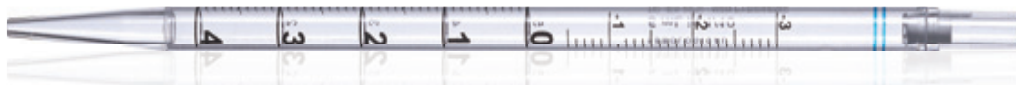

KJ9053



KJ9104



KJ9103



KJ9253


规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	外观 尺寸 *	规格 容量	支/包	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ9053	GPPS	Ø10×235mm	5mL(短款)	100	300	1800	焊接管，单支包装	131-0531
KJ9104	GPPS	Ø12.5×240mm	10mL(短款)	25	1000	6000	注塑管带刻度，单支包装	131-1031
KJ9103	GPPS	Ø15×23.5mm	10mL(短款)	100	300	1800	焊接管，单支包装	131-1041
KJ9253	GPPS	Ø18.5×23.5mm	25mL(短款)	25	600	3600	焊接管，单支包装	131-2531

* 产品外观尺寸为手工测量，仅供参考。
* 灭菌方式可定制。



血清移液管

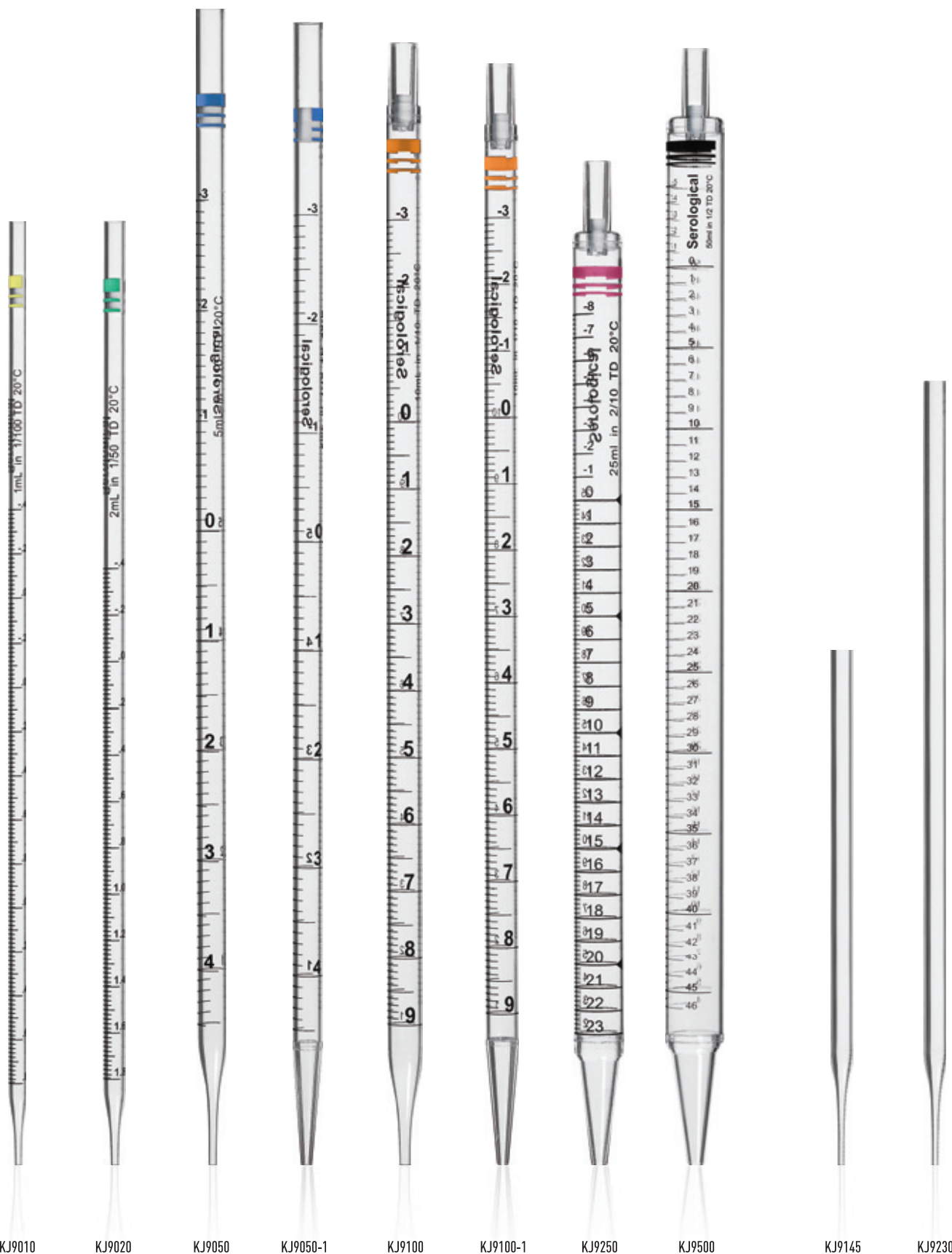



血清移液管

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	外观 尺寸	刻度* 容量	套/包	支/盒	套/箱	备注说明	产品编码
KJ9010	GPPS	Ø5×280mm	1mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0111
KJ9012	GPPS	Ø5×280mm	1mL	25	1000	4000	拉伸管 散装	131-0112
KJ9020	GPPS	Ø6×280mm	2mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0211
KJ9022	GPPS	Ø6×280mm	2mL	25	600	3600	拉伸管 散装	131-0212
KJ9050	GPPS	Ø8×347mm	5mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-0511
KJ9052	GPPS	Ø8×347mm	5mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-0512
KJ9050-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-0521
KJ9052-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-0522
KJ9100	GPPS	Ø10×342mm	10mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-1011
KJ9102	GPPS	Ø10×342mm	10mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-1012
KJ9100-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-1021
KJ9102-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-1022
KJ9250	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	100	600	焊接管 单支包装	131-2521
KJ9252	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	500	1000	焊接管 散装	131-2522
KJ9500	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	75	450	焊接管 单支包装	131-5021
KJ9502	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	250	1000	焊接管 散装	131-5022
KJ9145	GPPS	Ø6×145mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1001
KJ9230	GPPS	Ø6×230mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
* 灭菌方式可定制。

KJ9000电动移液器

产品介绍

KANGJIAN电动移液器采用先进的设计理念和制造技术，外观光滑美观，结构紧凑牢固，用途广泛，操作简单等优点。在满足移液需求的基础上，电动移液器优化了操作人员的使用感受，灵敏的速度控制功能可以轻松顺利地各种液体移液和分离，LCD显示让电池电量、吸力、放电速度一目了然，在细胞接种或通过程中去除或添加细胞培养基更优。灵活、舒适的液体操作，使实验过程更快捷。



KJ9000

规格参数

吸液速度	25mL<5秒 (6个等级)	适用移液管	塑料或玻璃移液管(0.1~100mL)、巴斯德消毒管		
排液速度	电动6级或重力	过滤器	0.45µm疏水膜	电池类型	锂电池
净重	520g	充电时长	2-3小时	电池满电工作时间	间歇性工作大于8小时